



VAPREVENT™

ORALE ZORG EN INFECTIE PREVENTIE

Hoe te gebruiken:

SUCTION SWAB MDS096525EU

De zuig functie helpt bij het verwijderen van afscheidingen en de schuine kop helpt u bij het bereiken van de achterkant van de mond voor een meer grondige reiniging.

1 Trek handschoenen aan, controleer de mond van de patient en zuig de mondholte zonodig uit.

» Met bijvoorbeeld een zuig calule.

2 Verwijder de verpakking en controleer de conditie van de swab.

» Foam, handvat, connector ...

3 Sluit de zuig swab aan het zuigslang systeem en gebruik de duim-poort voor de zuig controle.

» Sluit het gat met uw duim voor het activeren van de zuiging.
» Haal uw duim van het gat om het afzuigen te stoppen.


4 Drenk de swab in de juiste oplossing.

» Water, mondwater enz.

5 Voer deze behandeling 1 tot 2 minuten uit.

» Het schuim stimuleert het mond weefsel.
» Dompel de swab opnieuw in de oplossing indien nodig.

6 Wanneer u klaar bent, controleer de mondholte van de patiënt en verwijder al het vuil voordat u de swab weggooid.

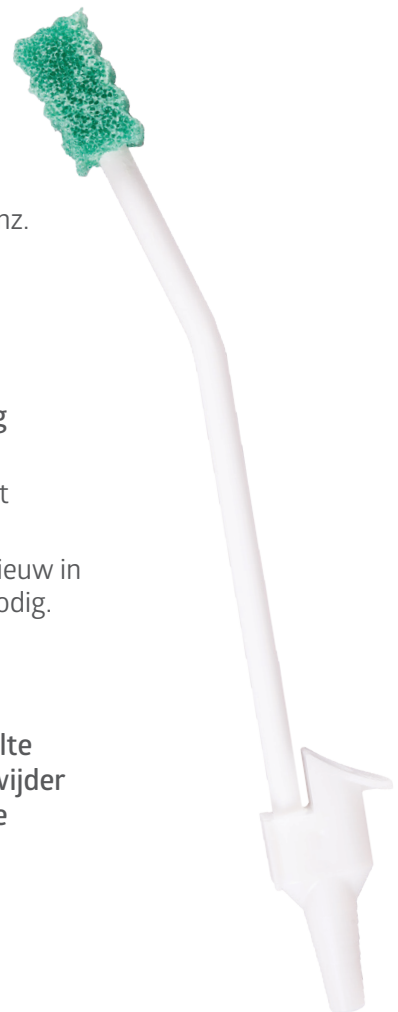

Deze producten zijn medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

  Medline Industries Inc.
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093, USA

 Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Voor meer informatie over mondverzorging kunt u contact opnemen met uw accountmanager of bezoek ons op: www.medline.eu/nl

Hoe te gebruiken:

SUCTION TOOTHBRUSH MDS096575EU

De super zachte tandenborstel met een spons wordt gebruikt voor mechanische vuilverwijdering en stimulatie van de tanden en het tandvles. De zuiging functie helpt bij het verwijderen van afscheidingen.

1 Trek handschoenen aan, controleer de mond van de patient en zuig de mondholte zonodig uit.

» Met bijvoorbeeld een zuigcalule

2 Verwijder de verpakking en controleer de conditie van de swab.

» Foam, handvat, connector ...

3 Sluit de zuig swab aan het zuigslang systeem en gebruik de duim-poort voor de zuig controle.

» Sluit het gat met uw duim voor het activeren van de zuiging.
» Haal uw duim van het gat om het afzuigen te stoppen.

4 Drenk de swab in de juiste vloeistofoplossing.

» Water, mondwater enz.

5 Voer deze behandeling 1 tot 2 minuten uit.


» Gebruik de borstels voor het borstelen.
» Het schuim stimuleert het mondweefsel.
» Dompel de swab opnieuw in de oplossing indien nodig.

6 Wanneer u klaar bent, controleer de mondholte van de patiënt en verwijder al het vuil voordat u de swab weggooit.



Deze producten zijn medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

  Medline Industries Inc.
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093, USA

 Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Voor meer informatie over mondverzorging kunt u contact opnemen met uw accountmanager of bezoek ons op: www.medline.eu/nl