

VAPrevent®


Mode d'emploi : MDS096013MEU



1 Avec vos mains gantées, vérifiez la cavité buccale du patient et démarrez le système d'aspiration, si nécessaire. Puis ouvrez le film d'emballage, retirez-en le bâtonnet DenTips® et vérifiez que la mousse DenTips est intacte.



2 Utilisez une pièce à mordre lors des soins bucco-dentaires chez les patients dont l'état de conscience est altéré. Ouvrez le rince-bouche Medline et versez-le dans l'espace prévu à cet effet dans le blister.

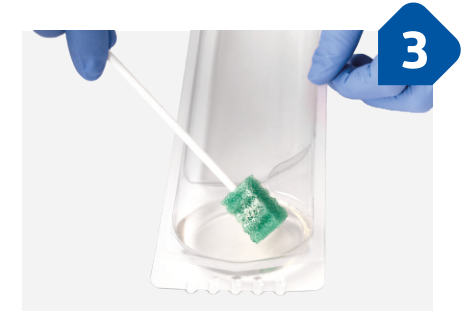

3 Imprégnez la mousse du bâtonnet DenTips de rince-bouche. Nettoyez doucement les dents et les gencives pendant environ 1 à 2 minutes.



4 Après usage, vérifiez que la mousse est intacte avant de mettre le bâtonnet DenTips au rebut. Inspectez la cavité buccale et retirez-en les particules éventuellement présentes.



5 Ouvrez la crème hydratante buccale Medline et pressez-la pour en déposer sur le bâtonnet DenTips. Utilisez-le pour enduire délicatement l'intérieur de la bouche (lèvres intérieures, dents, langue et palais).



6 Après usage, vérifiez que la mousse est intacte avant de mettre le bâtonnet DenTips au rebut. Inspectez la cavité buccale et retirez-en les particules éventuellement présentes.

Pour en savoir plus sur les soins bucco-dentaires, contactez. Contactez votre responsable commercial Medline ou consultez le site www.medline.eu/fr