

# VAPrevent®


Istruzioni per l'uso: MDS096013MEU



1  
Indossare i guanti, controllare la bocca del paziente ed effettuare una prima aspirazione nella cavità orale, se necessario. Rimuovere la pellicola del confezionamento, prendere il DenTips® e assicurarsi che la spugna sia intatta.



2  
Utilizzare un blocco morso durante le procedure di igiene orale su pazienti con livelli alterati di coscienza o che non possono comprendere i comandi. Aprire il colluttorio di Medline e versarlo nell'apposita vaschetta presente nel confezionamento.

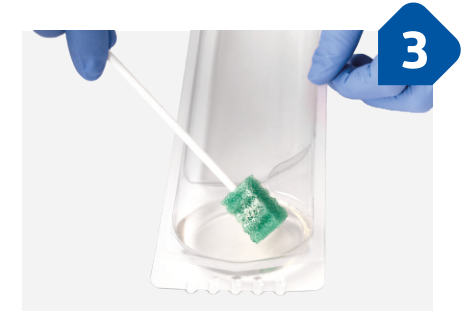

3  
Saturare il DenTips® con il collutorio. Pulire delicatamente denti e gengive per circa 1-2 minuti.



4  
Dopo l'uso, assicurarsi che la spugna sia intatta prima di smaltire il DenTips®. Ispezionare la cavità orale e rimuovere ogni residuo, se presente.



5  
Aprire il gel idratante di Medline e spremere sul DenTips® Usarlo per rivestire delicatamente l'interno della bocca (labbra interne, denti, lingua e palato).



6  
Dopo l'uso, assicurarsi che la spugna sia intatta prima di smaltire il DenTips®. Ispezionare la cavità orale e rimuovere ogni residuo, se presente.

**Per saperne di più sull'igiene orale,**  
contattare l'account manager  
Medline di zona o visitare il sito:  
[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)