


# VAPrevent®

Instrucciones de uso: MDS096513MEU



1 Usando unos guantes, revisar la boca del paciente y realizar una succión completa de la cavidad bucal si es necesario. A continuación, retire la película del envase y compruebe que la espuma de los bastoncillos de succión y de DenTips® está intacta.

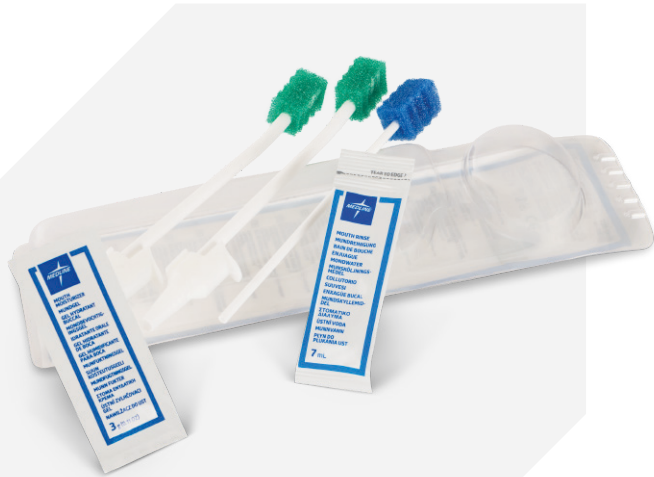

2 Use una pieza de mordida cuando realice el cuidado bucal en pacientes con niveles alterados de conciencia o incapaces de comprender órdenes. Abra el colutorio bucal de Medline y viértalo en la copa del envase.



3 Conecte el bastoncillo de succión a una línea de succión estándar. Compruebe que está bien conectado.



4 Limpie con suavidad los dientes y las encías durante aproximadamente 1 o 2 minutos. Aplique succión utilizando el puerto de pulgar.



5 Abra el hidratante bucal de Medline y aplíquelo sobre DenTips. Utilícelo para recubrir generosamente el interior de la boca (labios internos, dientes, lengua y paladar).



6 Compruebe que la espuma está intacta antes de deshacerse de los bastoncillos de succión y de DenTips. Inspeccione la cavidad bucal y retire cualquier partícula que pueda quedar.

**Si desea más información sobre el cuidado bucodental, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)**