

# Dermadine Plus en Dermadrape Incisiefolies

Meer steriliteit voor verbeterde veiligheid



**Steriele barrière-  
systeem voor  
chirurgische  
incisies**



# Dermadine Plus Incisiefolie

Reiniging als voorbereiding op een operatie en desinfectie van de huid zijn twee noodzakelijke stappen voor de initiële vermindering van oppervlaktebacteriën. Micro-organismen op de huid worden echter verminderd, maar niet volledig weggehaald, en kunnen overleven in microscopisch kleine plooien van de huid.

Wanneer volledige en langdurige asepsis vereist is, zorgt de Dermadine Plus incisiefolie gegarandeerd voor een steriele oppervlakte door zijn breedspectrum antimicrobiële activiteit op vele micro-organismen die op de huid aanwezig zijn.


De kleeflaag bevat jodium met langzame afgifte, wat zorgt voor maximale steriliteit die in de loop van de tijd wordt bereikt en behouden. Het product is geschikt voor alle soorten chirurgische ingrepen.

Dermadine zou daarom gebruikt moeten worden als laatste stap bij het voorbereiden van het chirurgisch gebied.




## Gaat lang mee

De constante aanwezigheid van jodium gedurende een aanzienlijke tijd, zelfs langer dan 24 uur, maakt het product geschikt voor lange chirurgische ingrepen.

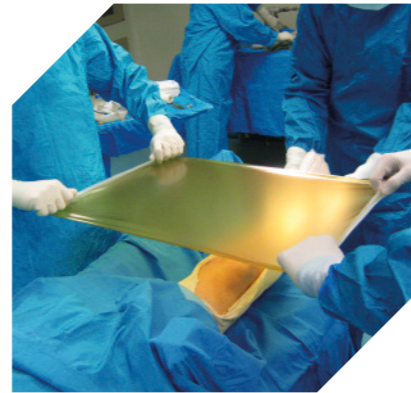

Meting van antibacteriële activiteit (volgens ISO 22196: 2011)

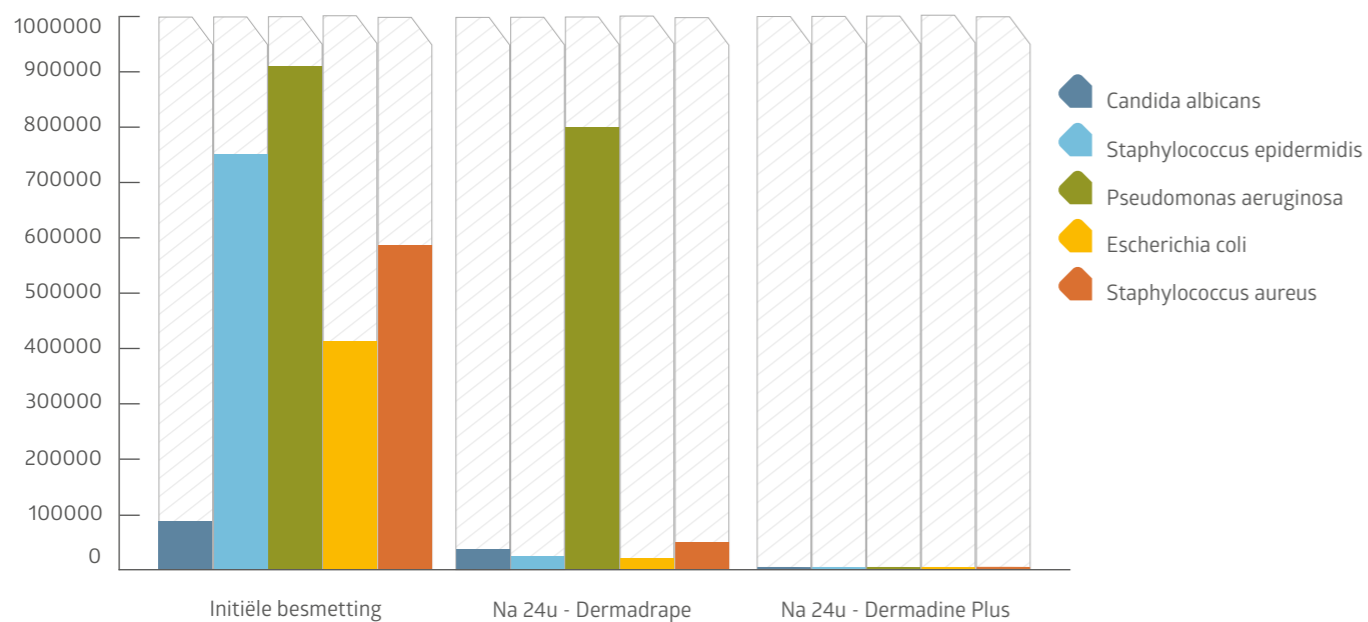


## Snelwerkend

Bij het gebruik, vertoont de Dermadine Plus incisiefolie een sterke antimicrobiële werking. Binnen 30 minuten na het aanbrengen van de Dermadine Plus is er een significante vermindering in de biobelasting, wat na enige tijd stabiliseert. Dermadine Plus garandeert continue asepsis op de huid van de patiënt, gedurende lange perioden.



## Comfortabel en soepel

Natuurlijk elastisch en ultradun om de perfecte pasvorm te garanderen en het folie zich makkelijk aan te laten passen aan de lichaamscontouren. Dermadine Plus past zich aan grote spiervervormingen aan (zelfs wanneer autostatische wondhaken worden gebruikt) zonder zijn hechtende eigenschappen te verliezen.

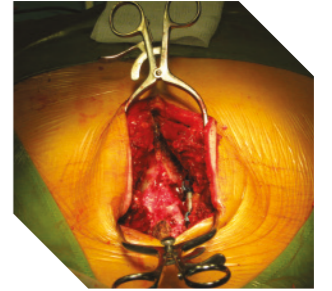


## Ademend, waterafstotend en waterdicht

Dermadine Plus combineert bloed- en waterafstotendheid met ademend vermogen, om te voorkomen dat vloeistof ophoopt die de kleefkracht tijdens lange ingrepen kan verminderen. De ademende folie garandeert complete ondoordringbaarheid voor micro-organismen.




## Sterk en ontspiegeld

Behalve zijn uitstekende scheurweerstand, kan dankzij Dermadine Plus ook een eenvoudige chirurgische incisie met elke scalpel gemaakt worden en biedt het een indirecte bescherming tegen scheuren van de dunne huid. De anti-schittering eigenschappen zorgen voor een perfecte zichtbaarheid op het snijpunt bij gereflecteerd licht.

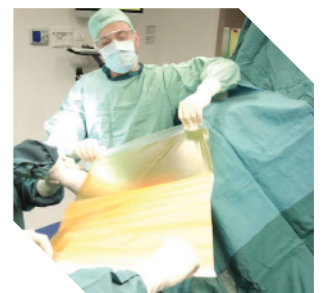

## Kleeflaag met antimicrobieel middel

De huidvriendelijke medische lijm zorgt voor een goede hechting op alle soorten huidoppervlakken en vooral op de randen van de wond zonder enige huidirritatie. De polyacryl-structuur in Dermadine Plus lijm bevat jodium.\* Het polyacrylaatcomplex met het trijodide-ion geeft jodiummoleculen vrij na het aanbrengen op de huid. De acryllijm is atraumatisch bij het losmaken, zelfs op de huid van oudere patiënten, en garandeert geen lijmresten na het losmaken.

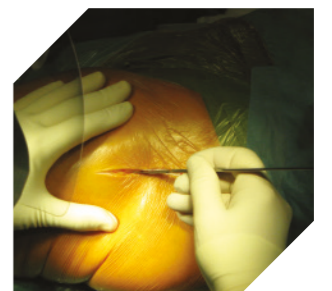

## Opslag

Bewaar het product bij kamertemperatuur, beschermd tegen licht en vocht, in geventileerde ruimtes boven de vloer, in de beschermende verpakking. Vermijd extreme temperaturen.

## Sterilisatiemiddel

Gammastraling

## Afvoeren

Na gebruik wordt het medisch hulpmiddel als bijzonder afval beschouwd.















## Medisch hulpmiddel classificatie

Dermadrape klasse IIa  
CND code: T02010101  
Dermadine Plus Klasse III  
CND code: T02010102

## Verpakking

- Verpakt in een dubbel te openen sterilisatie envelop
- Verwijderbare labels voor traceerbaarheid en patiëntendossiers
- Verkrijgbaar in kleinere dispenserdozen
- Verkrijgbaar in Medline SPT sets op maat



Dermadine Plus Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking	Dermadrape Artikelnummer
42020P 	20 x 20 cm Kleefgedeelte: 15 x 20 cm	20 st/doos 120 st/omdoos	32020 
n.v.t.	35 x 25 cm Kleefgedeelte: 30 x 25 cm	20 st/doos 120 st/omdoos	33525 
44040P 	40 x 40 cm Kleefgedeelte: 34 x 40 cm	15 st/doos 90 st/omdoos	34040 
n.v.t.	50 x 48 cm Kleefgedeelte: 44 x 48 cm	15 st/doos 90 st/omdoos	35050 
47045P 	70 x 45 cm Kleefgedeelte: 60 x 45 cm	15 st/doos 90 st/omdoos	37045 
47060P 	70 x 60 cm Kleefgedeelte: 60 x 60 cm	10 st/doos 60 st/omdoos	n.v.t.
47080P 	70 x 80 cm Kleefgedeelte: 60 x 80 cm	10 st/doos 60 st/omdoos	n.v.t.
48060P 	80 x 60 cm Kleefgedeelte: 60 x 60 cm	10 st/doos 60 st/omdoos	38060 
48080P 	80 x 80 cm Kleefgedeelte: 70 x 80 cm	10 st/doos 60 st/omdoos	38080 

\*Medline verkoopt ook Dermadrape, een volledige lijn incisiefolies zonder jodium behandeling.

Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of onze website bezoeken: [nl.medline.eu](http://nl.medline.eu)



Medline International B.V.  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929  
[medline.eu](http://medline.eu)  
[netherlands@medline.com](mailto:netherlands@medline.com)

Medline International Netherlands B.V.  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929  
[nl.medline.eu](http://nl.medline.eu)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

Medline International Belgium BV  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
België  
Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39  
[nl.medline.eu](http://nl.medline.eu)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

VOLG ONS  