

# Producten voor wassen zonder water

Voor verbeterde infectiepreventie



**Patiënten  
wassen  
makkelijk  
gemaakt**



## Risico's van traditioneel wassen

98%

van alle waskommen die voor patiënthygiëne gebruikt worden zijn besmet met mogelijke ziekteverwekkers, waaronder *S. aureus*, VRE, MRSA, *P. aeruginosa*, *C. albicans* en *E. coli*.<sup>1</sup>

Het beheersen van infectierisico's bij ernstig zieke patiënten is cruciaal voor hun herstel. Patiënten wassen is één van de belangrijkste zorgactiviteiten die de kwaliteit van leven en de zorg voor de patiënt verbeteren. Recent onderzoek toont echter aan dat het ook een bron van besmetting is op Intensive Care afdelingen.<sup>2</sup>

Waskommen, zeep en water hebben hebben meer nadelen dan alleen het verhogen van de kans op infecties. Veel zeep is schadelijk voor de huid en kan deze droog en kwetsbaar achterlaten.



# EasyBath® is beter wassen

### Gooi het badwater weg

Er zijn veel redenen waarom wassen aan bed met EasyBath beter is dan traditioneel wassen met zeep en water.



Consistente verzorging van doekje tot doekje, patiënt tot patiënt, zorgverlener tot zorgverlener!

# Wassen

## EasyBath

EasyBath biedt een comfortabele, consistente en klinisch bewezen manier van wassen en is verkrijgbaar als geïmpregneerde wasdoekjes of washandjes. Het helpt de huid gezond te houden, omdat de niet-spoelen formule reinigt en hydrateert zonder de vochtbalans van de huid aan te tasten.



### Wasdoekjes

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MSCE095309A	Standaard; parfumvrij	8 doekjes/pakje, 30 pakjes/ doos

### Washandjes



Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
WM80300	Standaard; <b>geparfumeerd</b>	8 washandjes/pakje; 30 pakjes/doos
WM80301	Standaard; <b>parfumvrij</b>	8 washandjes/pakje; 30 pakjes/doos
MSCE995302WM	Standaard; <b>geparfumeerd</b>	5 washandjes/pakje; 24 pakjes/doos

## Non-woven droge washandjes

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MEDGLOVE01	16,5 x 23 cm, 75 GSM	100 washandjes/pakje; 20 pakjes/doos
MEDGLOVE02	14,5 x 20 cm, 60 GSM	100 washandjes/pakje; 20 pakjes/doos
MEDGLOVE03	14,5 x 20 cm, 75 GSM	100 washandjes/pakje; 20 pakjes/doos



**Droge washandjes** zijn de perfecte aanvulling op het EasyBath assortiment, als kostenefficiënte oplossing die handig en comfortabel is voor de patiënt.

# Haarverzorging

## Shampoo caps

Haren wassen aan bed is een uitdaging. Maar zonder morsen en het gedoe van wasbakken, sop, spoelen en herpositionering, maken de EasyBath geparfumeerde en ongeparfumeerde shampoo caps het wassen van haar een genot voor alle betrokkenen. EasyBath shampoo caps maken het haar schoon en conditioneren het, waarna het fris is en klaar voor styling. En ze stellen zorgverleners ook in staat om een rustgevende, ontspannende en zachte hoofdhuid massage te geven.



Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
SC230	Standaard; <b>geparfumeerd</b>	1 cap/pakje; 30 pakjes/doos
SC231	Standaard; <b>parfumvrij</b>	1 cap/pakje; 30 pakjes/doos



# Patiëntcomfort

## Intelligente Verwarmer

Voor het ultieme comfort van de patiënt, houdt de exclusieve EasyBath Intelligente Verwarmer de EasyBath verpakkingen op een gelijkmatige, veilige temperatuur voor lekker warm wassen. Indicatielichtjes branden wanneer de ideale temperatuur bereikt is. Het helpt zelfs de voorraad bij te houden door de meest frisse verpakking aan te duiden, waarbij een FIFO-voorraad rotatie wordt gehandhaafd.



Artikelnummer	Aantal	Maat	Gewicht
MSCEWARMER14S	14	33 x 46 x 34 cm	10,6 kg
MSCEWARMER28S	28	56 x 46 x 34 cm	12,9 kg

# Persoonlijke hygiëne

## AloeTouch®

De Flip ' N Seal™ sluiting op AloeTouch verpakkingen vermindert de hoeveelheid plastic in het deksel met 71%, en houdt de doekjes weken lang fris. In tegenstelling tot traditionele zelfklevende folie sluitingen, opent Flip ' N Seal gemakkelijk met één hand en blijft open totdat u het sluit.

AloeTouch is de keuze voor mensen die iets meer willen van hun reinigingsdoekje. De zachte, sulfaatvrije reinigungsoplossing en aloë-rijke huid conditioners doordringen dit stevigere doekje. Mogelijk merkt u dat u minder doekjes gebruikt om de klus te klaren.




Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MSCE263654	Spunlace doekjes; <a href="#">geparfumeerd</a> , 20 x 30 cm	48 doekjes/pakje; 12 pakjes/doos

## ReadyFlush®

Om door EDANA te worden geëtiketteerd als "doorspoelbaar", hebben de \*ReadyFlush doekjes zeven tests moeten doorstaan, om het vermogen tot uiteen vallen en biologische afbreekbaarheid te evalueren, voor schone septische systemen en afwateringslijnen. Dat betekent dat ze net als wc-papier afgebroken worden wanneer ze doorgespoeld worden waardoor de leidingen niet verstopt raken. Ze zijn 98 procent biologisch afbreekbaar en hiermee veilig voor rioleringen en septische systemen.

ReadyFlush kan thuis aan het bed of in de badkamer gebruikt worden. Het is geparfumeerd en sterk genoeg voor grondig reinigen, terwijl de formule zacht is voor de huid.

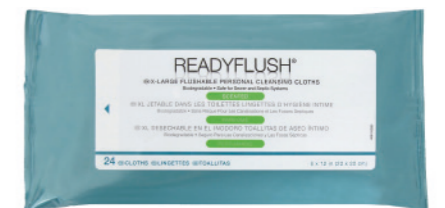

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MSCE263810	Doorspoelbare doekjes; <a href="#">geparfumeerd</a> , 20 x 30 cm	24 doekjes/pakje; 24 pakjes/doos

\*EDANA: European Disposables and Nonwovens Association

# Standaardiseer uw wasprotocol!

## 3 eenvoudige stappen:

**ALGOTOUCH® PRODUCT TEST**  
**EVALUATION FORM**

Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Which products are you currently using to wash your patients?

HOW SATISFIED ARE YOU WITH THE TESTED PRODUCT?

Attribute	Excellent	Very Good	Acceptable	Unsatisfactory	N/A
Packaging and removal from the bag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Material and structure of the product	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Performance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ease of use	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Time expenditure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cleaning of patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patients satisfaction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overall impression	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If you have other comments, please share them in the comment field below.

Comments: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Your opinion is important to us! Thank you for taking the time to test and evaluate our products.

**Gebruiksaanwijzing: EasyBath® Shampoo Cap**  
Handige en snelle haarverzorging

- 1 Pak een handdoek, was uw handen en doe indien nodig onderbroeken/laarzen aan.
- 2 Verwarm de EasyBath shampoo cap gedurende 15 seconden in de magnetron (1250 watt maximaal) of de Medline's Intelligent Verwarmer. Schuur de verpakking open en verwijder de cap.
- 3 Plaats de cap op het hoofd van de patiënt. Als de patiënt langer haar heeft, moet u het haar op de top van het hoofd verzamelen voordat u de cap opzet.
- 4 Masseer het haar van de patiënt door de cap heen, zodat het haar verzadigd ligt. Trac 2 minuten voor korter haar en 2 tot 3 minuten voor langer haar.
- 5 Verwijder de cap en gooi het in de juiste afvalcontainer. Spoelen is niet nodig.
- 6 Gebruik een handdoek om het haar van de patiënt te drogen en kam het haar vervolgens door.

Voor meer informatie over EasyBath, neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger of basen- en/of ziekenhuismedicijnen.

**EASYBATH**  
WASSEN ZONDER WATER

**1** Evaluatie van uw behoeften met Medline klinisch personeel

**2** Educatie voor verpleegkundigen

**3** Educatie voor patiënten en familie

Voor meer informatie, neem contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek ons op: [nl.medline.eu](http://nl.medline.eu).



**Medline International B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929

[medline.eu](http://medline.eu)  
[netherlands@medline.com](mailto:netherlands@medline.com)

**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929

[nl.medline.eu](http://nl.medline.eu)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
België

Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39

[nl.medline.eu](http://nl.medline.eu)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

FOLLOW US

<sup>1</sup>Johnson D, Lineweaver L, Maze LM. Patients' bath basins as potential sources of infection: a multicenter sampling study. Am J Crit Care. 2009. 18(1):31-38.  
<sup>2</sup>Decker BK, Palmore TN. The role of water in healthcare-associated infections. Curr Opin Infect Dis. 2013;26(4):345-351. doi:10.1097/QCO.0b013e3283630adf  
<sup>3</sup>Kron-Chalupa J, Benda T, Williams B. The basinless bath: A study on skin dryness and patient satisfaction. Iowa City Vettrans Affairs Medical Center. 2006.