





CÓMO USAR EL SISTEMA DE HIGIENE CORPORAL COMPLETO EASYBATH CON UN SOLO ENVASE DE 5 MANOPLAS

Caliente el envase de manoplas EasyBath® en el Calentador Inteligente de Medline o durante 30-60 segundos en un microondas (750 W máximo).

Utilice una manopla EasyBath® por cada una de las 5 zonas detalladas a continuación:

- 1 Cara, Cuello y Pecho
- 2 Brazos y Axilas
- 3 Zona Perineal
- 4 Piernas
- 5 Espalda/ Nalgas

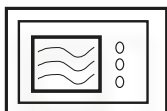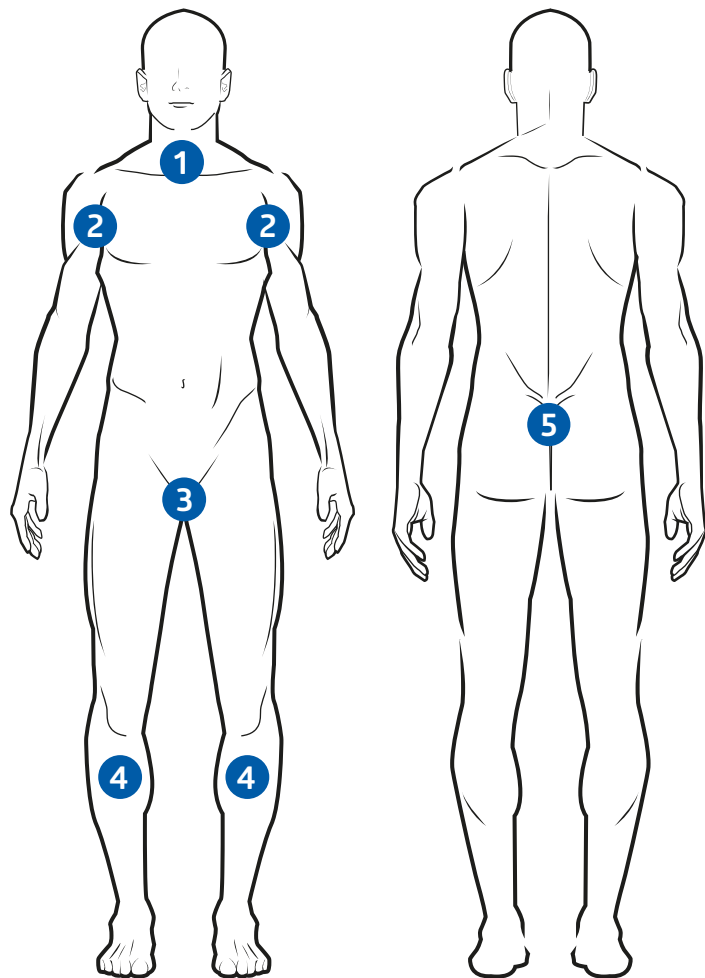

Calentable
en microondas
750 W
30 - 60 s



No elimine las
manoplas EasyBath®
en el inodoro

Para conocer más sobre EasyBath®, contacte con su delegado comercial o visite nuestra página web www.medline.eu/es