





GEBRUIKSAANWIJZING: EASYBATH® 5 WASHANDJES VOOR HET REINIGEN VAN HET LICHAAM

Verwarm een gesloten EasyBath® verpakking in de Medline intelligente verwarmers of verwarm de verpakking 30 tot 60 sec. in de magnetron (750W).

Gebruik steeds 1 EasyBath® washandje voor het reinigen van de volgende 5 lichaamsdelen:

- 1 Gezicht, nek en borst
- 2 Armen en Schouders
- 3 Perineum
- 4 Benen
- 5 Rug en billen

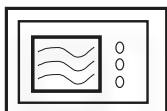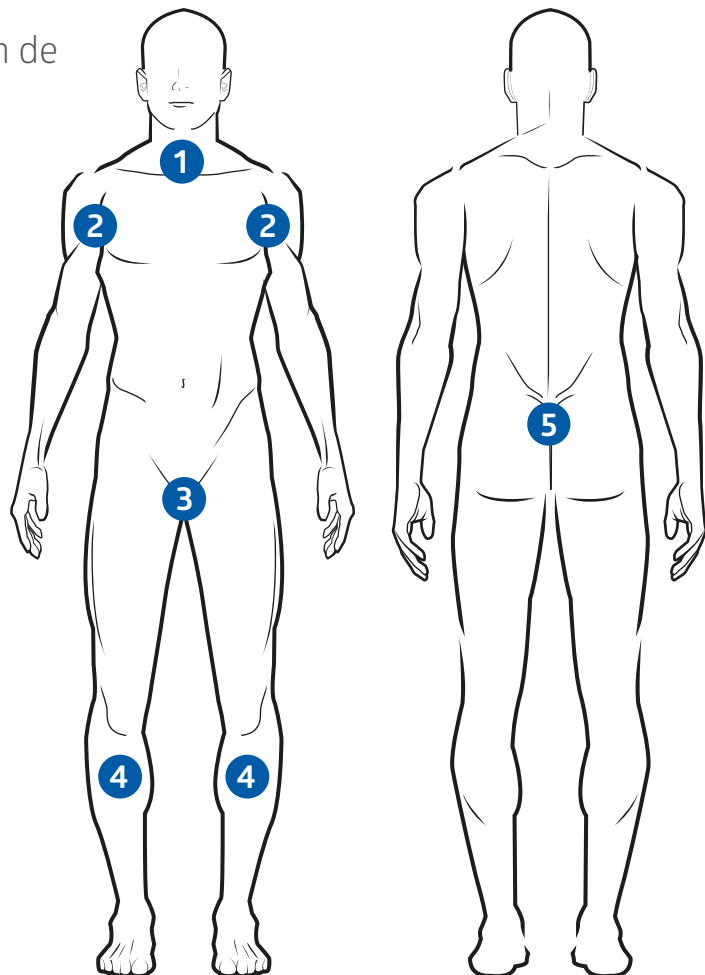

Microwaveable
750 Watts
30 - 60 sec



Spoel de Easybath®
producten niet door
het toilet

Wilt u meer informatie over onze Easybath® producten, neem dan contact op met uw Medline Account Manager of bekijk eens onze website www.medline.eu/nl