

Sistema de Baño EasyBath® en envase de 8 unidades




Cómo usarlos:

Caliente el envase EasyBath (cerrado) en el calentador inteligente Medline o en el microondas (750 vatios de potencia).

Utilice una manopla o una toalla EasyBath para limpiar cada una de las siguientes ocho zonas del cuerpo:

- 1 Cara, cuello y pecho
- 2 Brazo/axila izquierdos
- 3 Brazo/axila derechos
- 4 Perineo
- 5 Pierna izquierda
- 6 Pierna derecha
- 7 Espalda
- 8 Nalgas.

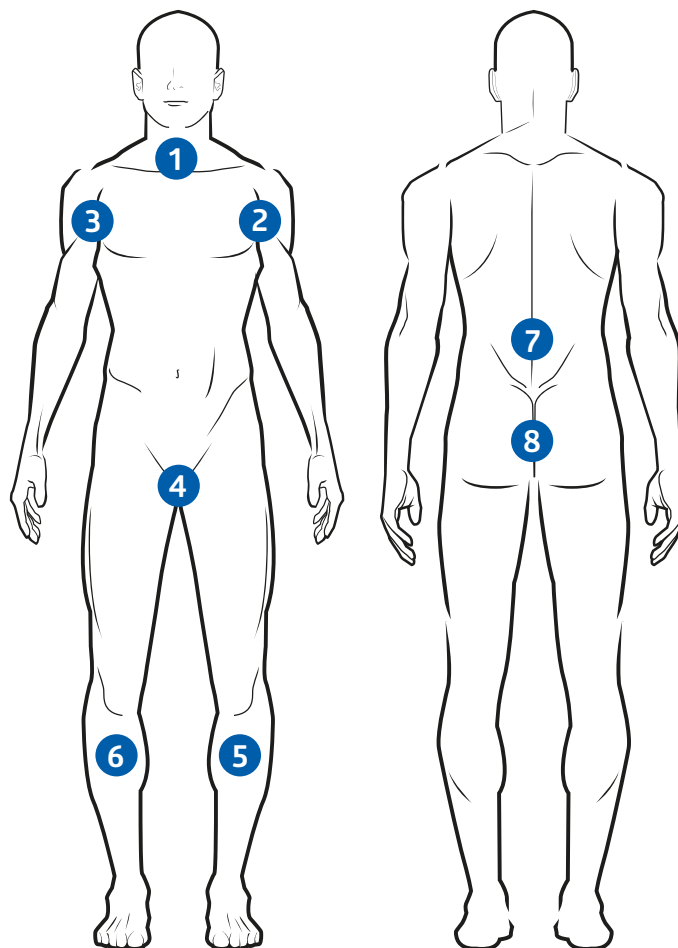

WM80300/WM80301



MSCE095309A

Para obtener más información sobre EasyBath, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite: www.medline.eu/es.



Apto para microondas
750 vatios
30 segundos*



No tire las manoplas
de lavado o de limpieza
EasyBath por el inodoro.