

Fundas de ecografía endocavitaria



Una solución protectora para ecografías transrectales y transvaginales

La funda de ecografía endocavitaria de Medline sirve de barrera vírica para los procedimientos de ecografía transrectal y transvaginal. Es compatible con la mayoría de los ultrasonidos.

Esta funda ofrece la máxima protección contra la contaminación cruzada, tanto para el paciente como para el equipamiento médico. También ayuda a reducir el tiempo necesario para eliminar el gel, los excrementos y otros residuos a los que normalmente puede estar expuesta la sonda durante los exámenes médicos intracavitarios.

Usos

Cada funda de ecografía endocavitaria de Medline puede utilizarse durante intervenciones ginecológicas, urológicas y proctológicas.

Ventajas y características



Compatible con la mayoría de los transductores de ultrasonidos



Fundas de ecografía de ultrasonidos estériles y no estériles disponibles



Transparente, para facilitar la visibilidad e imágenes claras



Disponibilidad de opciones de lubricante para garantizar un ajuste personalizado óptimo




Barrera eficaz con opción de látex y sin látex (poliisopreno) para ayudar a prevenir reacciones alérgicas en pacientes y/o profesionales sanitarios; el material es suave y muy resistente.



Estas fundas se adaptan perfectamente a la mayoría de los transductores. Están disponibles en materiales con y sin látex, así como estériles o no estériles, para ayudar a garantizar un ajuste personalizado óptimo.


Instrucciones de aplicación

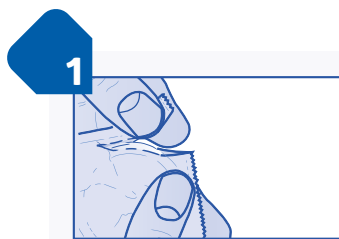

1 Rompa suavemente el envase por los bordes o las esquinas. Manipule el producto con cuidado para evitar perforar las fundas de ecografía endocavitaria.



2 Coloque la funda sobre el transductor. Tenga cuidado de no dejar burbujas ni pliegues que puedan interferir con la visibilidad y la imagen adecuadas. También puede aplicar gel en el transductor si es necesario.

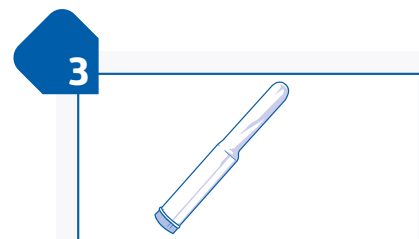

3 Una vez que el transductor esté completamente cubierto, inspeccione el instrumento una última vez, para asegurarse de que no hay burbujas o aberturas que puedan hacer que la funda sea menos eficaz.

Información para pedidos

Fundas de látex de ecografía endocavitaria

Referencia	Dimensiones	Envasado	Estéril
NS-ICE28295L	28 x 295 mm	144 ud./envase; 2880 ud./caja	No
NS-ICE33230L	33 x 195 mm	144 ud./envase; 2880 ud./caja	No
NS-ICE33230LL*	33 x 195 mm	144 ud./envase; 2880 ud./caja	No
ICE28295L	28 x 295 mm	100 ud./envase; 2000 ud./caja	Sí
ICE33230L	33 x 195 mm	100 ud./envase; 2000 ud./caja	Sí

*Con lubricante

Fundas de ecografía endocavitaria de poliisopreno

Referencia	Dimensiones	Envasado	Estéril
NS-ICE28295P	28 x 295 mm	100 ud./envase; 2000 ud./caja	No
ICE28295P	28 x 295 mm	100 ud./envase; 2000 ud./caja	Sí

Más información. Póngase en contacto con su Account Manager o visítenos en: www.medline.eu/es



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
www.medline.eu/es
Pedidos: es-pedidos@medline.com
Atención al Cliente: es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  

Estos productos son productos sanitarios de clase IIa destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2024 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1370_ES 01/2024



Advena Limited
Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower
Street, Swatar, BKR 4013 Malta

