

Proteções de Sonda Endocavidade



Uma solução protetora para procedimentos de ultrassons transretais e transvaginais

A Proteção de Sonda Endocavidade Medline serve de barreira viral para procedimentos de ultrassons transretais e transvaginais. É compatível com a maioria dos ultrassons.

Esta capa oferece máxima proteção contra contaminação cruzada tanto para o seu paciente quanto para o equipamento. Além disso, ajuda a reduzir o tempo necessário para remover o gel, fezes e outros resíduos a que a sonda possa estar normalmente exposta durante exames médicos invasivos.

Usos

A Proteção de Sonda Endocavidade Medline pode ser usada durante intervenções ginecológicas, urológicas e proctológicas.

Vantagens e funcionalidades



Compatível com a maioria dos transdutores de ultrassons



Estão disponíveis proteções de sonda estéreis e não estéreis



Transparentes para promover visibilidade fácil e imagens nítidas



Opção de lubrificante disponível para garantir um ajuste personalizado ideal




Barreira eficaz com opção de látex e livre de látex (poli-isopreno) para ajudar a prevenir reações alérgicas em pacientes e/ou profissionais de saúde; o material é macio e altamente resistente.



Essas proteções encaixam perfeitamente na maioria dos transdutores. Estão disponíveis em materiais de látex e não látex, bem como estéreis ou não estéreis, para ajudar a garantir um ajuste personalizado ideal.

Instruções de aplicação

1

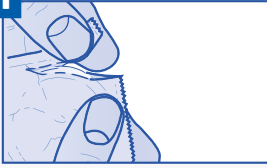


Abra delicadamente a embalagem pelos rebordos ou cantos. Manipule-a com cuidado para evitar perfurar as proteções de sonda endocavidade.

2



Aplice a proteção sobre o transdutor. Tenha cuidado para não deixar bolhas ou vincos que possam interferir na visibilidade e nitidez das imagens. Também pode aplicar gel no transdutor, se necessário.

3

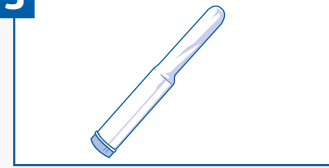

Quando o transdutor estiver totalmente coberto, inspecione o instrumento uma última vez, para garantir que não há bolhas ou aberturas que possam tornar a proteção menos eficaz.

Informações de encomenda

Proteções de Sonda Endocavidade Látex

Número do artigo	Dimensões	Embalagem	Estéril
NS-ICE28295L	28 x 295 mm	144 unid./embalagem; 2880 unid./caixa	Não
NS-ICE33230L	33 x 195 mm	144 unid./embalagem; 2880 unid./caixa	Não
NS-ICE33230LL*	33 x 195 mm	144 unid./embalagem; 2880 unid./caixa	Não
ICE28295L	28 x 295 mm	100 unid./embalagem; 2000 unid./caixa	Sim
ICE33230L	33 x 195 mm	100 unid./embalagem; 2000 unid./caixa	Sim

*Com lubrificante

Proteções de Sonda Endocavidade Poli-isopreno

Número do artigo	Dimensões	Embalagem	Estéril
NS-ICE28295P	28 x 295 mm	100 unid./embalagem; 2000 unid./caixa	Não
ICE28295P	28 x 295 mm	100 unid./embalagem; 2000 unid./caixa	Sim

Saiba mais. Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte: www.medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Telemóvel: +351 800 110 253

www.medline.eu/pt
Encomendas: pt-pedidos@medline.com
Atenção ao Cliente: pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

Estes produtos são dispositivos médicos classe IIa destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer neste folheto.

© 2023 Medline é uma marca registada da Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1370_PT 07/2023

 Advena Limited
Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower
Street, Swatar, BKR 4013 Malta

 0123