

Como usar o Agrafador de Pele Medline



Os Agrafadores de Pele da Medline foram concebidos para ser uma solução de fecho de feridas intuitiva, fiável e versátil. Os agrafadores:

- Dispõem de um sistema de disparo de 1 agrafão
- Contêm 35 agrafos de aço inoxidável de grau médico.
- Integram uma janela transparente para um posicionamento preciso e visualização dos restantes agrafos
- Têm um formato retangular para suportar a estabilidade do fecho das feridas
- Estão disponíveis em 2 larguras de agrafão.



F-35WB



F-35RB



1

Junte os rebordos da ferida até revirarem. Posicione o Agrafador de Pele a meio da ferida. Segure-o na vertical com o descarregador plano contra a superfície da pele.




2

Pressione o punho devagar e aperte totalmente o gatilho até ouvir um «clique». Isso indica que o agrafão se fechou na totalidade. Ao pressionar o punho, um batente dobra automaticamente o agrafão na configuração correta.



3

Não se esqueça de soltar o gatilho antes de levantar o agrafador da pele.

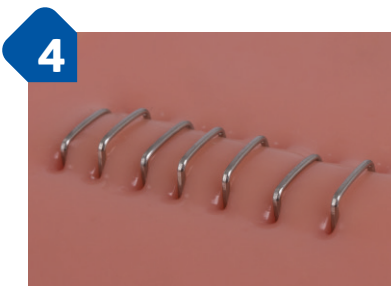

4

Repetir os passos de 1 a 3 até fechar toda a ferida.

Referência	Descrição	Embalagem	Número do componente do pack
F-35WB	Agrafador com 35 agrafos largos Dimensões do agrafão depois do fecho: 7,2 x 4,9 mm	5/embalagem, 100/caixa	9080-EU
F-35RB	Agrafador com 35 agrafos normais Dimensões do agrafão depois do fecho: 5,9 x 3,9 mm	5/embalagem, 100/caixa	9081-EU



Para mais informações sobre este produto ou para receber uma demonstração do produto, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website: www.medline.eu/pt

Estes produtos são dispositivos médicos classe IIa destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.



Shanghai International Holding Corp. GmbH
Eiffestraße 20
20537 Hamburg, Alemanha

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1346_PT 01/2023