

SonoGuard Plus – Sterile Ultraschallbezüge

Zeitersparnis, weniger Aufwand und ein klares Ultraschallbild



**Sterile
Abdeckung für
Ultraschallsonden**

Zeitersparnis, weniger Aufwand und ein klares Ultraschallbild

Die sterilen Ultraschallbezüge SonoGuard Plus werden mit einer selbstklebenden ClearView-Folie geliefert, die zur Fixierung der Ultraschallsonde an der Innenseite des Bezugs dient. Die Verwendung von Kontaktgel auf der Innenseite des Bezuges ist nicht erforderlich. Somit entfällt ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Durch die fixierte Sonde ist die Verwendung eines zweiten Gummibands oder Klebestreifens zur zusätzlichen Sicherung nicht unbedingt erforderlich.

Nach der Anwendung lässt sich der Bezug rückstandsfrei von der Sonde entfernen. Weder die Sonde noch das Kabel müssen vom Kontaktgel gereinigt werden.



Dank der ClearView-Folie und leichten Entfaltung kann die Ultraschallsonde einfach und schnell bezogen werden und der Aufwand in der Nachbereitung wird reduziert.




Durch den gefreien Einsatz reduziert sich der Reinigungsaufwand



Dank der luftblasenfreien Technologie erreichen Sie eine bessere Bildqualität als mit einem herkömmlichen Ultraschallbezug.



*Herkömmlicher
Ultraschallbezug*

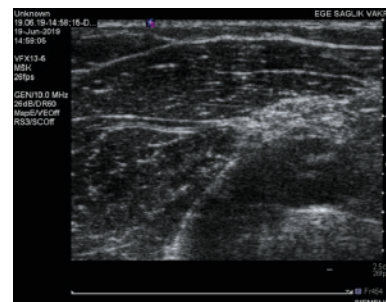

*Ultraschallbezug
SonoGuard Plus*

Anwendung



Schritt 1:

Führen Sie eine Hand in die Mittellage des Bezugs (am weitesten vorstehend) und spreizen Sie dann die Finger, um die Bildung von Falten auf der Klebefläche zu verhindern.



Schritt 2:

Entfernen Sie mit der anderen Hand das Abdeckpapier von der Klebefläche.



Schritt 3:

Aufsetzen der Sonde auf die Klebefläche Stellen Sie sicher, das die Sonde faltenfrei fixiert ist. Greifen Sie die Sonde nach dem Aufsetzen mit der Hand, die sich immer noch innerhalb des Bezugs befindet.



Schritt 4:

Um die Sonde zu beziehen, entfalten Sie den Bezug, indem Sie mit der anderen Hand an der Lasche (Etikett 1) ziehen, während Sie den Ultraschallkopf weiterhin festhalten.



Schritt 5:

Durch Ziehen an der Umschlagsfalte (Etikett 2) kann die sterile Abdeckung über die gewünschte Kabellänge durchgeführt werden.



Schritt 6:

Um eingeschlossene Luft oder verbliebene Falten zwischen der ClearView-Klebefläche und der Auflagefläche der Sonde zu entfernen, kann die Auflagefläche mit dem Finger steril geglättet werden.



Schritt 7:

Sichern Sie die Position der Sonde mit einem beiliegenden Gummiband oder Klebestreifen.

Schritt 8 (optional):

Mit dem zweiten mitgelieferten Klebestreifen oder dem Gummiband, kann die locker sitzende Abdeckung am Kabel zusätzlich befestigt werden, um die Handhabung während des Gebrauchs zu verbessern.

Spezifikationen

- Hergestellt aus latex- und phthalatfreier Polyethylenfolie
- Inklusive leitfähiger Klebefolie, um die Sonde zu positionieren, rückstandsfrei entfernbar
- Teleskopfaltung
- Inklusive Klebestreifen und Gummibändern zur zusätzlichen Fixierung
- Verfügbare Längen: 40 cm, 80 cm, 120 cm und 160 cm
- Breite: 18 cm
- Jedes sterile Set ist einzeln in einem Peel-Beutel verpackt

Bestellinformationen

SonoGuard Plus

Artikelnummer	Abmessungen	Verpackung
US.20.180.040	18 x 40 cm	200 Stück/Karton, 100 Stück/Box
US.20.180.080	18 x 80 cm	200 Stück/Karton, 100 Stück/Box
US.20.180.120	18 x 120 cm	200 Stück/Karton, 100 Stück/Box
US.20.180.160	18 x 160 cm	200 Stück/Karton, 100 Stück/Box

SonoGuard-Plus-Set mit Gel

Artikelnummer	Abmessungen	Verpackung
US.20.180.040-G	18 x 40 cm	200 Stück/Karton, 50 Stück/Box
US.20.180.080-G	18 x 80 cm	200 Stück/Karton, 50 Stück/Box
US.20.180.120-G	18 x 120 cm	200 Stück/Karton, 50 Stück/Box
US.20.180.160-G	18 x 160 cm	200 Stück/Karton, 50 Stück/Box

Für weitere Informationen wenden Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter oder besuchen Sie unsere Homepage: www.medline.eu/de



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879


www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Bei diesen Produkten handelt es sich um sterile Medizinprodukte der Klasse I, die für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind.

Sets ohne Gel:  Promecon GmbH
Kreuzlerstraße 10
20095 Hamburg, Germany  0537

Sets mit Gel: Behandlungsset – Zubehör Art. 12 MDD 93/42/EEC.  Promecon GmbH
Kreuzlerstraße 10
20095 Hamburg, Germany 

Gel:  Tarkuaz Medikal
Akçaburgaz, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:45/5
34522 Esenyurt/İstanbul, Turkey 

 2292  **PPP**
Hersteller des Behandlungssets:
Promecon GmbH
Kreuzlerstraße 10
20095 Hamburg, Germany

Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Bedienungsanweisungen und Hinweise auf der Verpackung.

Wir behalten uns das Recht vor, mögliche Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2021 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1131_DE 09/2021