

Manténlo firme. Manténlo limpio.

Mantenga los catéteres estériles y firmes en su sitio.

Los apósitos estériles Suresite® Select aumentan la comodidad del paciente y simplifican la labor del cuidador. Los apósitos quedan totalmente sellados, fijan el catéter con firmeza en su sitio y ayudan a evitar que entren microorganismos nocivos en la zona. La ventana de observación excepcionalmente amplia de Suresite® también hace que sea más sencillo monitorizar cualquier indicio de infección.


Una protección fiable allí donde se necesita

Suresite® garantiza una fijación firme y confortable en todas las zonas donde se aplica.

- Catéteres periféricos cortos y venosos de línea media
- Catéteres venosos centrales (CVC)
- Catéteres centrales de inserción periférica (PICC)
- CVC tunelizados
- Dispositivos reservorio implantados
- Catéteres arteriales
- Catéteres para diálisis

Información sobre pedidos

Referencia	Dimensiones	Envasado
VAD1680-INT	4,4 x 3,8 cm	400/caja; 100/env.
VAD1682-INT	5,7 x 5,1 cm	400/caja; 100/env.
VAD1882-INT	7 x 8,9 cm	200/caja; 50/env.
VAD1683-INT	7 x 7,3 cm	400/caja; 100/env.
VAD1685-INT	8,9 x 11,4 cm	200/caja; 50/env.
VAD1688-INT	10,2 x 11,4 cm	200/caja; 50/env.
VAD1689-INT	10,2 x 15,5 cm	100/caja; 25/env.

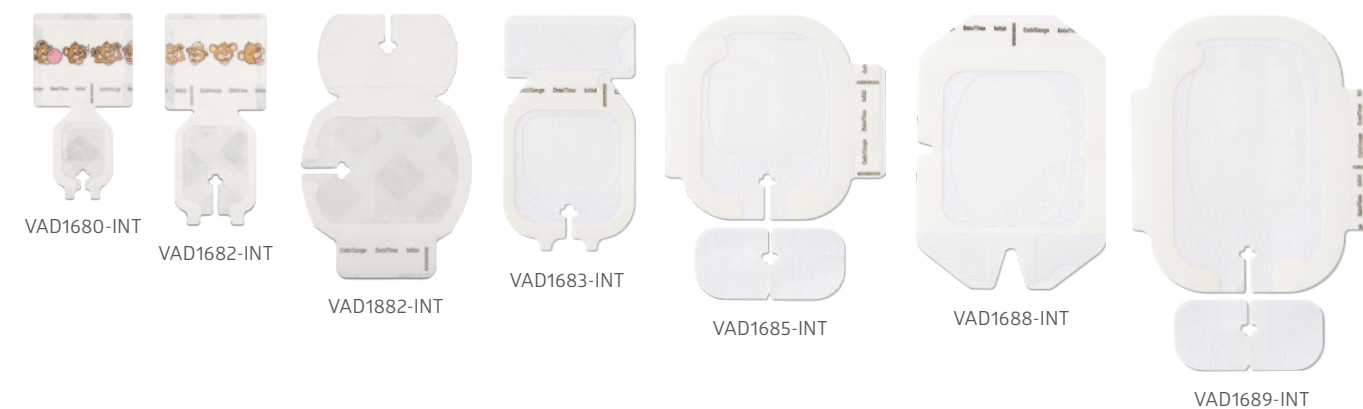

Asegure una fijación firme. Póngase en contacto con su representante de Medline para obtener información sobre Suresite en un kit personalizado.



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

SÍGANOS



Los apósitos Suresite® Select son productos sanitarios estériles de clase I para ser usados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.
© 2021 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1045_ES 06/2021.

Corvum Medical Products Corporation
100 Corporation Road
Williamstown, MA 01895, USA

EC REP

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
94110 Châteaufort, France

CE 2797 (BSI, The Netherlands)

Apósitos Suresite® Select

Seguridad para el catéter y comodidad para el paciente



**Protección
en la que
puede confiar**

La película transparente constituye una barrera estéril y transpirable frente a los contaminantes externos

Los innovadores adhesivos lo fijan con firmeza y controlan la humedad

La aplicación con marco garantiza una colocación precisa y sencilla, y una retirada suave

La amplia ventana de observación facilita la monitorización de cualquier indicio de infección

La hendidura en forma de trébol se adapta con facilidad y se ajusta a los conectores y las luces

Cómo aplicarlo

1.

Retirar el revestimiento del apósito para dejar expuesto el adhesivo



VAD1683-INT 7 x 7,3 cm

2.


Colocar el borde de la hendidura del apósito sobre el conector del catéter



VAD1685-INT 8,9 x 11,4 cm

3.

Despegar el marco desde el extremo del borde mientras aplica presión sobre el borde

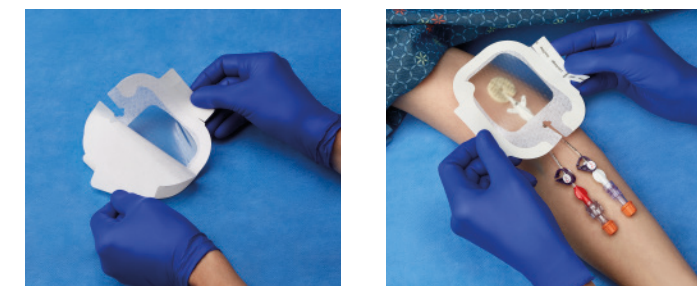

VAD1685-INT 8,9 x 11,4 cm

4.

Colocar la hendidura precortada de la tira adhesiva de fijación bajo la unión moldeada del catéter



VAD1688-INT 10,2 x 11,4 cm



VAD1688-INT 10,2 x 11,4 cm



VAD1689-INT 10,2 x 15,5 cm



Cómo retirarlo

1.

Retirar todas las tiras adhesivas de fijación del apósito



VAD1683-INT 7 x 7,3 cm

2.

Coger suavemente los extremos de tejido por debajo de la hendidura en forma de trébol



VAD1685-INT 8,9 x 11,4 cm



VAD1688-INT 10,2 x 11,4 cm



VAD1689-INT 10,2 x 15,5 cm



3.

Retirar el apósito de la piel desde los laterales, despacio y a ras de piel



VAD1685-INT 8,9 x 11,4 cm



VAD1688-INT 10,2 x 11,4 cm



VAD1689-INT 10,2 x 15,5 cm

4.

Retirar el apósito hacia el punto de introducción del catéter hasta que esté despegado



VAD1685-INT 8,9 x 11,4 cm



VAD1688-INT 10,2 x 11,4 cm



VAD1689-INT 10,2 x 15,5 cm