


Stevige fixatie overal waar het nodig is

Suresite® zorgt voor een veilige, comfortabele pasvorm op elke locatie.

- Korte perifere- en midline-katheters
- Centraal veneuze katheters (CVCs)
- Centrale infusen (PICCs)
- Getunnelde CVCs
- Port-a-cath
- Arteriële katheters
- Dialysekatheters

Bestelgegevens

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
VAD1680-INT	4,4 x 3,8 cm	400/cs; 100/bx
VAD1682-INT	5,7 x 5,1 cm	400/cs; 100/bx
VAD1882-INT	7 x 8,9 cm	200/cs; 50/bx
VAD1683-INT	7 x 7,3 cm	400/cs; 100/bx
VAD1685-INT	8,9 x 11,4 cm	200/cs; 50/bx
VAD1688-INT	10,2 x 11,4 cm	200/cs; 50/bx
VAD1689-INT	10,2 x 15,5 cm	100/cs; 25/bx

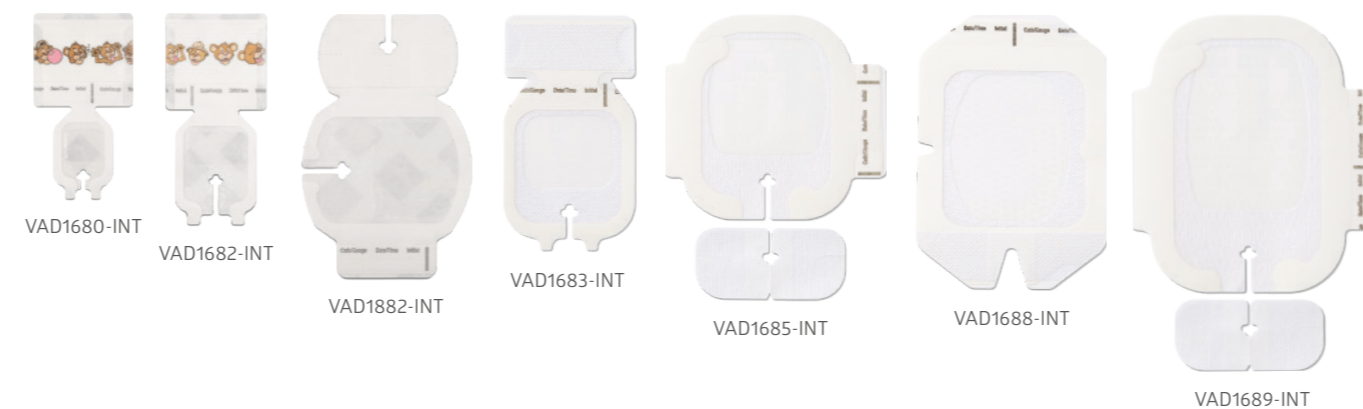

Zet het stevig vast. Houd het schoon.

Houd katheters steriel en op hun plek.

Suresite® Select steriele pleisters verbeteren het patiëntcomfort en maken het werk van de zorgverlener makkelijker. De pleisters dekken volledig af, houden de katheter stevig vast en voorkomen dat schadelijke micro-organismen bij de insteekplaats komen. De uitzonderlijk brede vensters van Suresite® maken het makkelijker om de insteekplaats te controleren op infecties.

Zorg voor goede fixatie. Neem contact op met uw Medline vertegenwoordiger voor informatie over een Suresite set op maat.



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39

www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

VOLG ONS  

Suresite® Select Pleisters zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
94700 Ormeaux-Parisis, France



We behouden ons het recht voor om eventuele fouten die in deze brochure kunnen voorkomen te corrigeren.

©2021 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1045_NL 06/2021.



**Bescherming
waar u op
kunt rekenen**

Hoe toe te passen

1. Verwijder bescherm- laag van de pleister
2. Plaats het gat van de pleister over de kathe- ter hub
3. Trek het frame van de rand en druk op de pleister aan de randen
4. Breng de tape strip aan, met de inkeping onder de katheter



VAD1683-INT 7 x 7,3 cm



VAD1685-INT 8,9 x 11,4 cm



VAD1688-INT 10,2 x 11,4 cm



VAD1689-INT 10,2 x 15,5 cm



Hoe te verwijderen

1. Verwijder alle tape strips van de pleister
2. Pak de zachte, stoffen randen onder het gat vast
3. Til de pleister op aan de randen, langzaam en dicht bij de huid
4. Trek de pleister naar binnen richting de insteekplaats tot deze is verwijderd



VAD1683-INT 7 x 7,3 cm



VAD1685-INT 8,9 x 11,4 cm



VAD1688-INT 10,2 x 11,4 cm



VAD1689-INT 10,2 x 15,5 cm



Transparante folie is een ademende, steriele barrière tegen externe verontreinigingen

Innovatieve lijmlaag blijft stevig op zijn plek en reguleert vocht

Dankzij het frame kan de pleister nauwkeurig geplaatst, en voorzichtig verwijderd worden

Brede vensters maken het makkelijker om te controleren op infecties

Past goed rondom hubs en lumens dankzij klaver inkeping