

MARATHON®

Protettivo cutaneo senza bruciore con formula al 100% a base di cianoacrilato

Marathon® è una barriera liquida che non irrita, con una formula 100% a base di cianoacrilato, progettata per proteggere la pelle dagli effetti negativi dell'umidità, delle forze di taglio e dello sfregamento.¹

Stomie

Includendo tracheostomie, colostomie, urostomie, ecc.²

Danno cutaneo

Copertura delle ulcere da pressione (PU), di grado I e II, ustioni superficiali e abrasioni, tessuti circostanti la ferita chirurgica.²

Cateteri






Per l'uso con cateteri sovrapubici, sonde di gastrostomia endoscopica percutanea (PEG), drenaggi chirurgici, ecc.

Lesioni cutanee


Per l'uso in casi di lesioni correlate a dispositivi medici, come cannule nasali, maschere per la ventilazione a pressione positiva continua (CPAP), dispositivi per la terapia a pressione negativa, ecc.³

Barriera meccanica


Destinato a fornire protezione fisica della pelle durante l'applicazione di dispositivi adesivi, come medicazioni o sacchetti per colostomia.²

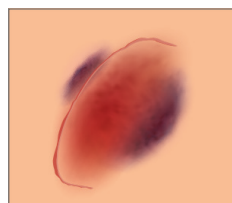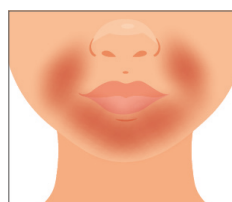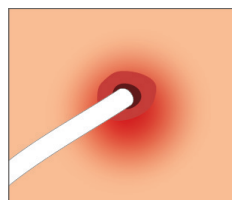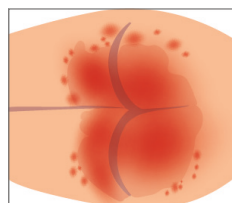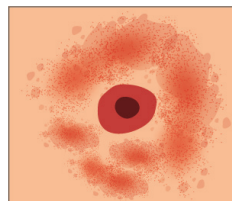


Metodi corretti di attivazione e applicazione

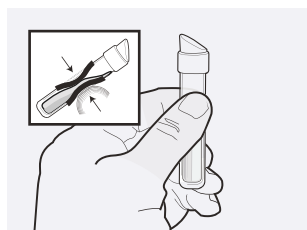


Metodo con una sola mano

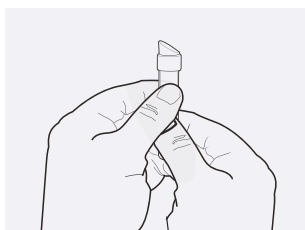

Quando sono necessarie entrambe le mani

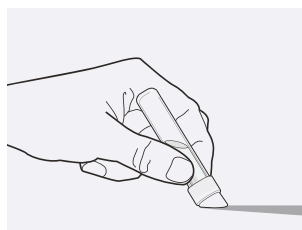

Metodo standard

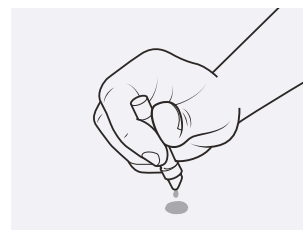

Metodo a goccia



Nota: Non cercare di piegare o spezzare il tubo per attivarlo.

Protezione autentica della pelle

Come funziona



Umidità sulla pelle





I monomeri si polimerizzano
(ad esempio si legano tra loro)



I monomeri si legano
alle molecole sulla pelle



Barriera durevole e flessibile
direttamente legata alla pelle

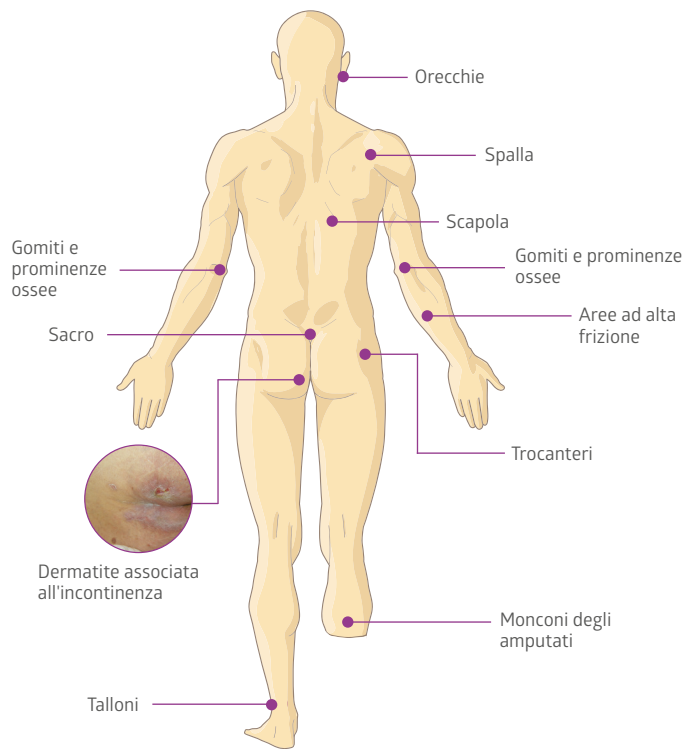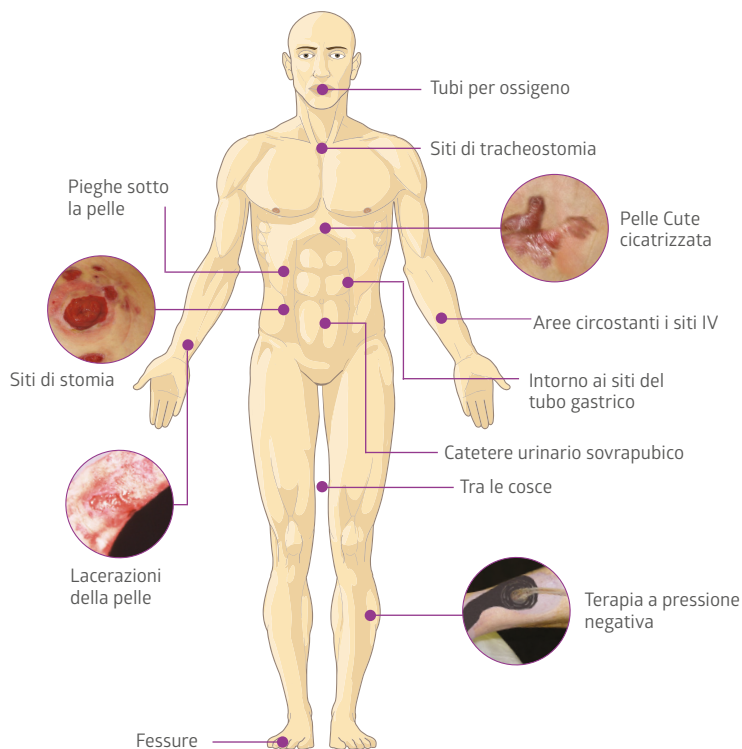

Marathon

Dimensione conveniente
per aree piccole



MSC093001



Informazioni per gli ordini

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
MSC093001	Protettore pelle Marathon a base di cianoacrilato	5 pz/scat



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch-it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US 

¹Fletcher J, Beeckman D, Boyles A et al (2020) Raccomandazioni internazionali sulle migliori pratiche: Prevenzione e gestione del danno alla pelle associato all'umidità (MASD). Wounds International. Disponibile online su: www.woundsinternational.com
²Kevin Y. Woo, PhD, NP, è Professore Associato presso la Queen's University, Kingston, Ontario, Canada. Dimitri Beeckman, PhD, RN, è Professore presso il Centro Universitario per Infermieristica e Ostetricia, Università di Gand, Gand, Belgio. Debashish Chakravarthy, PhD, è Vice Presidente di Medline Industries, Inc., Northfield, Illinois. Gli autori hanno dichiarato di non avere rapporti finanziari correlati a questo articolo. Presentato il 15 dicembre 2016; accettato nella forma revisionata il 27 marzo 2017.
³Margi R, Gefen A. Valutazione delle tensioni dei tessuti facciali sotto dispositivi medici dopo l'applicazione di un protettivo liquido per la pelle a base di cianoacrilato: Uno studio integrato sperimentale-computazionale. Int Wound J. Mar 2022; 19(3):615-632. doi: 10.1111/iwj.13660. Pubblicato il 17 agosto 2021. PMID: 34402167; PMCID: PMC8874053.

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I non sterile, destinato all'uso da parte del personale sanitario. Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia



Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1493_IT 12/2024