

MARATHON®


Niet prikkende huidbeschermers met 100% cyanoacrylaat formule

Marathon® is een vloeibare barrière die niet prikt, met een formule op 100% cyanoacrylaat basis, ontworpen om de huid te beschermen tegen de negatieve effecten van vocht, wrijving en frictie.¹




Stoma's

Inclusief tracheostoma's, colostoma's en urostoma's, etc.¹

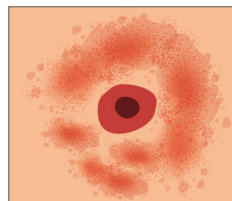


Huidbeschadiging

Drukwonden, niveau I en II, oppervlakkige brandwonden en schuurwonden, weefsel rond een chirurgische wond.²

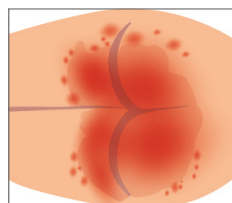


Katheters

Voor gebruik met suprapubis katheters, percutane endoscopische gastronomie (PEG) sondes, chirurgische drains, etc.

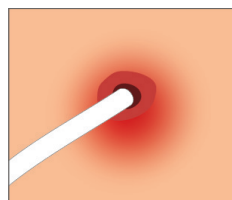


Huidlaesie

Voor gebruik bij laesies door medische hulpmiddelen, zoals een neusbril, continue positieve luchtdruk (CPAP) maskers, negatieve druktherapie hulpmiddelen, etc.³

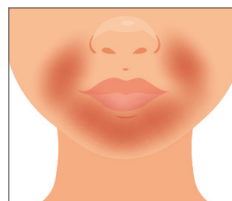


Mechanische barrière


Bedoeld om fysieke huidbescherming te bieden bij het aanbrengen van zelfklevende hulpmiddelen, zoals pleisters of stomapleister.²

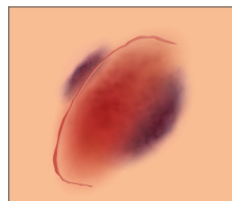


Correcte activerings- en toepassingsmethoden

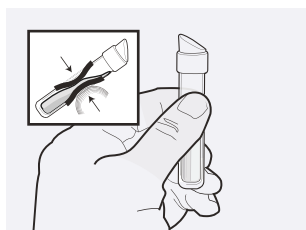


Methode met één hand

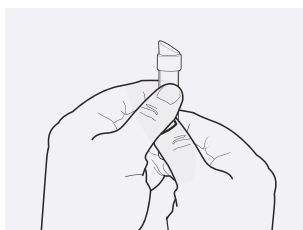

Als twee handen nodig zijn

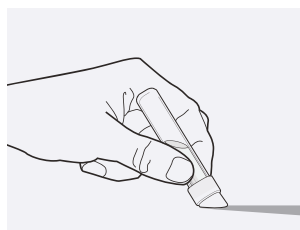

Standaard methode

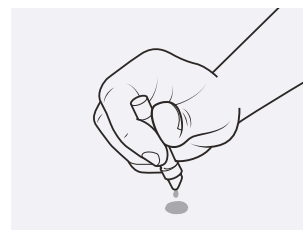

Druppelmethode



Opmerking: Probeer de buis niet te buigen of te klikken om deze te activeren.

Pure huidbescherming

Hoe werkt het



Vocht op de huid





Monomeren polymeriseren
(binden aan elkaar)



Monomeren binden
aan moleculen op de huid



Duurzame, flexibele barrière
direct gebonden aan de huid

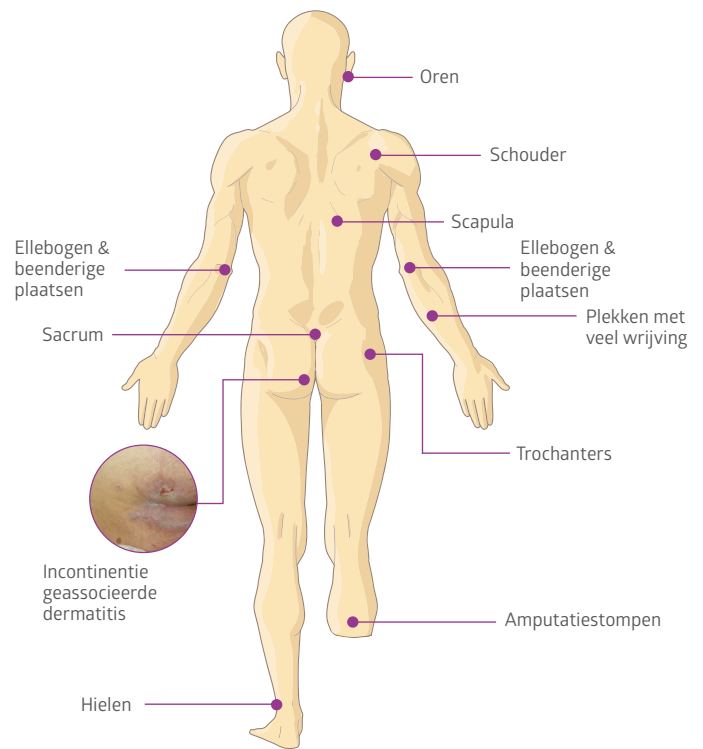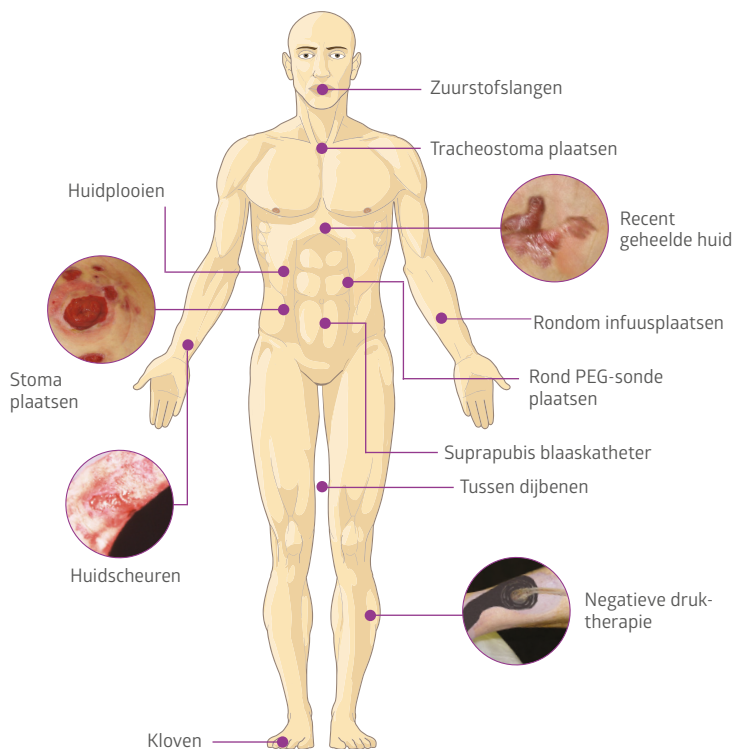

Marathon Handig formaat voor kleine gebieden



MSC093001



Bestelinformatie

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MSC093001	Marathon cyanoacrylaat huidbeschermers	5 stuks/doos



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

¹Fletcher J, Beeckman D, Boyles A et al (2020) International Best Practice Recommendations: Prevention and management of moisture-associated skin damage (MASD). Wounds International. Available online at www.woundsinternational.com
²Kevin Y. Woo, PhD, NP, is Assistant Professor, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada. Dimitri Beeckman, PhD, RN, is Professor, University Centre for Nursing and Midwifery, Ghent University, Ghent, Belgium. Debashish Chakravarthy, PhD, is Vice President, Medline Industries, Inc, Northfield, Illinois. The authors have disclosed that they have no financial relationships related to this article. Submitted December 15, 2016; accepted in revised form March 27, 2017.
³Margi R. Gefen A. Evaluation of facial tissue stresses under medical devices post application of a cyanoacrylate liquid skin protectant: An integrated experimental-computational study. Int Wound J 2004; 1:247 – 273 2022 Mar;19(3):615-632. doi: 10.1111/iwj.13660. Epub 2021 Aug 17. PMID: 34402167; PMCID: PMC8874053.

Dit product is een niet-steriel medisch hulpmiddel van klasse I dat bedoeld is voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk



Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2025 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1493_NL 01/2025