

Teli Chirurgici

Offri performance complete da leader di settore

The background of the lower half of the page is a photograph of a surgical drape. It shows a person in a blue surgical gown and yellow gloves, partially visible in the upper right, standing behind a table covered with a blue surgical drape. The drape has a fine, woven texture and is draped over the edge of the table, creating deep folds and shadows. The lighting is bright and clinical.

**Teli
chirurgici**

PERCHÈ SCEGLIERE I TELI ED I CAMICI MEDLINE?

Le sale operatorie richiedono prodotti con migliori performance durante tutta la durata della procedura chirurgica.

Ecco il perché il focus di Medline è fornire continuamente ed in modo efficiente teli e camici chirurgici affidabili e con ottime prestazioni. In base al feedback dei nostri clienti, ci impegniamo a sviluppare prodotti che soddisfino e superino le esigenze dei professionisti della sala operatoria.

Vantaggi dei teli e camici Medline:

- » 1° fornitore di teli e camici nel mondo
- » Sono stati utilizzati in quasi 23 milioni di procedure chirurgiche in tutta Europa nel 2018
- » La più ampia linea di prodotti del settore
- » Sviluppato per i chirurghi, dai chirurghi
- » Adattati sulla base delle esigenze del cliente
- » Tessuti dei teli e dei camici più performanti
- » Flessibilità di una start-up con la struttura di una grande azienda
- » Aumenta il valore dall'integrazione verticale con fornitura di set customizzati.

2.

RESISTENZA FISICA

I tessuti con grammatura maggiore e resistenti allo strappo offrono una migliore protezione, specialmente in chirurgia con elevate movimentazioni come l'ortopedia.

1.

CONTROLLO DEI LIQUIDI

Tessuti altamente assorbenti e zone impermeabili creano una barriera protettiva ed aiutano a prevenire la penetrazione di sangue e la contaminazione dei fluidi.

3.

DRAPPEGGIABILITÀ ED USO

Le tecnologia innovativa dei tessuti e le caratteristiche del design contribuiscono a garantire la sicurezza al paziente, una maggiore durata e consentono di risparmiare tempo nella preparazione in sala operatoria.

4.

SOLUZIONE IDEALE

Camici confortevoli, tessuti traspiranti che si adattano comodamente ed offrono massima maneggevolezza.

5.

LINT E RESISTENZA ALL'ABRASIONE

I teli standard non rilasciano lanugine e sono resistenti all'abrasione, supportano complessi interventi chirurgici ed aiutano a ridurre il rischio di contaminazione crociata.

INNOVAZIONE COMPLETA


La sala operatoria richiede le nostre migliori prestazioni.

Ecco perché Medline si concentra sul miglioramento delle prestazioni senza compromettere il valore. Collaboriamo con i nostri clienti per progettare teli specifici per le procedure che soddisfino le loro aspettative, per fare un ulteriore passo avanti.


Progettato per eccellere nei fattori giusti

- » Le dimensioni estese e generose provvedono ad una copertura sterile completa del campo
- » Le robuste strisce di velcro fissate ai teli riducono il tempo di preparazione
- » Le strisce adesive adattabili manualmente forniscono un'eccezionale precisione e protezione dell'area d'incisione
- » Il Pad anti-scivolo mantiene gli strumenti a portata di mano evitando la caduta al suolo
- » Il Pad assorbente nelle aree critiche garantisce il più alto grado d'assorbenza e resistenza all'abrasione dove maggiormente necessario.*

Eseguite quasi 23 milioni di procedure chirurgiche nel 2018 in tutta Europa con i nostri prodotti.

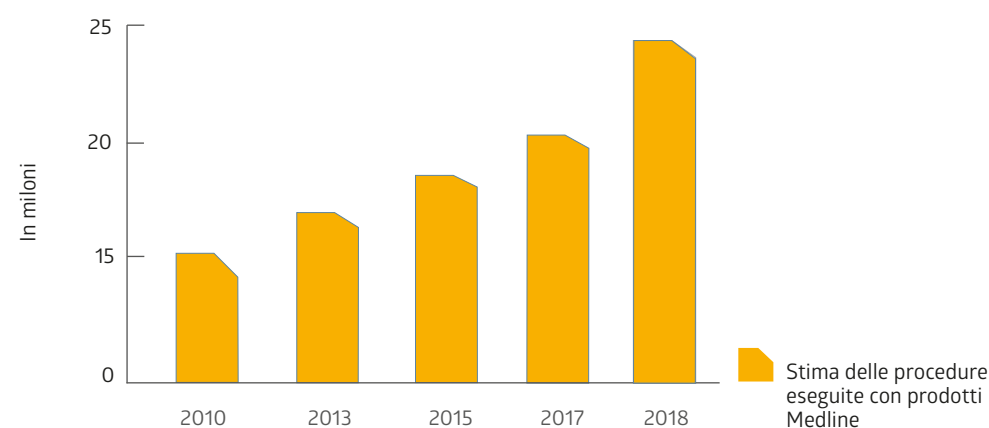

*Dati e risultati in archivio

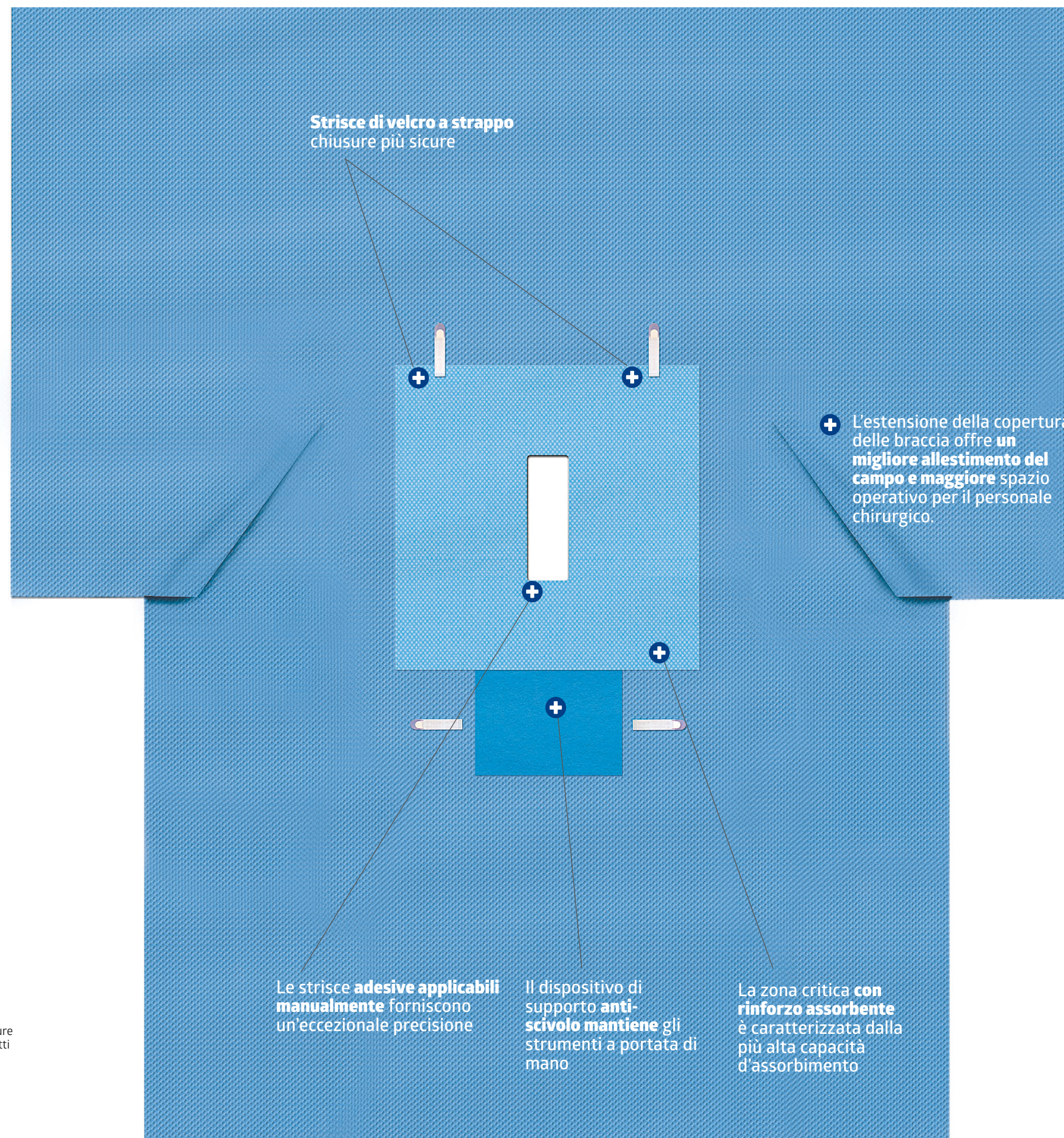


OPS™ ESSENTIAL TELI CHIRURGICI

REALIZZATI IN MATERIALE BIACCOPPIATO, ASSORBENTE ED IMPERVIO

Il tessuto biaccoppiato Medline non solo assorbe liquidi e fluidi corporei, ma il suo strato interno fornisce anche una barriera impermeabile e completa contro liquidi e batteri.*

- » La tecnologia composita avanzata offre un' eccellente drappeggiabilità e comfort per il paziente.
- » Basso rilascio particellare aiuta a ridurre i fattori di rischio associati all'infezione.
- » Essential è disponibile con e senza rinforzo ad alto assorbimento migliorato nelle zone critiche.
- » I teli soddisfano o superano i più alti standard prestazionali secondo EN 13795.*

*Dati e risultati in archivio

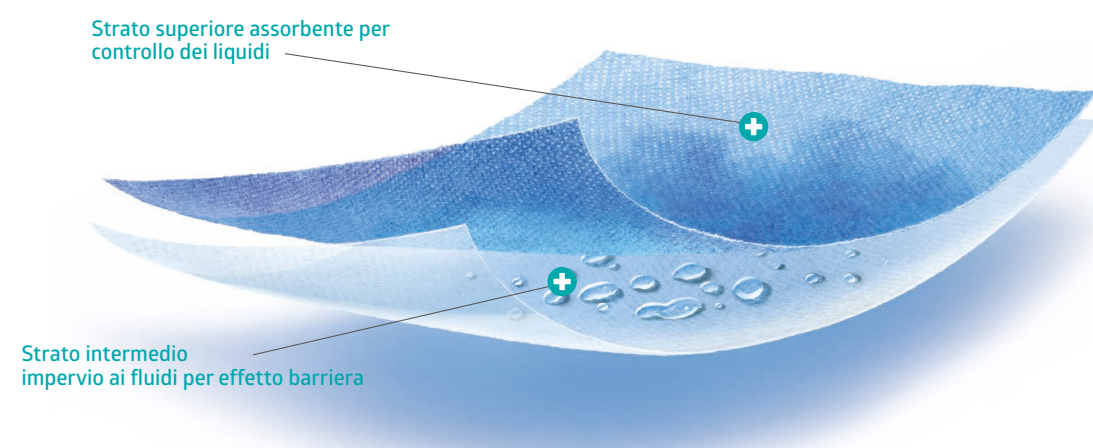


OPS™ ULTIMATE TELI CHIRURGICI

UN' ECCELENZA MEDLINE: FLUIDO RESISTENTE ED IMPERVIO

E' composto da tre strati di materiali diversi, il telo Ultimate è all'altezza del suo nome, assorbendo in tutto il perimetro, fornendo una resistenza della barriera resistente al 100% contro fluidi e batteri e garantendo il comfort del paziente.

- » Il basso rilascio particellare aiuta a ridurre i fattori di rischio associati all'infezione.
- » Il materiale triaccoppiato impermeabile ed assorbente risponde alle esigenze dell'équipe chirurgica in sala operatoria.*
- » Uno strato morbido in TNT aiuta a gestire l'umidità del paziente durante lunghi interventi chirurgici.
- » I teli soddisfano o superano i più alti standard prestazionali secondo EN 13795.*

*Dati e risultati in archivio

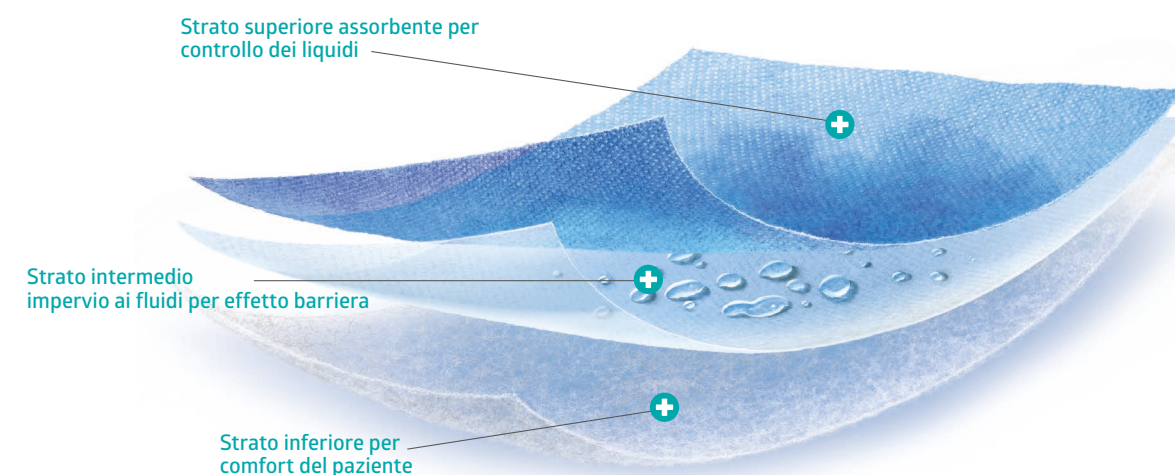


OPS™ ADVANCED TELI CHIRURGICI

LO STANDARD DEL SETTORE CON UNA FORZA A 5 STRATI

Composto da cinque resistenti strati di fibre, il nostro telo in SMMMS offre drappeggiabilità, morbidezza ed una barriera contro i microrganismi.*

- » La più recente tecnologia del tessuto in SMS garantisce un'eccellente barriera resistente.
- » La struttura microporosa a 5 strati offre un'eccellente traspirabilità ed aiuta a gestire l'umidità del paziente.
- » Il basso rilascio particellare aiuta a ridurre i fattori di rischio associati all'infezione.
- » Il rinforzo altamente assorbente in zone critiche aiuta a prevenire la penetrazione di sangue e la contaminazione dei fluidi.

*Dati e risultati in archivio

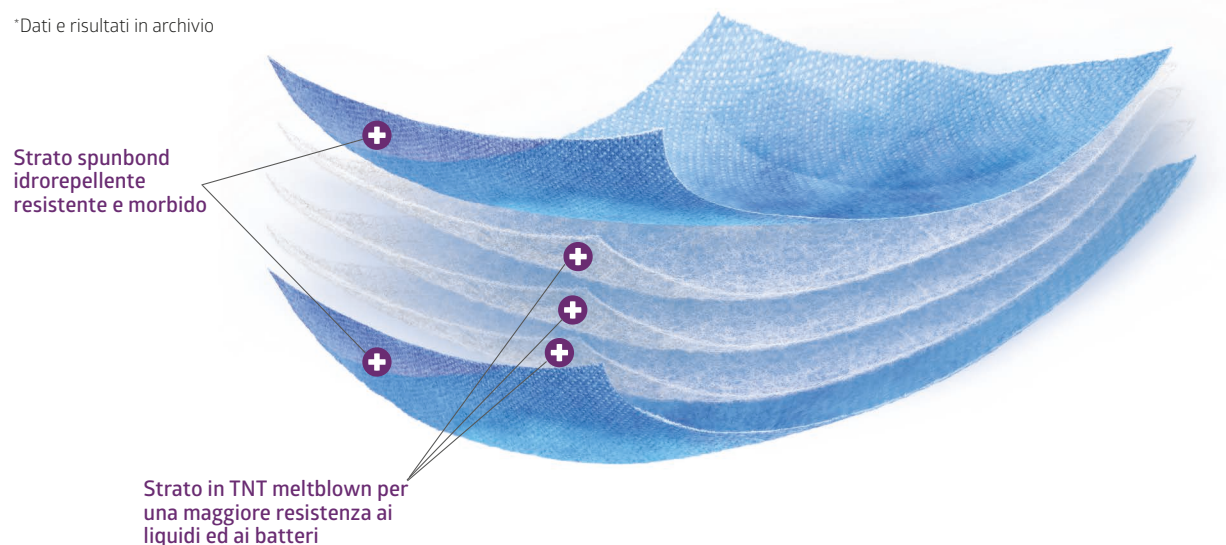

ECLIPSE TELI CHIRURGICI

TESSUTO DALL'ASPETTO E SENSAZIONE SIMILI AL COTONE

I teli Medline soddisfano e superano gli standard del settore.

- » Eclipse è traspirante ed idrorepellente offrendo qualità simili al tessuto.
- » Il basso rilascio particellare aiuta a ridurre i fattori di rischio associati all'infezione.
- » Eclipse può essere utilizzato con o senza un rinforzo assorbente aggiuntivo nelle zone critiche.
- » Questo telo soddisfa o supera i requisiti di prestazione dei teli.



29466
MEDLINE
JL

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DEL NOSTRO PORTFOLIO TELI E SET

1. STRISCIA ADESIVA, ECCELLENZA MEDICALE



2. ETICHETTE DI TRACCIABILITÀ

4 etichette rintracciabilità
disponibili per ogni prodotto



3. ETICHETTE CHIARE

Etichette chiare con codice pro-
dotto, descrizione ed illustrazio-
ni ben visibili



4. CODICE COLORE

Per l'identificazione dei materiali



5. RIDUZIONE DEGLI SPRECHI

Icone per il posizionamento
del telo sul paziente e che
mostrano come aprire il telo,
impedendo in tal modo il
posizionamento improprio ed
evitando lo spreco del
materiale



6. AVVOLGIMENTO IN SMS

Su tutti i nostri prodotti

**Scegli la sua
protezione**



**ALWAYS
ON.**

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale

Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia

Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12

it.medline.eu
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

it.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I, destinato ad essere utilizzato da personale sanitario.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML610-IT 08/2020.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



2797 (BSI - The Netherlands)