


# Guida ai Prodotti specifici per le Centrali di Sterilizzazione

Un'ampia selezione di articoli e un supporto esaustivo



## La sterilizzazione nella sua miglior configurazione

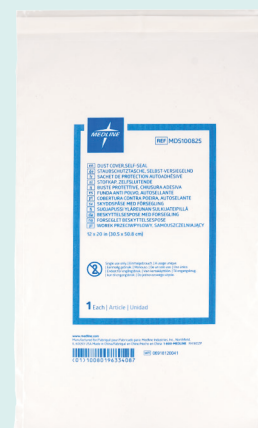



**Vi suggeriamo di consultare questa guida e utilizzarla confrontandovi con il rappresentante Medline di riferimento:**

insieme potrete corredare la vostra centrale di sterilizzazione con una selezione di articoli di elevata qualità e valore, che faciliteranno l'approccio sistematico della vostra struttura.

# Una meticolosa attenzione a ogni singolo dettaglio

Poche persone riescono a comprendere appieno la quantità di lavoro che si svolge all'interno di una Centrale di Sterilizzazione, dove hanno luogo procedure finalizzate all'eliminazione del 99,999% dei microrganismi patogeni.

Medline al contrario non sottovaluta affatto l'importanza di poter contare su uno strumentario chirurgico sterile, ed è ben consapevole delle difficoltà che la sterilizzazione può incontrare; con un approccio di tipo sistematico, infatti, ha riunito molte e diversificate linee di prodotti essenziali all'esecuzione di ogni singola fase di questo processo, mettendole a disposizione della propria clientela.

## Sterilizzazione

<b>Il Processo di Sterilizzazione</b>	<b>4</b>
<b>Teli per Sterilizzazione</b>	<b>5</b>
<b>Accessori per la Sterilizzazione</b>	<b>10</b>

## Abbigliamento Protettivo

<b>Guanti</b>	<b>12</b>
<b>Camici e Copriscarpe</b>	<b>14</b>
<b>Protezione del Viso</b>	<b>17</b>

## Sicurezza a livello dei Pavimenti

<b>Tappetini</b>	<b>19</b>
------------------	-----------



# Il processo di sterilizzazione

Il passaggio da componenti singoli a set assemblati e sterilizzati corrisponde alla vera e propria 'trasformazione' che la centrale di sterilizzazione opera: dalla preparazione di strumenti chirurgici a un'assistenza al paziente di livello eccezionale. Medline vi supporta nel raggiungimento dei vostri obiettivi fornendovi sicurezza, sostenibilità e valore aggiunto.



# Teli per Sterilizzazione Gemini

## Drappeggiabili e straordinariamente resistenti

I teli per sterilizzazione Gemini sono stati realizzati per resistere a tagli e forature, offrendo così prestazioni migliori rispetto a quelle dei teli standard in SMS. Sono estremamente morbidi e molto facili da piegare, caratteristiche che li rendono davvero funzionali.

## Basso linting e migliori proprietà di adesione

Il nastro adesivo dotato di indicatore di avvenuta sterilizzazione si fissa saldamente alla loro superficie. Sono inoltre progettati specificamente per rilasciare una quantità minima di particelle ('a basso linting'), e perciò ideali per preservare e garantire la sterilità del materiale in essi avvolto.

## Realizzati in SSMMS, un esclusivo tessuto non tessuto dalla comprovata barriera protettiva

La particolare tecnologia dei prodotti Gemini, costituita da resistenti strati multipli in 100% polipropilene (conforme alle normative EN 11607-1 e EN 868-2 sulla sterilizzazione), assicura una protezione di elevato livello contro fluidi e particelle.

## Versatili

I teli Gemini di Medline sono indicati per l'utilizzo in tutti i principali cicli di sterilizzazione; nel dettaglio:

### GEM0-GEM5

- Cicli di sterilizzazione a vapore con pre-vuoto (Autoclave)
- Cicli a vapore per gravità

### GEM1-GEM5

- Sterilizzazione con ossido di etilene (EO)
- Sterilizzazione con STERRAD®
- Sistema di sterilizzazione a bassa temperatura STERIS V-PRO®
- Sterilizzazione STERIZONE® VP4.

## Certificazione WRAP

I teli Gemini sono prodotti in uno stabilimento certificato Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP). Promuovere e rispettare i diritti lavorativi e umani lungo tutta la propria catena di approvvigionamento è parte del programma Ambiente, Sociale e Governance (ESG) di Medline. Informazioni più dettagliate dei 12 principi relativi al WRAP sono consultabili sul sito web: [www.wrapcompliance.org](http://www.wrapcompliance.org).



## Telo Singolo per Sterilizzazione Gemini

Il Telo Singolo per Sterilizzazione Gemini è una soluzione ideale da utilizzare nelle centrali di sterilizzazione che prevedono l'impiego di due fogli per il confezionamento di dispositivi medici o set di strumenti chirurgici.



	<b>GEMO</b> 40 gr	<b>GEM1</b> 47 gr	<b>GEM2</b> 54 gr	<b>GEM3</b> 61 gr	<b>GEM4</b> 71 gr	<b>GEM5</b> 75 gr
<b>46 x 46 cm</b>	GEM0118-EU 1.000 unità/confezione di vendita	GEM1118-EU 1.000 unità/confezione di vendita	GEM2118-EU 1.000 unità/confezione di vendita	GEM3118-EU 600 unità/confezione di vendita		
<b>61 x 61 cm</b>	GEM0124-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM1124-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM2124-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM3124-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM4124-EU 250 unità/confezione di vendita	
<b>76 x 76 cm</b>	GEM0130-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM1130-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM2130-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM3130-EU 200 unità/confezione di vendita	GEM4130-EU 250 unità/confezione di vendita	
<b>91 x 91 cm</b>	GEM0136-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM1136-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM2136-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM3136-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM4136-EU 150 unità/confezione di vendita	
<b>102 x 102 cm</b>	GEM0140-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM1140-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM2140-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM3140-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM4140-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM5140-EU 96 unità/confezione di vendita
<b>114 x 114 cm</b>					GEM4145-EU 100 unità/confezione di vendita	
<b>122 x 122 cm</b>	GEM0148-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM1148-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM2148-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM3148-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM4148-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM5148-EU 48 unità/confezione di vendita
<b>137 x 137 cm</b>	GEM0154-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM1154-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM2154-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM3154-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM4154-EU 50 unità/confezione di vendita	
<b>137 x 183 cm</b>	GEM0172-EU 100 unità/confezione di vendita					

## Telo per Sterilizzazione Gemini Interleaved

I Teli Gemini Interleaved, grazie alle loro particolari caratteristiche come la tecnologia multistrato e la differenziazione per colore, sono prodotti ideali per essere impiegati nelle centrali di sterilizzazione con processo di confezionamento sequenziale. Rappresentano infatti una soluzione in grado di combinare resistenza allo strappo e sicurezza, e sono indicati per l'utilizzo in tutti i principali cicli di sterilizzazione.



	<b>GEM1</b> 47 gr	<b>GEM2</b> 54 gr	<b>GEM3</b> 61 gr	<b>GEM4</b> 71 gr
<b>61 x 61 cm</b>	GEM1124INT-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM2124INT-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM3124INT-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM4124INT-EU 250 unità/confezione di vendita
<b>76 x 76 cm</b>	GEM1130INT-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM2130INT-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM3130INT-EU 200 unità/confezione di vendita	GEM4130INT-EU 250 unità/confezione di vendita
<b>91 x 91 cm</b>	GEM1136INT-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM2136INT-EU 300 unità/confezione di vendita	GEM3136INT-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM4136INT-EU 150 unità/confezione di vendita
<b>102 x 102 cm</b>	GEM1140INT-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM2140INT-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM3140INT-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM4140INT-EU 150 unità/confezione di vendita
<b>122 x 122 cm</b>	GEM1148INT-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM2148INT-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM3148INT-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM4148INT-EU 50 unità/confezione di vendita
<b>137 x 137 cm</b>			GEM3154INT-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM4154INT-EU 50 unità/confezione di vendita
<b>137 x 183 cm</b>				GEM4172INT-EU 50 unità/confezione di vendita



# Telo per Sterilizzazione Gemini Bonded

Il Telo Gemini Bonded può garantire elevati livelli di sicurezza durante i processi di sterilizzazione da voi prescelti. Un unico telo formato da due fogli saldati insieme, che assicurano una resistenza eccezionale e aumentano l'efficienza. Il doppio colore permette ai professionisti sanitari di individuare velocemente eventuali perforazioni, e rende estremamente semplice identificare i diversi set di strumenti chirurgici.



	<b>GEM0</b> 40 gr	<b>GEM1</b> 47 gr	<b>GEM2</b> 54 gr	<b>GEM3</b> 61 gr	<b>GEM4</b> 71 gr	<b>GEM5</b> 75 gr
<b>46 x 46 cm</b>	GEM0118T-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM1118T-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM2118T-EU 500 unità/confezione di vendita	GEM3118T-EU 300 unità/confezione di vendita		
<b>61 x 61 cm</b>	GEM0124T-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM1124T-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM2124T-EU 250 unità/confezione di vendita	GEM3124T-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM4124T-EU 100 unità/confezione di vendita	
<b>76 x 76 cm</b>	GEM0130T-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM1130T-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM2130T-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM3130T-EU 75 unità/confezione di vendita	GEM4130T-EU 100 unità/confezione di vendita	
<b>91 x 91 cm</b>	GEM0136T-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM1136T-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM2136T-EU 150 unità/confezione di vendita	GEM3136T-EU 75 unità/confezione di vendita	GEM4136T-EU 75 unità/confezione di vendita	GEM5136T-EU 72 unità/confezione di vendita
<b>102 x 102 cm</b>	GEM0140T-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM1140T-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM2140T-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM3140T-EU 75 unità/confezione di vendita	GEM4140T-EU 75 unità/confezione di vendita	GEM5140T-EU 48 unità/confezione di vendita
<b>114 x 114 cm</b>		GEM1145T-EU 100 unità/confezione di vendita		GEM3145T-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM4145T-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM5145T-EU 48 unità/confezione di vendita
<b>122 x 122 cm</b>	GEM0148T-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM1148T-EU 100 unità/confezione di vendita	GEM2148T-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM3148T-EU 30 unità/confezione di vendita	GEM4148T-EU 30 unità/confezione di vendita	GEM5148T-EU 24 unità/confezione di vendita
<b>137 x 137 cm</b>	GEM0154T-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM1154T-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM2154T-EU 50 unità/confezione di vendita	GEM3154T-EU 30 unità/confezione di vendita	GEM4154T-EU 30 unità/confezione di vendita	GEM5154T-EU 24 unità/confezione di vendita
<b>137 x 183 cm</b>				GEM3172T-EU 30 unità/confezione di vendita	GEM4172T-EU 30 unità/confezione di vendita	


## Tabella delle Grammature e dei Pesì

Per abbinare il peso del set di dispositivi medici o di strumenti chirurgici da avvolgere con il telo della linea GEM più adeguato alle proprie esigenze.

<b>Linee GEM di Medline</b>	<b>Peso Massimo Consigliato per Set secondo le IFU Medline</b>
Grammatura Super Leggera <b>GEM0XXX</b>	0 – 2,7 kg
Grammatura Leggera <b>GEM1XXX</b>	2,7 kg
Grammatura Standard <b>GEM2XXX</b>	4 kg
Grammatura Media <b>GEM3XXX</b>	5,9 kg
Grammatura Pesante <b>GEM4XXX</b>	7,7 kg
Grammatura Super Pesante <b>GEM5XXX</b>	11,3 kg

I pesi massimi indicati si riferiscono a processi di sterilizzazione che prevedono l'utilizzo di vapore con pre-vuoto, vapore per gravità, e Ossido di Etilene (EO). Per gli altri cicli di sterilizzazione, vi invitiamo a consultare le IFU.

**Il Telo per  
Sterilizzazione Gemini  
Bonded è disponibile**  
in una vasta gamma di  
misure e grammature,  
per ogni tipologia di  
confezionamento.

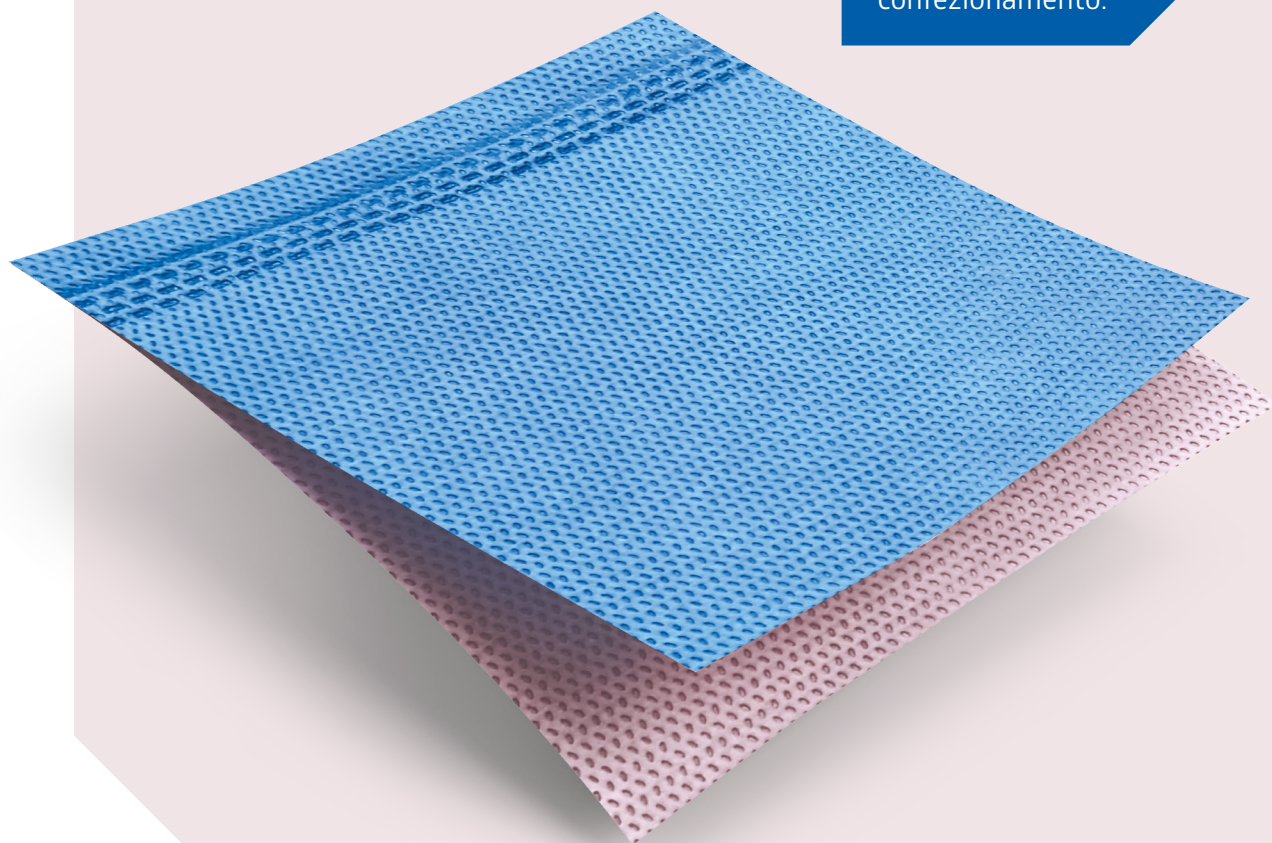



# Vassoi per Sterilizzazione

## Vassoi in rete metallica in acciaio inossidabile

Potete scegliere la misura che più si adatta alla maggior parte dei vostri set di strumenti chirurgici.

### Specifici per contenitori a metà grandezza

Codice Articolo	Misure	Unità/Confezione di vendita
SCD 333	24,5 x 24,5 x 3 cm	Articolo singolo
SCD 336	24,5 x 24,5 x 6 cm	Articolo singolo
SCD 3310	24,5 x 24,5 x 10 cm	Articolo singolo

### Specifici per contenitori a grandezza 'tre quarti'

Codice Articolo	Misure	Unità/Confezione di vendita
SCD 433	40 x 25 x 3 cm	Articolo singolo
SCD 436	40 x 25 x 6 cm	Articolo singolo
SCD 4310	40 x 25 x 10 cm	Articolo singolo



### Specifici per contenitori a grandezza intera


Codice Articolo	Misure	Unità/Confezione di vendita
SCD 633	51,5 x 24,5 x 3 cm	Articolo singolo
SCD 636	51,5 x 24,5 x 6 cm	Articolo singolo
SCD 6310	51,5 x 24,5 x 10 cm	Articolo singolo
SCDD 636	48,5 x 24,5 x 6 cm	Articolo singolo

# Accessori per i Contenitori per Sterilizzazione

## Tappetini in Silicone

Questi tappetini in silicone si adattano perfettamente alle misure dei contenitori Medline, e possono avvolgere e proteggere la strumentazione chirurgica fragile durante il processo di sterilizzazione.

Codice Articolo	Misure	Unità/Confezione di vendita
MDNSNS315	12,7 x 24,1 cm	Articolo singolo
MDNSNS335	24,1 x 24,1 cm	Articolo singolo
MDNSNS435	39,4 x 24,1 cm	Articolo singolo
MDNSNS635	47 x 24,1 cm	Articolo singolo

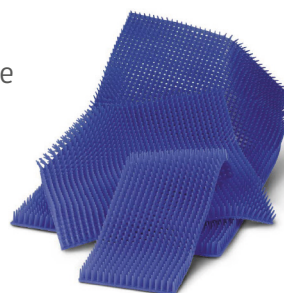

## Cartoncini con Indicatore di Processo

Grazie alle loro particolari dimensioni possono essere inseriti nel telaio di supporto esterno presente sulla base dei contenitori Steriset®

Codice Articolo	Descrizione	Unità/Confezione di vendita
DPCIS13	Linguetta posizionata sul lato destro	500 unità/confezione di vendita
DPCIS02	Linguetta posizionata sulla parte superiore	500 unità/confezione di vendita



# Accessori per la Sterilizzazione

## Copertura Antipolvere

Questa copertura, disponibile in più misure, è una vera e propria busta in grado di proteggere i set di strumenti chirurgici sterilizzati dall'eventuale contaminazione a opera di particelle esterne, polvere compresa. È realizzata con un resistente polietilene di elevata qualità, e presenta una chiusura auto-sigillante.


Codice Articolo	Misure	Unità/Confezione di vendita
MDS100815	20 x 30 cm	1.000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



## Piastra di Alluminio per Sterilizzazione

La Piastra di Alluminio per Sterilizzazione è una resistente lamina di alluminio riutilizzabile che può essere posta sotto i vassoi o i cestini di sterilizzazione per dissipare il calore, favorendo la perdita dell'acqua presente nell'umidità che si viene a formare durante il processo di sterilizzazione a vapore.

Codice Articolo	Misure	Unità/Confezione di vendita
LCLC1850CE	52 x 24 cm	Articolo singolo
LCLC1851CE	48 x 24 cm	Articolo singolo

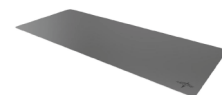

## Foglio di Carta per Vassoio da Sterilizzazione

Questi specifici fogli di carta facilitano l'assorbimento della condensa che si forma durante il processo di sterilizzazione.


Codice Articolo	Misure	Unità/Confezione di vendita
TLC009	30 x 30 cm	2.000
TLC010	30 x 45 cm	1.000
TLC011	30 x 60 cm	1.000



## Vassoio di Trasporto

- Realizzato in plastica rigida con perforazioni per consentire il flusso d'aria
- Evita che lo strumentario chirurgico venga riposto senza alcun supporto sulle scaffalature metalliche taglienti
- Protegge i set di strumenti chirurgici già sottoposti al confezionamento da strappi e lacerazioni durante la sterilizzazione, lo stoccaggio e il trasporto


Codice Articolo	Misure	Unità/Confezione di vendita
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8

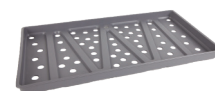

## Matassa di Tubo in Silicone

Questo tubo non sterile, opportunamente tagliato, può essere utilizzato per proteggere le punte aguzze degli strumenti chirurgici durante lo stoccaggio, la movimentazione e la sterilizzazione.

Codice Articolo	Diametro Interno (ID), mm	Diametro Esterno (OD), mm	Unità/Confezione di vendita
510204	2	4	16
510305	3	5	16
510406	4	6	16
510407	4	7	10
510508	5	8	7
510509	5	9	7
510609	6	9	4
510612	6	12	4
510710	7	10	4
510812	8	12	4
511014	10	14	4

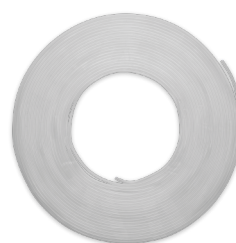


Il tubo ha una lunghezza di 15 m (lunghezza dell'intera matassa) ed è semplice da tagliare nella misura desiderata, per soddisfare le diverse esigenze cliniche



# Abbigliamento Protettivo

Nell'ambiente sanitario sono presenti moltissime sostanze pericolose e numerosi microrganismi. L'abbigliamento protettivo di Medline assicura un'efficace barriera nei confronti di tali elementi, oltre a garantire i massimi livelli di sicurezza. Ogni articolo è stato specificamente progettato per offrire al contempo elevata protezione e ottimo comfort.

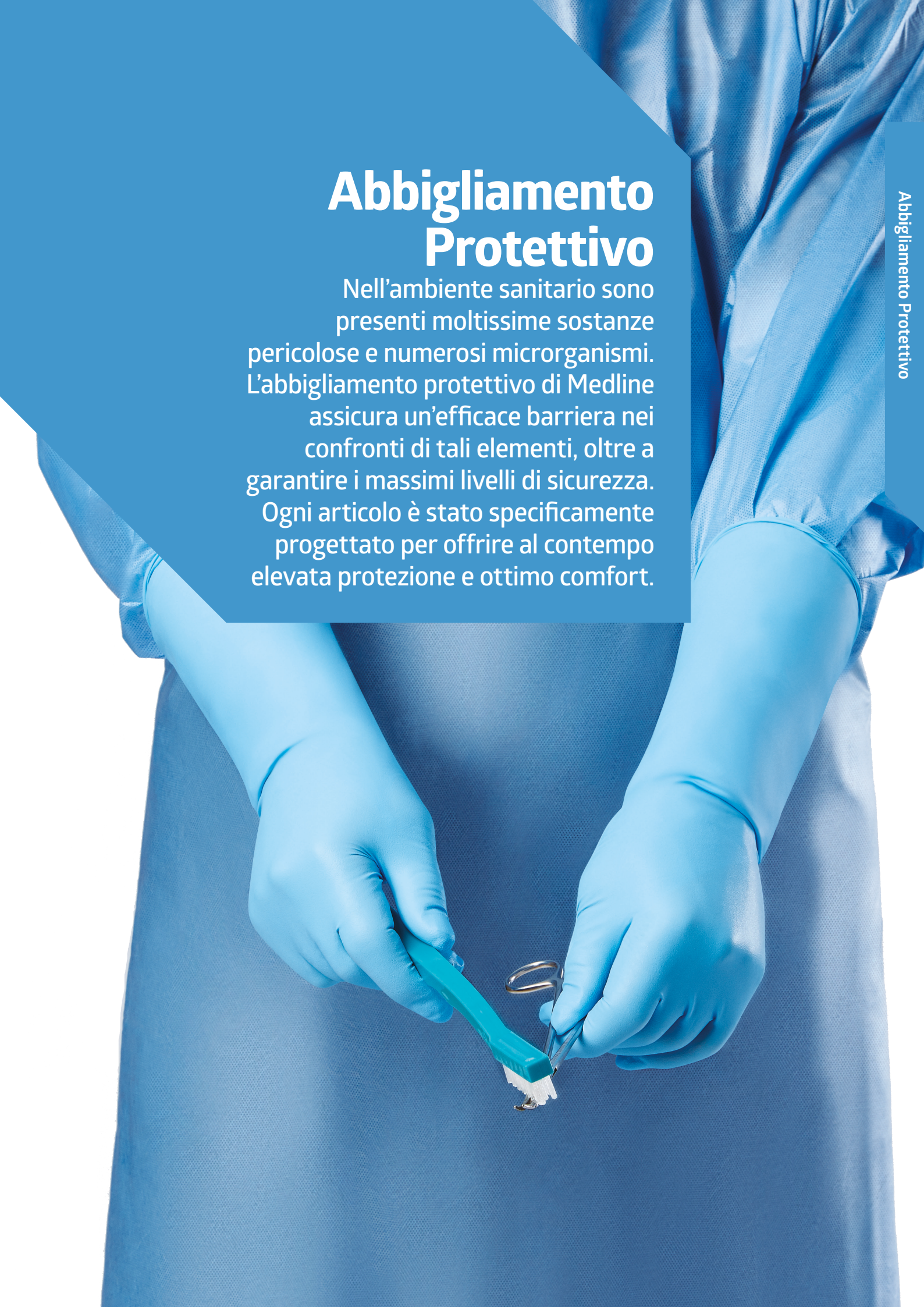

# Guanti da Esame

Dotati di polsino realizzato con la tecnologia **Opti Cuff** che ne evita l'arrotolamento

## Guanti da Esame in Nitrile SensiCare® Pro 400 mm con Polsino Lungo

I nostri Guanti da Esame in Nitrile SensiCare® Pro garantiscono eccezionali livelli di protezione, vestibilità e prestazioni in tutte le diverse situazioni. Sono specificamente progettati per il personale sanitario che utilizza quotidianamente sostanze chimiche aggressive durante l'esecuzione di attività lavorative e procedure di tipo generico come, ad esempio, la pulizia, la decontaminazione e/o la disinfezione degli strumenti chirurgici.

- Polsini che si estendono fino a 400 mm di lunghezza e che forniscono una protezione extra coprendo le maniche per la quasi totalità
- Interamente micro ruvidi per un'eccellente presa e una migliore sensibilità tattile
- Buon indice di prestazione nei test di resistenza alla perforazione
- Testati per gli agenti chemioterapici
- Certificati come DPI per una copertura di livello superiore



Codice Articolo	Descrizione	Unità/Confezione di vendita
PRO400XS	Guanti da Esame in Nitrile SensiCare Pro 400 mm, taglia x-small	50/scatola, 10 scatole/confezione
PRO400S	Guanti da Esame in Nitrile SensiCare Pro 400 mm, taglia small	50/scatola, 10 scatole/confezione
PRO400M	Guanti da Esame in Nitrile SensiCare Pro 400 mm, taglia medium	50/scatola, 10 scatole/confezione
PRO400L	Guanti da Esame in Nitrile SensiCare Pro 400 mm, taglia large	50/scatola, 10 scatole/confezione
PRO400XL	Guanti da Esame in Nitrile SensiCare Pro 400 mm, taglia x-large	50/scatola, 10 scatole/confezione

EN ISO 374-5-2016	Risultato del test
Protezione da batteri e funghi	Superato
Protezione contro i virus	Superato



## Guanti da Esame SensiCare® in Nitrile con Polsino Lungo, ad elevata sensibilità tattile

- Protezione e resistenza grazie al nitrile
- Polsino lungo per una maggiore protezione
- Certificati come DPI per una copertura di livello superiore
- Offrono lo stesso livello di comfort di un guanto di lattice

Codice Articolo	Descrizione	Unità/Confezione di vendita
MDSEXTXS	Guanti da Esame in Nitrile SensiCare con Polsino Lungo, taglia x-small	100/scatola, 10 scatole/confezione
MDSEXTS	Guanti da Esame in Nitrile SensiCare con Polsino Lungo, taglia small	100/scatola, 10 scatole/confezione
MDSEXTM	Guanti da Esame in Nitrile SensiCare con Polsino Lungo, taglia medium	100/scatola, 10 scatole/confezione
MDSEXTL	Guanti da Esame in Nitrile SensiCare con Polsino Lungo, taglia large	100/scatola, 10 scatole/confezione
MDSEXTXL	Guanti da Esame in Nitrile SensiCare con Polsino Lungo, taglia x-large	90/scatola, 10 scatole/confezione






# Camici impervi: protezione garantita e massima affidabilità


L'esperienza e la formazione del vostro personale sanitario lo porta a scegliere ciò che è opportuno e necessario per proteggere se stesso e i propri pazienti, anche se, talvolta, la mancanza di tempo e il verificarsi di problematiche possono far rinunciare a un prodotto funzionale e sicuro. Questi specifici camici di Medline si indossano e si tolgono velocemente e con estrema facilità, e sono in grado di offrire sia un'elevata protezione che un ottimo comfort.

**Facili da indossare. Protezione eccezionale. Comodi e traspiranti.**

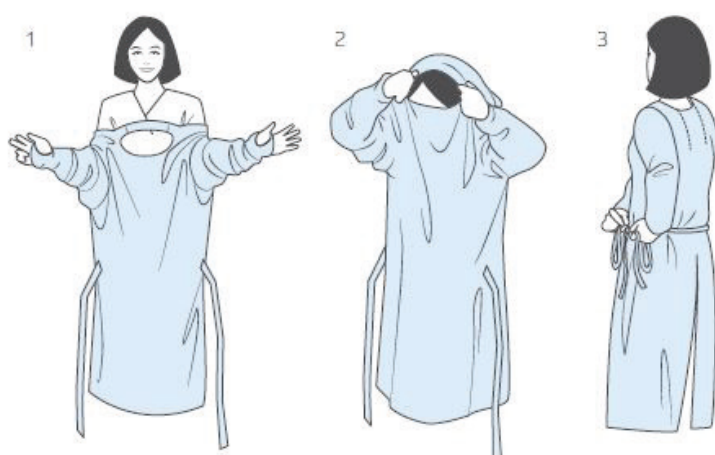

## Come indossare il camice

1. Per prima cosa infilare le braccia nelle maniche del camice, prestando attenzione a inserire entrambi i pollici nell'apposito passante.
2. Indossare il camice dalla testa.
3. Allacciare il camice sul retro, all'altezza della vita.

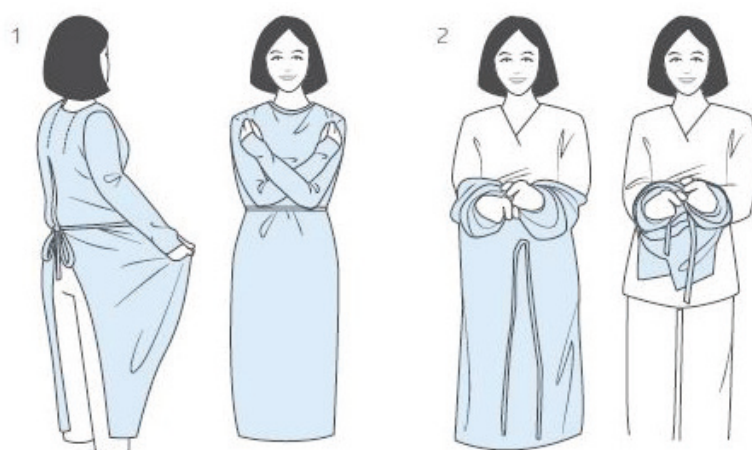

## Come togliersi il camice

1. Rompere i lacci annodati in vita semplicemente tirandoli.
2. Incrociare le braccia all'altezza del petto, afferrare il camice e sfilarlo via.
3. Continuare la manovra lungo tutto il corpo, arrotolando il camice su se stesso. Gettarlo via una volta conclusa questa operazione.

**Poiché privo di lacci da annodare al collo, si riducono le probabilità di contaminazione crociata fra guanti e capelli o fra guanti e parte posteriore del collo.**

## Camici di protezione impervi

Ideali per proteggere l'operatore sanitario dal contatto prolungato con acqua e con detergenti; le linee di prodotti CRIE404xC e CRIE500x sono state testate ai sensi della norma EN 16523-1 contro la permeazione di sostanze disinfettanti contenenti l'agente glucoprotamin, come ad esempio Incidin Plus

### Camice di protezione bilaminato impervio a grammatura leggera

- Lacci in vita e al collo
- Polsini in maglia

Codice Articolo	Taglia	Colore	Unità/Confezione di vendita
CRIE4040C	L	Giallo	10/busta, 100/confezione
CRIE4041C	XL	Giallo	10/busta, 100/confezione



CRIE4040C

### Camici di protezione impervi in polietilene

- Design 'Over the head': si indossano passandoli dalla testa
- Polsini dotati di passante per il pollice
- Si presentano piegati e confezionati singolarmente all'interno di un dispenser box

Codice Articolo	Taglia	Colore	Unità/Confezione di vendita
CRIE5010	L	Blu	1/busta, 15/dispenser box, 75/confezione
CRIE5011	XL	Blu	1/busta, 15/dispenser box, 75/confezione



CRIE5010

### Grembiule monouso in polietilene

- Può essere indossato sopra camici o divise monouso non impermeabili da coloro che desiderano una protezione dai fluidi di livello superiore a un prezzo davvero conveniente

Codice Articolo	Descrizione	Unità/Confezione di vendita
NONE24274W	A grammatura media, 71,1 x 116,8 cm, confezionato singolarmente, disponibile in un dispenser box	50/dispenser box, 250/confezione



NONE24274W

# Calzature

## Copriscarpe

I copriscarpe sono progettati specificamente per prevenire la contaminazione ambientale e abbattere la trasmissione di microrganismi. Sono realizzati in polietilene o polipropilene, e alcuni modelli dispongono di una protezione aggiuntiva contro i fluidi.

Codice Articolo	Misura	Materiale	Caratteristiche	Unità/Confezione di vendita
CRIE2010	Taglia unica	Film in polietilene	Impervi	100/busta, 1.000/confezione
CRIE2020	Taglia unica	Film in polietilene e polipropilene (SPP)	Impervi	100/busta, 200/confezione



CRIE2010



CRIE2020

## Coprastivali

La linea di coprastivali Medline garantisce una ottima copertura e una protezione dai fluidi di livello superiore. Questi prodotti avvolgono la calzatura e la gamba fino al ginocchio, vengono offerti in una pratica taglia unica, e sono dotati di una suola micro ruvida. Intorno alla caviglia presentano inoltre una chiusura in velcro o, in alternativa, una fascia elastica, caratteristica che li mantiene ben fermi nella corretta posizione e assicura al contempo un'efficace protezione.

Codice Articolo	Misura	Caratteristiche	Unità/Confezione di vendita
NONE27143XL	Taglia unica per differenti misure	Impermeabili ai fluidi	50/scatola, 150/confezione
NONE27144	Taglia unica per differenti misure	Impervi	50/scatola, 150/confezione

### NONE27143XL

- Realizzati con materiale impermeabile ai fluidi fino alla caviglia
- Ottima protezione dai fluidi nella parte sottostante la caviglia
- Cuciture termosaldate all'altezza del piede



NONE27143XL

### NONE27144

- Realizzati in polipropilene, con rivestimento impervio in polietilene (PE)
- Ottima protezione dai fluidi nella parte inferiore
- Chiusura in velcro che permette di regolarne la vestibilità



NONE27144



# Un innovativo packaging permette di scegliere con semplicità il tipo giusto di mascherina

Le confezioni Medline sono state studiate e realizzate per permettere al vostro personale di individuare con immediatezza molte importanti caratteristiche delle nostre mascherine.

## Confezione con codice colore

**Viola:** Mascherine resistenti ai fluidi di Tipo IIR

**Verde:** Mascherine chirurgiche di Tipo II

**Arancione:** Mascherine procedurali di Tipo II

**Blu:** Mascherine respiratorie

**Pratiche perforazioni che rendono possibile l'apertura con un solo dito**

Per un facile prelievo delle mascherine



## Classificazione del prodotto

Per una selezione corretta e una maggiore tranquillità durante la scelta

# Protezione del viso

## Mascherina resistente ai fluidi con visiera



NONE27410EL

Dotata di visiera e di elastici per le orecchie, protegge in maniera efficace dagli schizzi e dai fluidi.

- Visiera in poliestere ottico trasparente
- Con striscia in polietilene espanso anti-appannamento

Codice Articolo	Descrizione	Unità/Confezione di vendita
NONE27410EL	Mascherina resistente ai fluidi con elastici per le orecchie e visiera	25/scatola, 4 unità/confezione di vendita

## Mascherina resistente ai fluidi con visiera e lacci



NONE27710

Dotata di visiera e lacci, protegge in maniera efficace dagli schizzi e dai fluidi.

- Visiera in poliestere ottico trasparente
- Con striscia in polietilene espanso anti-appannamento

Codice Articolo	Descrizione	Unità/Confezione di vendita
NONE27710	Mascherina resistente ai fluidi modello Max X con visiera e lacci	25/scatola, 4 unità/confezione di vendita
NONE27410	Mascherina resistente ai fluidi con elastici per le orecchie e visiera	25/scatola, 4 unità/confezione di vendita

## Mascherina resistente ai fluidi con elastici per le orecchie



NONE27412EL

- Con striscia in polietilene espanso anti-appannamento
- Può essere indossata unitamente a una protezione aggiuntiva contro gli schizzi, come ad esempio una visiera o un paio di occhiali protettivi

Codice Articolo	Descrizione	Unità/Confezione di vendita
NONE27412EL	Mascherina resistente ai fluidi con elastici per le orecchie	25/scatola, 4 unità/confezione di vendita

## Lenti di ricambio monouso e relativi supporti




NONFRAME

Codice Articolo	Descrizione	Unità/Confezione di vendita
NONFRAME	Supporti riutilizzabili per lenti, disponibili in diversi colori	100 unità/confezione di vendita

Codice Articolo	Descrizione	Unità/Confezione di vendita
NONLENS	Lenti di ricambio monouso	250 unità/confezione di vendita

## Visiera

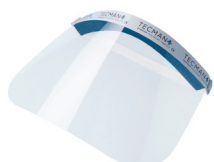

NONEFS500

- Con striscia in polietilene espanso anti-appannamento
- Fascia elastica girotesta in spugna
- Priva di lattice di gomma naturale

Codice Articolo	Descrizione	Unità/Confezione di vendita
NONEFS500	Visiera monouso a tutto schermo con fascia elastica in spugna	96 unità/confezione di vendita



## Sicurezza a livello dei Pavimenti

Lavorare in ambienti caratterizzati dalla presenza di acqua significa essere continuamente esposti a numerosi pericoli, come ad esempio l'eventualità di scivolare, inciampare e cadere. All'interno delle centrali di sterilizzazione, specialmente a livello delle aree di decontaminazione, si possono accumulare umidità e liquidi, con seri rischi a carico del personale sanitario.




# Come migliorare il livello di sicurezza all'interno delle vostre Centrali di Sterilizzazione (CSSD)

Le soluzioni Medline dedicate alla sicurezza relativa ai pavimenti risolvono le problematiche associate al pericolo di caduta, permettendo una rimozione dei fluidi estremamente rapida e priva di rischi.

## Tappetino Liqui-Loc™



- Può essere smaltito con estrema facilità, a garanzia di igiene e sicurezza
- Grazie al suo strato inferiore impervio e anti scivolo, può essere posizionato sotto i piedi mentre si eseguono procedure, o essere utilizzato per appoggiare strumentazione o apparecchiature
- È anti goccia e realizzato con un materiale assorbente in grado di trattenere al suo interno i fluidi

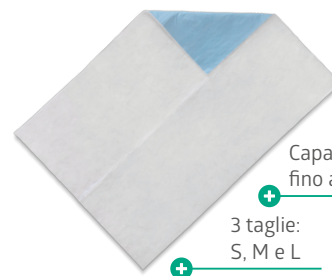

Capacità assorbente fino a 3,9 l

3 taglie: S, M e L

Codice Articolo	Descrizione	Misure	Capacità assorbente	Proprietà anti scivolo	Unità/Confezione di vendita
ORLLPBS	Liqui-Loc - misura Small	71,1 x 101,6 cm	2,2 l	Si	13 unità/confezione di vendita
ORLLPBM	Liqui-Loc - misura Medium	71,1 x 142,2 cm	3,0 l	Si	10 unità/confezione di vendita
ORLLPBL	Liqui-Loc - misura Large	71,1 x 182,8 cm	3,9 l	Si	8 unità/confezione di vendita

## Tappetino con Doppio Strato Assorbente



- Migliora l'igiene grazie al suo pad a elevata assorbenza
- Velocizza la fase di pulizia poiché in grado di incorporare e trattenere al suo interno i fluidi che cadono a terra e si spargono sul pavimento
- Non può essere posizionato sotto i piedi



Capacità assorbente fino a 7 l

Disponibile in un solo modello

Codice Articolo	Descrizione	Misure	Capacità assorbente	Proprietà anti scivolo	Unità/Confezione di vendita
ORDSEMAT	Tappetino con doppio strato assorbente	75 x 38 cm	7 l	No	50 unità/confezione di vendita

**Per ulteriori informazioni**, vi invitiamo a contattare l'account manager  
Medline di riferimento o visitare il nostro sito: [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)



**Medline International Italy s.r.l. Unipersonale**

Piazzale della Resistenza 3  
50018 Scandicci  
Firenze  
Italia  
Tel.: +39 55 776 65 11

[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)  
[it-customerservice@medline.com](mailto:it-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**

1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA  
1204 Ginevra  
Svizzera  
Tel. +41 848 244 433

[www.medline.eu/ch-it](http://www.medline.eu/ch-it)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

I teli Gemini sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati a essere utilizzati da personale sanitario.



I vassoi di trasporto sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati a essere utilizzati da personale sanitario.



I fogli di carta per vassoio da sterilizzazione sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati a essere utilizzati da personale sanitario.



Le piastre di alluminio per sterilizzazione sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati a essere utilizzati dagli operatori sanitari.



Le matasse di tubo in silicone sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati a essere utilizzati da personale sanitario.



I guanti da esame Medline sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati a essere utilizzati da personale sanitario.



I copriscarpe e i copristivali sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati a essere utilizzati da personale sanitario.



Gli articoli identificati dai codici NONE27xxx sono dispositivi medici di classe I non sterili destinati a essere utilizzati da personale sanitario.  
Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.



Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2024 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1111\_IT 08/2024