



Behandel. Fixeer. Bescherm.

Centraal veneuze katheters en perifere infusen kunnen een bron van ongemak zijn voor patiënten, maar ook een toegangspoort voor bacteriën. Onze Centurion verbanden en fixatiesystemen helpen lijnen comfortabel op hun plaats te houden, terwijl ze een bacteriële barrière vormen en het risico op ziekenhuisinfecties verminderen. Met kenmerken zoals gemakkelijk aanbrengen en verwijderen, verschillende maten, transparante kijkvensters en lichaamsconforme ontwerpen met niet-irriterende kleefstoffen, maakt ons uitgebreide assortiment kathetermanagement voor iedereen comfortabeler en efficiënter.

SorbaView SHIELD®

3

Fixatie producten

10

SorbaView SHIELD®


Eén-staps katheter- bevestigingssysteem

SorbaView SHIELD biedt de veiligheid van SorbaView Dressing, met het extra voordeel van het meest veilige geïntegreerde katheterstabilisatieapparaat op de markt. Dit meerlaagse verband biedt een comfortabele, ademende barrière tegen bacteriën en andere verontreinigingen van buitenaf, terwijl de ingebouwde fixatie bestand is tegen rukken in verschillende richtingen en de katheter veilig op zijn plaats houdt.

SorbaView SHIELD

SorbaView Verband

- Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen, met lijm die niet-irriterend, niet-sensibiliserend en niet-cytotoxisch is
- Blijft veilig op zijn plaats gedurende lange draagperioden die voldoen aan de ziekenhuisprotocollen voor lijnbeheer (tot 7 dagen voor centrale lijnen, en tot 96 uur of tot klinisch geïndiceerd om te voldoen aan de INS-richtlijnen voor praktijkrichtlijnen voor perifere katheters¹⁾)
- Creëert een occlusieve barrière tegen externe bacteriën, virussen en andere contaminanten, maar niet tegen vocht damp of andere normale gassen

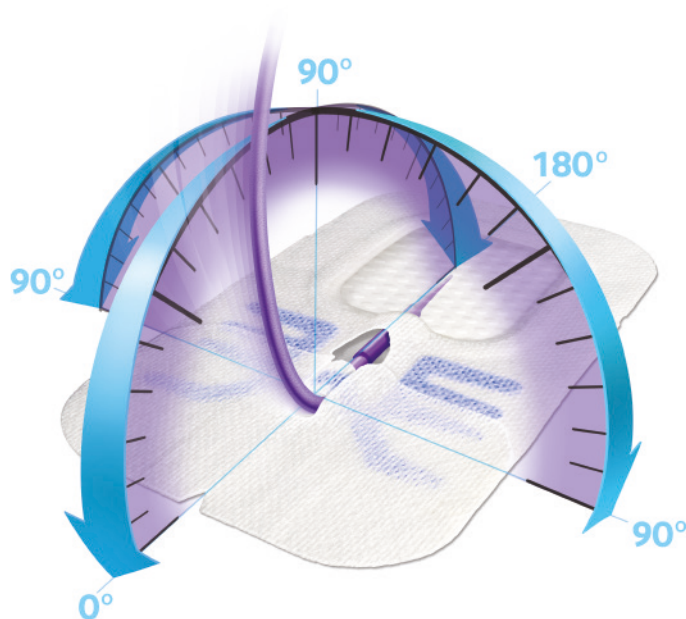

SorbaView SHIELD biedt weerstand tegen trekkracht in elke richting. De katheter wordt op zijn plaats gehouden tijdens transfers van de patiënt, het uittrekken van kleding en bewegingen in en uit bed.

Fixatie

- Vermindert het aantal ongeplande herstarts voor infusen en complicaties zoals flebitis, extravasatie en infiltratie, en vermindert het risico op bloedbaaninfecties door intraveneuze infuuskatheters voor alle veneuze katheters
- Er wordt een zorgvuldigheidsnorm vastgesteld en inconsequente bevestigingsmethoden worden verwijderd
- Biedt effectieve katheterfixatie als onderdeel van de normale verbandprocedure zonder dat extra stappen nodig zijn
- Geen extra kosten voor secundaire bevestigingsmiddelen

Zachte stof die zich comfortabel aanpast aan de bewegingen van de huid

Voorgevormde randen helpen voorkomen dat het verband loslaat

Folie zorgt voor barrière tegen micro-organismen

Absorberend kompres voert vocht af

Groot venster voor grondige beoordeling van de inbrengplaats


SHIELD-technologie garandeert een stabilisatiesysteem dat voorkomt dat trekkrachten de katheter verplaatsen

Diepe inkepingen helpen de slang op zijn plaats te houden

Versterkte 'kraag' houdt leidingen stevig op hun plaats

Secundaire sluiting verhoogt de stabiliteit

Inkepingen en perforaties verhogen de veelzijdigheid en maken het verwijderen gemakkelijk

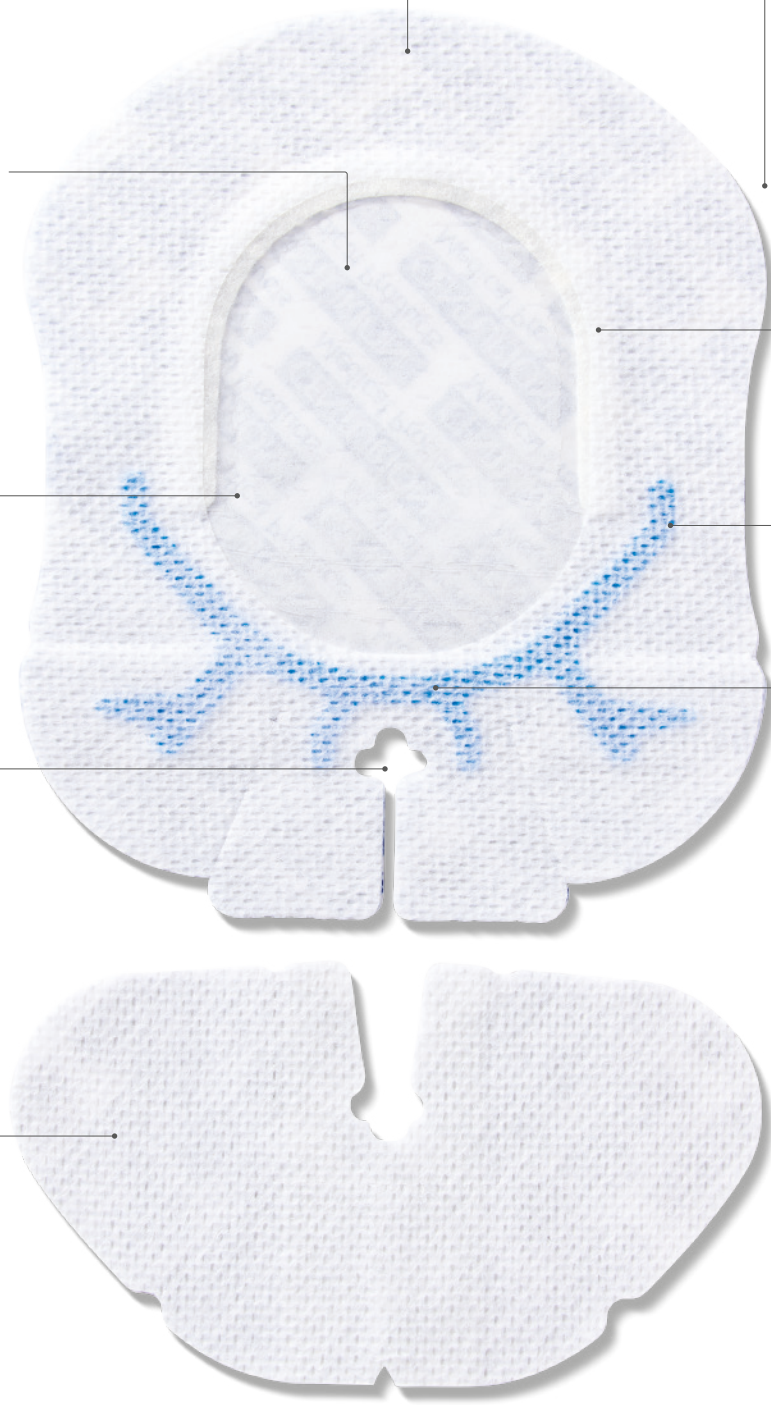

SorbaView SHIELD



Large

Artikelnummer	Omschrijving	Aanbevolen gebruik
SV37UDT	9,5 cm x 16 cm Geen kleefvrije zone	PICC, geïmplanteerde poort, subclavisch, femoraal, driveline
SV37FL24XT	9,5 cm x 16 cm Inclusief 5 cm x 60 cm tape met om de 15 cm perforaties	Epiduraal



Medium

Artikelnummer	Omschrijving	Aanbevolen gebruik
SV353UDT	9,5 cm x 14 cm Geen kleefvrije zone	PICC, geïmplanteerde poort, subclavisch, femoraal, driveline
SV353AFXT	9,5 cm x 14 cm Inclusief kleefvrije zone in venster	PICC, geïmplanteerde poort, subclavisch, femoraal, driveline (alleen 2L)
SV353UDTHG	9,5 cm x 14 cm Inclusief HubGuard®	PICC



Gevormd

Artikelnummer	Omschrijving	Aanbevolen gebruik
SV430UDT	9,5 cm x 12 cm Geen kleefvrije zone	PICC, subclavian, jugular, tunnelled, dialyse
SV430AFXT	9,5 cm x 12 cm Inclusief kleefvrije zone in venster	



Ovaal

Artikelnummer	Omschrijving	Aanbevolen gebruik
SV733UDT	12 cm x 15 cm Geen kleefvrije zone	PICC, geïmplanteerde poort
SV733AFXT	12 cm x 15 cm Inclusief kleefvrije zone in venster	





Small

Artikelnummer	Omschrijving	Aanbevolen gebruik
SV254UDT	6 cm x 10 cm Geen kleefvrije zone	Pediatisch, arterieel, perifeer IV, geïmplanteerde poort, subclavisch, getunneld (Broviac)
SV254AFX	6 cm x 10 cm Inclusief kleefvrije zone in venster	



Perifeer

Artikelnummer	Omschrijving	Aanbevolen gebruik
SV233UDT	6,7 cm x 9 cm Geen kleefvrije zone	Pediatisch, arterieel, perifere katheter, getunneld (Broviac)
SV233DBSXT	6,7 cm x 9 cm Inclusief HubGuard	



Micro

Artikelnummer	Omschrijving	Aanbevolen gebruik
SV226UDT	5,7 cm x 6,6 cm Geen kleefvrije zone	Pediatisch, arterieel, perifeer IV, subclavisch



Nano

Artikelnummer	Omschrijving	Aanbevolen gebruik
SV118UDT	5 cm x 6,4 cm Geen kleefvrije zone	Pediatisch





SorbaView Verbandproducten

Verband van topkwaliteit

Het gepatenteerde SorbaView is ontworpen om overtollig vocht af te voeren, 'ademt' als de huid en houdt bacteriën buiten. Ons verband hoeft minder vaak verwisseld te worden en is sneller en gemakkelijker aan te brengen dan andere verbanden

SorbaView stelt de norm voor uitmuntendheid in katheterplaatsbeheer.

Stof beweegt met de huid mee in elke richting

Zachte, flexibele stof beweegt en vormt zich goed naar de huid, met een ademende afsluiting.

Barrière tegen verontreinigingen en vloeistoffen


De hoge mate van vochtdoorlatendheid van de folie beschermt door een occlusieve, ademende barrière te creëren tegen verontreinigingen en vloeistoffen van microniveau.

Het kompres voert vocht af van de insteekplaats

Het niet-klevende kompres onder de folie is pluisvrij en sterk absorberend, en helpt de katheteruitgangszone droog te houden door vocht af te voeren. Het kompres voorkomt dat vocht de buitenranden van het verband bereikt, zodat het verband intact blijft.

Lijm houdt gedurende lange tijd stevig vast

De kleeflaag is aangebracht in een uniek patroon waardoor het verband ademend is en gedurende langere perioden intact blijft. De lijm is niet-irriterend, niet-sensibiliserend en niet-cytotoxisch.

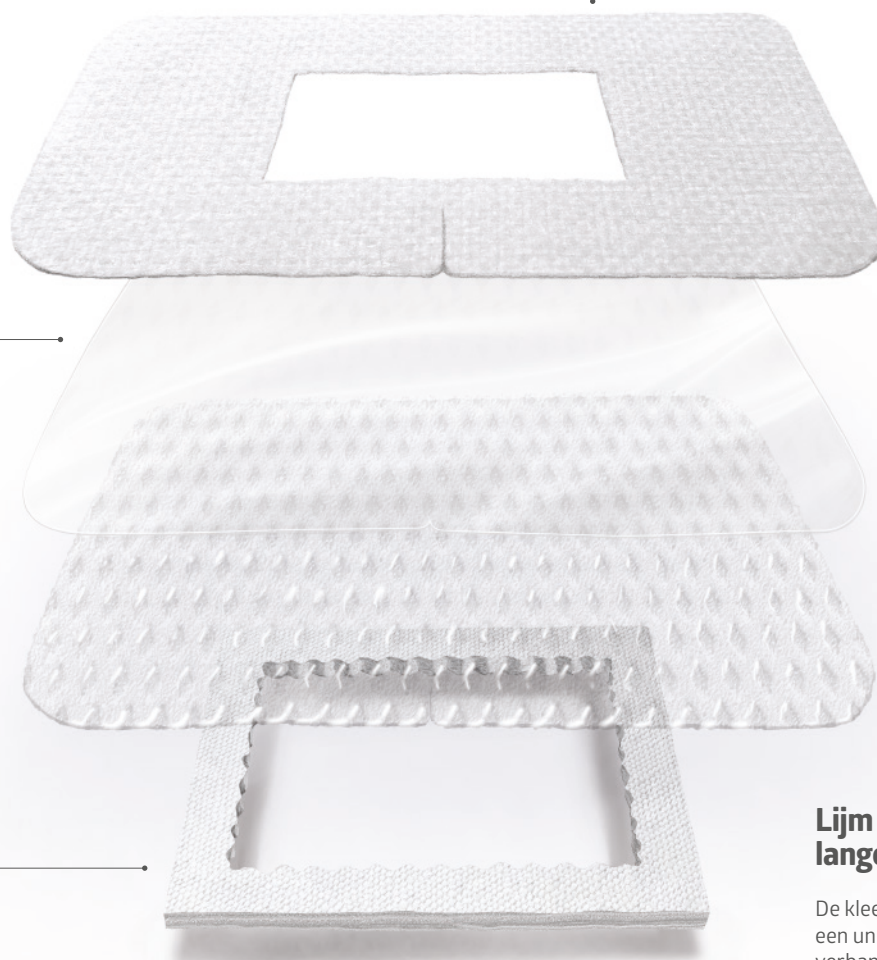



Fixatie


Gefixeerd voor comfort en veiligheid

Of u nu een katheter vastzet of beschermt tegen het losraken van een katheter, Centurion bevestigingsmiddelen zijn ontworpen voor gemakkelijk gebruik en zijn comfortabel en veilig voor patiënten.

- **Patiëntvriendelijke kleefstof** is zacht en blijft op zijn plaats gedurende lange draagtijd
- **Blijft stevig op zijn plaats**, zodat de patiënt gemakkelijk kan bewegen
- **Niet-irriterend** de lijm is niet-sensibiliserend en niet-cytotoxisch
- **Makkelijk in gebruik**; eenvoudige plaatsing en verwijdering

HubGuard katheterfixatie

- Verbetert de stabiliteit van de katheter, wat bijdraagt tot minder trekkrachten, loslating en ongeplande herstarten van het infuus
- Dankzij het schuim met kleeflaag is er geen tape meer nodig onder het verband; het kussen beschermt de huid en biedt comfort tegen starre katheterhubs
- Blijft 72 uur op zijn plaats of tot klinische indicatie voor perifere plaatsing, en 7 dagen voor veneuze katheters, afhankelijk van de plaats en het ziekenhuisbeleid
- Voldoet aan de INS Richtlijnen voor katheterstabilisatie
- Bevat geen natuurrubberlatex

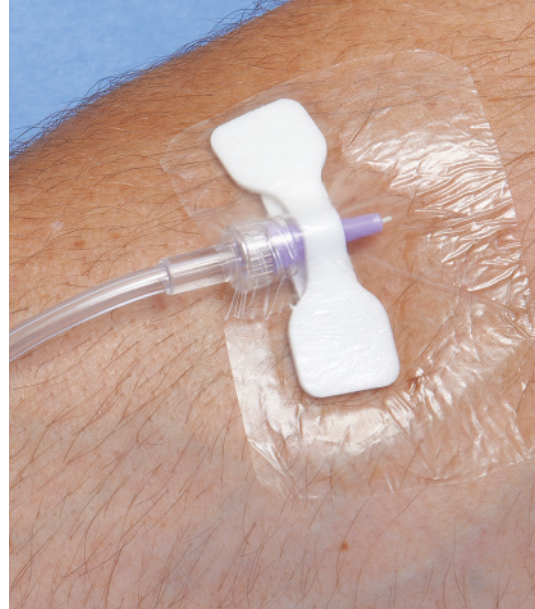

Aanbevolen gebruik: Alle soorten veneuze katheters

0,16 cm PE-schuim



HG2
3,8 cm x 1 cm (2)



HG05
6 cm x 1,6 cm



HGL6
6 cm x 1,6 cm
2,2 cm x 0,95 cm



HGL7
4 cm x 1,6 cm
1,1 cm x 0,95 cm



HGDBSXT
4,1 cm x 1,6 cm
2,2 cm x 0,95 cm
Inclusief dubbelzijdige
kleefstof




HGL4
8,6 cm x 1,9 cm



HGL8
5,0 cm x 1,6 cm
2,2 cm x 0,95 cm

WingGuard®

- Uiterst gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen; dankzij de silicone toplaag kan het verband proper worden verwijderd
- Universele maat voor plaatsing van elk type of elke maat PICC katheter
- Eenvoudig ontwerp minimaliseert stoten en verdraaien
- Buigzame constructie die zich comfortabel aanpast aan de lichaamscontouren
- Bevat geen natuurrubberlatex

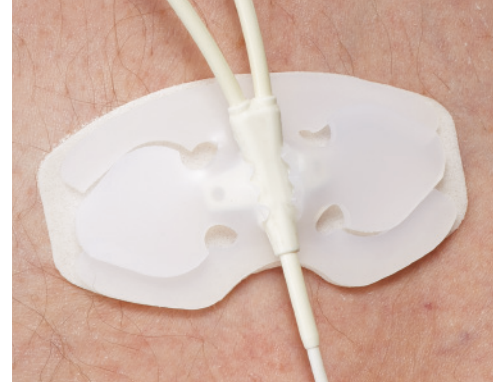

WG711XT
6,1 cm x 3,8 cm
0,08 cm PVC-schuimbasis

LineGuard® J-vormige fixatie

- Veilig vastzetten van veneuze katheters voor stabilisatie
- Helpt bij het standaardiseren van protocollen voor J-loop procedures
- Eenvoudig aanbrengen en verwijderen
- Werkt op een grote verscheidenheid aan sites; compatibel met elke extensieset
- Beschikbaar in 2 stijlen: stof of schuimbasis

Aanbevolen gebruik: Arterieel, perifere veneuze katheter





LG875XT
9,2 cm x 2,2 cm
0,16 cm schuim- of stofbasis


Slangverbinding

- Vermindert de spanning op de lijn, zodat het verband beter blijft zitten
- Houdt de leidingen uit de knoop
- Comfortabel, past zich aan aan de lichaamsvormen
- Lijm is niet-irriterend, niet-sensibiliserend en niet-cytotoxisch
- Lipjes aan de afdeklagen maakt aanbrengen eenvoudiger

Aanbevolen gebruik: Subclavian, jugular, femoral

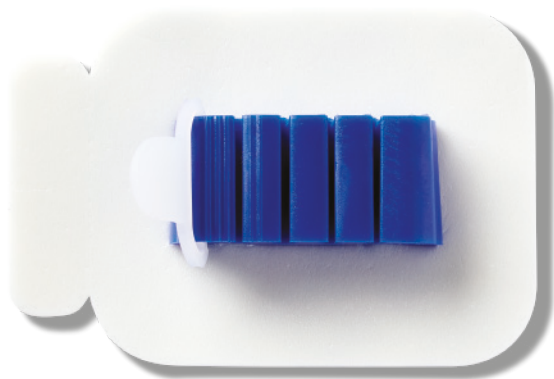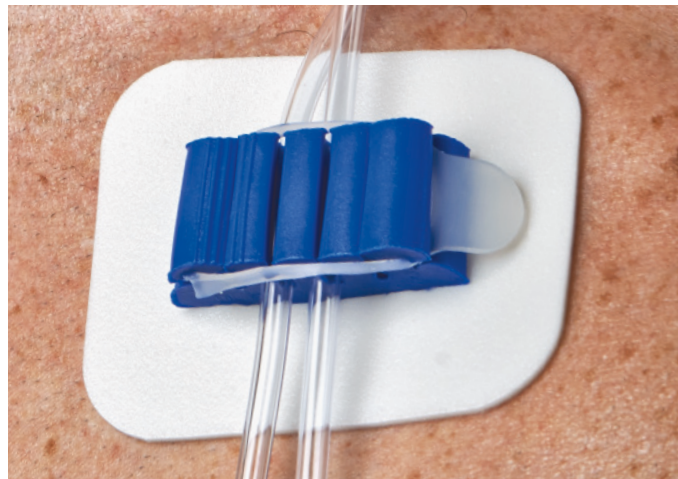

ANC32XT
7 cm x 5,7 cm

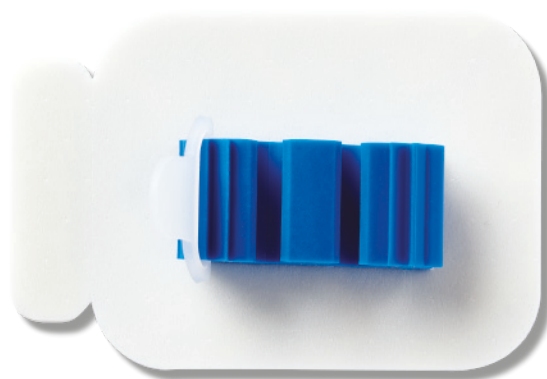

ANC52XT
7 cm x 5,7 cm

Fixatie anker

- Comfortabel en veilig; gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen
- Past op vrijwel elke maat katheter
- Lange draagtijd vermindert verzorgingstijd
- Helpt het losraken van de katheter te voorkomen
- Blijft stevig op zijn plaats, zodat de patiënt gemakkelijk kan bewegen

Aanbevolen gebruik: Urinekatheter, drainagelijng, drijflijn



ATA24ZT
10,5 cm x 6,1 cm



FCS200ZT
7,6 cm x 11,4 cm

Veiligheid en comfort voor de patiënt gegarandeerd.

Neem voor meer informatie over onze complete Centurion-lijn contact op met uw Medline-accountmanager.




Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland


Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US 

*Routineverzorging en verbandwisselingen worden niet uitgevoerd op korte perifere katheters, tenzij het verband vuil is of niet meer intact is.' Infusion Nurses Society (2011). INS Richtlijnen. Journal of Infusion Nursing, 34(15), S63.

Verband en bevestigingsproducten van Centurion zijn medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

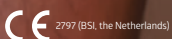

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Chateaubriant, France

We behouden ons het recht voor mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. ML1011_NL 04/2022.