

# Inzisionsfolien: Dermadine Plus und Dermadrape

Steriler Schutz für mehr Sicherheit



## Steriles Barriere- System für chirurgische Eingriffe



# Dermadine Plus Inzisionsfolie


Hautreinigung und -desinfektion sind zwei notwendige Schritte zur Reduzierung von Oberflächenbakterien vor einer Operation. Mikroorganismen auf der Haut werden dabei zwar reduziert, jedoch können einige von ihnen in mikroskopisch kleinen Hautfalten überleben.

Wenn eine vollständige und lang anhaltende Keimfreiheit erforderlich ist, gewährleistet die Dermadine Plus Inzisionsfolie, durch ihre antimikrobielle Breitbandwirkung auf viele auf der Haut vorhandenen Mikroorganismen, die Aufrechterhaltung eines sterilen Operationsfeldes.


Der Klebefilm enthält Jodophoren, die über einen langen Zeitraum freigesetzt werden. Dies sorgt für maximale Keimfreiheit, während der gesamten Eingriffsdauer. Sie ist für eine Vielzahl chirurgischer Eingriffe verwendbar.

Dermadine ist daher eine optimale, finale Ergänzung der Operationsfeld-Abdeckung.

- + Langhaftend**  
Durch die konstante langfristige Freisetzung der Jodophoren, auch über 24 Stunden hinaus, eignet sich das Produkt für lange chirurgische Eingriffe.

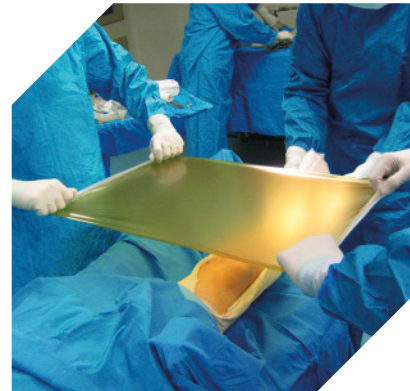


Messung der antibakteriellen Aktivität (nach ISO 22196:2011)

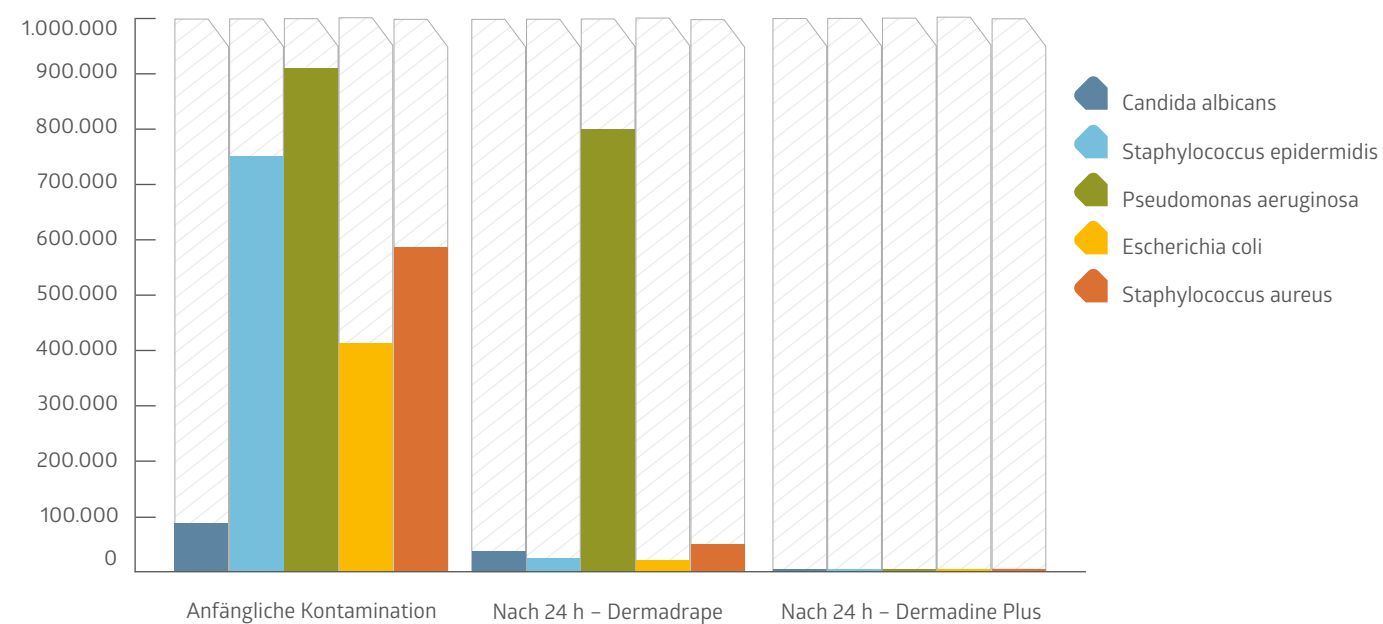

- + Schnelle Wirkungsweise**  
Die Dermadine Plus Inzisionsfolie entfaltet eine starke antimikrobielle Wirkung. Innerhalb von 30 Minuten nach Applikation von Dermadine Plus kommt es zu einer signifikanten Keimreduzierung, die sich im Laufe der Zeit allmählich stabilisiert. Dermadine Plus gewährleistet eine konstante Keimfreiheit auf der Haut des Patienten über lange Zeiträume.


- + Formbar und dicht abschließend**  
Flexibel und ultradünn, für eine perfekte Passform und Modelation an anatomische Strukturen und Gelenke. Die Folie ermöglicht hohe Gewebemobilisierung (auch bei Verwendung von Retraktoren), ohne ihre Haftungsfähigkeit zu verlieren.

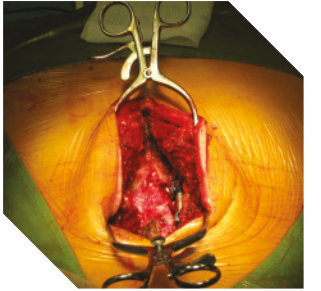


- + Atmungsaktiv, flüssigkeitsabweisend -und undurchlässig**  
Dermadine Plus kombiniert Flüssigkeitsundurchlässigkeit mit Atmungsaktivität und verhindert so Flüssigkeitsansammlungen, die die Folienhaftung beeinträchtigen können. Die atmungsaktive Folie garantiert die vollständige Undurchlässigkeit gegenüber Mikroorganismen.



- + Stark und nicht reflektierend**  
Zusätzlich zur hervorragenden Reißfestigkeit ermöglicht Dermadine eine einfache, präzise Inzision und schützt die Wundränder. Die reflektionsfreie Folie schützt vor Überblendung und sorgt für eine optimale Sicht im Operationsfeld.

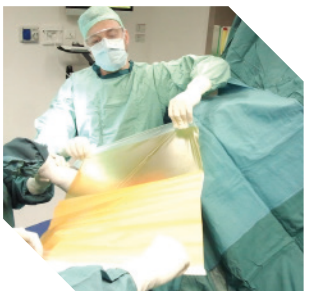

- + Klebefilm mit einem antimikrobiellen Wirkstoff**  
Der hautfreundliche, medizinische Klebstoff sorgt für eine hohe Haftung auf allen Hautoberflächen inklusive der Wundränder, ohne jegliche Hautreizung. Die Polyacrylatstruktur im Dermadine Plus Klebstoff enthält Jod.\* Der Polyacrylatkomplex mit dem Trijodidion setzt nach der Applikation auf die Haut Jodmoleküle frei. Der Acrylat-Klebefilm lässt sich atraumatisch entfernen, auch bei vorgeschädigter, oder empfindlicher Haut und hinterlässt keine Kleberückstände.

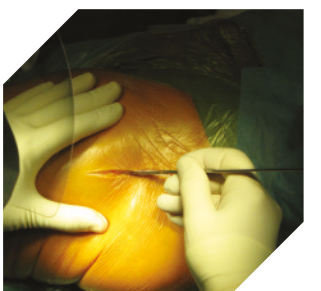



## Lagerung

Lagern Sie das Produkt in der Schutzverpackung bei Raumtemperatur, vor Licht und Feuchtigkeit schützen, in belüfteten Räumen über Fußbodenniveau. Vermeiden Sie Extremtemperaturen.

## Sterilisationsverfahren

Gammastrahlung

## Entsorgung

Nach Gebrauch gilt das Medizinprodukt als Sondermüll.

## Medizinprodukt-Klassifizierung

Dermadrape Klasse IIa

CND-Code: T02010101















Dermadine Plus Klasse III

CND-Code: T02010102

## Verpackung

- Verpackt in einem Peel Pouch, mit Einschlagpapier
- Abnehmbare Etiketten Rückverfolgbarkeit und die Patientenakten
- In kleineren Dispenser-Boxen erhältlich
- In einem individuellen Medline OP-Set erhältlich



Dermadine Plus Artikelnummer	Abmessungen	Verpackung	Dermadrape Artikelnummer
42020P 	20 x 20 cm Selbstklebend: 15 x 20 cm	20 Stück/Box 120 Stück/Karton	32020 
n/a	35 x 25 cm Selbstklebend: 30 x 25 cm	20 Stück/Box 120 Stück/Karton	33525 
44040P 	40 x 40 cm Selbstklebend: 34 x 40 cm	15 Stück/Box 90 Stück/Karton	34040 
n/a	50 x 48 cm Selbstklebend: 44 x 48 cm	15 Stück/Box 90 Stück/Karton	35050 
47045P 	70 x 45 cm Selbstklebend: 60 x 45 cm	15 Stück/Box 90 Stück/Karton	37045 
47060P 	70 x 60 cm Selbstklebend: 60 x 60 cm	10 Stück/Box 60 Stück/Karton	n/a
47080P 	70 x 80 cm Selbstklebend: 60 x 80 cm	10 Stück/Box 60 Stück/Karton	n/a
48060P 	80 x 60 cm Selbstklebend: 60 x 60 cm	10 Stück/Box 60 Stück/Karton	38060 
48080P 	80 x 80 cm Selbstklebend: 70 x 80 cm	10 Stück/Box 60 Stück/Karton	38080 

\*Medline bietet auch Dermadrape an, eine vollständige Produktlinie von Inzisionsfolien ohne Jodbehandlung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter oder besuchen Sie unsere Homepage: [de.medline.eu](http://de.medline.eu)



**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0  
Fax: +49 2821 7510-7802  
[de.medline.eu](http://de.medline.eu)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Genf  
Schweiz

Tel: +41 848 244 433  
Fax: +41 848 244 100  
[de.medline.eu](http://de.medline.eu)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati  
Parking 2  
1010 Wien  
Österreich  
Tel: +43 800 201 878  
Fax: +43 800 201 879  
[de.medline.eu](http://de.medline.eu)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

