


# Campos de incisión Dermadine Plus y Dermadrape

Esterilidad aumentada para una seguridad mejorada



**Dispositivo  
de barrera  
estéril para  
incisiones  
quirúrgicas**

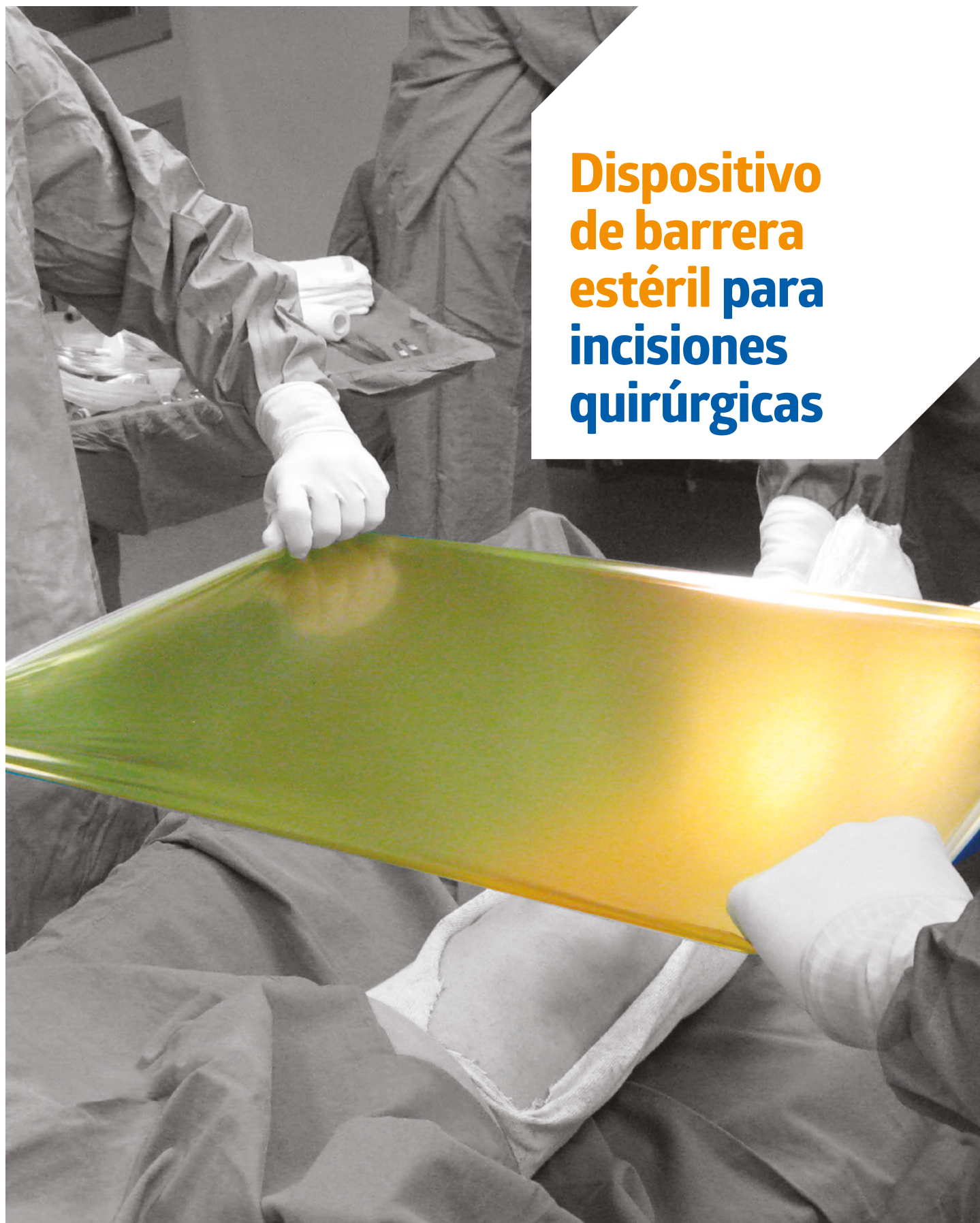

# Campo de incisión Dermadine Plus

La limpieza, en la preparación de la cirugía, y la desinfección de la piel, son dos pasos necesarios para la reducción inicial de las bacterias de la superficie. Sin embargo, los microorganismos de la piel se reducen, pero no se eliminan, y pueden sobrevivir en los pliegues microscópicos de la piel.


Cuando se requiere una asepsia completa y duradera, el film de incisión Dermadine Plus garantiza el mantenimiento de un campo estéril, gracias a su actividad antimicrobiana de amplio espectro sobre muchos de los microorganismos presentes en la piel.

El adhesivo contiene yodo de liberación lenta, lo que asegura que se logre la máxima esterilidad y que esta se mantenga a lo largo del tiempo. También está adecuadamente diseñado para todo tipo de intervenciones quirúrgicas.


Dermadine debe, por tanto, utilizarse como un paso final en la preparación del campo quirúrgico.

## + Duradero

La presencia constante de yodo durante un tiempo considerable, incluso más allá de 24 horas, hace que el producto sea adecuado para intervenciones quirúrgicas prolongadas.

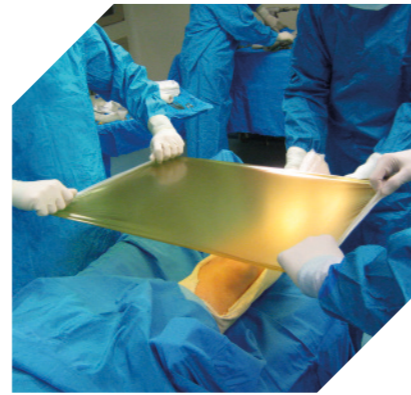

Medición de la actividad antibacteriana (según la norma ISO 22196:2011)

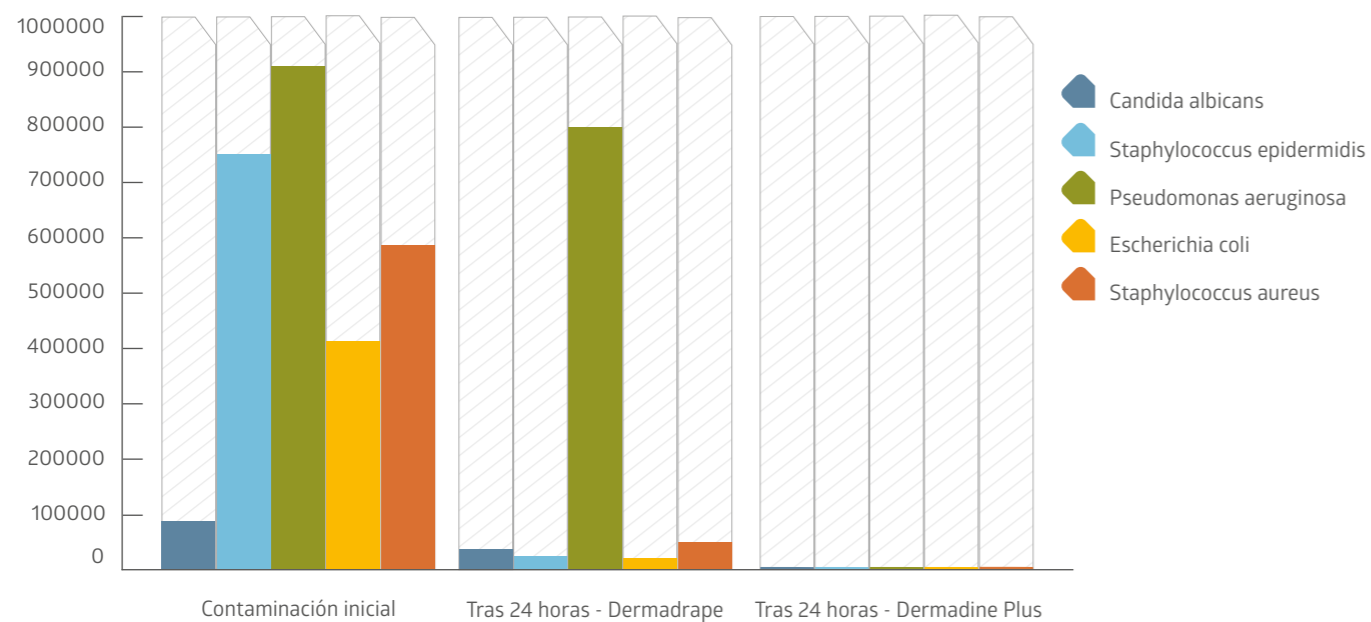


## + Acción rápida

Cuando se aplica, el paño para incisión Dermadine Plus demuestra una fuerte actividad antimicrobiana. A los 30 minutos de haber aplicado Dermadine Plus, existe una reducción significativa de la biocarga, que se estabiliza gradualmente con el tiempo. Dermadine Plus garantiza una asepsia constante en la piel del paciente, durante largos periodos.

## + Cómodo y envolvente

Elástico y ultrafino por naturaleza para garantizar un ajuste perfecto y su adaptación a las estructuras y articulaciones anatómicas. Dermadine Plus se adapta a grandes deformaciones de los músculos (incluso cuando se utilizan retractores autoestáticos) sin perder sus propiedades adhesivas.

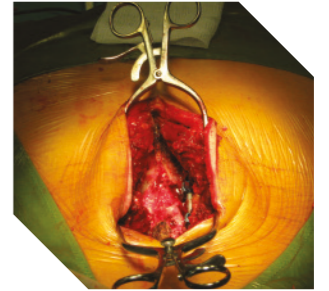

## + Transpirable, hidrófobo e impermeable

Dermadine Plus combina la repelencia de sangre y agua con una transpiración del vapor de agua, para prevenir la acumulación de fluidos que pueden reducir la capacidad adhesiva durante usos prolongados. La película transpirable garantiza una completa impermeabilidad a los microorganismos.




## + Fuerte y antirreflejos

Además de su excelente resistencia a los desgarros, Dermadine Plus también permite la incisión quirúrgica con cualquier escalpelo, y proporciona protección indirecta para no desgarrar la piel. Sus propiedades antirreflectantes proporcionan una perfecta visibilidad en el punto de incisión bajo la presencia de luz reflejada.



## + Adhesión con la presencia de un agente antimicrobiano

El adhesivo médico respetuoso con la piel permite una alta adhesión en todo tipo de superficies cutáneas y especialmente en los bordes de las heridas sin causar irritación en la piel. La estructura poliacrílica del adhesivo de Dermadine Plus contiene yodo.\* El complejo de poliacrilato con el ion triyodo libera moléculas de yodo tras su aplicación en la piel. El adhesivo acrílico es atraumático al despegarlo, incluso en la piel de los pacientes ancianos, y garantiza que no quede adhesivo residual después de despegarlo.

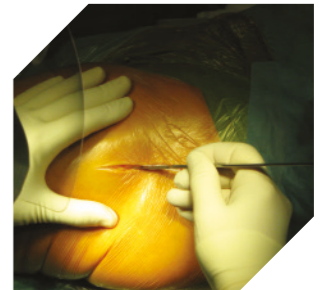



## Almacenamiento

Almacene el producto a temperatura ambiente, protegido de la luz y de la humedad, en zonas ventiladas por encima del nivel del suelo, y en su envase protector. Evite temperaturas extremas.

## Método de esterilización

Radiación gamma

## Eliminación

Después de su uso, los dispositivos médicos se consideran un residuo especial.












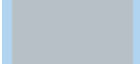


## Clasificación sobre productos sanitarios

Dermadrape Clase IIa  
Código CND: T02010101  
Dermadine Plus Clase III  
Código CND: T02010102

## Envasado

- Envasado en envoltura de esterilización pelable de doble apertura
- Etiquetas extraíbles para la trazabilidad y los archivos del paciente
- Disponible para la venta en cajas dispensadoras más pequeñas
- Disponible en equipos personalizados SPT de Medline



Dermadine Plus Referencia		Dimensiones	Envasado	Dermadrape Referencia
42020P		20 x 20 cm Adhesivo: 15 x 20 cm	20 ud./caja 120 ud./envase	32020 
n/a		35 x 25 cm Adhesivo: 30 x 25 cm	20 ud./caja 120 ud./envase	33525 
44040P		40 x 40 cm Adhesivo: 34 x 40 cm	15 ud./caja 90 ud./envase	34040 
n/a		50 x 48 cm Adhesivo: 44 x 48 cm	15 ud./caja 90 ud./envase	35050 
47045P		70 x 45 cm Adhesivo: 60 x 45 cm	15 ud./caja 90 ud./envase	37045 
47060P		70 x 60 cm Adhesivo: 60 x 60 cm	10 ud./caja 60 ud./envase	n/a
47080P		70 x 80 cm Adhesivo: 60 x 80 cm	10 ud./caja 60 ud./envase	n/a
48060P		80 x 60 cm Adhesivo: 60 x 60 cm	10 ud./caja 60 ud./envase	38060 
48080P		80 x 80 cm Adhesivo: 70 x 80 cm	10 ud./caja 60 ud./envase	38080 

\*Medline también ofrece Dermadrape, una gama completa de campos de incisión sin tratamiento con yodo.

Para más información sobre nuestros productos, por favor, contacte con su delegado comercial de Medline o visítenos en: [es.medline.eu](http://es.medline.eu)



**Medline International Iberia S.L.U**  
Parque Empresarial San Fernando  
Edificio Munich, Planta Baja, local B  
Avenida de Castilla 2  
28830 San Fernando de Henares  
Madrid  
España  
Tfno: +34 900 600 602  
Fax: +34 900 600 603  
[es.medline.eu](http://es.medline.eu) | [es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW US  

Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2021 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML565\_ES 02/2021

