

Films à inciser Dermadine Plus et Dermadrape

Une stérilité accrue pour une meilleure sécurité



**Un système de
barrière stérile
pour les incisions
chirurgicales**



Films à inciser Dermadine Plus

Le nettoyage, en préparation de la chirurgie, et la désinfection de la peau sont deux étapes nécessaires à la réduction initiale des bactéries de surface. Cependant, les micro-organismes cutanés sont réduits mais non éliminés, et peuvent survivre dans les plis microscopiques de la peau.

Lorsqu'une asepsie complète et durable est nécessaire, le film à inciser Dermadine Plus garantit le maintien d'une zone stérile, grâce à son activité antimicrobienne à large spectre sur de nombreux micro-organismes présents sur la peau.


L'adhésif contient de l'iode à libération lente, ce qui garantit une stérilité maximale soutenue au fil du temps. Il convient également à tous les types d'interventions chirurgicales.

Les films à inciser Dermadine doivent être utilisés comme étape finale de préparation de la zone chirurgicale.




Longévité

La présence constante d'iode pendant un temps très long, même au-delà de 24 heures, rend le produit adapté aux interventions chirurgicales de longue durée.

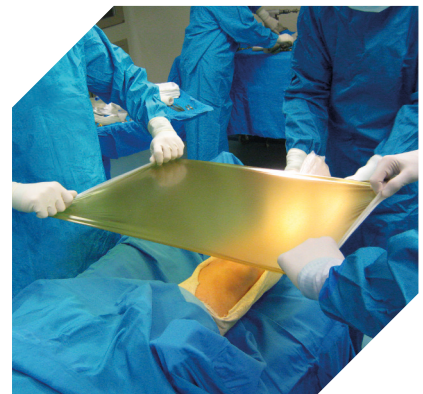

Mesure de l'activité antibactérienne (selon ISO 22196:2011)

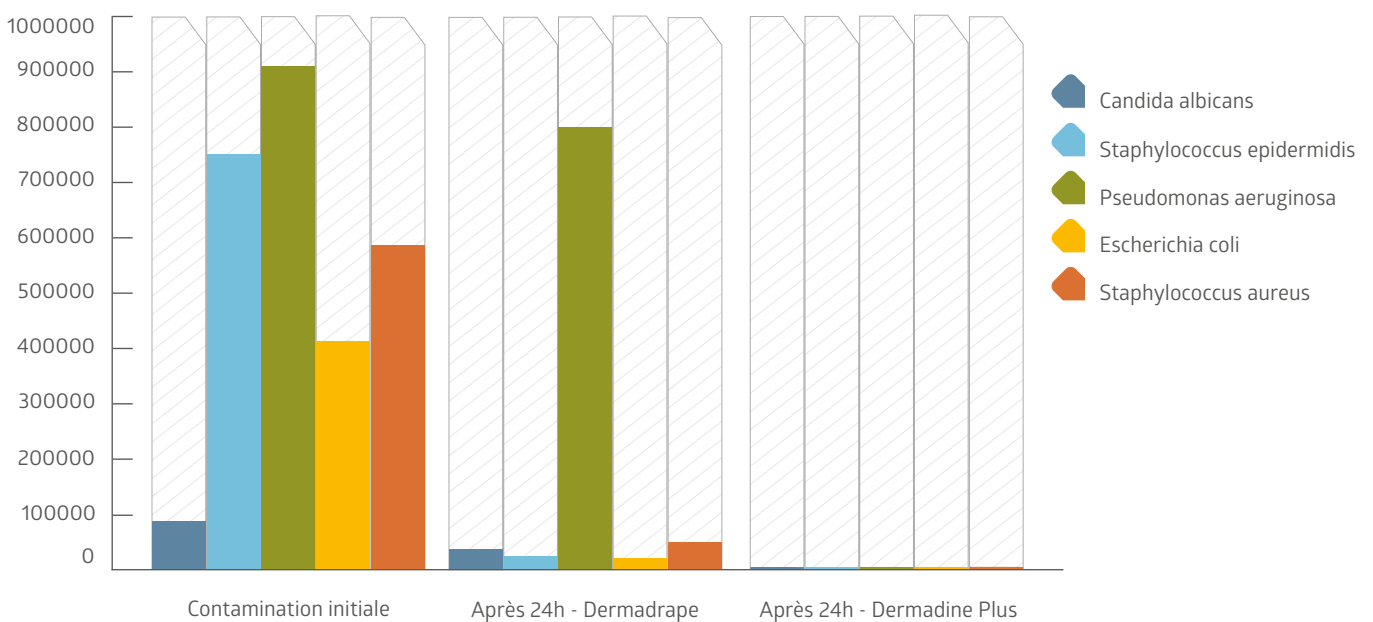

+ Action rapide

Lorsqu' il est appliqué, le film à inciser Dermadine Plus démontre une forte activité antimicrobienne. Dans les 30 minutes suivant l'application de Dermadine Plus, on observe une réduction significative de la biocharge, qui se stabilise progressivement au fil du temps. Dermadine Plus garantit une asepsie constante sur la peau du patient, sur de longues périodes.

+ Confortable et enveloppant

Naturellement élastique et ultra fin pour garantir un ajustement parfait et une conformation aux structures anatomiques et aux articulations. Dermadine Plus s'adapte aux grandes déformations musculaires (même lorsque des rétracteurs autostatiques sont utilisés) sans perdre ses propriétés adhésives.




+ Respirant, déperlant et imperméable

Dermadine Plus est à la fois déperlant pour les liquides et le sang mais respirant à la vapeur d'eau afin d'éviter les collections de fluides pouvant réduire l'adhérence lors des longues procédures. Le film respirant garantit une imperméabilité totale aux micro-organismes.




+ Solide et anti-éblouissement

Pour une excellente résistance à la déchirure, Dermadine Plus permet également une incision chirurgicale facile avec n'importe quelle lame de scalpel et offre une protection indirecte contre les déchirures des peaux les plus fines. Ses propriétés anti-éblouissement offrent une parfaite visibilité au point d'incision sous l'éclairage chirurgical.

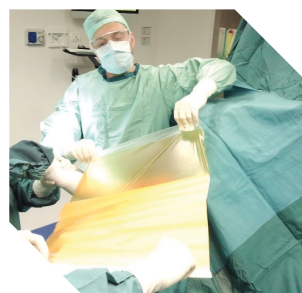

+ Adhérence avec la présence d'agent antimicrobien

L'adhésif médical doux pour la peau permet une adhérence élevée sur tous les types de surfaces cutanées et en particulier sur les bords de la plaie sans aucune irritation cutanée. Le complexe polyacrylate avec l'ion triiodure libère des molécules d'iode après application sur la peau. L'adhésif acrylique est atraumatique pendant le décolllement, même sur la peau des patients âgés, et garantit l'absence d'adhésif résiduel après le retrait du produit.

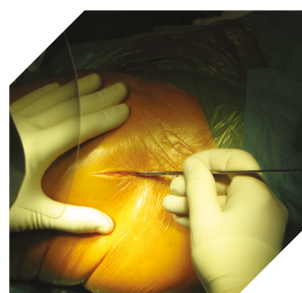

Stockage

Stocker le produit à température ambiante, protégé de la lumière et de l'humidité, dans des zones ventilées au-dessus du niveau du sol, dans son emballage de protection. Évitez les températures extrêmes.

Méthode de stérilisation

Rayonnement gamma

Elimination

Après utilisation, le dispositif médical est considéré comme un déchet spécial.

Classification des instruments médicaux

Dermadrape Classe IIa

Code CND : T02010101

Dermadine Plus Classe III

Code CND : T02010102

Emballage

- Double emballage stérile
- Étiquettes amovibles pour la traçabilité et les dossiers patients
- Disponible à la vente dans des boîtes distributrices plus petites
- Disponible en packs personnalisés Medline SPT



Dermadine Plus: Référence		Dimensions	Emballage	Dermadrape Référence	
42020P		20 x 20 cm Adhésif: 15 x 20 cm	20 unités/boîte 120 unités/carton	32020	
n/a		35 x 25 cm Adhésif: 30 x 25 cm	20 unités/boîte 120 unités/carton	33525	
44040P		40 x 40 cm Adhésif: 34 x 40 cm	15 unités/boîte 90 unités/carton	34040	
n/a		50 x 48 cm Adhésif: 44 x 48 cm	15 unités/boîte 90 unités/carton	35050	
47045P		70 x 45 cm Adhésif: 60 x 45 cm	15 unités/boîte 90 unités/carton	37045	
47060P		70 x 60 cm Adhésif: 60 x 60 cm	10 unités/boîte 60 unités/carton	n/a	
47080P		70 x 80 cm Adhésif: 60 x 80 cm	10 unités/boîte 60 unités/carton	n/a	
48060P		80 x 60 cm Adhésif: 60 x 60 cm	10 unités/boîte 60 unités/carton	38060	
48080P		80 x 80 cm Adhésif: 70 x 80 cm	10 unités/boîte 60 unités/carton	38080	

*Medline propose également Dermadrape, une gamme complète de films d'incision sans traitement à l'iode.

Pour plus d'informations sur nos produits, merci de contacter votre Responsable Commercial Medline ou visiter notre site Internet sur : www.medline.eu/fr



Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34

www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93

www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US

Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions d'usage sur l'étiquette correspondante.

Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d'apparaître dans cette brochure.

© 2024 Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML565_FR 12/2024

Target Loc. Bottololo
S.P. Km 5,100
52020 Castellfranco di Sopra
(AR) Italy

0373 Istituto Superiore di Sanità