


Film Incisione Dermadine Plus e Dermadrape

Garanzia di sterilità e maggior sicurezza



**Barriera
sterile per
incisioni
chirurgiche**

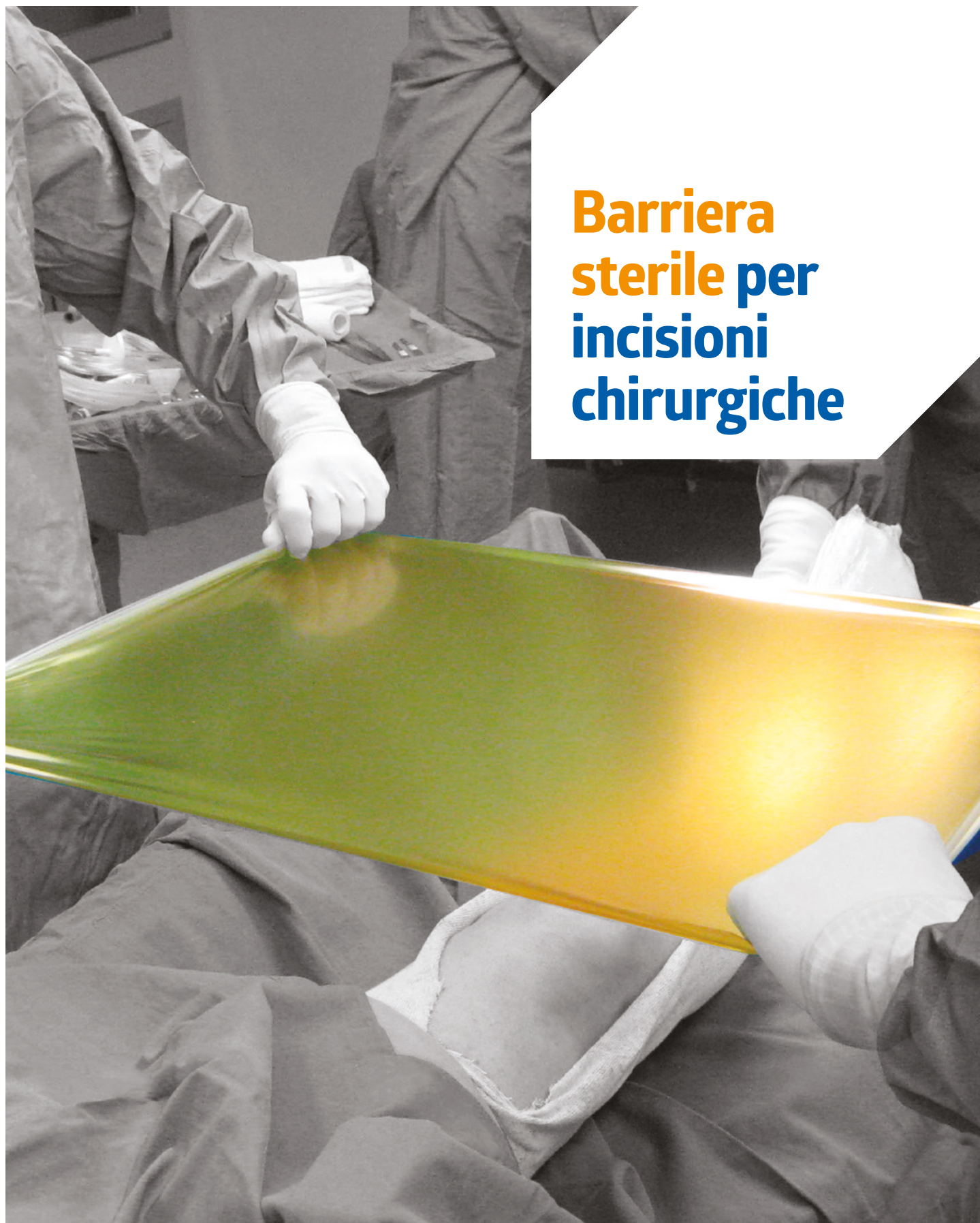

Film incisione Dermadine Plus

La pulizia e la disinfezione della cute, in preparazione all'intervento, sono due passaggi necessari per la riduzione iniziale dei batteri superficiali. Tuttavia, i microrganismi sulla cute vengono ridotti ma non eliminati e potrebbero sopravvivere in pieghe microscopiche della cute.

Quando è richiesta una lunga e completa asepsi, il film incisione Dermadine Plus assicura la sterilità del sito attraverso la sua attività antimicrobica ad ampio spettro sugli organismi presenti sulla cute.


L'adesivo contiene dello iodio a lento rilascio, a garanzia di una sterilità duratura. E' adatto per tutte le tipologie di procedure chirurgiche.

Il telo da incisione Dermadine dovrebbe essere utilizzato come step finale nella preparazione del sito chirurgico.




Di lunga durata

La presenza costante di iodio per un periodo considerevole, anche per più di 24 ore, rende il prodotto adatto a lunghe procedure chirurgiche.

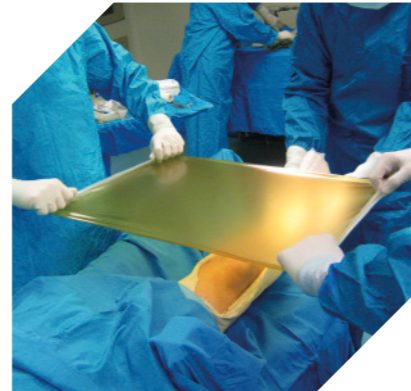

Misurazione dell'azione antibatterica (per ISO 22196:2011)

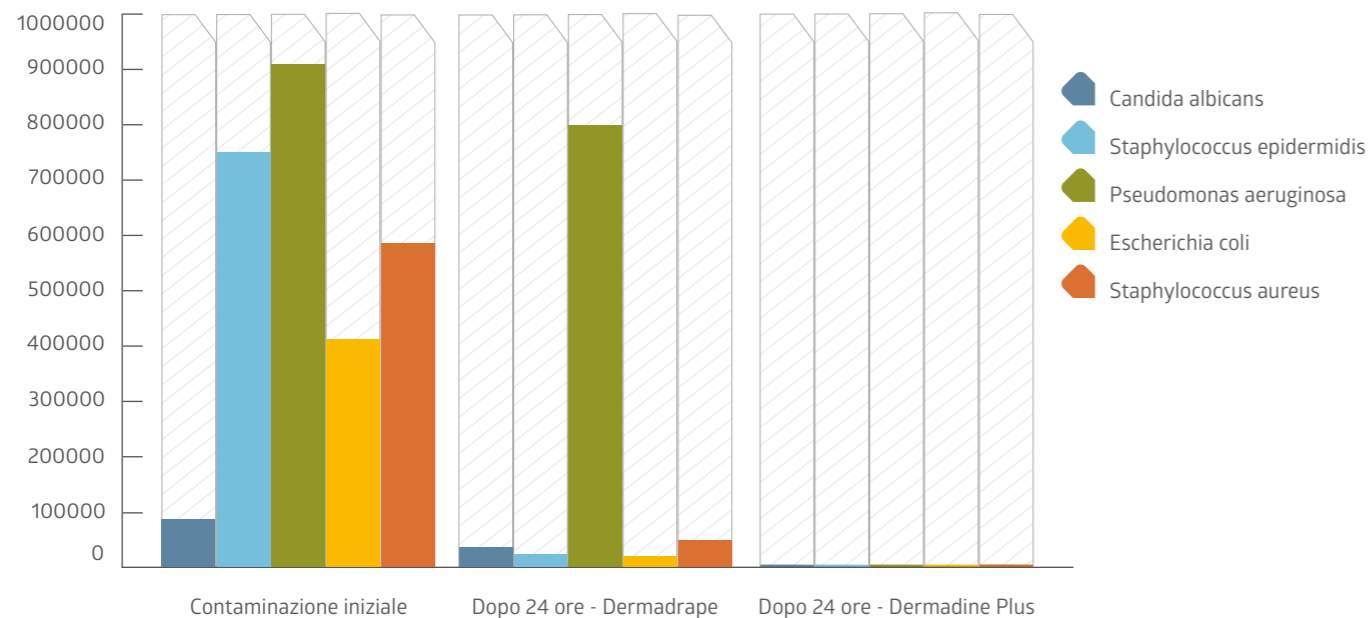


Ad azione rapida

Appena viene applicato, il film incisione Dermadine Plus inizia la sua efficace azione antimicrobica. Dopo 30 minuti di applicazione del Dermadine Plus, si verifica una notevole riduzione della carica batterica, che si stabilizza gradualmente. Dermadine Plus garantisce una continua asepsi sulla cute del paziente dopo un lungo periodo.



Conformabile ed avvolgente

Elastico ed ultra sottile per garantire una perfetta adattabilità e compatibilità alla struttura anatomica e alle giunture. Dermadine Plus si adatta a larghe deformazioni dei muscoli (anche quando vengono utilizzati divaricatori autostatici) senza perdere le sue proprietà adesive.

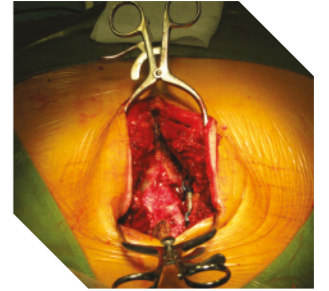


Traspirante, idrorepellente ed impermeabile

Dermadine Plus utilizza la repellenza all'acqua ed al sangue con la traspirabilità al vapore acqueo per prevenire la raccolta di liquidi che potrebbe ridurre l'adesione durante un lungo periodo. Il film traspirante garantisce una completa impermeabilità ai microrganismi.




Resistente e anti-riflesso

Oltre alla sua notevole resistenza allo strappo, Dermadine Plus consente una facile incisione chirurgica con bisturi, e fornisce una protezione indiretta dal taglio della cute sottile. Le sue proprietà antiriflesso permettono di avere una perfetta visibilità del sito d'incisione sotto la presenza di luci della sala operatoria.

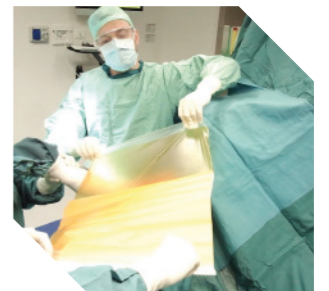

Ad elevata adesività con agenti antimicrobici.

L'adesivo di grado medico "skin friendly" consente un'alta adesione a tutte le tipologie di superfici cutanee ed in particolare ai bordi delle ferite, senza causare irritazioni cutanee. La struttura poli-acrilica dell'adesivo del Dermadine Plus contiene iodio.* Il complesso poliacrilato con lo ione triioduro rilascia molecole di iodio dopo l'applicazione sulla cute. L'adesivo acrilico consente una rimozione atraumatica, anche dalla cute di pazienti più anziani, e garantisce l'assenza di residui adesivi sulla cute dopo la rimozione.

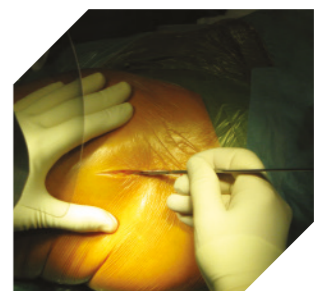

Conservazione e stoccaggio

Conservare il prodotto a temperatura ambiente, protetto dai raggi di luce e dall'umidità, in un'area ventilata, sopra il livello del pavimento, nella sua confezione protettiva. Evitare temperature estreme.

Agente sterilizzante

Raggi Gamma

Smaltimento

Dopo l'utilizzo, il dispositivo medico viene considerato rifiuto speciale.

Classificazione del dispositivo medico

Dermadrape Classe IIa

CND: T02010101












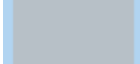


Dermadine Plus Classe III

CND: T02010102

Confezione

- Doppio confezionamento peel-pouch sterile
- Etichette rimovibili per tracciabilità e cartelle dei pazienti
- Disponibili per la vendita in piccoli dispenser box
- Disponibili nei set SPT Medline customizzati



Dermadine Plus Codice prodotto	Dimensioni	Confezione	Dermadrape Codice prodotto
42020P 	20 x 20 cm Adesivo: 15 x 20 cm	20 pz/box 120 pezzi/ confezione	32020 
n/a	35 x 25 cm Adesivo: 30 x 25 cm	20 pz/box 120 pezzi/ confezione	33525 
44040P 	40 x 40 cm Adesivo: 34 x 40 cm	15 pz/box 90 pezzi/ confezione	34040 
n/a	50 x 48 cm Adesivo: 44 x 48 cm	15 pz/box 90 pezzi/ confezione	35050 
47045P 	70 x 45 cm Adesivo: 60 x 45 cm	15 pz/box 90 pezzi/ confezione	37045 
47060P 	70 x 60 cm Adesivo: 60 x 60 cm	10 pz/box 60 pezzi/ confezione	n/a
47080P 	70 x 80 cm Adesivo: 60 x 80 cm	10 pz/box 60 pezzi/ confezione	n/a
48060P 	80 x 60 cm Adesivo: 60 x 60 cm	10 pz/box 60 pezzi/ confezione	38060 
48080P 	80 x 80 cm Adesivo: 70 x 80 cm	10 pz/box 60 pezzi/ confezione	38080 

*Medline offre Dermadrape, un range di film d'incisione senza iodio.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, vi invitiamo a contattare il vostro account manager Medline o a visitare il nostro sito: it.medline.eu



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale

Piazzale della Resistenza 3

50018 Scandicci

Firenze

Italia

Tel.: +39 55 776 65 11

Fax: +39 55 34 01 12

it.medline.eu

it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle

1204 Ginevra

Svizzera

Tel. +41 848 244 433

Fax. +41 848 244 100


it.medline.eu

ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Prima dell'utilizzo consultare le istruzioni e le avvertenze nell'apposita etichetta.

Tiasset Loc. Botriolo
S.P. Km 5100
52020 Castelfranco di Sopra
(AR), Italy

 0373 Istituto Superiore di Sanità

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero verificarsi relativamente a questa brochure.

© 2021 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML565_EN 04/2021