

# Filmes de Incisão Dermadine Plus e Dermadrape

Esterilidade aumentada para melhorar a segurança



**Sistema de  
barreira  
estéril para  
incisões  
cirúrgicas**



# Filmes de Incisão Dermadine Plus

A limpeza, na preparação para a cirurgia, e a desinfecção da pele, são duas etapas necessárias para a redução inicial da carga bacteriana superficial. Todavia, os microrganismos da pele são reduzidos mas não eliminados e podem sobreviver nas pregas microscópicas da pele.

Quando é necessária uma assepsia completa e duradoura, o filme para incisão Dermadine Plus garante a manutenção de um campo estéril, graças à sua atividade antimicrobiana de largo espectro sobre os diversos microrganismos presentes na pele.


O adesivo contém iodo de liberação lenta, garantindo que a esterilidade máxima seja alcançada e mantida ao longo do tempo. Também é adequado para todos os tipos de intervenções cirúrgicas.

O Dermadine deve ser usado como passo final na preparação do campo cirúrgico.




## Duradouro

A presença constante de iodo durante um período considerável, mesmo após 24 horas, torna o produto adequado a intervenções cirúrgicas longas.

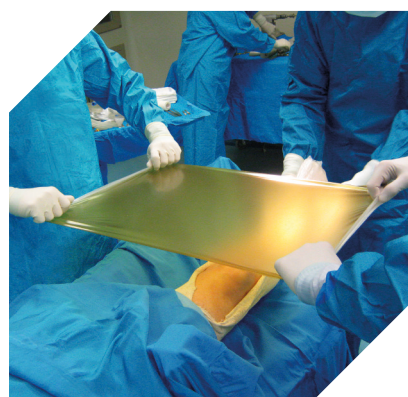

## Medição da atividade antibacteriana (segundo a ISO 22196:2011)

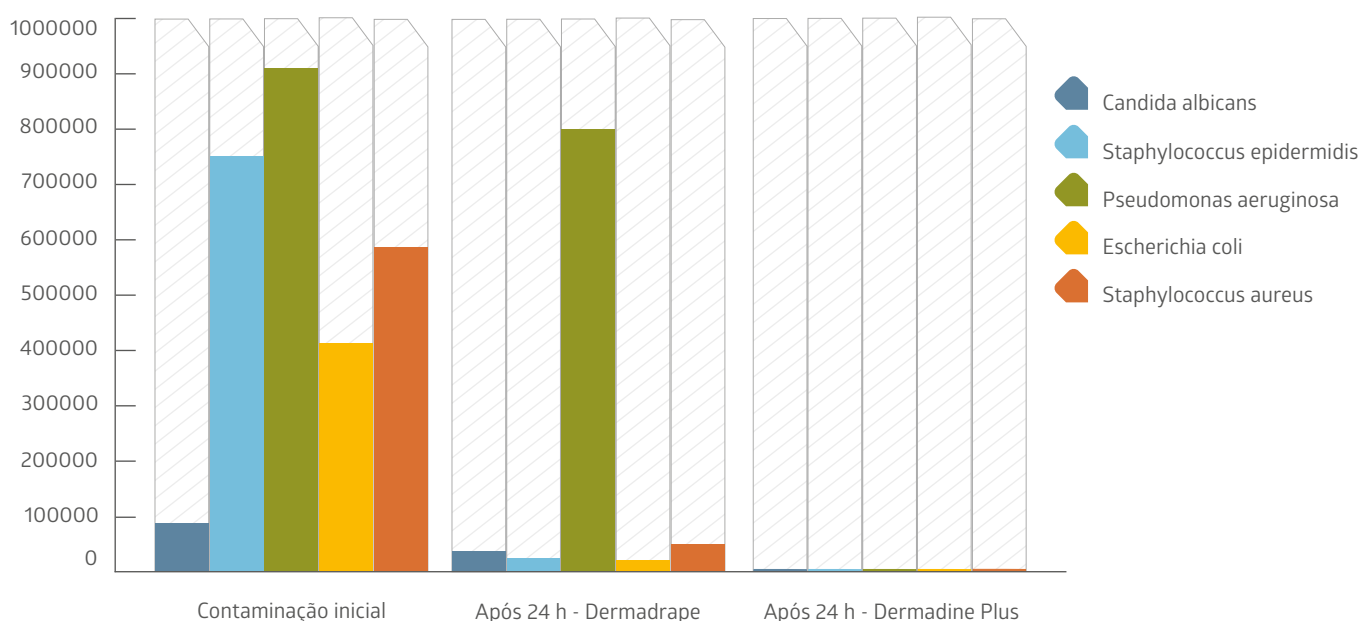



### **Ação rápida**

Depois de aplicados, os filmes de incisão Dermadine Plus demonstram uma elevada atividade antimicrobiana. Após 30 minutos de aplicação do Dermadine Plus, verifica-se uma redução significativa do fardo biológico, que se estabiliza gradualmente ao longo do tempo. O Dermadine Plus garante uma assepsia constante na pele do doente durante longos períodos de tempo.



### **Adaptável e envolvente**

Naturalmente elástico e ultrafino para garantir um ajuste e adaptação perfeitos às estruturas anatómicas e articulações. O Dermadine Plus adapta-se as amplas deformações dos músculos (mesmo se forem usados afastadores autostáticos) sem perder as propriedades adesivas.




### **Respirável, hidrófobo e à prova de água**

O Dermadine Plus combina a repelência ao sangue e à água com a respirabilidade ao vapor de água para evitar a acumulação de fluidos que pode reduzir as propriedades adesivas em intervenções mais longas. O filme respirável garante total impermeabilidade aos microrganismos.




### **Forte e antibrilho**

Para além da sua excelente resistência aos rasgos, o Dermadine Plus também permite uma incisão cirúrgica fácil com qualquer lâmina de bisturi e confere uma proteção indireta à pele fina contra os rasgos. As propriedades antibrilho garantem uma visibilidade perfeita no ponto da incisão sob a presença de luz refletida.

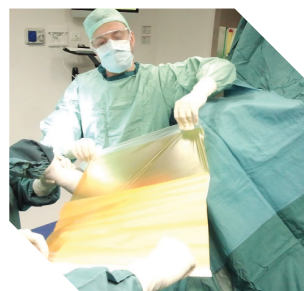

### **Aderência com a presença de agente antimicrobiano.**

O adesivo médico amigo da pele permite uma elevada aderência à pele em todos os tipos de superfície cutânea, em especial nas orlas de ferida sem provocar irritação. A estrutura em poliacrílico do adesivo Dermadine Plus contém iodo.\* O complexo poliacrilato com o ião tri-iodeto libera moléculas de iodo após a aplicação na pele. O adesivo acrílico é atraumático durante a remoção, mesmo na pele dos doentes mais idosos, e não deixa adesivo residual após a remoção.

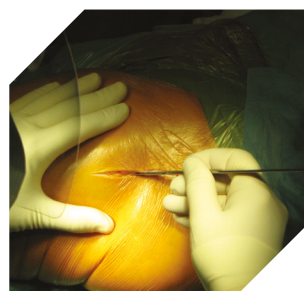

## Armazenamento

Guardar o produto à temperatura ambiente, abrigado da luz e da humidade, em áreas ventiladas, elevado do chão e na sua própria embalagem protetora. Evitar temperaturas extremas.

## Agente de esterilização

Radiação gama

## Eliminação

Após a utilização, este dispositivo médico é considerado resíduo especial.


## Classificação do dispositivo médico

Dermadrape Classe Is  
Código CND: T02010101  
Dermadine Plus Classe III  
Código CND: T02010102

## Embalagem

- Embalado em envelope esterilizado de duplo destaque
- Etiquetas removíveis para rastreabilidade e ficha do doente
- Disponível para venda em embalagens dispensadoras mais pequenas
- Disponível em packs personalizados Medline SPT



| Dermadine Plus referência |                                                                                     | Dimensões                            | Embalagem                                       | Dermadrape referência |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 42020P                    |    | 20 x 20 cm<br>Adesivo:<br>15 x 20 cm | 20 unidades/<br>embalagem<br>120 unidades/caixa | 32020                 |    |
| n/a                       |                                                                                     | 35 x 25 cm<br>Adesivo:<br>30 x 25 cm | 20 unidades/<br>embalagem<br>120 unidades/caixa | 33525                 |    |
| 44040P                    |    | 40 x 40 cm<br>Adesivo:<br>34 x 40 cm | 15 unidades/<br>embalagem<br>90 unidades/caixa  | 34040                 |    |
| n/a                       |                                                                                     | 50 x 48 cm<br>Adesivo:<br>44 x 48 cm | 15 unidades/<br>embalagem<br>90 unidades/caixa  | 35050                 |    |
| 47045P                    |    | 70 x 45 cm<br>Adesivo:<br>60 x 45 cm | 15 unidades/<br>embalagem<br>90 unidades/caixa  | 37045                 |    |
| 47060P                    |    | 70 x 60 cm<br>Adesivo:<br>60 x 60 cm | 10 unidades/<br>embalagem<br>60 unidades/caixa  | n/a                   |                                                                                       |
| 47080P                    |  | 70 x 80 cm<br>Adesivo:<br>60 x 80 cm | 10 unidades/<br>embalagem<br>60 unidades/caixa  | n/a                   |                                                                                       |
| 48060P                    |  | 80 x 60 cm<br>Adesivo:<br>60 x 60 cm | 10 unidades/<br>embalagem<br>60 unidades/caixa  | 38060                 |  |
| 48080P                    |  | 80 x 80 cm<br>Adesivo:<br>70 x 80 cm | 10 unidades/<br>embalagem<br>60 unidades/caixa  | 38080                 |  |

\*A Medline também oferece a Dermadrape, uma gama completa de campos de incisão sem tratamento de iodo.

Para obter mais informações sobre os nossos produtos, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte: [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)



Medline International Portugal Unipessoal LDA

Avenida do Brasil, 43-3º Direito  
1700-062 Lisboa  
Portugal  
Telemóvel: +351 800 110 253

[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)

Encomendas: [pt-pedidos@medline.com](mailto:pt-pedidos@medline.com)

Atenção ao Cliente: [pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)

FOLLOW US  

Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2026 Medline. ML565\_PT 07/2026