

Filmes de Incisão Dermadine Plus e Dermadrape

Esterilidade aumentada para melhorar a segurança



**Sistema de
barreira
estéril para
incisões
cirúrgicas**



Filmes de Incisão Dermadine Plus

A limpeza, na preparação para a cirurgia, e a desinfecção da pele, são duas etapas necessárias para a redução inicial da carga bacteriana superficial. Todavia, os microrganismos da pele são reduzidos mas não eliminados e podem sobreviver nas pregas microscópicas da pele.

Quando é necessária uma assepsia completa e duradoura, o filme para incisão Dermadine Plus garante a manutenção de um campo estéril, graças à sua atividade antimicrobiana de largo espectro sobre os diversos microrganismos presentes na pele.


O adesivo contém iodo de liberação lenta, garantindo que a esterilidade máxima seja alcançada e mantida ao longo do tempo. Também é adequado para todos os tipos de intervenções cirúrgicas.

O Dermadine deve ser usado como passo final na preparação do campo cirúrgico.




Duradouro

A presença constante de iodo durante um período considerável, mesmo após 24 horas, torna o produto adequado a intervenções cirúrgicas longas.

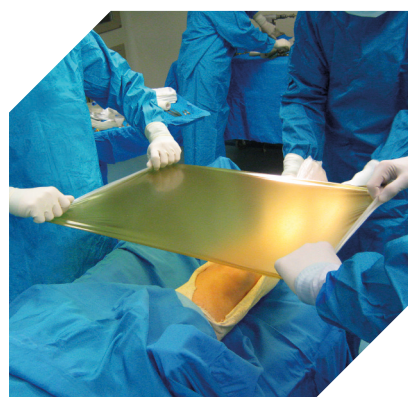

Medição da atividade antibacteriana (segundo a ISO 22196:2011)

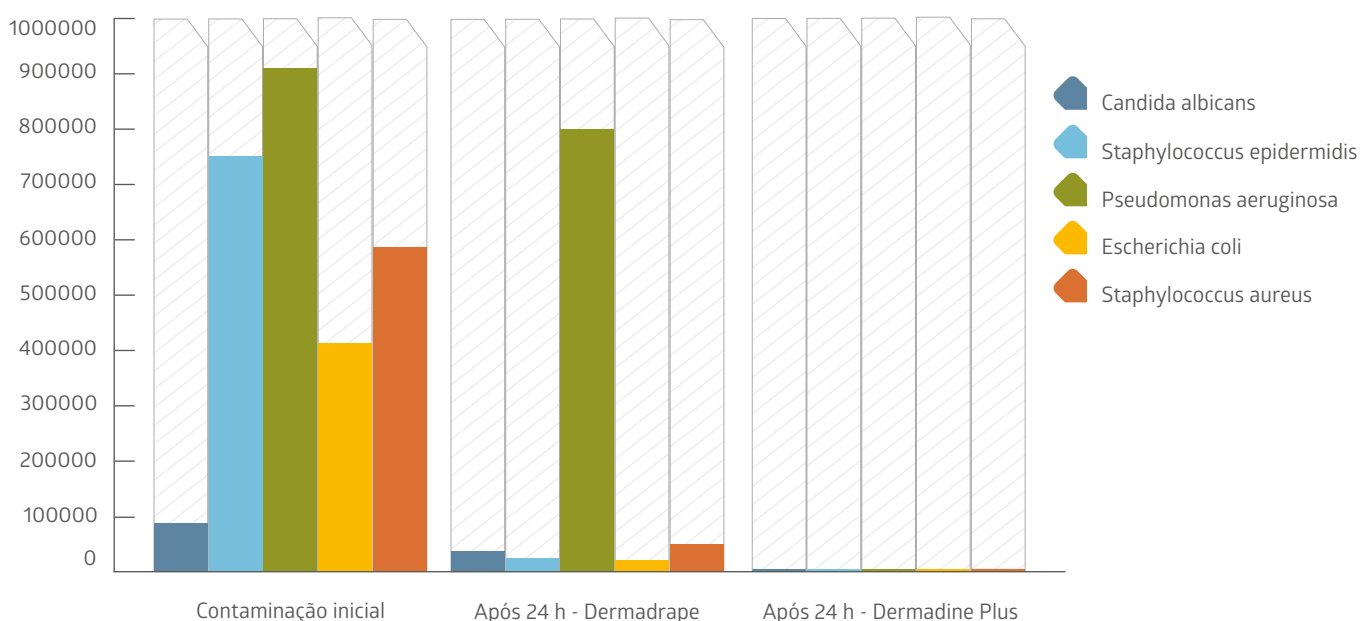



Ação rápida

Depois de aplicados, os filmes de incisão Dermadine Plus demonstram uma elevada atividade antimicrobiana. Após 30 minutos de aplicação do Dermadine Plus, verifica-se uma redução significativa do fardo biológico, que se estabiliza gradualmente ao longo do tempo. O Dermadine Plus garante uma assepsia constante na pele do doente durante longos períodos de tempo.



Adaptável e envolvente

Naturalmente elástico e ultrafino para garantir um ajuste e adaptação perfeitos às estruturas anatómicas e articulações. O Dermadine Plus adapta-se as amplas deformações dos músculos (mesmo se forem usados afastadores autostáticos) sem perder as propriedades adesivas.




Respirável, hidrófobo e à prova de água

O Dermadine Plus combina a repelência ao sangue e à água com a respirabilidade ao vapor de água para evitar a acumulação de fluidos que pode reduzir as propriedades adesivas em intervenções mais longas. O filme respirável garante total impermeabilidade aos microrganismos.




Forte e antibrilho

Para além da sua excelente resistência aos rasgos, o Dermadine Plus também permite uma incisão cirúrgica fácil com qualquer lâmina de bisturi e confere uma proteção indireta à pele fina contra os rasgos. As propriedades antibrilho garantem uma visibilidade perfeita no ponto da incisão sob a presença de luz refletida.

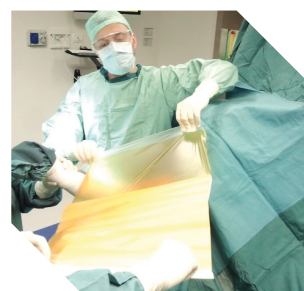

Aderência com a presença de agente antimicrobiano.

O adesivo médico amigo da pele permite uma elevada aderência à pele em todos os tipos de superfície cutânea, em especial nas orlas de ferida sem provocar irritação. A estrutura em poliacrílico do adesivo Dermadine Plus contém iodo.* O complexo poliacrilato com o ião tri-iodeto libera moléculas de iodo após a aplicação na pele. O adesivo acrílico é atraumático durante a remoção, mesmo na pele dos doentes mais idosos, e não deixa adesivo residual após a remoção.

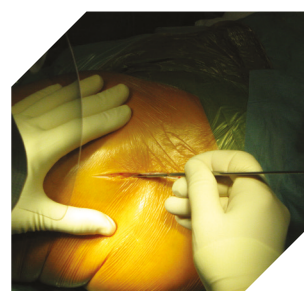

Armazenamento

Guardar o produto à temperatura ambiente, abrigado da luz e da humidade, em áreas ventiladas, elevado do chão e na sua própria embalagem protetora. Evitar temperaturas extremas.

Agente de esterilização

Radiação gama

Eliminação

Após a utilização, este dispositivo médico é considerado resíduo especial.















Classificação do dispositivo médico

Dermadrape Classe IIa
Código CND: T02010101
Dermadine Plus Classe III
Código CND: T02010102

Embalagem

- Embalado em envelope esterilizado de duplo destaque
- Etiquetas removíveis para rastreabilidade e ficha do doente
- Disponível para venda em embalagens dispensadoras mais pequenas
- Disponível em packs personalizados Medline SPT



Dermadine Plus referência		Dimensões	Embalagem	Dermadrape referência	
42020P		20 x 20 cm Adesivo: 15 x 20 cm	20 unidades/ embalagem 120 unidades/caixa	32020	
n/a		35 x 25 cm Adesivo: 30 x 25 cm	20 unidades/ embalagem 120 unidades/caixa	33525	
44040P		40 x 40 cm Adesivo: 34 x 40 cm	15 unidades/ embalagem 90 unidades/caixa	34040	
n/a		50 x 48 cm Adesivo: 44 x 48 cm	15 unidades/ embalagem 90 unidades/caixa	35050	
47045P		70 x 45 cm Adesivo: 60 x 45 cm	15 unidades/ embalagem 90 unidades/caixa	37045	
47060P		70 x 60 cm Adesivo: 60 x 60 cm	10 unidades/ embalagem 60 unidades/caixa	n/a	
47080P		70 x 80 cm Adesivo: 60 x 80 cm	10 unidades/ embalagem 60 unidades/caixa	n/a	
48060P		80 x 60 cm Adesivo: 60 x 60 cm	10 unidades/ embalagem 60 unidades/caixa	38060	
48080P		80 x 80 cm Adesivo: 70 x 80 cm	10 unidades/ embalagem 60 unidades/caixa	38080	

*A Medline também oferece a Dermadrape, uma gama completa de campos de incisão sem tratamento de iodo.

Para obter mais informações sobre os nossos produtos, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte: medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA

Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Telemóvel: +351 800 110 253

www.medline.eu/pt

Encomendas: pt-pedidos@medline.com

Atenção ao Cliente: pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  