



**STERILES ABDECKSYSTEM FÜR  
CHIRURGISCHE EINGRIFFE.**

**Inzisionsfolien Dermadine® & Dermadrape®**

Beugen Infektionen vor

# INZISIONSFOLIE DERMADINE®

Die Reinigung und Desinfektion der Haut vor einem operativen Eingriff ist ein notwendiger Schritt zur Reduzierung von Bakterien auf der Hautoberfläche. Dadurch werden die Mikroorganismen der Haut zwar reduziert, jedoch nicht vollständig beseitigt und können in mikroskopisch kleinen Hautfalten überleben.

Ist eine vollständige und langanhaltende Asepsis erforderlich, garantiert die chirurgische Inzisionsfolie Dermadine ein steriles OP-Gebiet durch ihre breite antimikrobielle Wirkung gegen viele auf der Haut vorkommende Mikroorganismen.

Dermadine ist mit Klebstoff beschichtet, der Iodophore beinhaltet, welche die Sterilität durch langsame Freisetzung gewährleisten und aufrechterhalten. Die Inzisionsfolie Dermadine sollte daher als letzter Schritt bei der Vorbereitung des OP-Feldes verwendet werden.

Die Inzisionsfolie eignet sich für alle Arten von chirurgischen Eingriffen.


## Lang wirkend

Das Vorhandensein von an Acrylat gebundenen Iodophorgruppen garantiert die kontinuierliche Freisetzung und den fortwährenden Bestand von Jod über einen längeren Zeitraum, sogar von mehr als 24 Stunden.

Durch diese Eigenschaft eignet sich das Produkt für lange chirurgische Eingriffe.



MESSUNG DER ANTIBAKTERIELLEN AKTIVITÄT (GEMÄSS ISO 22196:2011)

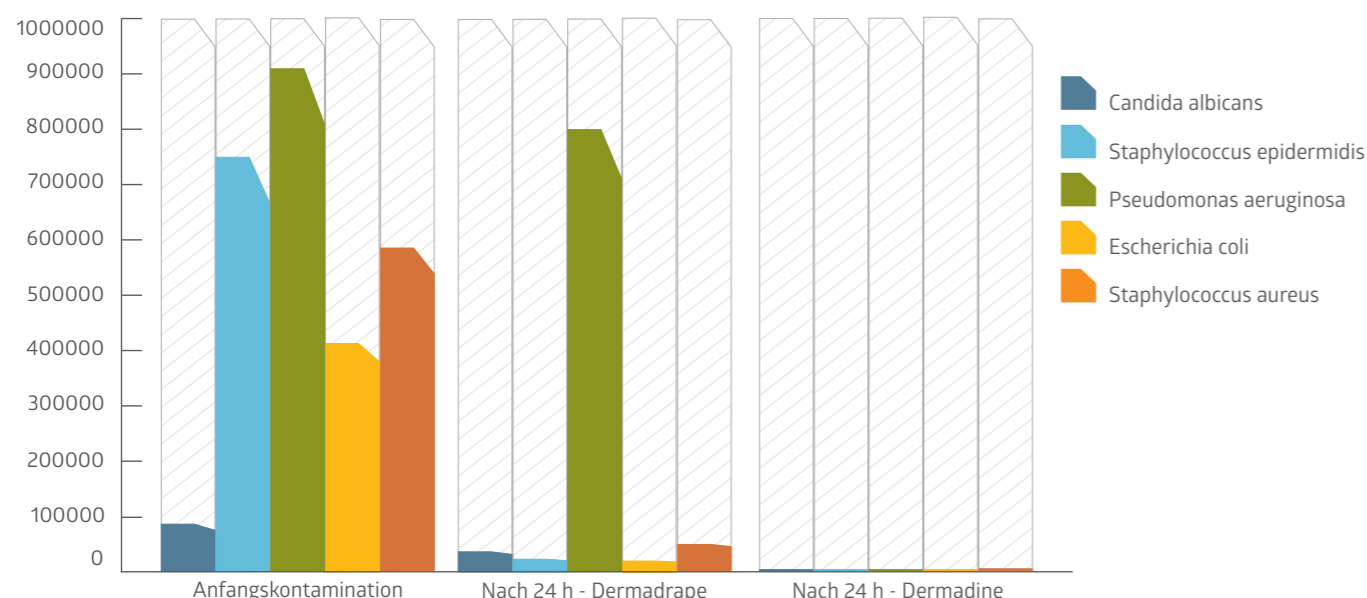


## Schnell wirkend

Bei der Anwendung beweist die Inzisionsfolie Dermadine ihre starke antimikrobielle Wirkung. 30 Minuten nach dem Aufbringen von Dermadine lässt sich eine signifikante Verringerung der biologischen Belastung feststellen, die sich nach und nach stabilisiert. Dermadine garantiert konstante Asepsis auf der Haut des Patienten, auch über einen längeren Zeitraum.


## Anpassungsfähig und einhüllend

Natürlich elastisch und ultradünn für perfekte Passform und Anpassung an anatomische Strukturen und Verbindungen. Dermadine passt sich großen Muskeldeformationen an (sogar bei der Verwendung selbstblockierender Retraktoren), ohne dass dabei die Klebeeigenschaften verloren gehen.

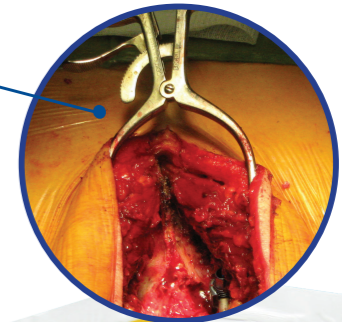


## Atmungsaktiv, wasserabweisend und wasserdicht

Dermadine verbindet flüssigkeitsabweisende Eigenschaften (Blut, Wasser) mit Wasserdampfdurchlässigkeit und verhindert so Flüssigkeitsansammlungen, die die Klebefähigkeit bei langen Eingriffen verringern können. Die atmungsaktive Folie garantiert vollständige Undurchdringlichkeit für Mikroorganismen.

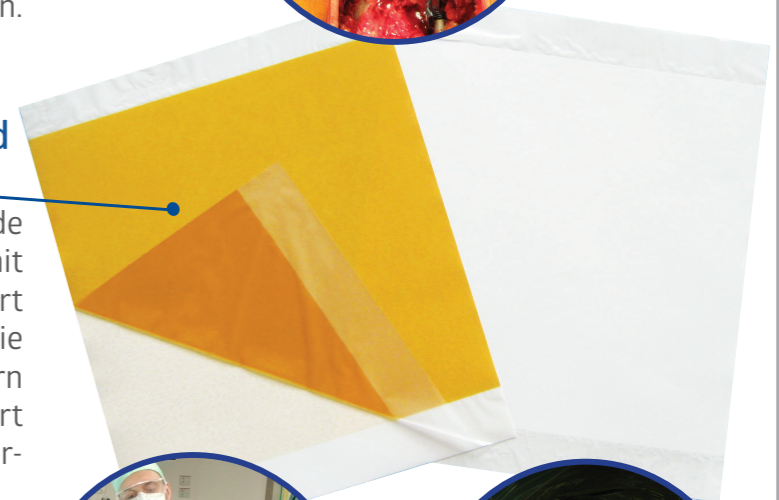

## Stark und blendfrei

Zusätzlich zu ihrer hervorragenden Reißfestigkeit ermöglicht Dermadine zudem den einfachen chirurgischen Einschnitt mit jeder Skalpellklinge und bietet bei dünner Haut indirekten Schutz vor Reißen.

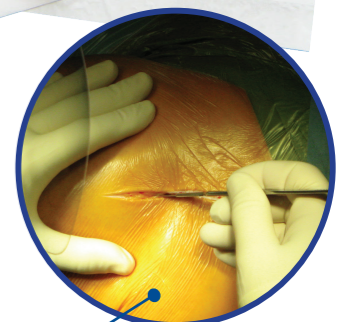

Die blendfreien Eigenschaften bieten perfekte Sicht am Einschnittspunkt bei reflektiertem Licht.

## Klebstoff mit antimikrobiellem Wirkstoff

Der hautfreundliche medizinische Klebstoff ermöglicht besonders schonendes Kleben auf allen Hautflächen und insbesondere an den Wundrändern, ohne zu Hautreizungen zu führen. Die in Polyacryl ausgeführte Gitterstruktur im Dermadine-Klebstoff enthält einen Iodophorkomplex. Als oberflächenaktiver J-Träger transportiert dieser das Jod und beginnt mit dessen Freigabe bei Anbringung auf der Haut. Der Acrylklebstoff verhält sich bei der Entfernung atraumatisch, selbst auf der Haut von älteren Patienten und garantiert, dass nach dem Entfernen keine Klebstoffreste zurückbleiben.

## Lagerung

Lagern Sie das Produkt bei Zimmertemperatur, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt, in der Schutzverpackung in einem belüfteten Bereich. Vermeiden Sie Temperaturschwankungen.

## Sterilisierungsmittel

Gammastrahlen

## Entsorgung

Nach der Verwendung gilt das Medizinprodukt als Sondermüll.

## Klassifizierung Medizinprodukt

DERMADRAPE®: Klasse IIa

CND code: T02010101

DERMADINE® Klasse IIa

CND code: T02010102

## Verpackung













- Einzeln verpackt
- Ablösbare Etiketten für Rückverfolgbarkeit und Dokumentation
- Für den Verkauf in kleineren Spenderboxen erhältlich
- In für den Kunden erstellten SPT-Sets erhältlich



Tiasset Loc Botriolo  
S.P.A. Km 5,100  
52020 Castelfranco di Sopra  
(AR) Italia



0373 Istituto Superiore di Sanità

DERMADINE® ARTIKEL- NUMMER	MASSE (CM)	EINHEIT- EN JE BOX	EINHEITEN JE KARTON	DERMADRAPE® ARTIKEL- NUMMER*
42020 	20x20cm Klebe- fläche. 15x20cm	20	120 (6x20)	32020 
nicht verfügbar	35x25cm Klebe- fläche. 30x25cm	20	120 (6x20)	33525 
44040 	40x40cm Klebe- fläche. 34x40cm	15	90 (6x15)	34040 
nicht verfügbar	50x48cm Klebe- fläche. 44x48cm	15	90 (6x15)	35050 
47045 	70x45cm Klebe- fläche. 60x45cm	10	90 (6x15)	37045 
48060 	80x60cm Klebe- fläche. 60x60cm	10	60 (6x10)	38060 
48080 	80x80cm Klebe- fläche. 70x80cm	10	60 (6x10)	38080 

*\*Medline ist auch Anbieter von Dermadrape. Vollständiges Sortiment von Inzisionsfolien ohne Jodbehandlung.*

*Weitere Informationen über unsere Produkte erhalten Sie von Ihrem Medline-Vertreter oder auf unserer Website [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)*



Medline International Germany GmbH  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland  
Tel. +49 2821 7510-0  
Fax. +49 2821 7510-7802

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

Medline International Switzerland Sàrl  
A-One Business Center  
Z.A. la pièce N°1 - A5  
1180 Rolle  
Schweiz  
Tel. +41 848 244 433  
Fax. +41 848 244 100  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

Medline Austria GmbH  
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati  
Parking 2  
1010 Wien  
Österreich  
Tel: +43 800 201 878  
Fax: +43 800 201 879  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

Wir behalten uns das Recht auf Korrektur etwaiger in dieser Broschüre enthaltener Fehler vor.

©2017 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Handelsmarke der Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL  
ML565-DE02/OL/SG 11/2017.