



**SYSTEME DE BARRIERE STERILE
POUR INCISIONS CHIRURGICALES.**

Champs à inciser Dermadine® & Dermadrape®

Une meilleure asepsie pour plus de sécurité

CHAMP À INCISER DERMADINE®

La préparation préopératoire de la peau et la désinfection du site opératoire sont des étapes nécessaires à la réduction de la biocharge cutanée lors d'une intervention chirurgicale.

Lors des interventions longues et nécessitant une asepsie complète, le champ à inciser Dermadine garantit une stérilité durable de la peau grâce à son action antimicrobienne à large spectre agissant sur de nombreux microbiotes cutanés.

La masse adhésive, imprégnée d'un iodophore à libération progressive et continue, assure le maintien de la stérilité tout au long de l'intervention. Ce produit est compatible avec tout type de chirurgie.


Le champ à inciser Dermadine ne dispense pas des étapes de détergence et de désinfection du site opératoire. Il doit être appliqué à la fin de la préparation cutanée.

Libération progressive

La présence de l'iodophore dans la masse adhésive permet la libération progressive et la présence et continue de l'iode, même au-delà de 24 heures après la mise en place. Cette propriété garantit l'efficacité de Dermadine même sur les chirurgies longues.



MESURE DE L'ACTIVITÉ ANTIBACTÉRIENNE (SELON ISO 22196:2011)

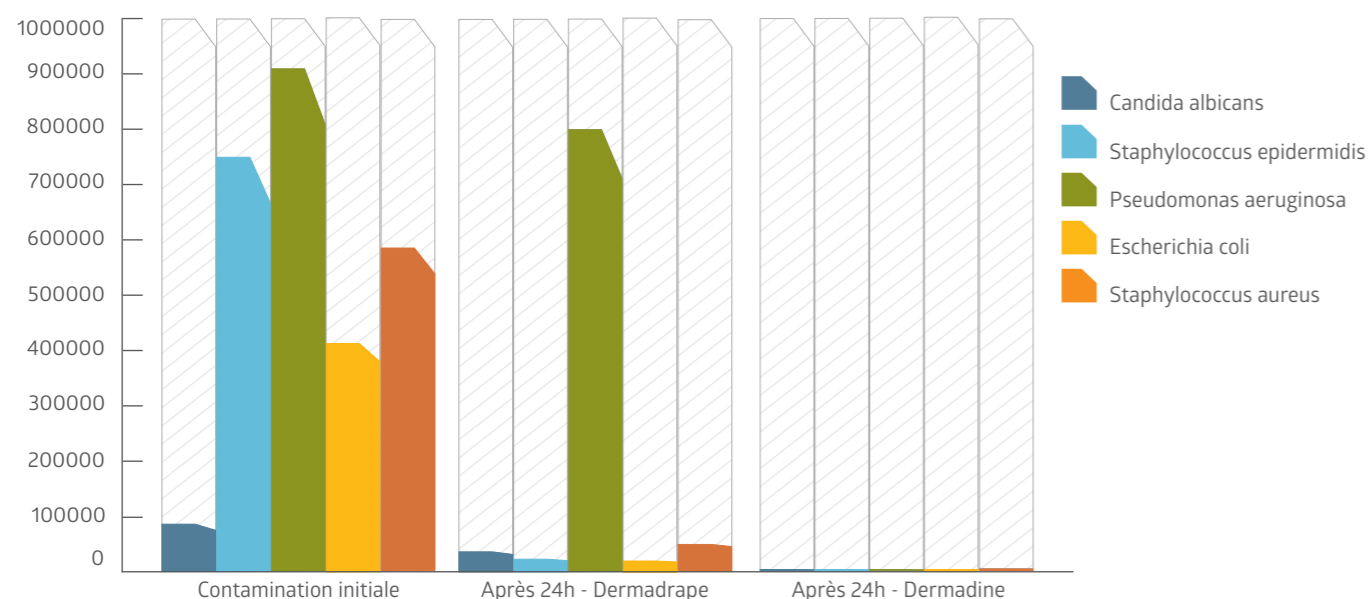


Action rapide

Une fois mis en place, le champ à inciser Dermadine montre une forte activité antimicrobienne. Dans les 30 minutes suivant l'application de Dermadine, on observe une réduction significative de la biocharge, puis une stabilisation graduelle. Dermadine garantit une stérilité constante de la peau du patient et sur une longue durée.


Conformable et couvrant

Naturellement élastique et ultra fin, le film épouse parfaitement les courbes associées à l'anatomie. Dermadine s'adapte aux importantes déformations musculaires (même lors de l'utilisation d'écarteurs autostatiques) sans perte d'adhésivité.

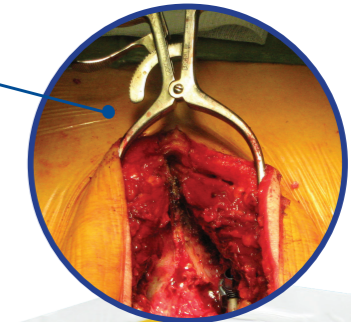

Respirant, déperlant et imperméable

Dermadine est déperlant au sang et à l'eau, tout en restant respirant à la vapeur d'eau. Cette propriété permet d'éviter l'humidification du milieu pouvant réduire l'adhésivité du champ à inciser lors de procédures longues. Ce film respirant assure une barrière complète aux micro-organismes.

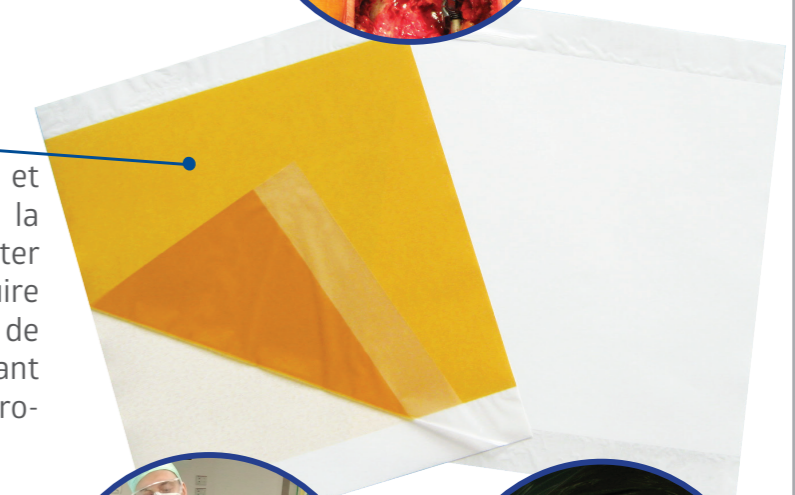

Résistant et anti-reflet

En plus de son excellente résistance à l'étirement, Dermadine permet une incision chirurgicale facile quelque soit le scalpel utilisé, et protège indirectement le patient des risques de déchirures des peaux fines.



Sa propriété anti-reflet procure une parfaite visibilité de la zone d'incision même sous la présence de lumière réfléchi.

L'adhésif associé à un agent antimicrobien

Un adhésif médical dermocompatible permet une excellente adhérence sur tout types de peaux et plus spécifiquement sur les bords de l'incision, sans aucune irritation de la peau. La structure polyacrylique de l'adhésif du Dermadine contient un complexe d'iode. Un agent solubilisant diffuse l'iode et commence sa libération dès l'application sur la peau. L'adhésif acrylique permet un retrait atraumatique du film, même sur les peaux les plus fragiles et sans laisser de résidus adhésifs après retrait.

Stockage

Conserver le produit à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité, dans une pièce aérée, loin du sol, dans son emballage de protection. Éviter les températures extrêmes.

Mode de stérilisation

Irradiation

Élimination

Après emploi, le dispositif médical doit être éliminé conformément aux législations nationales en vigueur.

Classification du dispositif médical

DERMADRAPE® : Classe IIa
 CND code : T02010101
 DERMADINE® Classe IIa
 CND code : T02010102












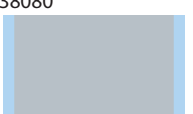
Emballage

- Emballé dans un sachet de stérilisation pelable individuel
- Étiquettes de traçabilité détachables
- Possibilité de commande par boîte distributrice
- Disponibles dans les packs personnalisés Medline



Tiasset Loc Botriolo
 S.P. Km 5,100
 52020 Castellfranco di Sopra
 (AR) Italia

CE 0373 Istituto Superiore di Sanità

RÉFÉRENCE DERMADINE®	DIMENSIONS (CM)	COND. PAR BOÎTE	COND. PAR CAISSE	RÉFÉRENCE DERMADRAPE® *
42020 	20x20cm Adh. 15x20cm	20	120 (6x20)	32020 
NA	35x25cm Adh. 30x25cm	20	120 (6x20)	33525 
44040 	40x40cm Adh. 34x40cm	15	90 (6x15)	34040 
NA	50x48cm Adh. 44x48cm	15	90 (6x15)	35050 
47045 	70x45cm Adh. 60x45cm	10	90 (6x15)	37045 
48060 	80x60cm Adh. 60x60cm	10	60 (6x10)	38060 
48080 	80x80cm Adh. 70x80cm	10	60 (6x10)	38080 

*Medline propose également sa gamme Dermadrape, les films à inciser non-imprégnés

Pour plus d'information sur nos produits, veuillez contacter votre responsable commercial Medline ou notre site internet www.medline.eu/fr



Medline International France SAS
 Le Val St-Quentin
 2 Rue René Caudron
 Bâtiment 13F
 78960 Voisins-le-Bretonneux
 France
 Tel: +33 1 30 05 34 00
 Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
 Pegasuslaan 5
 1831 Diegem
 Belgique
 Tel: +32 2 808 74 93
 Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
 A-One Business Center
 Z.A. la pièce N°1 - A5
 1180 Rolle
 Suisse
 Tel. +41 848 244 433
 Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com

Avant utilisation veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquetages correspondant.

Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur pouvant se produire dans cette brochure.

© 2017 Medline et le logo Medline sont des marques déposées de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML565-FR02/LS 11/2017.