



**SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL  
PARA INCISÕES CIRÚRGICAS.**

**Campos cirúrgicos Dermadine® e Dermadrape®**  
Maior esterilidade para uma maior segurança

## CAMPO DE INCISÃO DERMADINE®

A limpeza, como a preparação para a cirurgia, combinada com a desinfecção da pele, são dois passos necessários para a redução inicial da carga bacteriana superficial. Porém, os microrganismos da pele são reduzidos, mas não eliminados, e podem sobreviver nas pregas cutâneas microscópicas.


Quando é necessária uma assepsia completa e duradoura, o campo de incisão Dermadine garante a manutenção de um campo estéril, através da atividade antimicrobiana de largo espectro em muitos dos microrganismos presentes na pele.

O adesivo contém iodóforos de iodo de liberação lenta, assegura que se alcance e se mantenha durante o período necessário o máximo de esterilidade. É também adequado para todos os tipos de procedimentos cirúrgicos.


Por conseguinte, os campos de incisão Dermadine devem ser utilizados na etapa final da preparação do campo cirúrgico.

### Longa duração

A presença dos grupos de iodóforos unidos a acrilatos garante uma ação de liberação e uma presença constante de iodo por um tempo considerável, mesmo superior a 24 horas. Esta característica torna o produto adequado para procedimentos cirúrgicos prolongados.

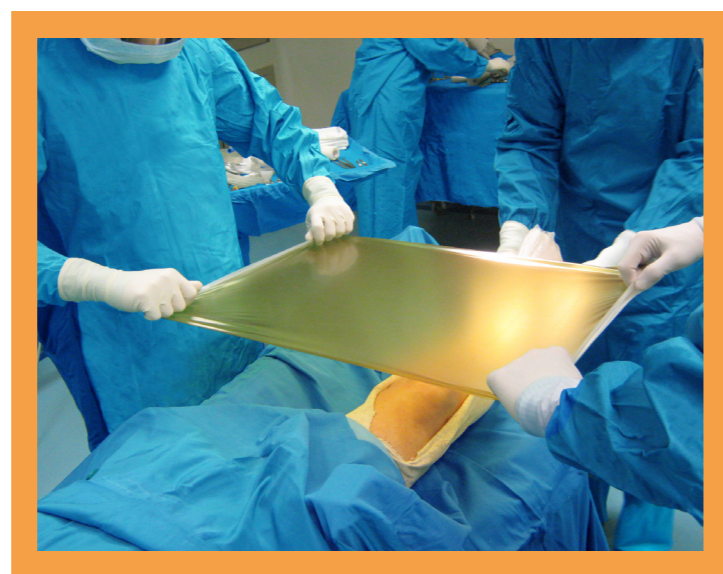

### MEDIÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA (DE ACORDO COM A NORMA ISO 22196:2011)

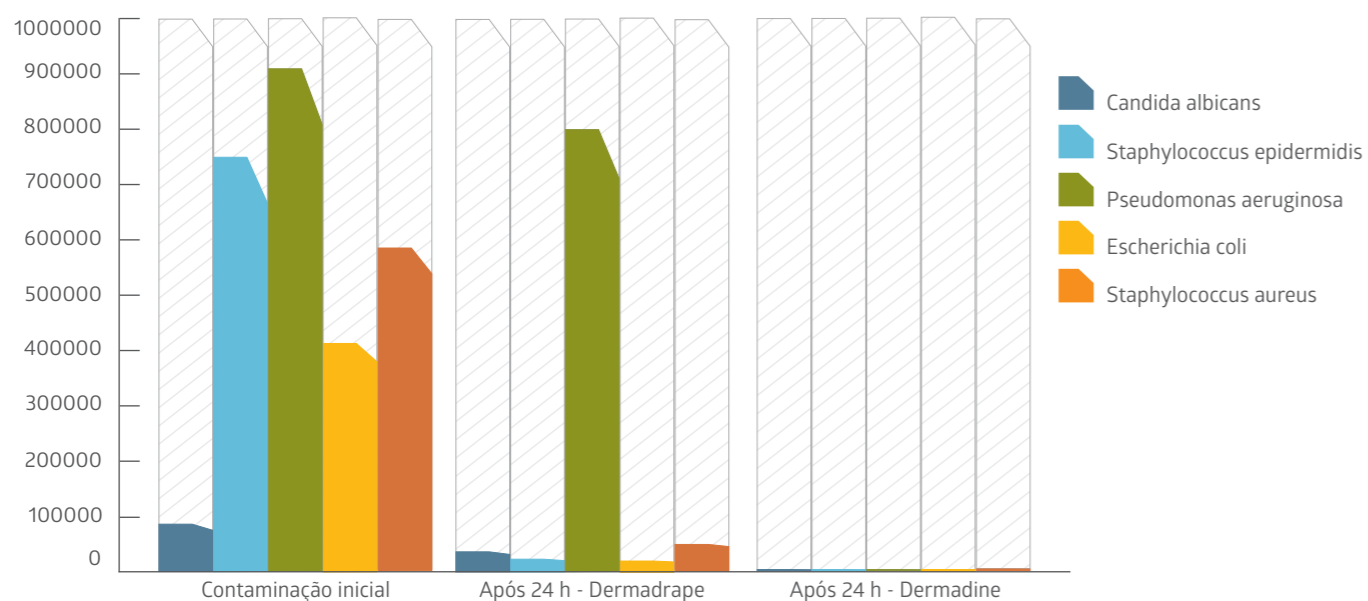


### Ação rápida

Quando é aplicado, o campo de incisão Dermadine tem uma forte atividade antimicrobiana. Após 30 minutos da aplicação de Dermadine, há uma redução considerável de carga biológica, que estabiliza gradualmente com o tempo. O Dermadine garante uma assepsia constante na pele do doente, mesmo durante períodos prolongados.


### Adaptável e envolvente

Naturalmente elástico e ultrafino para garantir um ajuste perfeito a estruturas anatômicas e articulações. O Dermadine adapta-se a grandes deformações de músculos (mesmo quando são utilizados afastadores auto-estáticos) sem perder as propriedades adesivas.

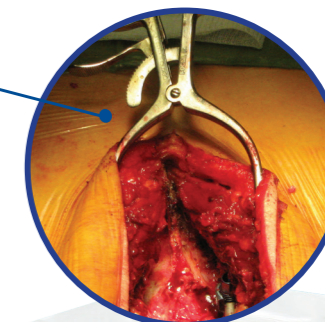


### Respirável, repelente e impermeável

O Dermadine combina as características de repelência ao sangue e à água com a respirabilidade ao vapor de água, para impedir a acumulação de líquidos que podem reduzir a adesividade durante longos períodos. A película respirável garante uma impermeabilidade total a microrganismos.

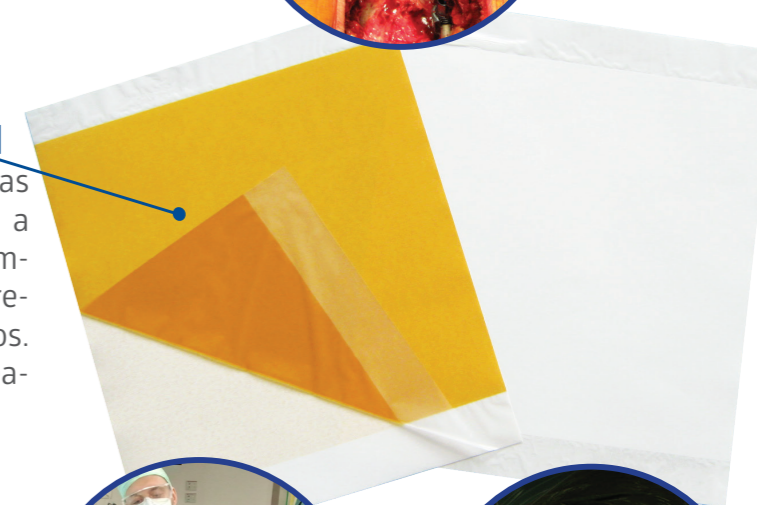

### Resistente e anti-brilho

Além da excelente resistência à rotura, a Dermadine também permite uma fácil incisão cirúrgica com qualquer lâmina de bistúri indiretamente, proporcionando proteção às peles finas e delicadas. As propriedades anti-brilho permite uma visibilidade perfeita da incisão na presença do reflexo da luz.

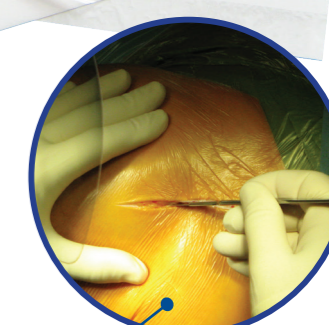

### Aderência e presença de agentes antimicrobianos

O adesivo médico dermo-compatível, permite uma correta adesividade em todos os tipos de peles e superfícies e em especial junto à ferida cirúrgica, sem causar qualquer irritação cutânea. A estrutura poliacrílica do campo Dermadine contém um complexo iodóforo. O surfatante J-Carrier transporta o iodo e começa a libertá-lo após a aplicação na pele. O adesivo acrílico é atraumático quando é retirado, mesmo na pele de idosos, não deixando resíduos.

## Armazenamento

Armazene o produto à temperatura ambiente, protegido contra a luz e a humidade em áreas ventiladas acima do nível do solo, na embalagem de proteção. Evite temperaturas extremas.

## Agente de esterilização

Radiação gama

## Eliminação

Após a utilização, o dispositivo médico é considerado um resíduo especial.

## Classificação do dispositivo médico

DERMADRAPE®: Classe IIa Código

CND: T02010101

DERMADINE® Classe IIa Código

CND: T02010102

## Embalagem

- \* Embalagem individual esterilizada
- \* Etiquetas destacáveis para traçabilidade e registos do paciente
- \* Disponível para venda em embalagens dispensadoras
- \* Disponível para serem incluídos nos conjuntos personalizados Medline



Tiasset Loc Botriolo  
S.P. Km 5,100  
52020 Castellfranco di Sopra  
(AR) Italia

CE 0373 Instituto Superiore di Sanità

REFERÊNCIA DO ARTIGO DERMADINE®	DIMENSÕES (EM CM)	UNIDADES POR EMBALAGEM	UNIDADES POR CAIXA	REFERÊNCIA DO ARTIGO* DERMADRAPE®
42020	20x20cm Adesivo 15x20cm	20	120 (6x20)	32020
NA	35x25cm Adh. 30x25cm	20	120 (6x20)	33525
44040	40x40cm Adesivo 34x40cm	15	90 (6x15)	34040
NA	50x48cm Adesivo 44x48cm	15	90 (6x15)	35050
47045	70x45cm Adesivo 60x45cm	15	90 (6x15)	37045
48060	80x60cm Adesivo 60x60cm	10	60 (6x10)	38060
48080	80x80cm Adesivo 70x80cm	10	60 (6x10)	38080

*\*A Medline também dispõe de campo de incisão a Dermadrape. Uma gama completa de ampos de incisão sem tratamento de iodo.*

*Para obter mais informações sobre os nossos produtos, contacte o seu representante de vendas da Medline ou visite o nosso site em [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)*



Medline International Portugal Unipessoal LDA  
Campo Grande, 137, 1º dtº  
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande  
1700 089 Lisboa  
Portugal  
Tel: 351 808 29 19 21  
Fax: 351 808 29 19 22  
[pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)

Antes de usar, consulte as instruções de uso e as precauções na rotulagem correspondente.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam estar presentes nesta brochura.

©2018 Medline é uma marca registada da Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML565-PT01/DD 02/2018.