



**LINEE DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE MONOUSO.**

Dispositivi di protezione
Per personale sanitario e ricercatori

Perchè sempre più ospedali e gruppi d'acquisto scelgono Medline per la scelta dei dispositivi di protezione?

I prodotti Medline hanno elevati standard di protezione al massimo comfort e vestizione.

Oggi giorno è necessario potere fornire i migliori prodotti per la protezione dell'operatore per consentirgli di lavorare in sicurezza, tranquillità e con buon livello di comfort. Per questo motivo utilizziamo i migliori materiali disponibili e Medline è costantemente alla ricerca di innovazioni. Appliciamo i più esigenti standard di qualità ai nostri prodotti e ai nostri impianti di produzione.



Medline International France è certificata ISO 13485. Medline produce abbigliamento protettivo da oltre 40 anni.

Indice:

| | |
|--|-------|
| Guida ai materiali | 3 |
| Livelli di protezione | 3 |
| Tabella Camici isolamento | 4-5 |
| Camici di protezione | 6 |
| Camici resistenti ai liquidi | 7 |
| Camici isolamento impervi | 8-9 |
| Camici procedurali Prevention plus preparazione antiblastici | 10 |
| Camici isolamento sterili | 11 |
| Copriscarpe | 12 |
| Kit pazienti e visitatori | 13 |
| Camici per pazienti | 14 |
| Giubbini di protezione e da laboratorio | 15 |
| Divise Monouso | 16 |
| Divise Monouso Clean Air | 18 |
| Cappellini e cuffiette | 20-23 |



GUIDA AI MATERIALI

Medline presenta i materiali utilizzati per la realizzazione dei dispositivi medici e disposizione di protezione individuale. Tale guida è di riferimento per tutti i prodotti presenti nelle brochure. Nelle colonne di destra vengono riportati il grado di protezione e di comfort dei vari materiali.

Spundond Polipropilene

È il Tessuto "base" di tutti gli indumenti protettivi di tipo standard, realizzato mediante tessitura di fibre (bonding) che generano un unico strato di materiale traspirante e confortevole, molto simile al tessuto. Dei tessuti utilizzati è il materiale più economico presente sul mercato.



Materiale Pluri-Strato SMS

Questo tessuto è costituito da strati intermedi di polipropilene fuso e filato (secondo tecnica meltblown) inseriti tra due strati esterni di spunbond polipropilene. Materiale, resistente e traspirante, il cui confezionamento multistrato fornisce una ottima combinazione tra protezione e comfort.



Polipropilene rivestito

Tessuto in spunbond polipropilene con uno strato di Polietilene impervio. Ideale per procedure che richiedono un elevato livello di protezione e di esposizione ai liquidi. Disponibile in varie grammature (medio e pesante).



Polietilene

Il Polietilene è il tessuto con il maggior effetto barriera ed impervietà. Ideale per tutte quelle procedure in cui è necessaria impervietà completa.



Prevention Plus

Prevention Plus è impermeabile e altamente traspirante realizzato da una pellicola "ibrida" laminata a tra due strati di spunbond bi-componente. È ideale in procedure lungo termine in cui è richiesta impervietà completa.



Livelli di Barriera Protettiva

Direttive europee per la classificazione dell'abbigliamento protettivo

I prodotti elencati nella brochure sono classificati secondo le Normative europee, come DPI I categoria-minimo livello in accordo alla Direttiva 89/686/CEE o come DM di classe I non sterili in accordo alla Direttiva dei Dispositivi Medici 93/42/CEE. Si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto, al fine di verificare la classificazione del prodotto.

La Direttiva 93/42/EEC si applica ai dispositivi medici e ai loro relativi accessori. Per dispositivo medico si intende qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, materiale o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione con altri, compreso il software previsto dal fabbricante, impiegato allo scopo di diagnosi, prevenzione, controllo e terapie.

La Direttiva 89/686/EEC comunemente indicata come DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), stabilisce le condizioni di immissione sul mercato, la libera circolazione all'interno della comunità Europea e i requisiti essenziali di sicurezza che i DPI devono soddisfare per garantire la protezione della salute e la sicurezza degli utilizzatori.

TABELLA CAMICI ISOLAMENTO

| Prodotti | Codici | Taglia | Lunghezza camice (cm) | Colore camice | Materiale | Polsini | Chiusura collo | Resistenza alla penetrazione liquidi EN20811 cmH ₂ O | Resistenza alla penetrazione microbica secondo EN ISO 22610 EN ISO 22612 | Resistenza alla penetrazione da contaminazione particelle solide EN ISO 22612 per EN 14126 | Destinazione d'uso | | |
|---|---|-----------|-----------------------|---------------|--|-----------------------|--------------------|---|--|--|--|---------------|--|
| Camici di protezione | CRIE4000 | L | 114 | Giallo | Polipropilene (SPP) | Elastico | Lacci | N/a | N/a | N/a | Camice leggero progettato per limitare la contaminazione per i visitatori. Destinato ad essere usato come camice di protezione per visitatore. Non adatto per esposizione di liquidi ed esposizione batterica. | | |
| | CRIE4000G | L | | | | | | | | | | | |
| | CRIE4000B | L | | | | | | | | | | | |
| | CRIE4001 | XL | 127 | Giallo | | Maglina elasticizzata | | | | | | | |
| | CRIE4001G | XL | | | | | | | | | | | |
| | CRIE4001B | XL | | | | | | | | | | | |
| | CRIE4001CF | XL | | | | | | | | | | | |
| | CRIE4001BCF | XL | | | | | | | | | | | |
| Camici da isolamento resistenti ai fluidi | NONE27SMS3 | L | 114 | Giallo | Polipropilene(SMS) | Elastico | Lacci | 20 | N/a | N/a | Consigliato per procedure bassa esposizione di liquidi ed agenti biologici. | | |
| | NONE27SMS3XL | XL | 127 | | | | Lacci | 20 | N/a | | | | |
| | NONELV200 | L | 114 | | | | Striscia bloccante | 28.4 | N/a | | | | |
| | NONELV200XL | XL | 127 | | | | | 28.4 | N/a | | | | |
| | NONELV200C | L | 114 | | Polipropilene(SMS) | Maglina elasticizzata | Lacci | 28.4 | N/a | N/a | N/a | | |
| | NONELV200CXL | XL | 127 | | | | | N/a | | | | | |
| | NONE386CF | L | 118 | | Polipropilene(SMS) | Maglina elasticizzata | Lacci | 57.3 | Classe 1 | Classe 3 | Consigliato per procedure con media esposizione ai fluidi. I camici sono comodi, traspiranti e confortevoli in tutte le taglie per una protezione completa. | | |
| | NONE386LCF | XL | 135 | | | | | 57.3 | Classe 1 | | | | |
| | NONE326CF* | L | 118 | | | | Velcro | 57.3 | Classe 1 | | | | |
| | NONE326LCF* | XL | 135 | | | | | 57.3 | Classe 1 | | | | |
| Camici isolamento impervi | CRIE4040C* | L | 114 | Giallo | Biaccoppiato Polipropilene/Polietilene | Maglina elasticizzata | Lacci | 124 | Classe 6 | Classe 3 | Consigliato per procedure con elevata esposizione ai fluidi. | | |
| | CRIE4041C* | XL | 135 | | | | | 124 | | | | | |
| | CRIE4020CF* | L | 114 | | | | | 78 | | | | | |
| | CRIE4021VCF* | L | 114 | | | | Velcro | > 149.2 | | | | | |
| | CRIE4022VCF | XXL | 140 | | | | | > 120 | | | | | |
| | CRIE4010CF | L | 114 | | | | Lacci | > 120 | | | | | |
| | CRIE4011CF | XL | 127 | | | | | > 120 | | | | | |
| | CRIE4010RCF | L | 114 | | | | | 91 | | | | | |
| | NONE27116 | L | 114 | | | | | 111 | | | | | |
| | NONE27116XL | XL | 127 | | | | | 111 | | | | | |
| | CRIE5000 | L | 114 | | | | Polietilene | Ferma dito | | | | Over the head | 111 |
| | CRIE5001 | XL | 134 | | | | | | | | | | 50.5 |
| | Camici di protezione per preparazione/somministrazione chemioterapici | NONE27457 | L | | 114 | Giallo | Prevention Plus | Maglina elasticizzata | Velcro | > 200 | Classe 6 | Classe 3 | Consigliato per procedure ad alto rischio d'esposizione a liquidi. |
| NONE27457XL | | XL | 127 | > 200 | | | | | | | | | |
| Camici da isolamento sterili | CRIE4020CE* | L | 114 | Giallo | Biaccoppiato Polipropilene/Polietilene | Maglina elasticizzata | Lacci | 78.5 | Classe 6 | Classe 3 | Consigliato per procedure con media esposizione ai fluidi. I camici sono comodi, traspiranti e confortevoli in tutte le taglie per una protezione completa. | | |
| | NONE326XLCE | XL | 135 | | | | | Polipropilene(SMS) | | | | Velcro | 57.3 |

* Questi camici d'isolamento hanno il lato posteriore in materiale traspirante

CAMICI DI PROTEZIONE

Camici di protezione - Polipropilene grammatura leggera

Ideale per la protezione degli operatori e dei visitatori, ideale per prevenire le contaminazioni

- Vestizione totale, traspirante e confortevole
- Chiusura posteriore vita e collo con lacci, disponibili con polsini elastici o in maglia

| Codice | Taglia | Color | Confezionamento |
|--|--------|--------|---------------------|
| Camici da isolamento con polsino elastico | | | |
| CRIE4000 | L | Giallo | 10/scatola, 50/caso |
| CRIE4000G | L | Verde | 10/scatola, 50/caso |
| CRIE4000B | L | Blue | 10/scatola, 50/caso |
| CRIE4001 | XL | Giallo | 10/scatola, 50/caso |
| CRIE4001G | XL | Verde | 10/scatola, 50/caso |
| CRIE4001B | XL | Blue | 10/scatola, 50/caso |
| Camici da isolamento con polsino in maglia | | | |
| CRIE4001CF | XL | Giallo | 10/scatola, 50/caso |
| CRIE4001BCF | XL | Blue | 10/scatola, 50/caso |



CRIE4001



CRIE4001G



CRIE4001BCF

CAMICI RESISTENTI AI LIQUIDI

Camici da isolamento resistenti ai liquidi - Grammatatura leggera SMS

Ideale per procedure basso rischio d'esposizione a liquidi non biologici

- Traspirante e confortevole
- Camici da isolamento con polsino elastico

| Codice | Taglia | Color | Confezionamento |
|---|--------|--------|----------------------|
| Colore blu, chiusura collo e vita con lacci, polsini elastici | | | |
| NONE27SMS3 | L | Blue | 10/scatola, 50/caso |
| NONE27SMS3XL | XL | Blue | 10/scatola, 50/caso |
| Polsini elastici, chiusura collo tab/striscia | | | |
| NONELV200 | L | Giallo | 10/scatola, 100/caso |
| NONELV200XL | XL | Giallo | 10/scatola, 100/caso |
| Polsini in maglia, chiusura al collo e vita con lacci | | | |
| NONELV200C | L | Giallo | 10/scatola, 100/caso |
| NONELV200CXL | XL | Giallo | 10/scatola, 100/caso |



NONE27SMS3


Camici di isolamento resistenti ai liquidi - Grammatatura Media SMS

Ideale per procedure basso rischio d'esposizione a liquidi non biologici

Il camice garantisce ottima protezione dai liquidi non biologici, offrendo un buon livello di comfort e traspirabilità.

| Codice | Taglia | Color | Confezionamento |
|---|--------|--------|----------------------|
| Polsini in maglia, chiusura collo e vita con lacci, porzione posteriore traspirante | | | |
| NONE386CF | L | Giallo | 10/scatola, 100/caso |
| NONE386XLCF | XL | Giallo | 10/scatola, 100/caso |
| Polsini in maglia, chiusura collo in velcro, chiusura vita con lacci | | | |
| NONE326CF | L | Giallo | 10/scatola, 100/caso |
| NONE326XLCF | XL | Giallo | 10/scatola, 100/caso |

! NONE326XLCF è disponibile in versione sterile NONE326XLCE

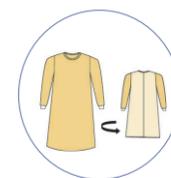

NONE386CF e NONE386XLCF corpo e maniche sono realizzate in SMS mentre la porzione posteriore è in Spunbond polipropilene



NONE326CF

CAMICI ISOLAMENTO IMPERVI

Camici da isolamento impervi - Rivestiti in polipropilene

Camici isolamento bilaminato impervi ideali per procedure alto rischio di esposizione ai liquidi

I camici da isolamento hanno polsini in maglia, lacci al collo ed in vita. Il design del camice è tale da garantire massima vestibilità e protezione per lo svolgimento di ogni attività lavorativa NONE27279OHXL è un modello "over the head" con pannello posteriore aperto.

Camici sono testati per:

- EN ISO 22610 e EN 14126:classe 6-Resistenza penetrazione batterica a secco
- EN ISO 22612 e EN14126:classe 3-Resistenza penetrazione particelle solide contaminanti)



CRIE4011CF



CRIE4010RCF

| Codice | Taglia | Color | Confezionamento |
|---------------|--------|--------|---------------------|
| CRIE4010CF | L | Giallo | 10/scatola, 50/caso |
| CRIE4011CF | XL | Giallo | 10/scatola, 50/caso |
| CRIE4010RCF | L | Red | 10/scatola, 50/caso |
| NONE27116 | L | Blue | 10/scatola, 50/caso |
| NONE27116XL | XL | Blue | 10/scatola, 50/caso |
| NONE27279OHXL | XL | Blue | 10/scatola, 50/caso |


Camici isolamento impervi con film polietilene e pannello posteriore traspirante

Ideali per procedure ad alto rischio di esposizione ai liquidi. Il materiale è testato contro penetrazione virale in conformità standard ASTM F1671 o ISO 16604

I camici da isolamento monouso hanno la parte anteriore e le maniche in tessuto biaccoppiato impervio ed il pannello posteriore in materiale traspirante. Questo particolare design offre un'ottima soluzione tra la richiesta di comfort e protezione necessaria all'operatore. Il camice è confezionato con polsini in maglia elasticizzata, chiusura al collo disponibile sia con lacci che con velcro, chiusura in vita con lacci per maggiore sicurezza e stabilità durante l'uso.

- Camici sono testati per:
- -EN ISO 22610 e EN 14126:classe 6-Resistenza penetrazione batterica a secco
- -EN ISO 22612 e EN14126:classe 3-Resistenza penetrazione particelle solide contaminanti

| Codice | Taglia | Color | Confezionamento | Performance del materiale alla penetrazione virale |
|-------------|--------|--------|----------------------|---|
| CRIE4040C | L | Giallo | 10/scatola; 100/caso | Tested per ISO 16604 Class 6- EN 14126 |
| CRIE4041C | XL | Giallo | 10/scatola; 100/caso | Tested per ISO 16604 Class 6- EN 14126 |
| CRIE4020CF | L | Giallo | 10/scatola, 50/caso | Tested per ISO 16604 Class 6- EN 14126 |
| CRIE4021VCF | L | Giallo | 10/scatola, 50/caso | Material passes the ASTM F1671 test. No penetration of bacteriophages |
| CRIE4022VCF | XL | Giallo | 10/scatola, 50/caso | |

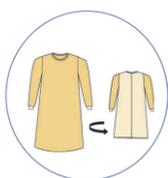

⚠ CRIE4020CF è disponibile nella versione sterile CRIE4020CE

CRIE4040C, CRIE4041C, CRIE4020CF, CRIE4021VCF, CRIE4022VCF sono impervi nella parte anteriore e nelle maniche mentre il pannello posteriore è confezionato in materiale traspirante



CRIE4022VCF

Camici isolamento impervi in polietilene

Indicato per procedure ad alta esposizione di liquidi, ideale per terapie intensive e reparti infettivi.

Camici isolamento impervi in polietilene hanno un design "over the head" e con ferma dito. Camici con foglio di wrap in avvolgimento e confezionati singoli in dispenser.

Camici sono testati per:

- EN ISO 22610 e EN 14126:classe 6-Resistenza penetrazione batterica a secco
- EN ISO 22612 e EN14126:classe 3-Resistenza penetrazione particelle solide contaminanti
- Resistenza alla penetrazione dei liquidi fino a 50,5 cmH₂O

| Codice | Taglia | Color | Confezionamento |
|----------|--------|-------|----------------------------|
| CRIE5000 | L | Blue | 1/scatola, 15/box, 75/caso |
| CRIE5001 | XL | Blue | 1/scatola, 15/box, 75/caso |



CRIE5001

Grembiule bianco monouso

- Protezione efficace contro i liquidi da indossare sopra ad abiti non resistenti ai fluidi o con divise monouso moderatamente resistenti ai fluidi per ottenere un migliore grado di protezione contro liquidi. Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Realizzato in materiale polietilenico colore bianco

| Codice | Description | Confezionamento |
|------------|--|-----------------------|
| NONE24274W | Taglia media 71,1x116,8cm confezionato singolarmente in dispenser. | 50/scatola, 250/ caso |



NONE24274W

CAMICI PROCEDURALI PREVENTION PLUS

Camici "HP" high performance in materiale tristrato testato per resistere alla penetrazione dei farmaci chemioterapici*.

I camici da isolamento sono confezionati con polsini in maglia, striscia di velcro al collo, lacci in vita.

Camici sono testati per:

- EN ISO 22610 e EN 14126:classe 6-Resistenza penetrazione batterica a secco
- EN ISO 22612 e EN14126:classe 3-Resistenza penetrazione particelle solide contaminanti
- Resistenza alla penetrazione dei liquidi maggiore > 200 cmH₂O

Farmaci chemioterapici testati*

Materiale prevention plus è testato contro i seguenti farmaci chemioterapici secondo ASTM F739-99a: Ideali per la preparazione di chemioterapici e per la cura del paziente ad alto rischio di contaminazione virale

- Etoposide (Toposar)
- Paclitaxel (Taxol)
- Thio-Tepa
- Cisplatin
- Mitomycin C
- Vincristine Sulfate
- Dacarbazine
- 5-Fluorouracil
- Carmustine (BICNU)
- Cyclophosphamide (Cytoxan)
- Doxorubicin Hydrochloride

(Test data available upon request)



NONE27457- Gown
NONE27348PXL- Boot covers

| Codice | Taglia | Color | Confezionamento |
|-------------|--------|-------|---------------------|
| NONE27457 | L | Blue | 10/scatola, 30/caso |
| NONE27457XL | XL | Blue | 10/scatola, 30/caso |

Linea completa Prevention Plus in combinazione con copri calzari alti NONE27348PXL

CAMICE ISOLAMENTO STERILE

Camice isolamento sterile in SMS media grammatura

Ideale per procedure sterili in cui è richiesta una moderata esposizione ai liquidi non biologici.

I Camici sono prodotti in SMS ed offrono un aumento della protezione da contaminazione di liquidi e penetrazione microbica privilegiando il livello di comfort e traspirabilità.

| Codice | Taglia | Color | Confezionamento |
|-------------|--------|--------|-----------------|
| NONE326XLCE | XL | Giallo | 50/caso |

Camici isolamento sterili trattati in polipropilene#

Ideale per procedure sterili ad alta esposizione di liquidi.

- Il camice è impervio nelle aree critiche nella parte anteriore e nelle maniche, mentre la parte posteriore è in spundbond polipropilene. Il design garantisce protezione e comfort all'operatore.

Camici sono testati per

- EN ISO 16604 e EN 14126:classe 6-Resistenza alla penetrazione di sangue ed agenti patogeni
- EN ISO 22610 e EN 14126:classe 6-Resistenza penetrazione batterica a secco
- EN ISO 22612 e EN14126:classe 3-Resistenza penetrazione particelle solide contaminanti
- Resistenza alla penetrazione dei liquidi maggiore > 200 cmH₂O

| Codice | Taglia | Color | Confezionamento |
|------------|--------|--------|-----------------|
| CRIE4020CE | L | Giallo | 50/caso |

COPRI CALZARI

I copri calzari Meldine sono realizzati in polietilene o polipropilene. La vasta scelta di modelli permette di scegliere in base al comfort, protezione e prezzo. Alcuni modelli hanno la caratteristica di essere antiscivolo.

| Codice | Taglia | Materiale | Caratteristiche | Confezionamento |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| CRIE2002 | Taglia unica buona vestibilità | TNT Polipropilene | Protezione | 100/scatola, 300/caso |
| CRIE2010 | Taglia unica buona vestibilità | Polyethylene film | Impervio | 1000/caso |
| CRIE2102W | Taglia unica buona vestibilità | TNT Polipropilene | Protezione | 500/scatola, 1000/caso |
| CRIE2020 | Taglia unica buona vestibilità | Film Polietilene+TNT Polipropilene | Impervio | 200/caso |
| NONE28858 | L | TNT Polipropilene | resistente ai liquidi | 100/scatola, 300/caso |
| NONE28859 | XL | TNT Polipropilene | resistente ai liquidi | 100/scatola, 200/caso |



COPRI CALZARI ALTI/COPRISTIVALE

Il design dei copri calzari alti Medline è dimensioni idonee per la vestibilità. La gamma di prodotti offre alta traspirabilità, resistenza ai fluidi e comfort. Per garantire maggiore sicurezza all'operatore, i calzari hanno una striscia di chiusura alla cavaglia o elastico alla cavaglia. La chiusura al ginocchio invece è con elatico.

| Codice | Taglia | Caratteristiche | Confezionamento |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| NONE27143XL | Taglia unica buona vestibilità | resistente ai liquidi | 50/scatola, 150/caso |
| NONE27144 | Taglia unica buona vestibilità | Impervio | 50/scatola, 150/caso |
| NONE27348PXL | Taglia unica buona vestibilità | Traspirante ed impervio | 50/scatola, 150/caso |

NONE27143XL

- Traspiranti, materiale resistente ai liquidi sopra la cavaglia
- Altamente fluido resistente sulla suola
- Cuciture sigillate sul piede



NONE27143XL

NONE27144

- Impervi e realizzati in poli propilene trattati in polietilene
- Altamente fluidi resistente sulla suola
- Chiusura di velcro alla cavaglia per regolazione della chiusura



NONE27144

NONE27348PXL

- Realizzati in materiale Prevention Plus
- Chiusura di velcro alla cavaglia
- Strisce antiscivolo sulla suola



NONE27348PXL

KIT PAZIENTE E VISITATORE

I kits offrono soluzioni convenienti ed ottimizzate per accogliere i pazienti ed i visitatori all'interno dell'ambiente ospedaliero. All'interno di un unico involucro, sono presenti tutti i dispositivi necessari per la protezione del paziente e del visitatore per accesso aree critiche.

| Codice | Ogni busta contiene | Confezionamento |
|--|--|--------------------|
| Kit paziente NONE27046KIT | - 1 camice paziente maniche corte colore blu con chiusura alla nuca con striscia adesiva, chiusura con lacci in vita, taglia L: lunghezza 114cm x 139cm larghezza - 1 slip colore blu scuro - 1 cuffietta bianca diametro 53 cm con elastico - 2 copriscarpe bianchi, taglia L cod. CRIE2102W | 50 PE scatola/caso |
| Kit paziente pediatrico (dai 4 ai 9 anni) NONE27KITK | - 1 camice per paziente pediatrico con maniche corte di colore blu, chiusura al collo e vita con lacci, misura 70x105cm - 1 slip per bambino colore blu - 1 cuffietta bianca diametro 40 cm con elastico - 2 copriscarpe per bambino di colore bianco, taglia L: 32 cm | 50 PE scatola/caso |
| Kit paziente NONE35LKIT | - 1 camice paziente con maniche corte di grammatura 35gsm di colore blu-chiusura con lacci alla nuca ed in vita-taglia L - 1 pantalone SMS 35 gsm, taglia 2XL - 1 cuffietta bianca diametro 53 cm con elastico - 2 copriscarpe CRIE2020 | 50 PE scatola/caso |
| Kit paziente NONE352XLKIT | - 1 camice paziente con maniche corte, chiusura al collo ed in vita con lacci di colore blue, taglia 2 XL - 1 pantalone 35gsm colore blue, taglia 2 XL - 1 cuffietta bianca con elastico diametro 53cm - 2 copriscarpe CRIE2020 | 50 PE scatola/caso |
| Kit paziente KIT1030 | - 1 camice paziente con maniche corte-chiusura alla nuca ed in vita, taglia L 114x139cm - 1 kimono manica lunghe con chiusura con lacci alla vita, 120x185cm, colore blu - 1 cuffietta blu diametro 53cm con elastico - 1 slip colore blu - 1 paio di calzino antiscivolo di colore rosso, taglia XL | 40 PE scatola/caso |

| Codice | Ogni busta contiene | Confezionamento |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Kit visitatore CRIE4000BKIT | - 1 camice paziente taglia L colore blu con chiusura al collo ed in vita con lacci - 1 mascherina tipo II con elastici - 1 cuffietta bianca con elastico diametro 53 cm - 2 copriscarpe bianchi taglia L | 50 PE scatola/caso |

CAMICI PAZIENTE

I camici paziente Medline sono realizzati in SMS morbido e confortevole con marcata opacità in grado di garantire un ottimale livello di privacy durante le procedure chirurgiche o per il tempo di degenza.

| Codice | Descrizione | Taglia | Confezionamento |
|--------------|---|---|-----------------|
| NONE27046 | Camice senza maniche, chiusure con lacci | L | 50/caso |
| NONE27046XL | Camice senza maniche, chiusure con lacci | XL | 50/caso |
| NONE27246SLV | Casacca paziente con chiusura con lacci e striscia adesiva | L | 50/caso |
| NONE27046SL | Camice paziente pediatrico con maniche corte con chiusure con lacci, colore blu | L | 50/caso |
| NONE27SLK | Camice paziente pediatrico con maniche corte con chiusure con lacci, colore blu | Ideale per bambini di età compresa tra i 4 e 9 anni | 100/caso |
| CRIE4060K | Camice Kimono con maniche lunghe e chiusura anteriore con lacci 120x185cm, colore blu | L | 60/caso |



MANTELLA PAZIENTE MONOUSO

- Mantella realizzata in SMS
- Uso prolungato può dare sensazione di calore
- Le fascette adesive garantiscono una buona vestibilità, stabilità e maggior comfort per il paziente

| Codice | Color | Materiale | Confezionamento |
|-----------|-------|-----------|-----------------|
| NONE27036 | Blu | SMS | 100/caso |



SPT-UG1317

PANNELLO DI PROTEZIONE

Design a collare per protezione e riscaldamento del collo e del tronco.

| Codice | Color | Taglia | Materiale | Confezionamento |
|------------|-------|----------|----------------|----------------------|
| SPT-UG1317 | Blu | Standard | Spunlace 70gsm | 50/scatola, 100/caso |

GIACCHE DI PROTEZIONE

Linea di giacche di protezione dal freddo ideale per operatori di sala operatoria e coloro che transitano in più reparti.

- Confezionato in SMS comfort evole
- Chiusura anteriore con bottoni clip clap
- Tasche anteriori portaoggetti rinforzate
- Colletto e polsini ove presenti realizzati in maglina elastica confortevole e ideale per essere indossato per lungo tempo

| Codice | Descrizione | Maniche | Confezionamento |
|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| NONERP600S | Blue S | lunghe | 10/scatola, 30/caso |
| NONERP600M | Blue M | lunghe | 10/scatola, 30/caso |
| NONERP600L | Blue L | lunghe | 10/scatola, 30/caso |
| NONERP600XL | Blue XL | lunghe | 10/scatola, 30/caso |
| NONERP700M | Blue, M | Corte-no polsini | 10/scatola, 30/caso |
| NONERP700L | Blue, L | Corte-no polsini | 10/scatola, 30/caso |
| NONERP700XL | Blue, XL | Corte-no polsini | 10/scatola, 30/caso |
| NONERP800S | Blue, S | 3/4 con polsini | 10/scatola, 30/caso |
| NONERP800M | Blue, M | 3/4 con polsini | 10/scatola, 30/caso |
| NONERP800L | Blue, L | 3/4 con polsini | 10/scatola, 30/caso |
| NONERP800XL | Blue, XL | 3/4 con polsini | 10/scatola, 30/caso |



NONERP600L



NONERP700L



NONERP800L

DIVISE MONOUSO MEDLINE

Le divise monouso Medline sono realizzate in SMS comfort evole per fornire il migliore indice di vestibilità e traspirabilità agli utilizzatori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Essendo divise monouso sono costantemente disponibili in rapido approvvigionamento e maggiore disponibilità al cambio.

Queste condizioni sono ottimali per contribuire in modo significativo al controllo e riduzione delle infezioni ospedaliere.

Medline dispone di 2 linee di divise monouso: Advanced range e Sotf range entrambe disegnate e confezionate in collaborazione con gli operatori sanitari per offrire il prodotto più completo alle loro richieste ed attività.

Casacca scollo a V, modello a campana per una migliore vestibilità e libertà di movimento. Pantaloni con lacci alla vita per chiusura regolabile.

Linea Advanced



- Materiale SMS grammatura 42gsm,
- Tessuto morbido ed opaco
- Basso rilascio di particelle (linting) con trattamento antistatico e moderata resistenza ai liquidi non biologici
- Disponibile in 7 taglie dalla XS alla 3XL
- Disponibile nei colori **verde, blu, viola** nei seguenti confezionamenti:
- Viola disponibile solo in confezionamento singolo
- Blu e verdi in confezionamento singolo o set
- Latex free

Divise Monouso Soft

- Materiale SMS grammatura 35gsm, tessuto morbido ed opaco
- Basso rilascio di particelle (linting) con trattamento antistatico e moderata resistenza ai liquidi non biologici
- Disponibile in 7 taglie dalla XS alla 3XL
- Disponibile nei colori **verde e blu** nei seguenti confezionamenti:
- Blu disponibile in sets e confezionamento singolo
- Verde disponibile in sets
- Latex free



LINEA SOFT SET

| Taglia | Set Blu | Unità per conf. | Set Verde | Unità per conf. |
|--------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| XS | P35PBXS | 25 | P35PGXS | 25 |
| S | P35PBS | 25 | P35PGS | 25 |
| M | P35PBM | 25 | P35PGM | 25 |
| L | P35PBL | 25 | P35PGL | 25 |
| XL | P35PBXL | 25 | P35PGXL | 25 |
| 2XL | P35PB2XL | 25 | P35PG2XL | 25 |
| 3XL | P35PB3XL | 25 | P35PG3XL | 25 |

LINEA SOFT confezionamento singolo

| Taglia | Blu casacche | Unità per conf. | Blu pantaloni | Units per caso |
|--------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| XS | PXS9110S | 50 | PXS9110P | 50 |
| S | PS9110S | 50 | PS9110P | 50 |
| M | PM9110S | 50 | PM9110P | 50 |
| L | PL9110S | 50 | PL9110P | 50 |
| XL | PXL9110S | 50 | PXL9110P | 50 |
| 2XL | P2XL9110S | 50 | P2XL9110P | 50 |

LINEA ADVANCED SET

| Taglia | Set Blu | Unità per conf. | Set Verde | Unità per conf. |
|--------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| XS | P42PBXS | 25 | P42PGXS | 25 |
| S | P42PBS | 25 | P42PGS | 25 |
| M | P42PBM | 25 | P42PGM | 25 |
| L | P42PBL | 25 | P42PGL | 25 |
| XL | P42PBXL | 25 | P42PGXL | 25 |
| 2XL | P42PB2XL | 25 | P42PG2XL | 25 |
| 3XL | P42PB3XL | 25 | P42PG3XL | 25 |

LINEA ADVANCED confezionamento singolo

| Taglia | Blu casacche | Unità per conf. | Blu pantaloni | Unità per conf. | Taglia | Verde casacche | Unità per conf. | Verde pantaloni | Unità per conf. |
|--------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| XS | P42PBXS-S | 50 | P42PBXS-P | 50 | XS | P42PGXS-S | 50 | P42PGXS-P | 50 |
| S | P42PBS-S | 50 | P42PBS-P | 50 | S | P42PGS-S | 50 | P42PGS-P | 50 |
| M | P42PBM-S | 50 | P42PBM-P | 50 | M | P42PGM-S | 50 | P42PGM-P | 50 |
| L | P42PBL-S | 50 | P42PBL-P | 50 | L | P42PGL-S | 50 | P42PGL-P | 50 |
| XL | P42PBXL-S | 50 | P42PBXL-P | 50 | XL | P42PGXL-S | 50 | P42PGXL-P | 50 |
| 2XL | P42PB2XL-S | 50 | P42PB2XL-P | 50 | 2XL | P42PG2XL-S | 50 | P42PG2XL-P | 50 |
| 3XL | P42PB3XL-S | 50 | P42PB3XL-P | 50 | 3XL | P42PG3XL-S | 50 | P42PG3XL-P | 50 |

| Taglia | Viola casacche | Unità per conf. | Viola pantaloni | Unità per conf. |
|--------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| XS | P42PPXS-S | 50 | P42PPXS-P | 50 |
| S | P42PPS-S | 50 | P42PPS-P | 50 |
| M | P42PPM-S | 50 | P42PPM-P | 50 |
| L | P42PPL-S | 50 | P42PPL-P | 50 |
| XL | P42PPXL-S | 50 | P42PPXL-P | 50 |
| 2XL | P42PP2XL-S | 50 | P42PP2XL-P | 50 |
| 3XL | P42PP3XL-S | 50 | P42PP3XL-P | 50 |

MEDLINE CLEAN AIR SUITS

Le divise monouso Medline Clean Air sono un prodotto unico ed innovativo che garantisce ottimo comfort agli operatori ed aumenta la sicurezza per il paziente. Il design è ideato per uso in ambienti ospedalieri e protetti in cui è necessario mantenere alto livello di igiene e controllo delle infezioni. Per maggiori dettagli ed informazioni inerenti questo prodotto è consigliato consultare brochure dedicata.



Concepito con attenzione al dettaglio

Le divise Clean Airs sono state progettate in collaborazione con gli operatori del settore attraverso trials, ulteriori modifiche e successive validazioni. Questa minuziosa attenzione ai dettagli offre tutte le caratteristiche ed i benefici richiesti dal personale ospedaliero (sala operatoria-terapia intensiva).



Polsini in maglia elasticizzata



Tasca con porta-badge



Scollatura tonda con bordino



Casacca con bordo alla vita in maglia elasticizzata con 2 tasche laterali



3 bottoni automatici in plastica alla scollatura tondeggiante



2 grandi tasche laterali nei pantaloni



Pantalone con chiusura alla caviglia in maglia elasticizzata



Pantalone con chiusura alla vita con lacci



Casacche e pantaloni disponibili in confezione singola in busta PE

da XS a 3XL

disponibile in 7 taglie

Contribuiscono alla riduzione della contaminazione dell'aria nei reparto e/o in sala operatoria

Medline Clean Air Suits rispettano gli standard EN 13795. Tutti i test eseguiti dimostrano come l'uso delle "Clean Air Suit" contribuisce a ridurre il rilascio di particelle e mantenere aria pulita all'interno della sala operatoria.*

| | Caratteristiche EN 13795 | Test | EN 13795 Requisiti divise clean air | Risultati** |
|---------------------------|--|----------------|-------------------------------------|-------------|
| Performance del materiale | Resistenza alla penetrazione microbica bagnato (CFU) | EN ISO 22612 | ≤300 | 0 |
| | Pulizia microbica (CFU/100cm ²) | EN ISO 11737-1 | ≤300 | <9 |
| | Pulizia particellare IPM | EN ISO 9073-10 | ≤3,5 | 1,9 |
| | Linting (Log10 (lint count)) | EN ISO 9073-10 | ≤4,0 | 1,9 |

**dati tecnici sono basate sulle medie

Casacche Clean Air

| Taglia | Codice | Unità per conf. |
|--------|-----------|-----------------|
| XS | PCLBX-S | 50 |
| S | PCLBS-S | 50 |
| M | PCLBM-S | 50 |
| L | PCLBL-S | 50 |
| XL | PCLBXL-S | 50 |
| 2XL | PCLB2XL-S | 50 |
| 3XL | PCLB3XL-S | 50 |

Pantaloni Clean Air

| Taglia | Codice | Unità per conf. |
|--------|-----------|-----------------|
| XS | PCLBXS-P | 50 |
| S | PCLBS-P | 50 |
| M | PCLBM-P | 50 |
| L | PCLBL-P | 50 |
| XL | PCLBXL-P | 50 |
| 2XL | PCLB2XL-P | 50 |
| 3XL | PCLB3XL-P | 50 |

CAPPELLI E CUFFIETTE CHIRURGICHE MEDLINE

Linea Comfort

Linea Comfort dei copri capo Medline offre diverse gamma di prodotto che garantiscono elevati livelli di comfort, modelli, forme e design che incontrano estetica e la protezione necessaria in sala operatoria. I materiali usati sono morbidi e traspiranti.

Linea prodotto preferita da Medline per la sala operatoria



| Cappellino chirurgico | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|
| FS61100 | 100/ scatola | 600/caso |
| Modello scafandro colore verde | | |



| Cappellino chirurgico | | |
|------------------------------|-----------------|----------|
| FS61150A | 100/ scatola | 600/caso |
| Modello scafandro colore blu | | |



| Cappellino chirurgico | | |
|---|----------------|----------|
| FS61250 | 50/ scatola | 300/caso |
| modello scafandro con banda assorbente colore blu | | |



| Cuffietta con elastico | | |
|---|-----------------|----------|
| FS61300 | 100/ scatola | 600/caso |
| Cuffietta con elastico, diametro 53cm, colore verde | | |



| Cuffietta con elastico | | |
|---|-----------------|----------|
| FS61350 | 100/ scatola | 600/caso |
| Cuffietta con elastico, diametro 53cm, colore blu | | |



| Cappellino chirurgico | | |
|--|-----------------|----------|
| FS61450 | 100/ scatola | 600/caso |
| Cappellino chirurgico modello Sailor, colore blu | | |



| Cappellino chirurgico | | |
|--|-----------------|----------|
| FS61500 | 100/ scatola | 600/caso |
| Cappellino chirurgico con elastico posteriore, copertura fronte alta, colore verde | | |



| Cappellino chirurgico | | |
|--|-----------------|----------|
| FS61550A | 100/ scatola | 600/caso |
| Cappellino chirurgico con elastico posteriore, copertura fronte alta, colore blu | | |



| Cappellino chirurgico | | |
|---|----------------|----------|
| FS61600 | 75/ scatola | 450/caso |
| Cappellino chirurgico ideale per capelli lunghi e folti, chiusura posteriore con elastico, colore verde | | |



| Cappellino chirurgico | | |
|---|----------------|----------|
| FS61650 | 75/ scatola | 450/caso |
| Cappellino chirurgico ideale per capelli lunghi e folti, chiusura posteriore con elastico, colore blu | | |



| Cappellino chirurgico | | |
|--|-----------------|----------|
| FS61750A | 100/ scatola | 600/caso |
| Cappellino chirurgico ideale per capelli lunghi e folti, chiusura posteriore con lacci, colore blu | | |




| Cappellino chirurgico | | |
|---|-----------------|----------|
| FS61850A | 100/ scatola | 600/caso |
| Cappellino chirurgico ideale per capelli corti, chiusura posteriore con lacci, colore blu | | |



| Cappellino chirurgico | | |
|---|-----------------|----------|
| FS61950 | 100/ scatola | 600/caso |
| Cappellino chirurgico chiusura posteriore con elastici, copertura fronte alta, colore blu | | |

Linea Colorful

La linea Colorful è realizzata in spunlace e viscosa, materiale morbida e traspirante, ottimo comfort, buona copertura della fronte disponibile in più colori.

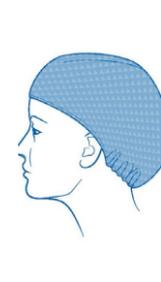

| Cappellino chirurgico | | |
|---|-------------|----------|
| FS60950B | 100/scatola | 600/caso |
| Cappellino chirurgico con elastico posteriore copertura della fronte piatta ed ampia, color blu | | |



| Cappellino chirurgico | | |
|---|-----------------|----------|
| FS60950G | 100/ scatola | 600/caso |
| Cappellino chirurgico con elastico posteriore copertura della fronte piatta ed ampia, color verde | | |

Cappellino chirurgico

FS60950P 100/
scatola
600/caso

Cappellino chirurgico con elastico posteriore copertura della fronte piatta ed ampia, colore viola

Cappellino chirurgico

FS60950PK 100/
scatola
600/caso

Cappellino chirurgico con elastico posteriore copertura della fronte piatta ed ampia, colore rosa

Cappellino chirurgico

FS60950W 100/
scatola
600/caso

Cappellino chirurgico con elastico posteriore copertura della fronte piatta ed ampia, colore bianco

Linea BASIC

Line Basic nasce per soddisfare le esigenze di ogni reparto ad un prezzo conveniente. La linea è realizzata in spundobond con grammatura tra 12 e 20 gsm in diversi modelli e colori..

Cappellino chirurgico

FS63150 100/
scatola
600/caso

Modello scafandro ,larghezza 17 cm, colore azzurro

Cuffietta con elastico

FS63300 100/
scatola
600/caso

Cuffietta con elastico, diametro 53 cm, colore verde

Cuffietta con elastico

FS63360 100/
scatola
600/caso

Cuffietta con elastico, diametro 60 cm, colore bianco

Cuffietta con elastico

FS63350 100/
scatola
600/caso

Cuffietta con elastico, diametro 60 cm, colore blu

Cuffietta con elastico

FS64360 200/
scatola
2'000/caso

Cuffietta con elastico, diametro 60 cm, colore bianco

Cuffietta con elastico

CRIE1000 100/
scatola
500/caso

Cuffietta con elastico, diametro 53 cm, colore verde

Cuffietta con elastico

CRIE1002 100/
scatola
500/caso

Cuffietta con elastico, diametro 53 cm, colore bianco

Cuffietta con elastico

CRIE1003 100/
scatola
500/caso

Cuffietta con elastico, diametro 60 cm, colore bianco

Cuffietta con elastico

CRIE1004 100/
scatola
500/caso

Cuffietta con elastico, diametro 60 cm, colore blu

Cuffietta con elastico

CRIE1005 100/
scatola
500/caso

Cuffietta con elastico, diametro 60 cm, colore verde

Cuffietta con elastico

NONE28233F 100/
scatola
500/caso

Cuffietta con elastico, diametro 60 cm, colore fantasia farfalla

Cuffietta con elastico

NONE28234P 100/
scatola
500/caso

Cuffietta in SMS con elastico, diametro 60 cm, fantasia mutli color

Cuffietta con elastico

FS65360 1'000/
caso

Cuffietta Clip Clap taglia unica, colore bianco

Cappellini

FS67050 100/
scatola
600/caso

Cappellino in Spunlace, taglia unica, colore blu

Cappellino chirurgico

NONE28625 100/
scatola
500/caso

Cappellino chirurgico con lacci di chiusura posteriori, Top è realizzato in SMS assorbente, taglia unica, colore azzurro

Medline propone anche una vasta gamma di mascherine chirurgiche, procedurali e respiratorie.



MEDLINE

**PROTEZIONE E COMFORT
SENZA COMPROMESSI.**

MASCHERINE CHIRURGICHE
Chirurgiche, Procedurali e Respiratorie



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza, 3
50018 Scandicci
Firenze - Italia

Tel: + 39 55 776 65 11
Fax: + 39 55 34 01 12
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com

**ALWAYS
ON.**