



Protective Apparel

Allround wegwerp bescherming



PROTECTIVE APPAREL

Allround wegwerp bescherming

INHOUDSOPGAVE

Overzicht beschermende materialen	3
Beschermingsniveaus	4
Beschermende/Isolatiejassen	5
AAMI Isolatiejassen	6-8
Overschoenen	9
Warm-up jacket	10
PE schorten	10
Omlooppak	10
Chirurgische mutsen	11
Mutsen	12


De iconen geven voor iedere locatie aan welk type jas we aanraden.

 Intensive Care Unit

 Spoedeisende hulp

 Bescherming tegen
luchtverspreiding

 Bescherming tegen
contactverspreiding

 Bezoekers

 Verpleging



Waarom kiezen steeds meer ziekenhuizen en inkopers Medline voor hun allround bescherming?

Onze producten bieden het hoogste draagcomfort.

Wij weten dat u de voorkeur geeft aan wegwerpartikelen om uw personeel op een comfortabele manier te beschermen. Daarom gebruiken wij de dunste, en daarmee comfortabelste materialen die er voor bescherming verkrijgbaar zijn. Voor onze producten en onze productielocaties heeft kwaliteit de hoogste prioriteit.



Medline is ISO 13485-2003 gecertificeerd.
Medline maakt al meer dan 40 jaar
beschermende kleding.

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste materialen die er voor de beschermende kleding van Medline gebruikt worden. In de producten uit de brochure komen deze materialen steeds terug.

Geweven polypropyleen

Het standaard materiaal voor beschermende kleding. De vezels worden samengevoegd tot een laag en vormen zo een ademend, weefselachtig materiaal. De grote voordelen ervan zijn de kosten en het comfort. Daarnaast biedt het lichte bescherming tegen vloeistoffen.

Polypropyleenbescherming en comfortniveaus			
	+	++	+++
Bescherming	[Progressive bar chart showing levels +, ++, +++]		
Comfort	[Progressive bar chart showing levels +, ++, +++]		

Meerlaags materiaal

Deze stof bestaat uit een binnenste laag van meltblown polypropyleen en een buitenlaag van spunbond polypropyleen. Sterk, vloeistofbestendig en ademend, biedt dit meerlaagse materiaal een optimale combinatie van bescherming en comfort.

Geschikt voor langdurig gebruik waarbij ook sprake is van laag tot matig vloeistofcontact. Verkrijgbaar in lichtgewicht en middelzware uitvoeringen.

Middelzware meerlaagse bescherming en comfortniveaus			
	+	++	+++
Bescherming	[Progressive bar chart showing levels +, ++, +++]		
Comfort	[Progressive bar chart showing levels +, ++, +++]		

Lichtgewicht meerlaagse bescherming en comfortniveaus			
	+	++	+++
Bescherming	[Progressive bar chart showing levels +, ++, +++]		
Comfort	[Progressive bar chart showing levels +, ++, +++]		

Gecoat polypropyleen

Deze stof wordt gemaakt door zacht spunbond polypropyleen te voorzien van een laag ondoordringbaar polyethyleen. Dit materiaal is ideaal voor situaties die een hoge mate van vloeistofbescherming vereisen. Verkrijgbaar in middelzware en zware uitvoeringen.

Gecoate bescherming en comfortniveaus			
	+	++	+++
Bescherming	[Progressive bar chart showing levels +, ++, +++]		
Comfort	[Progressive bar chart showing levels +, ++, +++]		

Polyethyleen

Een enkele laag polyethyleen heeft een optimale beschermende werking. Dit materiaal is ideaal voor situaties waarbij veel vloeistoffen vrijkomen.

Polythyleenbescherming en comfortniveaus			
	+	++	+++
Bescherming	[Progressive bar chart showing levels +, ++, +++]		
Comfort	[Progressive bar chart showing levels +, ++, +++]		

Prevention Plus

Dit ondoorlatende en ademende materiaal bestaat uit een hybride laag tussen twee lagen van spunbond bicomponentmateriaal in. Deze stof beschermt optimaal tegen binnendringen van vloeistoffen.

Prevention Plusbescherming en comfortniveaus			
	+	++	+++
Bescherming	[Progressive bar chart showing levels +, ++, +++]		
Comfort	[Progressive bar chart showing levels +, ++, +++]		

PROTECTIVE APPAREL

Beschermingsniveaus

Europese richtlijnen voor de klassering van beschermende kleding:

Richtlijn 93/42/EEG

Richtlijn 93/42/EEG is van toepassing op medische hulpmiddelen en toebehoren. Met 'Medische hulpmiddelen' worden alle instrumenten, apparaten, machines, software, materialen of andere artikelen bedoeld, op zichzelf of in combinatie gebruikt, inclusief de door de fabrikant meegeleverde software.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

In richtlijn 89/686/EEG(1) over Persoonlijke beschermingsmiddelen (PB) beschrijft de voorwaarden voor het op de markt brengen en het binnen de gemeenschap verhandelen van PB en de basiseisen waaraan ze moeten voldoen om de gezondheid en veiligheid van de gebruiker te waarborgen.



Beschermingsniveau 1

Testmethode	Testdefinitie	Eis
<i>Waterbestendigheid</i>	AATCC	
AATCC 42 <i>Impactpenetratie</i>	AATCC 42 <i>Meet de weerstand van stoffen tegen de vloeistofdoordringing wanneer ze in aanraking komen met water.</i>	Watercontact ≤ 4.5 g

Beschermingsniveau 2

Testmethode	Testdefinitie	Eis
<i>Waterbestendigheid</i>	AATCC	
AATCC 42 <i>Impactpenetratie</i>	AATCC 42 <i>Meet de weerstand van stoffen tegen de vloeistofdoordringing wanneer ze in aanraking komen met water.</i>	Spray-impact ≤ 1.0 g
AATCC 127 <i>Hydrostatische druk</i>	AATCC 127 <i>Meet de weerstand van stoffen tegen de vloeistofdoordringing wanneer ze in aanraking komen met water onder constante en toenemende hydrostatische druk.</i>	Hydrostatische druk ≥ 20 cm

Beschermingsniveau 3

Testmethode	Testdefinitie	Eis
<i>Waterbestendigheid</i>	AATCC	
AATCC 42 <i>Impactpenetratie</i>	AATCC 42 <i>Meet de weerstand van stoffen tegen de vloeistofdoordringing wanneer ze in aanraking komen met water.</i>	Spray-impact ≤ 1.0 g
AATCC 127 <i>Hydrostatische druk</i>	AATCC 127 <i>Meet de weerstand van stoffen tegen de vloeistofdoordringing wanneer ze in aanraking komen met water onder constante en toenemende hydrostatische druk.</i>	Hydrostatische druk ≥ 50 cm



Alleen van toepassing op jassen die getest zijn tov AAMI

Basis beschermende polypropyleenjassen

- Gemaakt van lichtgewicht polypropyleen materiaal
- Ruimvallend voor volledige bedekking en bewegingsvrijheid
- Verkrijgbaar met klassieke nek- en taillebanden met elastische of tricot manchetten.



Artikelnr.	Maat	Kleur	Verp.
Klassieke nek- en taillebanden, plat pakket			
CRIE4000	Regular/Large	Geel	10/zk, 50/ds
CRIE4001	X-Large	Geel	10/zk, 50/ds
CRIE4000G	Regular/Large	Groen	10/zk, 50/ds
CRIE4000B	Regular/Large	Blauw	10/zk, 50/ds
Klassieke nek- en taillebanden ,plat pakket,elastische manchetten			
CRIE4001CF	XLarge	Geel	10/zk, 50/ds



AAMI Isolatiejassen

Middelzwaar, klassieke uitvoering met nek-en taillebanden, elastische manchetten

- Van middelzwaar vloeistofbestendig meerlaags materiaal
- Ruimvallend voor volledige bedekking en bewegingsvrijheid
- Nek- en taillebanden voor de juiste pasvorm
- Jaspakket bevat een Regular/Large maat of een X-Large maat meerlaagse non-woven blauwe beschermingsjas, een handdoek, en verpakt in een inpakveld, steriel



Artikelnr.	Maat	Verp.
Klassieke nek- en taillebanden, elastische manchetten, plat pakket		
NONE27SMS3	Regular/Large	10/zk, 100/ds
NONE27SMS3XL	X-Large	10/zk, 100/ds
Jaspakket		
Medical device klasse 1 Steriel		
NONE27280	Regular/Large	25/cs
Inpakveld 2x handdoek 1x NONE27SMS3 met elastische manchetten		
NONE27280XL	X-Large	25/ds
Inpakveld 2x handdoek 1x NONE27SMS3XL met elastische manchetten		



NONE27280 - NONE27280XL



Klassieke gele middelzware meerlaagse jassen

- Comfortabel,
- Flexibel en sterk genoeg voor veeleisende situaties

    **beschermingsniveau 2**

Artikelnr.	Maat	Verp.
Elastische manchetten, nekband met kleefstrooksluiting, plat pakket		
NONELV200	Regular/Large	10/zk, 100/ds
NONELV200XL	X-Large	10/zk, 100/ds



Standaard gele polypropyleen jassen met polyethyleen coating

- Van middelzwaar geel materiaal met polyethyleen coating
- Hoge vloeistofbescherming
- Taille- en nekbanden zorgen dat de jas veilig op zijn plaats blijft zitten

Artikelnr.	Maat	Verp.
Tricot manchetten, plat pakket		
CRIE4010CF	Regular/Large	10/zk, 50/ds
CRIE4011CF	X-Large	10/zk, 50/ds



Klassieke polyethyleen-coated polypropyleen jassen met “gesloten rug”

Uitstekende vloeistofbescherming voor zorgeloos werken

- Gemaakt van blauw polypropyleen materiaal met polyethyleen coating
- Ruimvallend voor volledige bedekking en bewegingsvrijheid
- Ontworpen met klassieke taille- en nekbanden
- verkrijgbaar met tricot manchetten

Artikelnr.	Maat	Verp.
NONE27116	Regular/Large	10/zk, 50/ds
NONE27116XL	X-Large	10/zk, 50/ds

Klassieke jas met open achterkant en polyethyleen coating

Hoge bescherming tegen vloeistoffen voor langer draagcomfort

- Gemaakt van blauw polypropyleen materiaal met polyethyleen coating
- Ruimvallend voor volledige bedekking en bewegingsvrijheid
- Voorzien van klassieke nekbanden of over-het-hoofd-heen nekband



Artikelnr.	Maat	Verp.
NONE27279OHL	X-Large	10/zk, 50/ds



NONE27279OHL



Premium blauwe barrière bescherming



Artikelnr.	Maat	Verp.
Tricot manchetten, velcrosluiting, plat pakket		
NONELV325	Regular/Large	10/zk, 50/ds
NONELV325XL	X-Large	10/zk, 50/ds



Optimaal beschermd met de standaard polyethyleen Thumbs Up® jassen

- Gemaakt van blauw ondoorlaatbaar polyethyleen materiaal
- Getest volgens de normen van ASTM1670 en ASTM1671
- Dankzij de schortband rond de nek trekt u de jas snel aan en uit
- De duimlus voorkomt dat de mouwen opkruipen
- Apart opgevouwen en verpakte jassen in dispenserdoos



Artikelnr.	Maat	Verp.
CRIE5000	Regular/Large	15/bx, 75/ds
CRIE5001	X-Large	15/bx, 75/ds



CRIE5000

Prevention Plus procedurejas

- Gemaakt van blauw ondoorlaatbaar ademend materiaal
- Getest volgens de normen van ASTM 1671
- Velcrosluiting voor gemakkelijk aan- en uittrekken
- Verkrijgbaar in blauw met tricot manchetten



Getest op chemotherapie-producten

Prevention Plus jassen zijn getest op de meestgebruikte producten voor chemotherapie.

Het Prevention Plus materiaal werd getest op de volgende chemotherapie-producten volgens ASTM F739-99a:

- Dacarbazine
- Carmustine (BICNU)
- Cyclophosphamide (Cytosan)
- Doxorubicin Hydrochloride
- 5-Fluorouracil
- Cisplatine
- Etoposide (Toposar)
- Paclitaxel (Taxol)
- Thiotepa
- Mitomycine C
- Vincristinesulfaat

(Testgegevens op verzoek verkrijgbaar)



Artikelnr.	Maat	Verp.
NONE27457	Regular/Large	10/zk, 30/ds
NONE27457XL	X-Large	10/zk, 30/ds
NONE27457XXL	XX-Large	10/zk, 30/ds

Meerlaagse anti-slip schoenovertrekken

- Gemaakt van ademend, vloeistofbestendig materiaal

Artikelnr.	Maat	Verp.
NONE28858	gewone maten (tot herenmaat 46)	100/bx, 300/ds
NONE28859	extra groot (tot herenmaat 49)	100/bx, 200/ds

Prevention Plus ondoorlaatbare kniehoge laarsovertrekken

- De best ademende overtrek voor complete bescherming
- Gemaakt van blauw Prevention Plus materiaal
- Velcrosluiting maakt de overtrek goed passend
- Schuimstrook anti-slipzool

Artikelnr.	Maat	Verp.
NONE27348PXL	extra groot (tot herenmaat 49)	50/bx, 150/ds



NONE27348PXL

Anti-slip vloeistofbestendige laarsovertrekken

- Gemaakt van vloeistofbestendig materiaal met polypropyleen coating
- Hoge vloeistofbescherming aan de onderkant
- Velcrosluitingen maken de overtrek goed passend
- Band is aan de laars vastgelast

Artikelnr.	Maat	Verp.
NONE27144	gewone maten (tot herenmaat 46)	50/bx, 150/ds
NONE27144XL	extra groot (tot herenmaat 49)	50/bx, 150/ds



NONE27144

Anti-slip meerlaagse/poly kniehoge laarsovertrekken

- Ademend, vloeistofbestendig materiaal boven de enkel
- Hoge vloeistofbescherming aan de onderkant
- Gelaste naden op de voet verminderen de kans op binnendringing van vloeistof

Artikelnr.	Maat	Verp.
NONE27143XL	extra groot (tot herenmaat 49)	50/bx, 150/ds



NONE27143XL

Boundary® Polyethyleen schoenovertrekken

- Gemaakt van CPE plastic materiaal dat bestand is tegen hoge vloeistofniveaus
- Gladde onderkant

Artikelnr.	Maat	Verp.
CRIE2010		1000/ds



CRIE2010

PROTECTIVE APPAREL
**WARM-UP JACKET /
 SCHORTEN / OMLOOPPAK**

NONERP600L



NONE27046



NONE24274W



PM9110S

PM9110P

Klassieke warm-up jacket met tricot kraag en manchetten

Artikelnr.	Omschrijving	Verp.
NONERP600S	Blauw Small	10/zk, 30/ds
NONERP600M	Blauw Medium	10/zk, 30/ds
NONERP600L	Blauw Large	10/zk, 30/ds
NONERP600XL	Blauw XLarge	10/zk, 30/ds

Medline's klassieke warm-up jacket is gemaakt van een vloeistofbestendig meerlaags materiaal voor dagelijks comfort en bescherming.

Medline's wegwerpproducten zijn verkrijgbaar met vijf drukknoopjes, verstevigde zakken, en een handig ophanglusje. In ons gevarieerde assortiment vindt u altijd wat u nodig heeft.

Meerlaagse patiëntschorten

Artikelnr.	Omschrijving	Verp.
NONE27046	Meerlaagse patiëntschorten, mouwloos, Taillebanden, regular/large	50/ds

Witte wegwerp poly schorten

Effectieve bescherming tegen vloeistoffen en afval.

- Gemaakt van polyethyleen materiaal
- Makkelijk trui-model om snel aan en uit te trekken

Artikelnr.	Omschrijving	Verp.
NONE24274W	Middelzwaar, 71.1x116.8 cm Apart verpakt, dispenserdoos	50/bx, 250/ds

Omlooppakken

Hoge bescherming tegen vloeistoffen en bacteriën

- Zeer comfortabel door goede luchtdoorlatendheid
- V-hals voor gemakkelijk aan- en uittrekken
- OK-shirt en broek apart verpakt
- OK-shirt met 3 zakken en 1 achterzak op de broek
- Verkrijgbaar in blauw

Artikelnr.	Omschrijving	Verp.
PXS9110S	OK shirt, X-small	50/ds
PXS9110P	OK broek, X-small	50/ds
PS9110S	OK shirt, small	50/ds
PS9110P	OK broek, small	50/ds
PM9110S	OK shirt, medium	50/ds
PM9110P	OK broek, medium	50/ds
PL9110S	OK shirt, large	50/ds
PL9110P	OK broek, large	50/ds
PXL9110S	OK shirt, X-large	50/ds
PXL9110P	OK broek, X-large	50/ds

Medline's chirurgische muts gemaakt van hoogwaardige Cluster Keyback materiaal van geperste fibers

Artikelnr.	Omschrijving	Verp.
Muts voor chirurgen en operatiekamerpersoneel		
FS61100	Cosmos Comfort OK astro muts, groen	100/bx, 600/ds
FS61150	Cosmos Comfort OK astro muts, blauw	100/bx, 600/ds
Muts voor chirurgen en operatiekamerpersoneel • extra zweetband		
FS61250	Cosmos Comfort OK astro muts, blauw	50/bx, 300/ds
Comfortabel passende bouffant muts		
FS61300	Moon Comfort OK muts, groen	100/bx, 600/ds
FS61350	Moon Comfort OK muts, blauw	100/bx, 600/ds
Comfortabel passende muts, schipvormig		
FS61450	Ocean Comfort OK muts, blauw	100/bx, 600/ds
Perfect passende muts met speciaal ontworpen nekgedeelte		
FS61500	Planet Comfort OK muts, groen, elastiek in de nek	100/bx, 600/ds
FS61550	Planet Comfort OK muts, blauw, elastiek in de nek	100/bx, 600/ds
Ideale muts voor lang haar		
FS61600	Sun Comfort OK muts, groen, elastiek in de nek	75/bx, 450/ds
FS61650	Sun Comfort OK muts, blauw, elastiek in de nek	75/bx, 450/ds
Aanpasbare muts met nekknooplinten		
FS61750	Air Comfort OK muts, blauw	100/bx, 600/ds
FS61850	Saturn Comfort OK muts, non-woven nekband, blauw	100/bx, 600/ds
FS61950	Saturn Comfort OK muts, non-woven elastische band, blauw	100/bx, 600/ds
Artikelnr.	Omschrijving	Verp.
Muts voor chirurgen en operatiekamerpersoneel		
FS62150	Cosmos, blauw	100/bx, 600/ds
Perfect passende muts met speciaal ontworpen nekgedeelte		
FS62550	Planet blauw	100/bx, 600/ds
Aanpasbare muts met nekknooplinten		
FS62750	Air, blauw	100/bx, 600/ds
Comfortabel passende bouffant muts		
FS62350	Moon, blauw	100/bx, 600/ds
Comfortabel passende muts, schipvormig		
FS62450	Ocean, blauw	100/bx, 600/ds
Artikelnr.	Omschrijving	Verp.
Muts voor chirurgen en operatiekamerpersoneel		
FS63150	Cosmos Light muts, blauw	100/bx, 600/ds
Patiëntenmuts		
FS63300	Muts, groen	100/bx, 600/ds
FS63350	Muts, blauw	100/bx, 600/ds
FS63360	Muts, wit	100/bx, 600/ds
Patiëntenmuts, comfortabele pasvorm en geschikt voor lang haar		
FS64360	Patiëntenmuts, wit, elastische band: Latexvrij	200/bx, 2000/ds



FS61150 Cosmos



FS61250 Cosmos



FS61350 Moon



FS61450 Ocean



FS61550 Planet



FS61650 Sun



FS61750 Air



FS61850 Saturn



FS61950 Earth

Medline bouffant mutsen

- zonder bandjes, latexvrije mutsen van lichtgewicht meerlaags materiaal

Artikelnr.	Maat	Omschrijving	Verp.
Lichtgewicht meerlaags			
Bedrukte muts			
NONE28233F	61 cm	Vlinderbedrukking	100/bx, 500/ds


Lichtgewicht polypropyleen			
Boundary bouffant mutsen			
CRIE1000	53.3 cm	Groen	100/bx, 500/ds
CRIE1003	61 cm	Wit	100/bx, 500/ds
CRIE1004	61 cm	Blauw	100/bx, 500/ds



CRIE1004

Medline's Boundary bouffant mutsen

- Lichtgewicht eenlaags polypropyleen spunbond materiaal
- Verkrijgbaar in éénlaags groen, blauw en wit
- Verkrijgbaar in 53.3 en 61 cm
- Alle mutsen voldoen aan de NFPA-standaards

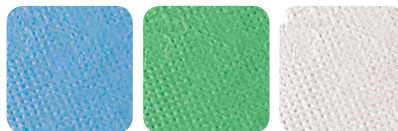

Blauw

Groen

Wit



Medline International Belgium BVBA

Leuvensesteenweg 248 D
1800 Vilvoorde – België
Tel: + 32 (0)2 255 74 20
Fax: + 32 (0)2 255 74 19
www.medline.com/be

Medline International Netherlands BV

Wilhelm Sinsteden Strasse 5-7
47533 Kleve – Duitsland
Tel: +31 (0)88 00 11 900
Fax: +31 (0)88 00 11 929
www.medline.com/nl