

Il rivestimento dei guanti chirurgici in Polimero E-Z Glide

La facilità di calzata di un guanto



Rivestimento brevettato con surfactante¹

Sostanza nebulizzata e assorbita nel polimero di rivestimento che agisce come lubrificante abbassando la tensione superficiale così da favorire la calzata del guanto.

Idrorepellente¹

Polimero di rivestimento idrofobico che respinge l'acqua e riduce l'idratazione del guanto aumentandone la longevità.

Polimero di rivestimento depolverato

Uno strato uniforme che riveste la parte interna del guanto, con l'unione delle sue molecole evita eventuali delaminazioni o desquamazioni.

Rivestimento flessibile

La sua elasticità direttamente proporzionale al lattice, permette a entrambi gli strati di lavorare all'unisono come un unico film funzionante sul guanto.

Lattice di gomma naturale o lattice sintetico

Semplice vestibilità +

Il guanto scivola facilmente in qualsiasi condizione, sia sulle mani asciutte, umide o bagnate.


Doppia vestibilità +

Rende possibile grazie al suo rivestimento interno e al suo polimero strutturalmente sviluppato, l'abbinamento perfetto con la superficie interna del guanto nella tecnica di doppio guanto.

| Prodotto | Codice |
|---------------------------|-------------------|
| Signature Latex Essential | MSG5955 - MSG5990 |
| Signature Latex | MSG5455 - MSG5490 |
| Signature Latex Micro | MSG5855 - MSG5890 |
| Signature Latex Green | MSG5555 - MSG5590 |
| SensiCare® Neoprene | MSG6355 - MSG6390 |
| DermAssure™ Green | MSG6555 - MSG6590 |
| SensiCare® PI Evolution | MSG9555 - MSG9590 |
| SensiCare® PI | MSG9055 - MSG9090 |
| SensiCare® PI Micro | MSG9655 - MSG9690 |
| SensiCare® PI Green | MSG9255 - MSG9290 |

¹ Queste caratteristiche risultano uniche nel Polimero di rivestimento E-Z Glide

Ci riserviamo il diritto di correggere ogni eventuale errore che potrà presentarsi all'interno del poster. Il prodotto è un dispositivo medico di classe IIa. Prima dell'utilizzo consultare le istruzioni d'uso e le precauzioni descritte nell'etichetta.

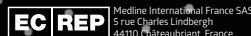

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Make a
material
difference

