


Tubo Endobronchiale a Doppio Lume




Il Tubo Endobronchiale a Doppio Lume ENDOSID® di Medline, disponibile nei modelli per intubazione bronchiale selettiva destra o sinistra, è realizzato in polivinilcloruro (PVC), un materiale morbido e completamente atraumatico che permette un inserimento sicuro e senza alcun danno all'albero tracheobronchiale del paziente. Presenta un esclusivo meccanismo di bloccaggio situato sui connettori a gomito, che consente l'apertura o la chiusura manuale dei lumi bronchiali e tracheali mediante la rotazione di una semplice manopola girevole. Le particolari caratteristiche di questo prodotto facilitano la ventilazione 'a polmone singolo' o 'isolamento polmonare', eliminando la necessità di ricorrere alle pinze Magill durante il processo di intubazione. Altre proprietà e vantaggi:

- Sterilizzato con Ossido di Etilene (EO)
- Privo di lattice di gomma naturale
- Dotato di bande o linee radiopache rilevabili ai raggi X
- Con mandrino per intubazione
- Include due cateteri di aspirazione
- Realizzato in morbido e trasparente PVC
- Periodo di validità: 5 anni

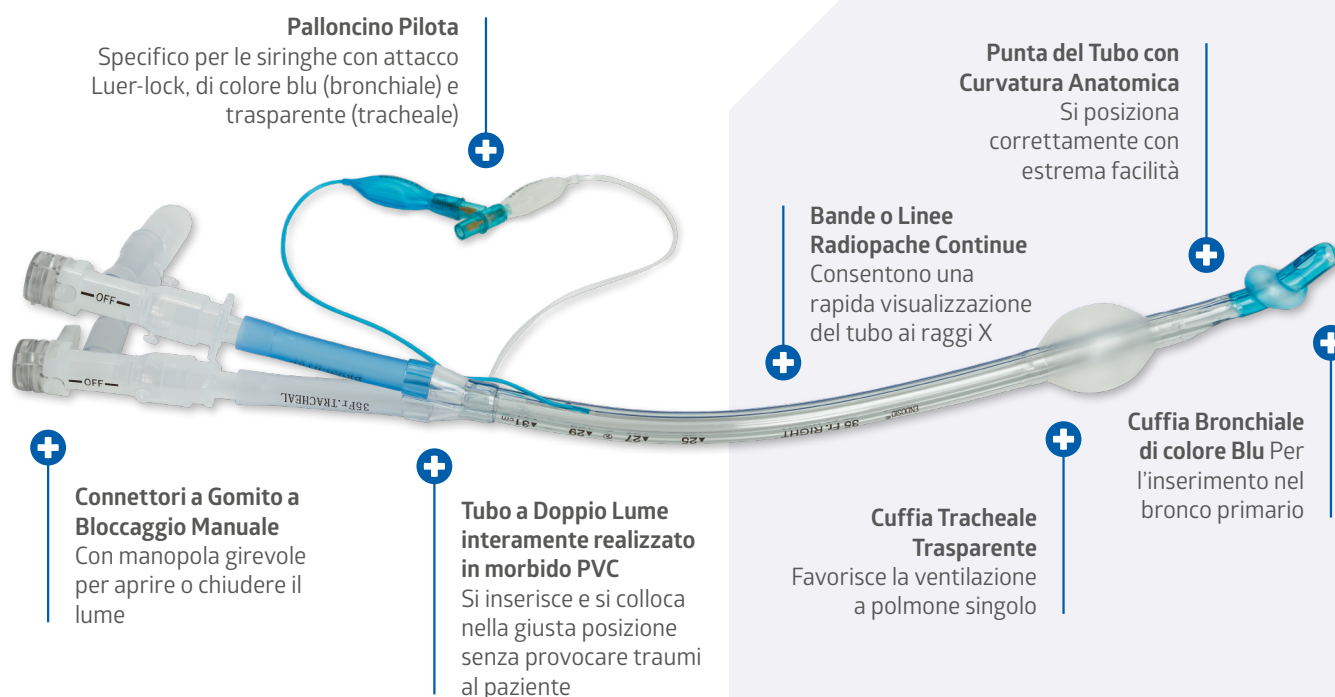




Connettori a Gomito a Bloccaggio Manuale

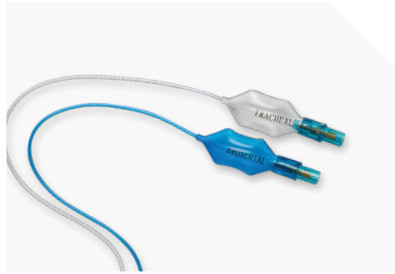

Palloncini Pilota, di colore Blu o Trasparente

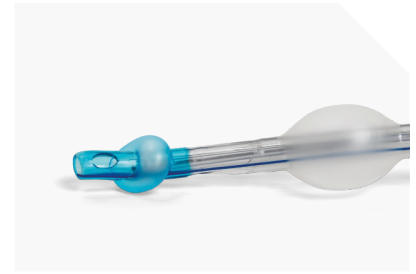

Cuffia Tracheale Trasparente

Informazioni per gli ordini

ENDOSID® Serie di tubi Endobronchiali per Lato Sinistro e Destro

Codice articolo	Diametro	Caratteristiche	Unità per confezione di vendita
847028-RZ	28 CH	Specifico per il lato destro	1
847032-RZ	32 CH	Specifico per il lato destro	1
847035-RZ	35 CH	Specifico per il lato destro	1
847037-RZ	37 CH	Specifico per il lato destro	1
847039-RZ	39 CH	Specifico per il lato destro	1
847041-RZ	41 CH	Specifico per il lato destro	1
847028-LZ	28 CH	Specifico per il lato sinistro	1
847032-LZ	32 CH	Specifico per il lato sinistro	1
847035-LZ	35 CH	Specifico per il lato sinistro	1
847037-LZ	37 CH	Specifico per il lato sinistro	1
847039-LZ	39 CH	Specifico per il lato sinistro	1
847041-LZ	41 CH	Specifico per il lato sinistro	1

CH= Charrière



847037-RZ



847037-LZ

Vi offriamo una gamma completa di tubi, specifici per l'intubazione bronchiale selettiva destra o sinistra

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare il vostro account manager Medline di riferimento o visitare il sito www.medline.eu/it



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11

www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch-it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

I Tubi Endobronchiali ENDOSID® sono dispositivi medici sterili di classe IIa destinati a essere utilizzati dagli operatori sanitari. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero verificarsi relativamente a questa brochure.

© 2024 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1477_IT 06/2024.



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffelstraße 80
20537 Amburgo, Germania

