



HEELMEDIX[®]

Entlastet die Ferse und schützt die Haut.




Zur effektiven Entlastung der Ferse.

EFFEKTIVE DRUCKENTLASTUNG IM EMPFINDLICHEN FERSENBEREICH

Klinische Studien zeigen effektive Ergebnisse¹

Anhand einer druckmessenden Matte wurde der Fersendruck jeweils auf einer Matratze und unter Einsatz von Heelmedix bei 19 Patienten in der Langzeitpflege untersucht. Heelmedix entlastete den empfindlichen Fersenbereich vollständig. Hier sind die Ergebnisse:

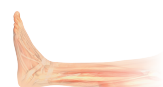


rot-gestrichelte Linie zeigt den Fersenbereich an

Matratze



Bei der Matratze wurde der höchste Spitzendruck auf die Ferse gemessen. Durchschnittlicher Druck auf die Berührungsfläche: **115.23 g/cm²**

HEELMEDIX

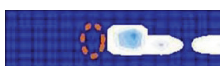

Zeigte auf der gesamten Berührungsfläche den niedrigsten durchschnittlichen Auflagedruck. Durchschnittlicher Druck auf die Berührungsfläche: **29.82 g/cm²**



Mit antimikrobiellem Ultra-Fresh® behandelt, welches den Wachstum geruchsbildender Bakterien hemmt.²



Ausgestattet mit drei Löchern auf jeder Seite zum optionalen Anschluss eines Venenkompressionssystems.

Artikelnummer	PZN	Beschreibung	Einheit
MDTE823330P	11886260	Heelmedix Fersenschoner Klein mit Keil	1 Stück
MDTE823330SW	11886277	Heelmedix Fersenschoner Standard mit Keil	1 Stück
MDTE823330XL	11886283	Heelmedix Fersenschoner Extra Groß mit Keil	1 Stück



Vorteile

- » Vollständige Entlastung der Ferse und gleichmäßige Druckverteilung
- » Der Aufdruck "Toes (Zehen)" und "Heel (Ferse)" hilft beim korrekten Anlegen des Schoners
- » Der offene Fersenbereich lässt Luft an die Haut und ermöglicht eine einfache Kontrolle
- » Die grauen Bänder halten den Fuß aufrecht und helfen Spitzfuß zu vermeiden
- » Optional kann ein Keil verwendet werden, um eine mediale oder laterale Fußrotation zu vermeiden
- » Innenfutter reduziert Reibung am Fersenbereich
- » Beinhaltet ein Wäschenetz, um die Wäsche und das Sortieren zu vereinfachen



Medline International Germany GmbH
Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7
47533 Kleve
Deutschland
Tel. +49 2821 7510-0
Fax. +49 2821 7510-7802

de-customerservice@medline.com
www.medline.com/de

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Schweiz
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
ch-customerservice@medline.com
www.medline.com/de

Medline International Austria GmbH
c/o CHSA Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel. +43 800 201 878
Fax. +43 800 201 879
at-customerservice@medline.com
www.medline.com/de