

Uitgebreide Respiratoire Zorg

Zuurstoftherapie, verneveltherapie, incentive spirometers



**Beheer
respiratoire
behoeften
van uw
patiënten**

Hoogwaardige medische benodigdheden van één betrouwbare bron

Medline geeft prioriteit aan gezondheidszorg, inclusief de kritieke respiratoire behoeften van uw patiënten, door hoogwaardige en betaalbare oplossingen te bieden en door met ons uitgebreide portfolio meer efficiëntie te bieden.

De producten voor zuurstoftherapie, verneveltherapie en air entrainment in deze brochure helpen u niet alleen om het beheer van de respiratoire behoeften te verbeteren, maar helpen u ook om uitgebreidere en meer gespecialiseerde zorg te verlenen.

Meer details en technische specificaties van onze producten vindt u in deze brochure.

ZUURSTOFTHERAPIE.....3

| | |
|-----------------------------------|----|
| Neusbrillen | 3 |
| Zuurstofslangen | 5 |
| Zuurstofmaskers | 6 |
| Gevulde luchtbevochtigers..... | 10 |
| Disposable luchtbevochtiger | 11 |

VERNEVELTHERAPIE12

| | |
|-----------------------------|----|
| Vernevelaars | 12 |
| Gevulde vernevelaars | 17 |
| Disposable vernevelaar..... | 18 |
| Elektrische verwarmers..... | 18 |

| | |
|--------------------------------|----|
| Vernevelmaskers | 19 |
| Vernevelslangen | 20 |
| Vernevel Drainagesysteem | 20 |
| Dosis | 20 |

INCENTIVE SPIROMETERS21

| | |
|-------------------------------|----|
| Triflo II | 21 |
| Voldyne..... | 21 |
| Longvolume Oefenapparaat..... | 21 |

ADAPTERS EN CONNECTOREN 22

Medline is verheugd een uitgebreid aanbod latexvrije producten te kunnen aanbieden. Natuurrubberlatex kan een allergische reactie veroorzaken. Alle producten zijn in clean-room omstandigheden gefabriceerd.

SEE-THRU, MULTI-VENT, SELECT-A-VENT, SOFTECH, AQUAPAK, AQUATHERM, CORR-A-FLEX, ADDIPAK, NEB-U-MIST en het Hudson RCI logo zijn geregistreerde handelsmerken van Hudson RCI.

Neusbrillen

Essentieel

De gebogen neusuiteindes zijn dunner en zachter en volgen de anatomie van de neus van de patiënt. De neusbrillen zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties, wat de klant een keuze biedt aan neusuiteindes, zuurstofslangen en slangaansluitingen.

- Stroomsnelheid: 1 – 7 lpm



Ref. 1103



Ref. 1104

Volwassen neusbril

| Referentie | Neusuiteinde | | Slang | | | Standaard slangaansluiting | Verpakkings-eenheid |
|------------|--------------|-------|-----------|------------|--------|----------------------------|---------------------|
| | Uitlopend | Recht | Standaard | Star-lumen | Lengte | | |
| 1103 | | x | | x | 210 cm | x | 50 |
| 1103P* | | x | | x | 210 cm | x | |
| 1104 | x | | | x | 210 cm | x | |
| 1104P* | x | | | x | 210 cm | x | |
| 41110 | | x | | x | 210 cm | x | |

*DEHP vrije versie

SOFTECH

De SOFTECH® neusbrillen, extreem lichtgewicht en flexibel, zijn anatomisch ontworpen om het comfort van de patiënt te verbeteren, dankzij het DEHP vrije materiaal. De over-het-oor stijl zorgt voor een optimale pasvorm en stabiliteit. Formaten voor kinderen en baby's zijn ook verkrijgbaar.

- Gemaakt van DEHP vrij materiaal

Hudson neusbrillen zijn verkrijgbaar met standaard of universele slangaansluitingen. De universele connectoren zijn handig en voordelig omdat ze rechtstreeks op flowmeters kunnen worden aangesloten, waardoor er geen nipple-and-nut adapters nodig zijn.



Ref. 41820

SOFTECH Neusbrillen

| Referentie | Maat | Slang | | Slangaansluiting | | Aanbevolen stroomsnelheid | Verpakkings-eenheid |
|------------|--------------|-------------|--------|------------------|------------|---------------------------|---------------------|
| | | Star Lumen® | Lengte | Standaard | Universeel | | |
| 41820 | Volwassen | x | 210 cm | x | | 4 lpm | 50 |
| 41826 | Pediatriesch | x | 210 cm | | x | 3,5 lpm | |
| 41828 | Baby | x | 210 cm | x | | 1,5 - 2 lpm | |

Materialen
• PVC

SOFTECH Plus Canules

Hudson SOFTECH Plus Neusbrillen helpen zorgverleners comfortabel zuurstof toe te dienen bij patiënten, mogelijk gemaakt dankzij het gebruik van zacht DEHP vrij materiaal. Met de zachtste slang ooit zorgt elke zuurstofbril voor 30 procent minder wrijving, in vergelijking met andere zuurstofbrillen in deze categorie. Andere voordelen en eigenschappen zijn:

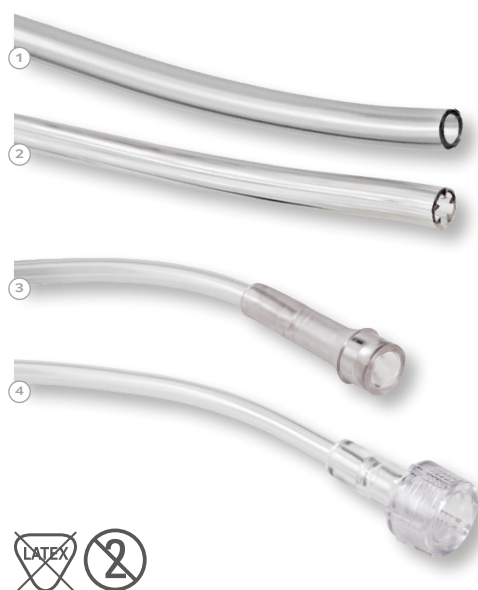
- Biedt flexibiliteit en een meer op maat gemaakte pasvorm voor patiënten via een speciaal ontworpen inkeping tussen de neuspinnen (exclusief de Neonatale Softech Plus Neusbril)
- Verbeterd het comfort van de patiënt, dankzij de zachte durometer slang
- Zorgt voor weerstand tegen pletten en knikken door de Star Lumen zuurstoftoevoerslang bij zowel volwassen als kindermaten
- Geen risico's gerelateerd aan ftalaten, aangezien het gemaakt is van DEHP vrij materiaal
- Verhoogt de zichtbaarheid en helpt aansluitfouten te verminderen, dankzij de groene toevoerslangen.

SOFTECH Plus Neusbril

| Referentie | Maat | Slanglengte | Star Lumen slang | Standaard-aansluiting | Verpakkings-eenheid |
|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 1870 | Volwassen | 210 cm | x | x | 50 |
| 1871 | Pediatriesch | 210 cm | x | x | 50 |
| 1872 | Kind | 210 cm | x | x | 50 |
| 1873 | Neonataal | 210 cm | x | x | 50 |
| 1877 | Volwassen | 420 cm | x | x | 50 |



Zuurstofslangen



Hudson biedt:

- Standaard (afb. 1)
- Star Lumen (afb. 2) slang, bestand tegen knikken en instorten; het speciale slangontwerp heeft een binnenlumen met vijf kanalen, wat zorgt voor een continue zuurstofstroom
- Zuurstoftoevoerslang die verkrijgbaar is met standaard (afb. 3) of universele slangaansluitingen (afb. 4); de universele connectoren zijn handig en voordelig omdat ze rechtstreeks op flowmeters worden bevestigd, waardoor er geen nipple-and-nut adapters nodig zijn.

Zuurstofslangen

| Referentie | Slang | | Aansluiting | | Lengte | Verpakkingseenheid |
|------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------------------|
| | Standaard | Star Lumen | Standaard | Universeel | | |
| 41113 | | x | x | | 210 cm | 50 |
| 41113P* | | x | x | | 210 cm | 50 |
| 1115 | | x | x | | 210 cm | 50 |
| 1115P* | | x | x | | 210 cm | 50 |
| 41118 | | x | x | | 420 cm | 50 |
| 41119 | | x | x | | 760 cm | 25 |
| 41120 | | x | x | | 1520 cm | 25 |
| 41925 | x | | | x | 210 cm | 50 |

*DEHP vrije versie

Zuurstofslang op Rol



Medline biedt een hulpmiddel voor gebruik bij zuurstoftherapie om de gasbron (lucht of zuurstof) aan te sluiten op een zuurstofmasker of vernevelaar voor toediening bij een patiënt.

De zuurstofbubbelslang op rol van 30m, met 3mm diameter, heeft bubbels op elke 90 cm, is niet steriel en is vrij van ftalaten.

Zuurstofslang op Rol

| Referentie | Lengte | Diameter | Omschrijving | Verpakkingseenheid |
|------------|--------|----------|-------------------|--------------------|
| NBTOXY3100 | 30 m | 3mm | Bubbel elke 90 cm | 1 |

SEE-THRU Maskers

Medium concentratie

Over-de-kin masker

- Stroomsnelheid: 5-10 lpm
- Transparant, zacht vinyl



Volwassen SEE-THRU masker

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|---------------------------------|---------------------|
| 41040 | met 210 cm zuurstoftoevoerslang | 50 |

Pediatrisch SEE-THRU masker

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|---------------------------------|---------------------|
| 41035 | met 210 cm zuurstoftoevoerslang | 50 |

Langwerpig masker

- Stroomsnelheid: 5-10 lpm
- Transparant, zacht vinyl



Volwassene SEE-THRU langwerpig masker

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|--|---------------------|
| 1041 | met 210cm zuurstoftoevoerslang | 50 |
| 1041P* | met 210cm zuurstoftoevoerslang (DEHP vrij) | |
| 1049 | zonder zuurstoftoevoerslang | |

*DEHP vrije versie

Pediatrisch SEE-THRU langwerpig masker

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|--|---------------------|
| 41042 | met 210cm zuurstoftoevoerslang | 50 |
| 41042P* | met 210cm zuurstoftoevoerslang (DEHP vrij) | |
| 41050 | zonder zuurstoftoevoerslang | |

*DEHP vrije versie

Verlengd met reservoirzak

- laat uitademing toe in reservoir zak
- Stroomsnelheid: 5-10 lpm
- Transparant, zacht vinyl
- Adapter draait om zich aan te passen aan positie patiënt



Volwassen SEE-THRU Verlengd Masker met Reservoirzak

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|---------------------------------|---------------------|
| 41007 | met 210 cm zuurstoftoevoerslang | 50 |

Materialen

- Masker: PVC met metalen beugel
- Slang: PVC
- Reservoir: PVC / 750 ml
- Nekband: polychloropreen

3-in-1 Verlengd Masker

Een 3-in-1 masker kan gebruikt worden als medium-concentratie, hoge-concentratie of non-rebreathing masker.

Elk product bevat een SEE-THRU masker met ventiel, reservoir en zuurstofaansluiting.

- Hoge-concentratie
- Stroomsnelheid: 5-10 lpm
- Transparant, zacht vinyl



Volwassen 3-in-1 Verlengd Masker

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|--------------------------------|---------------------|
| 41061 | met 210cm zuurstoftoevoerslang | 50 |

Materialen

- Masker: PVC met metalen beugel
- Slang: PVC
- Reservoir: PVC / 750 ml
- Connector: polypropyleen
- Nekband: polychloropreen

Venturi Systemen

MULTI-VENT Maskers

- Optimaal voor patiënten die nauwkeurige FiO₂ nodig hebben, zoals patiënten met chronisch obstructive pulmonary disease (COPD)
- Geïntegreerde vergrendelingsring die de debietinstelling beveiligd
- voorzien van kleurcodeerde, luchtaanzuigende lage- en middenconcentratieverdunners
- Inclusief adapter voor hoge luchtvochtigheid (zie tabel op pagina



Lage-concentratie verdunner (groen)
voor 24%, 26%, 28% en 30%



Medium-concentratie verdunner
(wit) voor 35%, 40% en 50%

Volwassen MULTI-VENT Verlengd Masker

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|---------------------------------|---------------------|
| 41088 | met 210 cm zuurstoftoevoerslang | 50 |

Pediatrisch MULTI-VENT verlengd masker

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|---------------------------------|---------------------|
| 41089 | met 210 cm zuurstoftoevoerslang | 50 |


MULTI-VENT totale gasstroom naar patiënt*

| Zuurstof % instelling | Aanbevolen zuurstofstroom | Totale gasstroom |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 24% | 3 lpm | 79 lpm |
| 26% | 3 lpm | 47 lpm |
| 28% | 6 lpm | 68 lpm |
| 30% | 6 lpm | 53 lpm |
| 35% | 9 lpm | 50 lpm |
| 40% | 12 lpm | 50 lpm |
| 50% | 15 lpm | 41 lpm |

*Bij specifieke verdunner en stroominstellingen

SELECT-A-VENT Air Entrainment Maskers

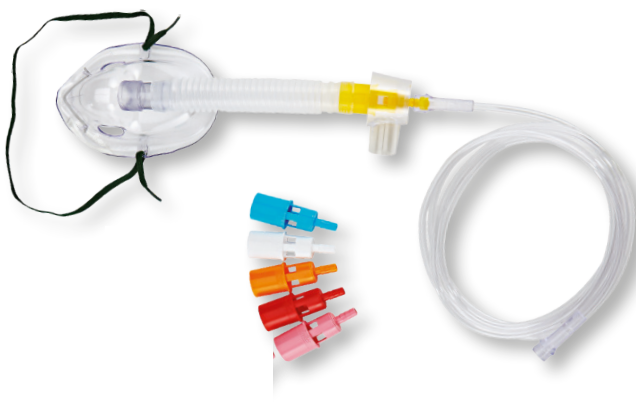- Optimaal voor patiënten die nauwkeurige FiO₂ nodig hebben, zoals patiënten met chronisch obstructive pulmonary disease (COPD)
- Verkrijgbaar als set (inclusief zes verdunners: 24%, 28%, 31%, 35%, 40% en 50%) of als enkele verdunner
- Compleet met 210cm zuurstoftoevoerslang
- Inclusief adapters voor hoge luchtvochtigheid



Volwassen SELECT-A-VENT® Air Entrainment Maskers

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|---|---------------------|
| 41098 | Set met 210 cm zuurstoftoevoerslang | 50 |
| 41098P* | Set met 210cm zuurstof Star Lumen slang (DEHP-vrij) | |

*DEHP vrije versie

Materialen

- Masker: PVC met metalen beugel
- Slang: PVC
- Connector: polypropyleen
- Nekband: polychloropreen

Non-rebreathing Maskers

Hoge-concentratie

Half-open Masker

met Veiligheidsventiel

- Voorkomt opnieuw inademen en zorgt ervoor dat uitgeademde lucht weg kan, dankzij een controle ventiel met lage weerstand
- Stroomsnelheid: 5-10 lpm
- Transparant, zacht vinyl



Volwassen Non-rebreathing Verlengd Masker

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|--|---------------------|
| 1059 | met 210cm zuurstoftoevoerslang | 50 |
| 1059P* | met 210cm zuurstoftoevoerslang (DEHP vrij) | |
| 41069 | zonder zuurstoftoevoerslang | |

*DEHP vrije versie

Pediatrisch Non-rebreathing Verlengd Masker

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|--------------------------------|---------------------|
| 41058 | met 210cm zuurstoftoevoerslang | 50 |

Gesloten Masker

- Voorkomt opnieuw inademen en zorgt ervoor dat uitgeademde lucht weg kan, dankzij een controle ventiel met lage weerstand
- Stroomsnelheid: 10-12 lpm
- Transparant, zacht vinyl



Volwassen Non-rebreathing Verlengd Masker

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|---------------------------------|---------------------|
| 41060 | met 210 cm zuurstoftoevoerslang | 50 |

Materialen

- Masker: PVC met metalen beugel
- Slang: PVC
- Reservoir: PVC / 750 ml
- Ventiel: siliconen
- Nekband: polychloropreen

AQUAPAK®

Gevulde luchtbevochtigers

Hudson AQUAPAK® voorgevulde luchtbevochtigers bieden prestaties, veiligheid en waarde, maar bieden ook:

- Een waarschuwing voor de zorgverlener bij beperkte stroom of verstoppingen van de luchtbevochtiger of zuurstofslang, door middel van een luchtbevochtiger adapter met een hoorbaar alarmsignaal
- Meer agitatie van het oppervlak, waardoor een geruisloze bevochtiging mogelijk is, door middel van een microdiffuser die in de reservoirfles is gegoten en die kleinere bellen produceert
- Een zuurstofslang connector, ingebouwd in de steriele reservoirfles, met een gemakkelijk snap-off trigger ontwerp
- Gemakkelijker te gamma steriliseren, dankzij de complete set samen met een insufflatieadapter.

Materialen

- Fles: polypropyleen
- Adapter: polycarbonaat
- Slang: PVC
- Ventiel: siliconen

AQUAPAK Steriel Water met Luchtbevochtiger Adapter

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|--|---------------------|
| 400340 | 340ml steriel water dest., inclusief ref. 400040 steriele Luchtbevochtiger Adapter | 20 |
| 400640 | 650ml steriel water dest., inclusief ref. 400040 steriele Luchtbevochtiger Adapter | 10 |
| 003-40F* | 340ml steriel dest., inclusief ref. 000-40F steriele Luchtbevochtiger Adapter* | 20 |
| 006-40F* | 650ml steriel dest., inclusief ref. 000-40F steriele Luchtbevochtiger Adapter* | 10 |

*Compatible met Franse flowmeter aansluiting




AQUAPAK® Steriel Water met Luchtbevochtiger Adapter

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|---|---------------------|
| 400301 | 340ml steriel water dest., alleen water reservoir, voor gebruik met ref. 400040 of ref. 000-40F* Luchtbevochtiger Adapter | 20 |
| 400601 | 650ml steriel water dest., alleen water reservoir, voor gebruik met ref. 400040 of ref. 000-40F* Luchtbevochtiger Adapter | 10 |

*Compatible met Franse flowmeter aansluiting



Luchtbevochtiger Adapter

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|---|---------------------|
| 400040 |  <ul style="list-style-type: none"> • Steriele, transparante adapter voor gebruik met ref. 400301 of ref. 400601 • Drukventiel 350 - 700 cm H₂O • Hoorbare pop-off • Eenmalig gebruik | 120 |
| 000-40F* | <ul style="list-style-type: none"> • Steriele, transparante adapter voor gebruik met ref. 400301 of ref. 400601 • Drukventiel 350 - 700 cm H₂O • Hoorbare pop-off • Eenmalig gebruik | 120 |

*Compatible met Franse flowmeter aansluiting

Disposable Luchtbevochtiger

Hudson biedt luchtbevochtigers aan die gebruikt kunnen worden met een waterbron naar keuze. Deze wegwerpbevochtigers zijn voorzien van een hoorbaar drukontlastingsventiel dat afsluiting van de bevochtiger of de zuurstofslang signaleert.

Elke luchtbevochtiger is gemaakt van:

- Disposable, stevig kunststof met vooraf ingesteld hoorbaar signaal bij 280 cmH₂O (4 psi) overdruk
- Gedefinieerde minimum- en maximumwaterpeilijnen.



Disposable luchtbevochtiger

| Referentie | Gevuld volume | Verpakkings-eenheid |
|------------|---------------|---------------------|
| 3230 | 500 ml | 50 |

Materialen

- Behuizing: polyethyleen
- Adapter: polypropyleen
- Drukcompensatie-
- Ventiel: siliconen



Verneveltherapie

MICRO MIST Klein Volume Vernevelaar

De MICRO MIST® klein volume vernevelaar produceert een fijne, dichte nevel onder een hoek tot 90° met optimale deeltjesgrootte, efficiënte vernevelingssnelheden en minimale resten.

Ze zijn stuk voor stuk ontworpen met het oog op prestaties en zuinigheid en kunnen worden gebruikt voor behandelingen met de hand of in de lijn. De MICRO MIST is voorzien van een gemakkelijk te sluiten schroefdop en een antilekpotje met een capaciteit van 6 ml om lekken te helpen voorkomen en montage/demontage te vergemakkelijken.

Dankzij het innovatieve capillaire ontwerp van de MICRO MIST kan de zorgverlener medicijnen toedienen aan patiënten met speciale behandelingseisen, zoals patiënten die horizontaal liggen.

Niet te gebruiken met medicatie op oliebasis.



MICRO MIST Klein Volume Vernevelaar

| Referentie | MICRO MIST Vernevelaar | Tee | Mondstuk Ref. 41565 | 15 cm Reservoir-Slang | 210 cm Slang | Standaard Slang connector Ref. 1115 | Universele Slang connector Ref. 41925 | Volwassen Masker Ref. 1083 | Pediatrisch Masker Ref. 41085 | Verpakkings-eenheid |
|------------|------------------------|-----|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 41880** | x | | | | | | | | | 50 |
| 41883** | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 41890 | x | | | | | | | | | |
| 41891 | x | x | | | x | x | | | | |
| 41892 | x | x | x | | x | x | | | | |
| 41892P* | x | x | x | | x | x | | | | |
| 41893 | x | | | | x | x | | x | | |
| 41893P* | x | | | | x | x | | x | | |
| 41894 | x | | | | x | x | | | x | |
| 41894P* | x | | | | x | x | | | x | |
| 41895 | x | x | x | x | x | | x | | | |
| 41898 | x | | | | x | | x | x | | |

*DEHP vrije versie

**Ref. 41883 en Ref. 41880 hebben een 18mm dop en tee. Alle anderen hebben 22mm connectoren.

Materialen

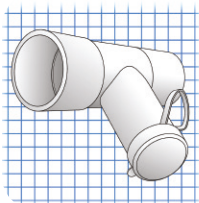
- Vernevelmasker: PVC
- Behuizing: polystyreen
- Tee: K-resin
- Ventiel: polyisopreen

MICRO MIST Vernevelaar met In-Line Neb Tee™ met Ventiel

Met dit gespecialiseerde MICRO MIST hulpmiddel kan behandeling worden toegediend zonder het circuit te openen of de beademing te onderbreken, door middel van een ingebouwde, veerbelaste zelfopenend en -sluitend ventiel. Bovendien vereenvoudigt het de toegang tot ventilatorcircuits van 22 mm voor vernevelbehandelingen met kleine volumes, met een Neb Tee-stuk met connectoren met een binnendiameter van 22 mm en een buitendiameter van 22 mm.

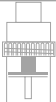

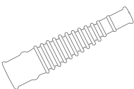


- Aanbevolen minimumvolume: 1 ml
- Aanbevolen stroomsnelheid: 8 lpm
- Massa mediane aërodynamische diameter (MMAD): 2,7 microns
- Vernevelsnelheid: 0,34 ml/min
- Volume van de vernevelpot: 6 ml

Niet te gebruiken met medicatie op oliebasis.



Verneveltherapie

MICRO MIST Vernevelaar met In-Line Neb Tee met Ventiel

| Referentie | MICRO MIST Vernevelaar | Neb Tee | Flextube 22 F/15 F | 210 cm Slang | Standaard slang-aansluiting | Verpakkings-eenheid |
|------------|---|---|---|--|---|---------------------|
| |  |  |  |  |  | |
| 41745 | x | x | x | x | x | 50 |

- Materialen**
- Vernevelmasker: PVC
 - Behuizing: polyisopreen
 - Tee: K-resin
 - Ventiel: polyisopreen

UP-DRAFT II Vernevelaar

De compacte, high-output UP-DRAFT II:

- Produceert een geconcentreerde nevel bij stroomsnelheden van 5-9 lpm
- Verneveling onder een hoek tot 45° om aan speciale behandelingseisen te voldoen
- Voorkomt lekken en is eenvoudig te monteren/demonteren, dankzij een gemakkelijk af te sluiten dop met schroefdraad en 8ml antilekpot.
- Biedt een uitzonderlijke nevel, therapeutische deeltjesgrootte en efficiënte vernevelingstijden.

Andere eigenschappen:

- Aanbevolen stroomsnelheid: 5-9 lpm
- MMAD: 2-3 microns
- Vernevelsnelheid: 0,2-0,3 ml/min.
- Volume: 8 ml

Materialen

- Vernevelmasker: PVC met metalen beugel
- Behuizing: polystyreen
- slang: PVC
- Tee: K-resin



Niet te gebruiken met medicatie op oliebasis.



UP-DRAFT II Vernevelaar

| Referentie | UP-DRAFT II Vernevelaar | Tee Ref. 41651 | Mondstuk Ref. 41565 | 15 cm Reservoir-Slang | 210 cm Slang | Volwassen Masker Ref. 1083 | Pediatrisch Masker Ref. 41085 | Verpakkings-eenheid |
|------------|---|---|---|---|--|---|---|---------------------|
| |  |  |  |  |  |  |  | |
| 41705 | x | | | | x | x | | 50 |
| 41707 | x | | | | x | | x | |
| 41730 | x | | | | | | | |
| 41732 | x | x | x | | x | | | |
| 1734 | x | x | x | x | x | | | |

UP-DRAFT Vernevelaar

De UP-DRAFT vernevelaar is:

- Ideaal voor ziekenhuis- of thuiszorgomgevingen waar de grootte, het ontwerp en de prestaties het bijzonder geschikt maken
- Lekvrij, dankzij een schroefdeksel dat een afdichting vormt en gemakkelijk te monteren/demonteren is.
- Geschikt voor gebruik met grote hoeveelheden vloeistoffen; mogelijk gemaakt door het vrijstaande potje met grote capaciteit (5 - 15 ml) met duidelijk gemarkeerde maximumvullingslijn en de jetopening met lage weerstand.

Andere eigenschappen:

- Aanbevolen stroomsnelheid: 5-9 lpm
- MMAD: 2-3 microns
- Vernevelsnelheid: 0,2-0,3 ml/min.
- Volume: 15 ml



Niet te gebruiken met medicatie op oliebasis.



UP-DRAFT Vernevelaar

| Referentie | UP-DRAFT Vernevelaar | Tee Ref. 41651 | Mondstuk Ref. 41565 | 210 cm Slang | Volwassen Masker, Ref. 1083 (Onder kin) | Verpakkings-eenheid |
|------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | | | |
| 41710 | x | | | x | x | 50 |
| 41720 | x | x | x | x | | |

Materialen

- Vernevelmasker: PVC met metalen beugel
- Behuizing: polyisopreen
- Tee: K-resin

ISO-NEB Vernevelingsset met Filter

Het ISO-NEB vernevelsysteem met filter:

- Helpt omgevingscontaminatie te verminderen tijdens aërosoltherapie
- De inspiratoire en expiratoire stroming kunnen van elkaar worden gescheiden dankzij eenrichtingskleppen, waarbij de uitademing door een efficiënt filtersysteem wordt geleid
- Beschermst personeel en omgeving tegen sproeiresten door middel van het elektrostatisch geladen pathogenenfilter, dat een bacteriële/ virale filtering heeft van 99,999/99,99%
- Werkt verticaal of onder een hoek tot 45°
- Bevat de UP-DRAFT II, een high-output, 8 ml vernevelaar met een klein volume
- Aanbevolen stroomsnelheid: 5-9 lpm
- Vernevelsnelheid: 0,2-0,3 ml/min.
- Volume: 8 ml
- Individueel verpakt



ISO-NEB Vernevelingsset

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|--------------|---------------------|
| 41755 | Met filter | 20 |

Side-Draft Neb-U-Mist Vernevelaar

- 'Side-draft' stijl klein volume vernevelaar
- Vernevelaar met tee en mondstuk



Side-Draft NEB-U-MIST Vernevelaar

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|---------------------|---------------------|
| 41897 | met tee en mondstuk | 50 |



AQUAPAK®

Gevulde vernevelaars

aQUAPAK voorgevulde vernevelaars bieden veelzijdige, steriele systemen voor koude of verwarmde verneveling. Kies uit een grote verscheidenheid aan reservoirs, adapters en oplossingen om efficiënt en economisch aan specifieke patiëntvereisten te voldoen.

- Gamma steriel




Vernevelaar Adapter 028

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|---|---------------------|
| 403128 |  <ul style="list-style-type: none"> • Venturi-stijl entrainment ring maakt de selectie van zuurstofconcentraties van 28% tot 98% mogelijk • Adapter: polycarbonaat • Individueel verpakt • Steriel | 50 |
| 031-28F* | <ul style="list-style-type: none"> • Steriele, transparante adapter voor gebruik met • Ref. 044-28F en 037-28F* • Drukventiel 350 - 700 cm H2O • Hoorbare pop-off • Eenmalig gebruik | 120 |

*Compatibel met Franse flowmeter aansluiting

Vernevelaar adapter 033

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|---|---------------------|
| 403133 |  <ul style="list-style-type: none"> • stille adapter maakt selectie mogelijk van zuurstofconcentraties van 33% tot 98% om aan de behoeften van de IC-patiënt te voldoen • Adapter: polycarbonaat • Individueel verpakt • Steriel | 50 |

- keuze uit twee AQUAPAK-adapters voor precisievernevelaars voor de toediening van een consistente aërosol van een breed scala aan zuurstofconcentraties
- AQUATHERM III verwarmder zorgt voor verwarmde verneveltherapie
- Voorgevulde steriele AQUAPAK-reservoirs zijn verkrijgbaar in vier handige maten: 440 ml, 760 ml, 1070 ml, en 2200 ml
- Verkrijgbaar met reservoir en steriele adapter, handig samen verpakt
- Het AQUAPAK reservoir kan worden gebruikt met andere Hudson bevochtigings- en vernevelingsproducten, waardoor het systeem echt veelzijdig is

Gesloten Steriel Watersysteem voor Mechanische Verneveling + Adapter

| Referentie | 440 ml | 760 ml | 1070 ml | Steriel water | 0,9% Zoutoplossing | Adapter 028 | Adapter 028F* | Adapter 033 | Verpakkings-eenheid |
|------------|--------|--------|---------|---------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| 400400 | x | | | x | | | | | 20 |
| 044-28F* | x | | | x | | | x | | 20 |
| 403128 | | | | | | x | | | 50 |
| 403133 | | | | | | | | x | 50 |
| 403700 | | x | | x | | | | | 10 |
| 037-28F* | | x | | x | | | x | | 10 |
| 403709 | | x | | | x | | | | 10 |
| 403728 | | x | | x | | x | | | 10 |
| 404128 | | | x | x | | x | | | 10 |
| 404428 | x | | | x | | x | | | 20 |

*Compatibel met Franse flowmeter aansluiting

Disposable Groot Volume Vernevelaar voor Mechanische Beademing

- 500 ml
- Vastgestelde maximum en minimum waterpeil lijnen
- Concentratie: 28 - 98%
- Individueel verpakt



Disposable Groot Volume Vernevelaar voor Mechanische Beademing

| Referentie | Omschrijving | Verpakkingseenheid |
|------------|--|--------------------|
| 41770 | Vernevelaar voor mechanische beademing | 50 |



Materialen

- Behuizing: polyethyleen
- Adapter: polycarbonaat

AQUATHERM® III Externe Instelbare Elektronische Verwarming

- Zorgt voor verwarmde nevel door bevestiging op het vernevelsysteem
- Instelbare neveltemperatuur om aan de behoeften van de patiënt te voldoen met een gevoelige temperatuurregelaar
- Robuuste, duurzame verwarming

AQUATHERM III Externe Instelbare Elektronische Verwarmer

| Referentie | Omschrijving | Verpakkingseenheid |
|--------------------|------------------------|--------------------|
| 050-12 D | 220 – 240 V, 50 Hz | 1 |
| 220 – 240 V, 50 Hz | United Kingdom-stekker | |



Tracheotomie Masker

- Voor tracheotomie en laryngectomie verneveltherapie
- Slangaansluiting 360° draaibaar
- Geschikt voor 22mm ID geribbelde slang
- Individueel verpakt



Tracheotomie Masker

| Referentie | Omschrijving | Verpakkingseenheid |
|------------|------------------------|--------------------|
| 1075 | met volwassen masker | 50 |
| 41076 | met pediatrisch masker | |



Vernevelmasker

- Speciaal ontworpen voor verneveltherapie
- Connector geschikt voor 22mm vernevelslang
- Transparant, zacht vinyl
- individueel verpakt



Vernevelmasker

| Referentie | Omschrijving | Verpakkingseenheid |
|------------|----------------------------------|--------------------|
| 1083 | met volwassen masker | 50 |
| 1083P* | met volwassen masker (DEHP vrij) | |
| 41085 | met pediatrisch masker | |

*DEHP vrije versie



Face Tent Masker

- Voor verneveltherapie met hoge luchtvochtigheid
- Connector geschikt voor 22mm vernevelslang
- Transparant, zacht vinyl
- Individueel verpakt



Face Tent Masker

| Referentie | Omschrijving | Verpakkingseenheid |
|------------|--------------|--------------------|
| 41095 | Face tent | 50 |



Materialen

- Masker: PV met metalen beugel
- Adapter: polyethyleen
- Nekband: polychloropreen

CORR-A-FLEX II Slang op Rol

- Voor verwarmde en niet-verwarmde therapietoepassingen
- Past op en vergrendelt stevig aan 22 mm adapters, dankzij rand aan de slanguiteinden
- Uiterst licht en flexibel
- Met snijdbare secties om de 15 cm
- 30,4m rol; polyurethaan (PE)



CORR-A-FLEX II Slang op Rol

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|--------------|---------------------|
| 1680 | Slang op rol | 1 rol |

Vernevel Drainagesysteem

- Zelfvergrendelende kunststof ketting bevestigd zak aan een stabiel object
- Disposable drainagezak met tee adapter passend op standaard 22mm ID geribbelde slang
- Handige aftapkraan
- Materiaal: Tee polyethyleen, zak PVC




Vernevel Drainagesysteem

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|--------------|---------------------|
| 41740 | 750 ml | 50 |

CORR-A-FLEX slang

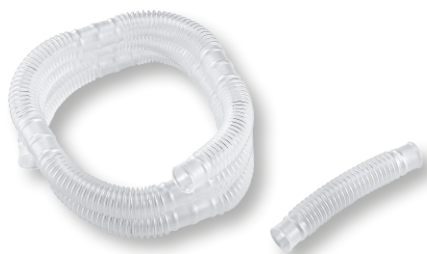- Slanguiteinde met rand past stevig op 22mm adapters
- Uitzonderlijk flexibele, lichtgewicht slang, PE
- 180cm lang
- Met snijdbare secties om de 15 cm
- Individueel verpakt



CORR-A-FLEX Slang

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|--------------|---------------------|
| 41518 | Slang op rol | 50 |

ADDIPAK Dosis

- 3ml en 15ml ampullen met steriele 0,9% zoutoplossing voor ademhalingstherapie
- Omgekeerde milliliter schaalverdeling voor nauwkeurige dosering



ADDIPAK Dosering

| Referentie | Omschrijving | Verpakkings-eenheid |
|------------|--|---------------------|
| 200-39 | 0,9% - vol normale zoutoplossing, 3 ml (roze ampul) | 100 |
| 200-69 | 0,9% - vol normale zoutoplossing, 15 ml (roze ampul) | 48 |

Spirometers

Effectieve ademhalingstherapie met volgehouden maximale inspiratie

Hudson incentive spirometers visualiseren de ademhalingsprestaties van patiënten (balletje, markeringen) en moedigen hen aan dieper en langer adem te halen. Aangezien ze niet opnieuw verwerkt hoeven te worden, zijn deze producten voor gebruik bij een patiënt zeer voordelig.

TRIFLO® II

- stromingsgeoriënteerde, 3-ballen stimulerende spirometer met mondstuk en slang
- 3 kleuren balletjes/3 kamers
- Minimum debiet op elke kamer gedrukt
- Compact ontwerp en breukbestendig kunststof

TRIFLO II

| Referentie | Stroomsnelheid | Maat | Verpakkings-eenheid |
|------------|--------------------|---|---------------------|
| 8884717395 | 600 - 1200 ml/sec. | Behuizing: 13,5 (lengte) x 7 (breedte) x 14 (hoogte) cm Slang: 28 cm Mondstuk: 6,5 cm | 12 |



VOLDYNE®

- volume-georiënteerde spirometer met mondstuk en slang
- 2 maten om zowel kleine als grote ingeademde volumes te vergemakkelijken
- Compact, economisch ontwerp met ingebouwde handgreep
- Markeringen aan beide zijden.

VOLDYNE 2500 / Voldyne 4000

| Referentie | Omschrijving | Volumemeting | Maat | Verpakkings-eenheid |
|------------|--|--------------------|---|---------------------|
| 8884719018 | Voldyne 2500 voor volwassen en pediatrisch gebruik | 250 ml tot 2500 ml | Behuizing: 17 (lengte) x 7 (breedte) x 15.4 (hoogte) cm Slang: lengte ingeklapt 12,2 cm +/- 2,5 cm Mondstuk: 5,9 cm in totaal, maar slechts 3,7 zichtbaar, omdat deze in de slang klikt | 12 |
| 8884719016 | Voldyne 4000 voor volwassen gebruik | 250 ml tot 4000 ml | Behuizing: 17 (lengte) x 7 (breedte) x 15.4 (hoogte) cm Slang: lengte ingeklapt 12,2 cm +/- 2,5 cm en uitgetrokken lengte van 30 cm +/- 2,5 cm Mondstuk: 5,9 cm in totaal, maar slechts 3,7 zichtbaar, omdat deze in de slang klikt | |



Long Volume Oefenapparaat

- twee-kamer ontwerp creëert een constante weerstand voor diepe en langdurige inspiratie
- Stroomgebaseerde incentive spirometer met mondstuk en slang
- Breukbestendig materiaal

Longvolume Oefenapparaat

| Referentie | Stroomsnelheid | Verpakkings-eenheid |
|------------|---|---------------------|
| 41750 | 200-1200 ml/sec. (instelbare stroominstellingen); voor volwassen en pediatrisch gebruik | 10 |



Adapters en Connectoren

Referentiegid

Adapters en connectoren



Slangadapter

- Standaard 22mm buitendiameter x 22mm binnendiameter
- 50 per doos



Universele Cuff Adapter

- Standaard 22mm binnendiameter aansluitingen
- 50 per doos



Multi Adapter

- Standaard 15mm binnendiameter x 22mm buitendiameter
- 50 per doos



Grote Slangconnector

- Standaard 22mm buitendiameter x 22mm buitendiameter aansluitingen
- 50 per doos



Monitoringsadapter

- 15mm buitendiameter x 15mm binnendiameter/22mm buitendiameter aansluitingen
- Standaard luer aansluiting
- Kan worden gebruikt met Lifesaver® reanimatiezakken
- 50 per doos



Druklijn Adapter

- 22mm buitendiameter x 22mm binnendiameter aansluitingen
- Elleboog draaibaar 360°
- Elleboog met weerhaken geschikt voor slangen met binnendiameter van 5 tot 7 mm
- 50 per doos



Slangconnector

- Verbindt zuurstofslangen met 5-7mm connectoren
- 50 per doos



Slangadapter

- 22mm binnendiameter x 5-7mm taps toelopend verbindingstuk
- Kan gebruikt worden met tracheotomie masker (artikelnummer 1075)
- 50 per doos



Nipple-and-Nut Adapter

- Slangadapter voor standaard DISS zuurstofuitgangen
- 50 per doos

Ellebogen



Patiënt

Elleboogadapter

- 15mm buitendiameter x 15mm binnendiameter/22mm buitendiameter
- 50 per doos



Gasmonster Adapter

- 15mm buitendiameter x 15mm binnendiameter/22mm buitendiameter
- Female luer lock aansluiting; 360° draaibaar
- 50 per doos



Norman Masker Elleboog

- 15mm buitendiameter x 15mm binnendiameter/22mm buitendiameter
- Elleboog geschikt voor 5 tot 7mm binnendiameter slang; 360° draaibaar
- 50 per doos

Wyes



Volwassen Near-Parallel Wye

- 22mm buitendiameter slangaansluitingen
- 15mm binnendiameter/22mm buitendiameter
- Geen poorten
- 50 per doos

ConchaTherm® Adapters



Slangadapter

- Conische fitting tot 7-mm 15,5-mm ID / 19-mm OD
- Ontworpen voor gebruik met de Concha® verwarmde luchtbevochtiger



Zuurstofverdunner

- Verstelbaar van 26 tot 90%
- Zorgt voor de toediening van verwarmde luchtvochtigheid bij specifieke zuurstofconcentraties bij gebruik met Concha® luchtbevochtiger

Eénrichtingsventielen



Eénrichtingsventiel

- Lage stroomweerstand
- 22m buitendiameter tot 22mm binnendiameter
- 50 per doos



Eénrichtingsventiel

- Lage stroomweerstand
- 22m buitendiameter tot 22mm binnendiameter
- 50 per doos



Tee met ventiel

- Samengestelde tee
- 2 éénrichtingsventielen laten gas slechts in één richting stromen
- 50 per doos

MDI adapters



MDI Adapter

- 22mm buitendiameter x 22mm binnendiameter aansluitingen voor in-line plaatsing op 22mm slangen
- 50 per doos



Drainagesystemen

Drainagezak

- Disposable drainagezak met tee adapter past met standaard 22mm binnendiameter geribbelde slang
- 750cc capaciteit
- Zelfvergrendelende kunststof ketting bevestigt zak aan een stabiel object
- Handige afvoerpoort

Watersloten



70cc Waterslot

- 22mm buitendiameter x buitendiameter
- Zelfdichtend deksel om de doorlaatbaarheid van het circuit te verzekeren
- 50 per doos



Waterslot

- Vangt vocht op dat zich kan ophopen in O2 leidingen
- Geschikt voor alle standaard en pletbestendige zuurstoftoevoerslangen
- 20,32cm lang met 2,54cm diameter

Tees



Tee Connector

- 22mm buitendiameter x 15mm binnendiameter/22mm buitendiameter x 22mm binnendiameter
- 50 per doos



Antilek Tee Connector

- Antilek ontwerp minimaliseert afzuiging van vloeistoffen
- 22mm buitendiameter x 15mm binnendiameter/22mm buitendiameter x 22mm binnendiameter
- 50 per doos



Vernevelaar Tee Connector

- 22mm buitendiameter x 18mm binnendiameter/22mm binnendiameter
- Poort geschikt voor de meeste klein volume vernevelaars
- 50 per doos



Mondstuk

- Standaard mondstuk met 15mm/22mm buitendiameter aansluiting
- 50 per doos



Trach Tee Oxygenator

- Maakt toediening van zuurstof aan endotracheale of tracheostomie tubes mogelijk
- Inclusief zuurstof nipple adapter, verneveltee en 15,24cm

Cilinders/Sleutels



Cilinder Sleutel

- Gemaakt van gegoten zink
- Individueel verkocht



Om meer te weten te komen over deze producten, neem contact op met uw Medline accountmanager of bezoek medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93

www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

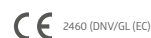
VOLG ONS



Referenties 1041P, 1059P, 1083P, 41042P, 41098P 41892P, 41893P, 41894P zijn klasse IIa medische hulpmiddelen.



Obelis S. A.
Bd. Général Wahnis, 53
1030 Brussels, Belgium



Referenties 1041, 1049, 1059, 1075, 1083, 41007, 41035, 41040, 41042, 41050, 41058, 41060, 41061, 41069, 41076, 41085, 41088, 41089, 41095, 41098 zijn klasse IIa medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



Referenties 1115P en 41113P zijn klasse IIa medische hulpmiddelen.



Shanghai International Holding Corp GmbH
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Germany



Referenties 41639, 41648, 41664, 41666, 400040, 400301, 400340, 400400, 400601, 400640, 403128, 403133, 403700, 403709, 403728, 404128, 404428, 000-40F, 003-40F, 006-40F, 031-28F, 037-28F, 044-28F, 050-12E, 200-39, 384-00, 384-26, 1680, 41518, 41650, 41750, 8884717395, 8884719016, 8884719018, 3230, 41740, 41770, 1734, 41705, 41707, 41710, 41720, 41730, 41732, 41745, 41755, 41880, 41883, 41890, 41891, 41892, 41893, 41894, 41895, 41898, 050-12D zijn klasse IIa, IIb, I medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



Referenties 1423, 1623, 1624, 1632, 1674, 41077, 41409, 41420, 41421, 41422, 41565, 41640, 41642, 41659, 41665, 41668, 41669, 41897 zijn klasse IIa, IIb medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



Referentie 191423-000000 is een klasse IIa medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



Referenties 1103, 1104, 1115, 1679, 1870, 1871, 1872, 1873, 1877, 41110, 41113, 41118, 41119, 41120, 41820, 41826, 41828, 41925, 403700, 42555 zijn klasse IIa medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



Referentie NBTOXY3100 is een klasse IIa medische hulpmiddelen.



Avion Medical Spółka z o.o. (subsidiary of Medline International)
Ul. Karsiborska 12,
72-600 Swinoujscie, Poland



Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2022 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1216_NL 08/2022