

Uitgebreide respiratoire zorg

Zuurstoftherapie, verneveltherapie, ademtraining



**Voorzie in
respiratoire
behoeften van
uw patiënten**

Hoogwaardige medische benodigdheden van één betrouwbare bron

Medline geeft prioriteit aan gezondheidszorg, inclusief de belangrijke respiratoire behoeften van uw patiënten. We bieden hoogwaardige en betaalbare oplossingen en bieden meer efficiëntie door een breed assortiment.

De producten voor zuurstoftherapie, verneveltherapie en ademhalingstrainingen in deze brochure helpen u niet alleen om beter te voorzien in behoeften voor respiratoire zorg, maar helpen u ook om uitgebreidere en meer gespecialiseerde zorg te verlenen.

Meer details en technische specificaties van onze producten vindt u in deze brochure.

Inhoudsopgave

Zuurstoftoediening	3	Bronchiale hygiëne	29
Zuurstofslang	4	Ademtraining	30
Neusbrillen	5		
Zuurstofkatheters	7	Adapters en connectoren	32
Zuurstofmaskers	8	Adapters en connectoren	33
Bubbel bevochtigers	13	Eénrichtingsventiel	34
Flowmeter accessoires	15	Ellebogen, Y-stukken, T-stukken	34
		Metered Dose Inhalator (MDI)	
Verneveltherapie	16	Adapters	35
Vernevelaars met groot volume	17	Watersloten	35
Aquatherm III	19	Overig	35
Vernevelmaskers	20		
Vernevelaccessoires	21		
Toediening van medicijnen	23		
Micro Mist	24		
Neb-Easy	25		
In-Line Neb Tee	26		
UpDraft II	27		
ISO-NEB	28		

Zuurstoftoediening


Zuurstofslangen	4
Neusbrillen	5
Zuurstofkatheters	7
Zuurstofmaskers	8
Bubbel bevochtigers	14
Flowmeter accessoires	15



Zuurstofslang

Zuurstofslangen zijn een belangrijk component van zuurstoftherapie, ontworpen voor veilige en efficiënte toediening van zuurstof vanaf de bron naar de patiënt.

Medline biedt verschillende zuurstofslangen in verschillende lengtes, hardheden en connectoren zodat u altijd het juiste product hebt voor uw klinische of financiële doelen.

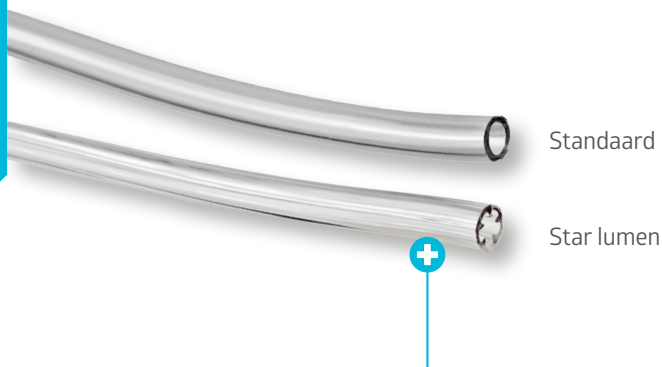


Standaard

Star lumen

Anti-knik slang

Het speciale slangontwerp heeft een binnenlumen met vijf kanalen, wat zorgt voor een continue zuurstofstroom.

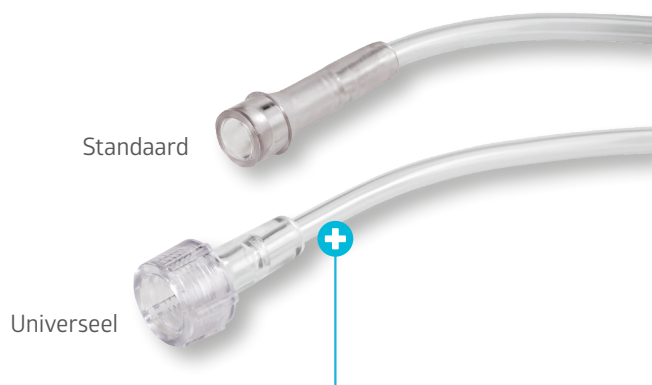

Standaard

Universeel

Universele connectoren

Handig en voordelig omdat ze rechtstreeks op flowmeters kunnen worden aangesloten, waardoor er geen nipple-and-nut adapters nodig zijn.

Referentie	Type slang		Eindconnector		Verpakkingsinhoud
	Star Lumen	Lengte	Standaard	Universeel	
41113P*	X	210 cm	X		50
1118P*	X	420 cm	X		50
1119P*	X	760 cm	X		25
1120P*	X	1520 cm	X		25
1925P*	X	210 cm		X	50

*Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP)-vrij

Neusbril


Een Neusbril is ontworpen om een lage zuurstofstroom toe te dienen bij de patiënt via de neus.

Essential

De gebogen neusuiteindes zijn dunner en zachter en volgen de anatomie van de neus van de patiënt.

De neusbrillen zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties, wat de klant een keuze biedt tussen standaard of brede neustips.

Transparant materiaal
om blokkades te visualiseren

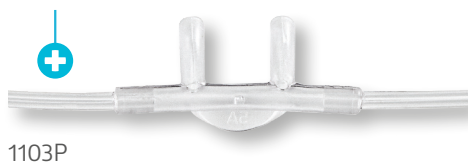

1103P

Over het oor ontwerp
Veilige positionering




1104P




Lipje
Voor het optimaal positioneren
van de uiteindes

Normaal
ontwerp

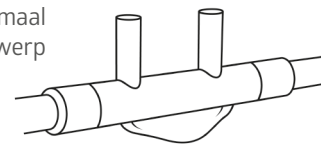

Breed
ontwerp

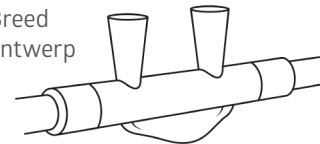

Referentie	Maat	Neusuiteinde	Slang			Stroomsnelheid	Verpakkingsinhoud
		Ontwerp	Aansluiting	Star lumen	Lengte		
1103P*	Volwassen	Recht	Standaard	X	210 cm	1 - 6 l/min	50
1104P*	Volwassen	Breed		X	210 cm		
41110	Volwassen	Recht		X	210 cm		

*Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP)-vrij



Neusbril

Softech en Softech Plus

De Hudson Softech en Softech Plus Neusbrillen zijn ontworpen voor comfortabele zuurstofoediening. Ze zijn ontworpen met een zachte kunststof slang, van DEHP-vrij materiaal. Deze neusbrillen zijn bestand tegen knikken en dichtklappen dankzij star lumen in alle formaten.

Deze lichtgewicht, flexibele neusbrillen hebben patiëntcomfort als prioriteit. Ze zijn om over de oren te dragen, met gebogen uiteinden voor een betere pasvorm. Ze zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor volwassenen, Zuigelingen en pasgeborenen.



Softech bril


Referentie	Maat	Type slang		Eindconnector		Stroomsnelheid	Verpakkingsinhoud
		Star lumen	Lengte	Standaard	Universeel		
41820	Volwassen	X	210 cm	X		4 l/min	50
41826	Kind	X	210 cm		X	3,5 l/min	
41828	Zuigeling	X	210 cm	X		1,5 – 2 l/min	

Softech plus brillen

Referentie	Maat	Type slang		Eindconnector		Stroomsnelheid	Verpakkingsinhoud
		Star lumen	Lengte	Standaard	Universeel		
1870	Volwassen	X	210 cm	X		4 l/min	50
1871	Kind	X	210 cm	X		3,5 l/min	
1872	Zuigeling	X	210 cm	X		1,5 – 2 l/min	
1873	Neonaat	X	210 cm	X		1,5 l/min	
1877	Volwassen	X	420 cm	X		4 l/min	

Het Softech Plus assortiment heeft een groene toedieningsslang voor extra herkenbaarheid en helpt aansluitfouten te voorkomen.

Groene super zachte toedieningsslang
Voor meer herkenbaarheid

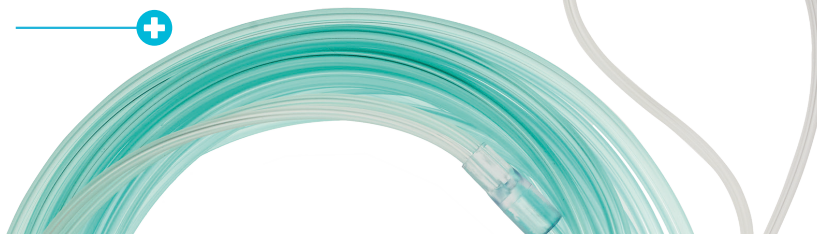

Neus Zuurstofkatheter


Deze Zuurstofkatheter is speciaal ontworpen voor gebruik op de IC om extra zuurstof toe te dienen bij patiënten die hulp nodig hebben bij het ademen.

Het distale uiteinde van de neus zuurstofkatheter is open en heeft een rechte taps toelopende connector van PVC, die moet worden aangesloten op een zuurstofbron met een aanbevolen lage stroomsnelheid van ≤ 6 l/min. Deze katheter is 40 cm lang en gemaakt van PVC.

Het proximale uiteinde heeft een stuk van polyether schuim stuk voor comfortabele plaatsing van de neus zuurstofkatheter in de neus van de patiënt.

Het is verkrijgbaar in verschillende afmetingen om aan de behoeften van de patiënt voor zuurstoftherapie te voldoen.

Referentie	Maat	Diameter	Diameter	Verpakkingsinhoud
820608	8	40	Recht, conisch	100
820610	10	40	Recht, conisch	100
820612	12	40	Recht, conisch	100
820614	14	40	Recht, conisch	100

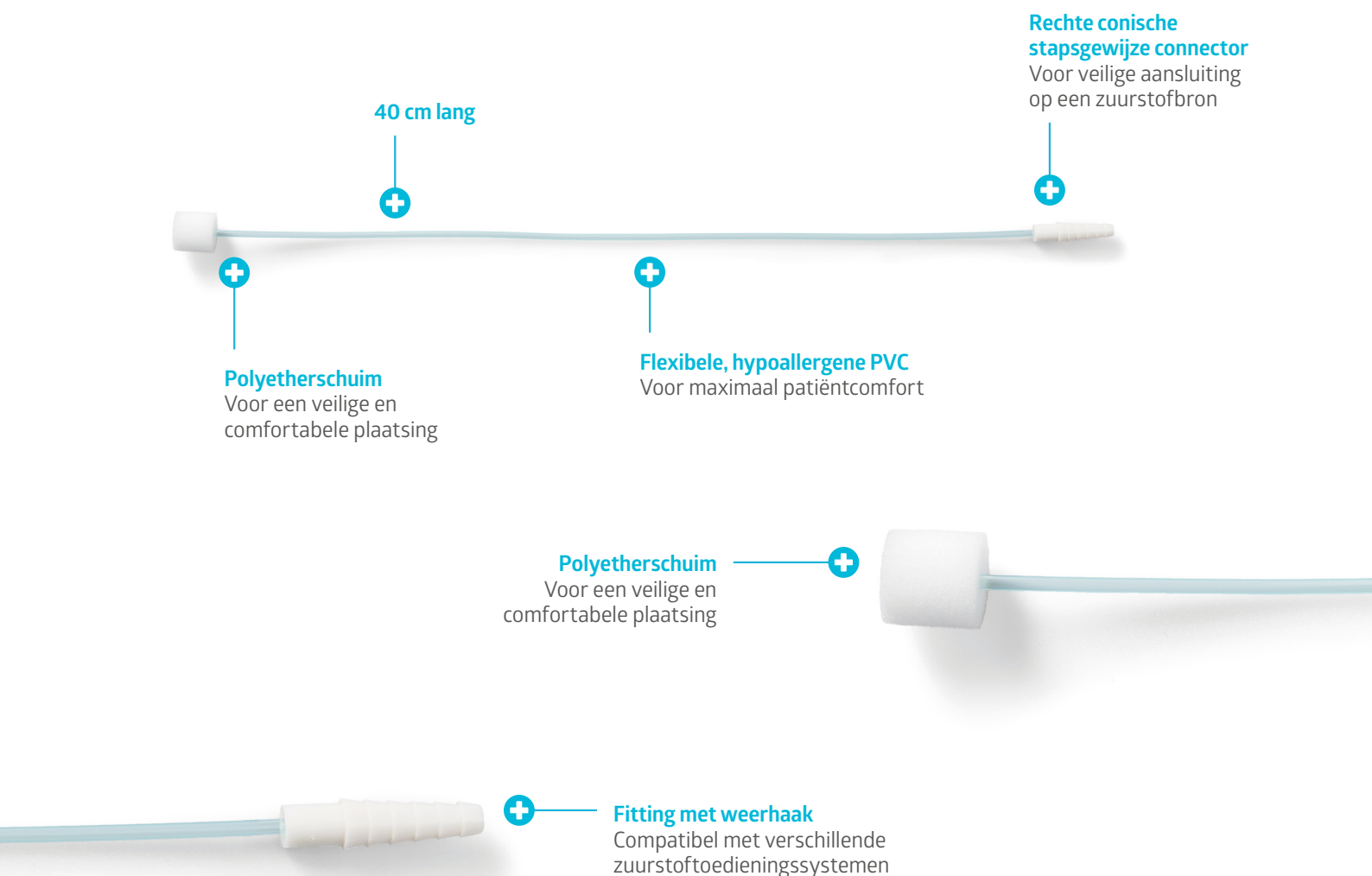

Zuurstofmaskers

Zuurstofmaskers zijn bedoeld om medische zuurstof aan de patiënt toe te dienen ter aanvulling of verrijking van de luchttoevoer.

Zuurstofmasker met gemiddelde concentratie

Dit masker is bedoeld voor patiënten die gemiddeld zuurstofaanvulling nodig hebben. De maskers met gemiddelde concentratie zijn ook geschikt voor postoperatieve patiënten die overgaan van een hoge naar een lage zuurstofbehoefte.

Stroomsnelheid: 5 – 10 l/min

Ze zijn verkrijgbaar voor gebruik bij volwassenen of Zuigelingen. Ze zijn gemaakt van een zeer zacht en transparant kunststof dat gemakkelijke monitoring van de procedure en meer comfort voor de patiënt mogelijk maakt.

- De meeste zuurstofmaskers zijn langwerpig om onder de kin te passen, tenzij anders aangegeven.
- Ze hebben een goede pasvorm met elastische bandjes
- Alle zuurstofmaskers zijn verpakt met 2,1m zuurstofslang, tenzij anders aangegeven.
- Gemaakt van DEHP vrij materiaal.



Referentie	Maat	Langwerpig masker	Over-de-kin masker	210 cm slang	Eindconnector	Verpakkingsinhoud
41040S	Volwassen		X	X	Standaard	50
41035S	Kind		X	X	Standaard	50
1041	Volwassen	X		X	Standaard	50
1041S	Volwassen	X		X	Standaard	50
41042S	Kind	X		X	Standaard	50
1049S	Volwassenen*	X				50
41050S	Kind	X				

*Alle S codes zijn gemaakt met DEHP vrij materiaal

3-in-1 Masker

Het 3-in-1 masker kan gebruikt worden als medium-concentratie, hoge-concentratie of non-rebreathing masker. Elke eenheid heeft een masker met klep, reservoirzak, star lumen slang met eindconnector, en verwisselbare oogjes.

- Stroomsnelheid (medium concentratie ontwerp): 5 – 10 l/min
- Stroomsnelheid (hoge concentratie en non-rebreathing ontwerp): 10 – 15 l/min

Referentie	Maat	Type masker	Kleppen zijkant	Reservoirzak	210 cm slang	Eindconnector	Verpakkingsinhoud
							
41061	Volwassen	Langwerpig	Een, afneembaar	1000 ml	X	Standaard	50

* Alle S codes zijn gemaakt met DEHP vrij materiaal



Zuurstofmaskers

Hoge-concentratie Zuurstofmasker


Dit masker is bedoeld voor gebruik door patiënten in kritieke toestand, herkenbaar door ernstige ademnood, hypoxie of tijdens specifieke medische noodgevallen. Het kan ook worden gebruikt voor verschillende medische ingrepen en bij reanimatie.

Stroomsnelheid: 10 – 15 l/min

Medline's hoge-concentratie Masker is verkrijgbaar voor volwassenen en Zuigelingen. Ze zijn gemaakt van een zeer zacht en transparant kunststof dat gemakkelijke monitoring van de procedure en meer comfort voor de patiënt mogelijk maakt.

Dit masker heeft een configuratie dat rebreathing tegen gaat en ervoor zorgt dat uitgeademde lucht door een laag weerstand ventiel weg stroomt.

- Alle hoge-concentratie maskers zijn langwerpig om onder de kin te passen

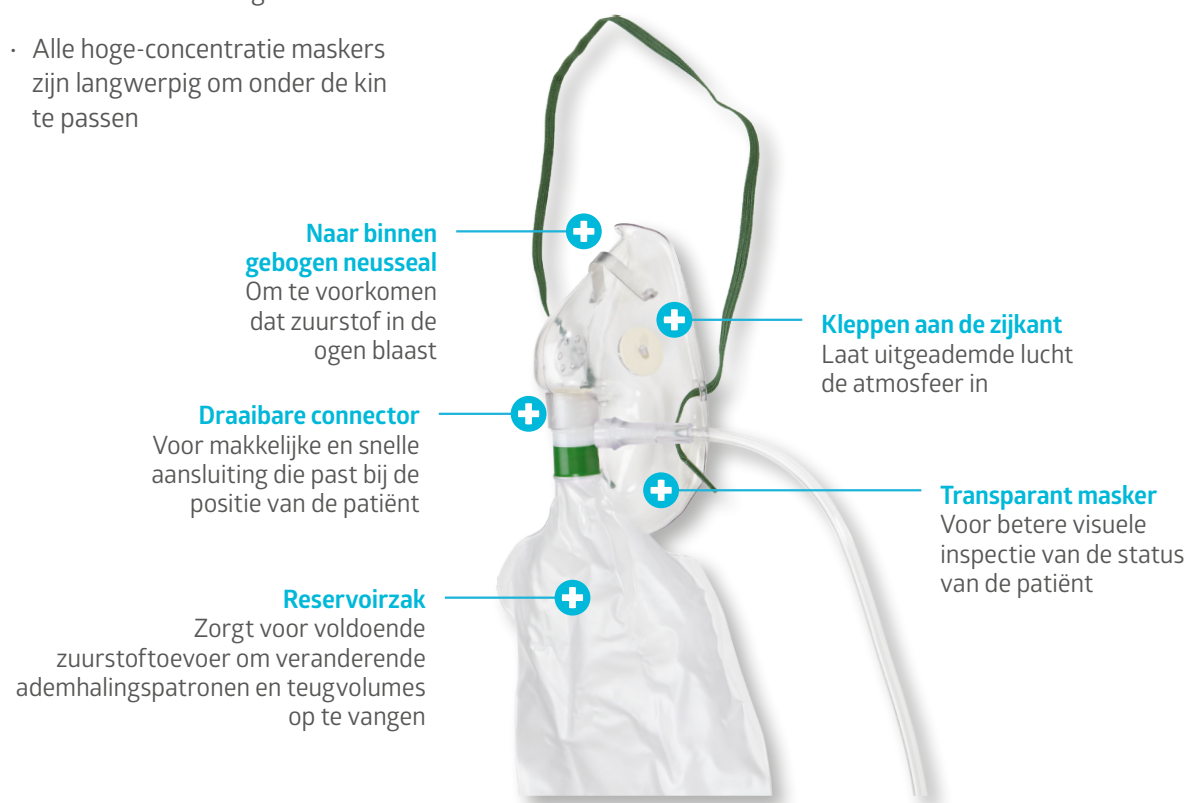


Referentie	Maat	Type masker	Kleppen zijkant	Reservoirzak	210 cm slang	Eindconnector	Verpakkingsinhoud
41007	Volwassen	Langwerpig	-	1000 ml	X	Standaard	50
41007S	Volwassen	Langwerpig	-	1000 ml	X	Standaard	50
41069S	Volwassen	Langwerpig	1	1000 ml		Standaard	50
1059S	Volwassen	Langwerpig	1	1000 ml	X	Standaard	50
1059P	Volwassen	Langwerpig	1	1000 ml	X	Standaard	50
41058	Kind	Langwerpig	1	750 ml	X	Standaard	50
41058S	Kind	Langwerpig	1	750 ml	X	Standaard	50
41060S	Volwassen	Langwerpig	2	1000 ml	X	Standaard	50



*Alle S codes zijn gemaakt met DEHP vrij materiaal

Kies-een-ventiel Masker

Dit masker is ontworpen met verschillende opties voor ventielen, zodat zorgverleners nauwkeurig de hoeveelheid zuurstof die aan de patiënt geleverd wordt kunnen reguleren. Of het nu gaat om patiënten met chronische ademhalingsaandoeningen of in kritieke zorgscenario's, dit masker biedt een veelzijdig en essentieel hulpmiddel voor het leveren van zuurstoftherapie op maat.

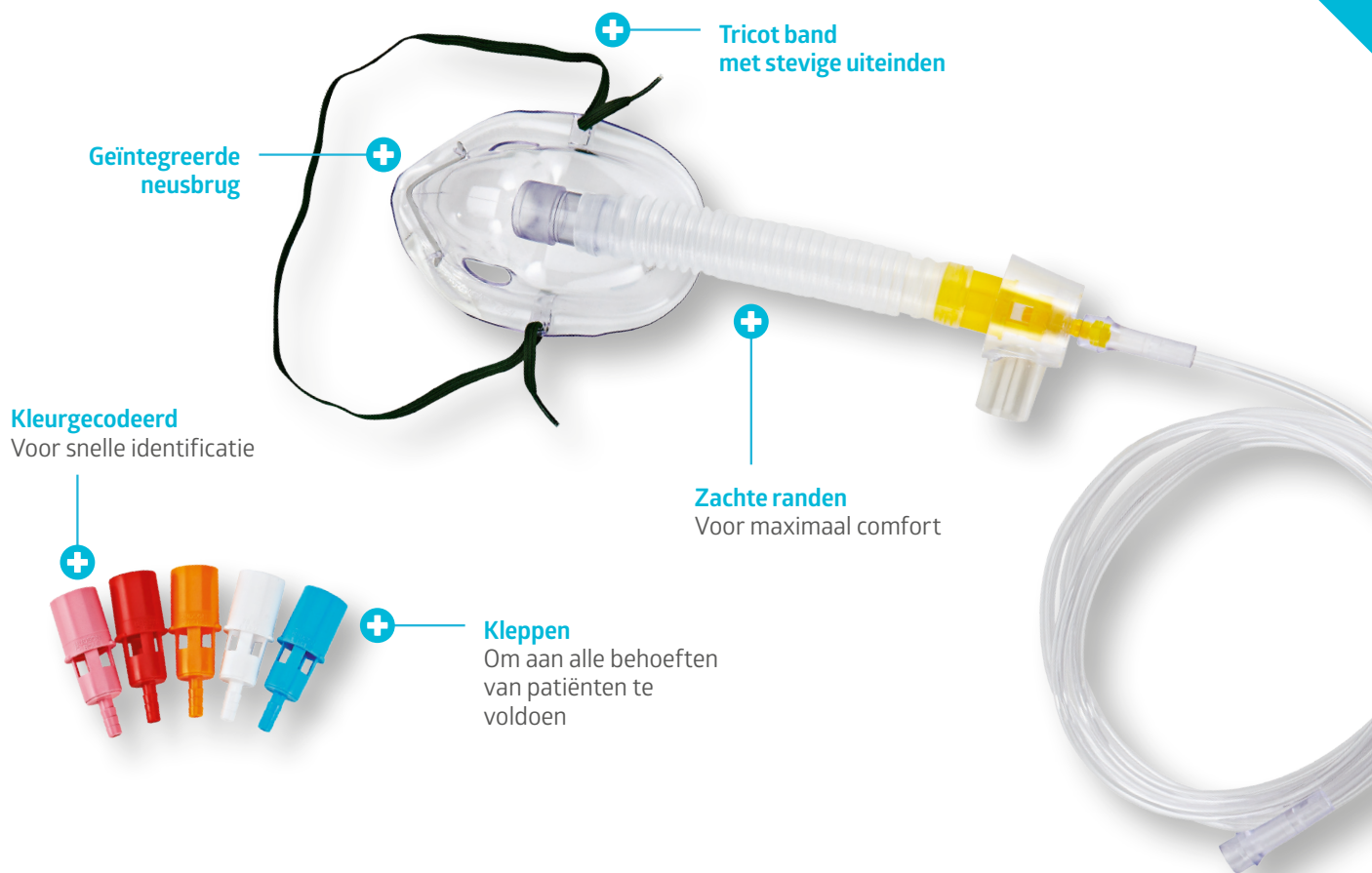- Verkrijgbaar als set
- 41098 - inclusief zes verdunners: 24%, 28%, 31%, 35%, 40% en 50%
- 41098S - inclusief zeven verdunners: 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50% en 60%
- Compleet met 210 cm zuurstoftoevoerslang
- Inclusief adapters voor hoge luchtvochtigheid



Referentie	Omschrijving		Verpakkingsinhoud
41098	Volwassen (6 verdunners)	 24% 28% 31% 35% 40% 50%	50
41098S	Volwassen (7 verdunners)	 24% 28% 31% 35% 40% 50% 60%	50

*Alle S codes zijn gemaakt met DEHP vrij materiaal


Zuurstofmaskers

Venturi Zuurstofmasker

Dit masker is een gespecialiseerd medisch hulpmiddel dat is ontworpen om nauwkeurige en gecontroleerde zuurstofconcentraties te leveren aan patiënten met ademhalingsaandoeningen. Het product beschikt over een verstelbare Venturi-klep waarmee zorgverleners een specifieke zuurstofconcentratie of fractie van ingeademde zuurstof (FIO₂) kan selecteren en toedienen op basis van de behoeften van de patiënt.

Multi-Vent Venturi Masker

- Geïntegreerde vergrendelingsring die de stroominstelling vastzet
- Voorzien van kleurgecodeerde, luchtanzuigende lage- en medium-concentratie verdunners.
- Inclusief adapter voor hoge luchtvochtigheid (zie onderstaande tabel)
- Compleet met 210 cm zuurstoftoevoerslang

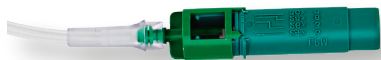

Lage-concentratie verdunner (groen)
voor 24%, 26%, 28% en 30%



Medium-concentratie verdunner (wit)
voor 35%, 40% en 50%

Totale gasstroom naar patiënt*

Zuurstof % instelling	Aanbevolen zuurstofstroom	Totale gasstroom
24%	3 l/min	79 l/min
26%	3 l/min	47 l/min
28%	6 l/min	68 l/min
30%	6 l/min	53 l/min
35%	9 l/min	50 l/min
40%	12 l/min	50 l/min
50%	12 l/min	41 l/min

Referentie	Omschrijving	Verpakkingsinhoud
41088	Volwassen	50
41089	Kind	50

Uitademopeningen
Voor minder drukopbouw

Zacht en soepel masker
Voor meer patiëntcomfort

Vergrendelingsring
die de stroominstelling
vergrendelt



Bubbelbevochtiger

Deze bevochtiger is ontworpen om vocht aan zuurstof toe te voegen voor meer comfort voor de patiënt.

Aquapak Voorgevulde Bevochtiger Steriel Water met Adapter

De Hudson Aquapak Voorgevulde Bevochtiger is ontworpen voor optimale prestaties, veiligheid en waarde. Daarnaast biedt het product het volgende:

- Een waarschuwingssysteem dat zorgverleners op de hoogte stelt van stroombeperking of blokkades in de luchtbevochtiger of zuurstofslang. Deze functie wordt mogelijk gemaakt door een luchtbevochtigeradapter met een akoestisch alarm.
- Een zuurstofslang connector, ingebouwd in de steriele reservoirfles, met een gemakkelijk snap-off trigger ontwerp.



Referentie	Capaciteit (ml)		Adapters		Verpakkingsinhoud
	340	650	H00040CE	H00040FCE*	
H00340CE	X		X		20
H00640CE		X	X		10
H0340FCE*	X			X	20
H0640FCE*		X		X	10

*Compatibel met Franse flowmeteraansluiting

Aquapak Gevulde luchtbevochtigers

De voorgevulde luchtbevochtiger is verkrijgbaar in twee verschillende configuraties (340 ml en 650 ml), waardoor de klant de keuze heeft om het gewenste formaat te selecteren.

Voorgevuld steriel water

1 x gedestilleerd, gedeïoniseerd en gedechloreerd.

Met dubbel filtersysteem inclusief millipore filter

Niet pyrogeen en voldoet aan de United States Pharmacopeia (USP) normen



Aquapak Steriel Water

Referentie	Capaciteit	Inhoud	Compatibele adapter	Verpakkingsinhoud
H00301CE	340 ml	Steriel water	H00040CE, H00040FCE*	20
H00601CE	650 ml	Steriel water	H00040CE, H00040FCE*	10

Aquapak Bevochtiger Adapter

Referentie	Omschrijving	Verpakkingsinhoud
H00040CE H00040FCE*	<ul style="list-style-type: none"> · Steriele, transparante adapter voor gebruik met: Ref. 400301 of 400601 · Drukventiel 350 - 700 cm, water · Hoorbare pop-off 	120



*Compatibel met Franse flowmeter aansluiting

Aquapak steriel water reservoiropening



Schakel de outlet trigger naar boven om het reservoir te openen.

Waarschuwing: Niet draaien.

Disposable Bubbelbevochtiger

Hudson biedt luchtbevochtigers aan die gebruikt kunnen worden met een waterbron naar keuze. Deze disposable bevochtigers zijn voorzien van een hoorbaar drukontlastingsventiel bij 280 cm water (4 psi) dat verstopping van de bevochtiger of de zuurstofslang signaleert.



Referentie	Capaciteit	Verpakkingsinhoud
3230	500 ml	50

Flowmeter Accessoires

Stroomregelaar

Deze stroomregelaar biedt de flexibiliteit om specifieke gasstroomsnelheden te selecteren om aan de precieze eisen van verschillende toepassingen te voldoen, waardoor een efficiënte en betrouwbare gasdistributie wordt gegarandeerd.

Dit apparaat kan worden gebruikt met elk type flowmeter met een DISS-uitlaat (diameter index veiligheidssysteem). Een simpele draai is alles wat nodig is om te schakelen tussen de bevochtiger of de slanguitgang zonder de bevochtiger van de vernevelaar te hoeven verwijderen.

Het product heeft ook:

- Een behuizing, knop en aansluiting van messing
- Inlaatdraad: DISS O2 9/16" x 18h UNF
- Uitlaatdraad: DISS O2 9/16" x 18h UNF.

Referentie	Omschrijving	Verpakkingsinhoud
4540610	Stroomregelaar	1





Neveltoediening

Vernevelaars met groot volume	17
Aquatherm III	19
Vernevelmaskers	20
Vernevelaccessoires	21

Vernevelaars met groot volume

Voorgevulde vernevelaars

AQUAPAK voorgevulde vernevelaars bieden een veelzijdig en steriel systeem voor koude of verwarmde verneveling.

U kunt kiezen uit een breed scala aan reservoirs, adapters en oplossingen om efficiënt en voordelig aan de specifieke behoeften van uw patiënten te voldoen.



Referentie	Capaciteit vernevelaar (ml)			Adapters		Verpakkingsinhoud
	440	760	1070	028	028F*	
044-28F*	x				x	20
037-28F*		x			x	10
403728		x		x		10
404128			x	x		10
404428	x			x		20

*Compatibel met Franse flowmeter aansluiting

Gevulde vernevelaars

Aquapak voorgevulde vernevelaars bieden een veelzijdig en steriel systeem voor koude of verwarmde verneveling.

Ze zijn verkrijgbaar met verschillende formaten reservoir om efficiënt en voordelig aan de specifieke behoeften van uw patiënt te voldoen.



Referentie	Capaciteit	Inhoud	Verpakkingsinhoud
400400	440 ml	Steriel water	20
403700	760 ml	Steriel water	10
404000	1070 ml	Steriel water	10
403709	760 ml	0,9% zoutoplossing	10

Verneveladapters

Kies uit twee steriele verneveladapters om een consistente toediening van nevel over een breed spectrum aan zuurstofconcentraties te garanderen. Elke adapter heeft een Venturi entrainment ring, om de zuurstofconcentratie nauwkeurig aan te passen aan de eisen voor uw IC patiënten.

Referentie	Omschrijving						Verpakkingsinhoud
403128 031-28F	Selectie van zuurstofconcentraties van 28% tot 98%, verkrijgbaar in maat O28.						50
	O ₂ %	28%	33-35%	40-50%	60-80%	98%	
	l/min	5	8	10	10	10	
403133	Selectie van zuurstofconcentraties van 28% tot 98%, verkrijgbaar in maat O28.						50
	O ₂ %	-	33-35%	40-50%	60-80%	98%	
	l/min	-	8	10	10	10	



Disposable vernevelaar met groot volume

- 500 ml
- Maximum en minimum waterpeil lijnen
- Concentratie: 28% - 98%

Referentie	Inhoud	Verpakkingsinhoud
41770	Vernevelaar voor kunstmatige beademing, 500 ml	1



Aquatherm III

Externe Instelbare Elektronische Verwarmer

De Hudson RCI Aquatherm III Externe Verstelbare Elektronische Verwarming is ontworpen om te gebruiken in combinatie met de Hudson RCI Verneveladapter en het Aquapak systeem om te zorgen voor continue verwarmde nevel voor inhalatie.

- Zorgt voor verwarmde nevel door bevestiging op het vernevelsysteem
- Zorgt ervoor dat de aërosoltemperatuur kan worden aangepast aan de behoeften van de patiënt via een gevoelige temperatuurregelaar
- Heeft een robuuste en duurzame verwarming



Referentie	Omschrijving	Type stekker	Verpakkingsinhoud
050-12D	Aquatherm III, Heater, 220 - 240 V, Hz	EU	1
050-12E	Aquatherm III, Heater, 220 - 240 V, Hz	UK	1



Vernevelmaskers

Vernevelmaskers zijn bedoeld om verneveltherapie bij de patiënt toe te passen voor het inademen van vernevelde medicijnen of voor bevochtiging van de luchtwegen.

Medline's Vernevelmaskers hebben een anatomische vorm en zijn gemaakt van zacht, lichtgewicht en comfortabel vinyl materiaal. Ze zijn uitgerust met elastiek en een standaard 22m connector.

Tracheotomiemasker

- Voor tracheotomie en laryngectomie verneveltherapie
- De slangconnector kan 360° draaien

Referentie	Maat	Verpakkingsinhoud
1075	Volwassen	50
1075S	Volwassen	
41076S	Kind	



Langwerpig masker

Referentie	Maat	Verpakkingsinhoud
1083	Volwassen	50
1083S	Volwassen	
41085	Kind	
41085S	Kind	



Face Tent masker

- Voor verneveltherapie met hoge luchtvochtigheid

Referentie	Maat	Verpakkingsinhoud
41095	Volwassen	50



Vernevelaccessoires

CORR-A-FLEX II Slang op rol

- Voor tracheotomie en laryngectomie verneveltherapie
- De slangconnector kan 360° draaien
- Geschikt voor 22 mm binnendiameter, geribbelde slang



Referentie	Maat	Verpakkingsinhoud
1680	Slang op rol 30 m	1 rol

CORR-A-FLEX Slang

- Slanguiteinde met ring past en vergrendelt op 22 mm adapters voor een stevige aansluiting
- Flexibele, lichtgewicht slang verlengt tot 180 cm
- Eenvoudig op maat te maken door snijsecties op elke 15 cm

Referentie	Maat	Verpakkingsinhoud
41518	180 cm geribbelde slang	50

Transparante slang

Voor het snel herkennen van knikken of blokkades



Vernevel Drainagesysteem

- Zelfvergrendelende kunststof ketting bevestigd zak aan een stabiel object
- Past op standaard 22 mm binnendiameter geribbelde slang
- Handige afvoerpoort

Referentie	Maat	Verpakkingsinhoud
41740	1000 ml disposable drainagezak met T-adapter	50



Afvoerkraan

Voor handige drainage met een hand

Al bevestigde, zelfvergrendelende kunststof ketting

Voor veilige plaatsing

Vernevelsysteem met groot volume



Steriele verneveladapter
Ref: 403128, 031-28F, 403133

Aquatherm Verwarmer
Ref: 050-12D, 050-12E

Vernevelaar met groot volume
Ref: 403700, 400400, 404000
*Ook verkrijgbaar als set inclusief adapter

Langwerpige vernevelmasker
Ref: 1083, 1083S
*Verkrijgbaar als Face Tent (Ref: 41095)
of Tracheotomiamasker (Ref: 1075, 1075S)

Geribbelde slang
Ref: 41518
*Verkrijgbaar op rol (Ref: 1680)

Drainagezak
Ref: 41740

Toediening van medicijnen

Neb-Easy	24
Micro Mist	25
In-Line Neb Tee	26
UpDraft II	27
Iso-Neb	28



Medicatievernevelaars

Medline klein volume vernevelaar producten zijn bedoeld voor gebruik bij intermitterende verneveltherapie om voorgeschreven oplossingen voor inhalatie toe te dienen.

Micro Mist klein volume Vernevelaar

De Micro Mist klein volume vernevelaar produceert een fijne, dichte mist bij hoeken tot 90°. Het product bereikt een optimale deeltjesgrootte, waardoor efficiënte vernevelingssnelheden met minimale resten worden gegarandeerd. Dankzij het innovatieve capillaire ontwerp van de Micro Mist kan de zorgverlener medicijnen toedienen aan patiënten met speciale behandelingseisen, zoals patiënten die horizontaal liggen.



Micro Mist

- + **MMAD: 2,3 microns**
- Vernevelingssnelheid: 0,3 ml/min**
- Optimale stroomsnelheid: 8 l/min**
- Maximaal volume: 6 ml**






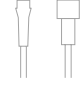




- + **Hoge inhalatiedosis met deeltjesformaat tussen de 1-3 μm**
- Voor optimale afgifte in de bronchiale en alveolaire zones

- + **Antilek schroefsluiting**
- Om lekkage te voorkomen en te zorgen voor gemakkelijke montage.



Micro Mist klein volume vernevelaar

Referentie	Micro Mist vernevelaar	Tee	Mondstuk	15 cm reservoir-slang	210 cm slang	Eindconnector	Volwassenen masker	Kind masker	Verpakkings-eenheid
									
41880* ^{**}	x					-			50
41883*	x	x	x	x	x	Standaard			50
41890	x					-			50
41891	x	x			x	Standaard			50
41892	x	x	x		x	Standaard			50
41893	x				x	Standaard	x		50
41894	x				x	Standaard		x	50
41895	x	x	x	x	x	Universeel			50
41898	x				x	Universeel	x		50

*Ref. 41883 hebben een 18 mm dop en tee. Alle anderen hebben 22 mm connectoren.

**Ref. 41880 is DEHP vrij. Alle andere referenties bevatten DEHP materiaal.

Neb-Easy klein volume vernevelaar

De Neb-Easy klein volume vernevelaar produceert een fijne, dichte mist met een deeltjesgrootte van 4,7 microns. Het biedt efficiënte vernevelingssnelheden en minimale resten. U kunt kiezen tussen een mondstuk of vernevelmaskers, verkrijgbaar in maten voor zowel volwassenen als Zuigelingen, voor inhalatie afhankelijk van uw voorkeur.



Neb-Easy



MMAD: 4,7 microns
Vernevelingssnelheid: 0,3 ml/min
Optimale stroomsnelheid: 8 l/min
Maximaal volume: 6 ml










Geschikt voor gebruik met de hand of in de lijn



Makkelijk sluitende, schroefdraad dop
 Om lekkage te voorkomen en te zorgen voor gemakkelijke montage.

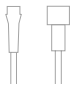Neb-Easy klein volume vernevelaar

Referentie	Micro Mist vernevelaar	Tee	Mondstuk 41565	210 cm slang	Type slang-aansluiting	Volwassenen masker	Kind masker	Verpakkingseenheid
								
41892P	x	x	x	x	Standaard			50
41893P	x			x	Standaard	x		50
41894P	x			x	Standaard		x	50

Micro Mist vernevelaar met In-Line Neb Tee met ventiel

Met dit gespecialiseerde Micro Mist hulpmiddel kan behandeling worden toegepast zonder het circuit te openen of de beademing te onderbreken, door middel van een ingebouwde, veerbelaste zelfopenend en -sluitend ventiel. Bovendien vereenvoudigt het de toegang tot beademingscircuits van 22 mm voor vernevelbehandelingen met kleine volumes, met een Neb-T-stuk met poorten met een binnendiameter van 22 mm en een buitendiameter van 22 mm.



Micro Mist




MMAD: 1,5 microns
Vernevelingssnelheid: 0,2 - 0,5 ml/min
Optimale stroomsnelheid: 8 l/min
Maximaal volume: 6 ml



Reservoirslang
 Voor het aansluiten van het ventiel op een intubatiehulpmiddel



Toevoerslang
 Om perslucht of zuurstof de vernevelaar in te laten stromen en nevelgeneratie te activeren

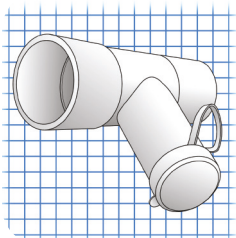

Micro mist vernevelaar met in-line neb tee met ventiel

Referentie	Micro Mist vernevelaar	Neb Tee	Flexslang 22F/15F	210 cm slang	Eindconnector	Verpakkingseenheid
41745	x	x	x	x	Standaard	50


UpDraft II Vernevelaar

De Updraft II is een compacte vernevelaar met hoge output, ontworpen voor speciale behandelbehoeften. Het product vernevelt onder hoeken tot 45° en voorkomt lekkages. De montage en demontage zijn eenvoudig gemaakt dankzij de dop met schroefdraad, naast het geschulpte antilekflasje, met een inhoud van 8 ml. De Up-Dracht II biedt een uitzonderlijke nevelkwaliteit, therapeutische deeltjesgrootte en efficiënte vernevelingstijden.



UpDraft II

- + MMAD: 2,0 microns
- Vernevelingssnelheid: 0,2 - 0,5 ml/min
- Optimale stroomsnelheid: 5 - 9 l/min
- Maximaal volume: 6 ml

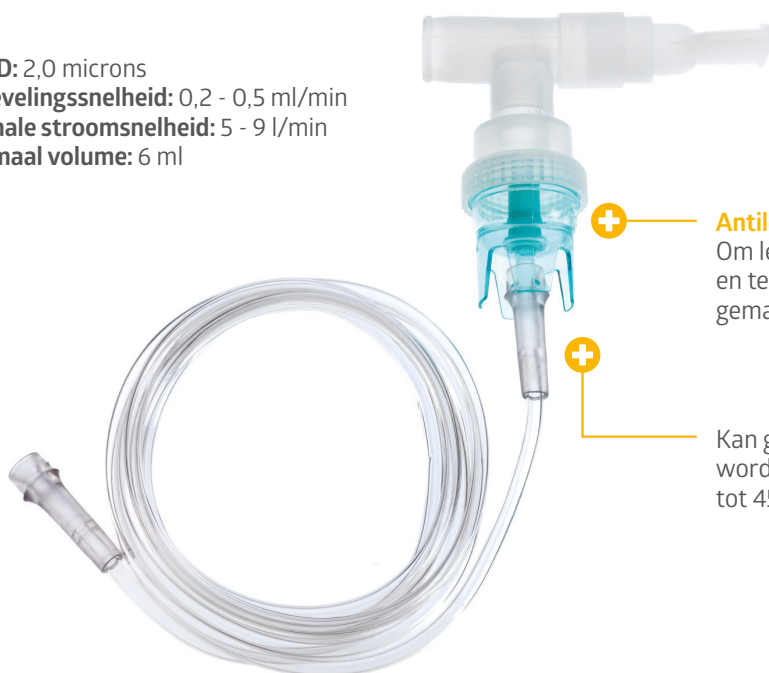

- + Antilek schroefsluiting
Om lekkage te voorkomen en te zorgen voor gemakkelijke montage
- + Kan gebruikt worden bij hoeken tot 45°

UpDraft II klein volume vernevelaar

Referentie	UpDraft II Vernevelaar	Tee 41651	Mondstuk 41565	15 cm reservoirslang	210 cm slang	Eindconnector	Volwassenen masker 1083	Kind Masker 41085	Verpakkings-eenheid
41705	x				x	Standaard	x		50
41707	x				x	Standaard		x	50
41730	x								50
41732	x	x	x		x	Standaard			50
1734	x	x	x	x	x	Standaard			50

ISO-Neb Vernevelset met filter


De ISO-NEB gefilterde vernevelsysteem is ontworpen om besmetting van de omgeving tijdens verneveltherapie te minimaliseren. Dit wordt bereikt door de inademings- en uitademingsluchtstroom te isoleren met behulp van eenrichtingskleppen. De uitgedemde lucht wordt door een efficiënt filtersysteem geleid, dat zowel personeel als omgeving beschermt tegen sprayresten.



UpDraft II



MMAD: 1,1 microns
Vernevelingssnelheid: 0,2 - 0,5 ml/min
Optimale stroomsnelheid: 5 - 9 l/min
Maximaal volume: 6 ml

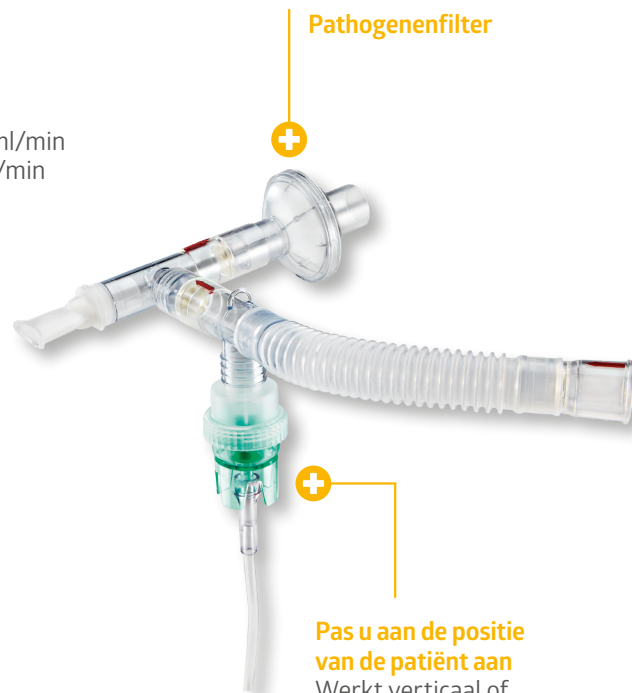

Pathogenenfilter



Pas u aan de positie van de patiënt aan
 Werkt verticaal of onder een hoek tot 45°

ISO-NEB vernevelset

Referentie	Omschrijving	Verpakkingsinhoud
41755	Vernevelset met filter	20



Bronchiale hygiene

Ademtraining

30

Ademtrainers


Een ademtrainer is een medisch hulpmiddel ontworpen om patiënten te helpen bij het behouden en verbeteren van hun longfunctie. Het stimuleert een diepe en langzame inademing, helpt de longen uit te zetten en ademhalingscomplicaties te voorkomen (Eltorai et al., 2017)*.

Hudson ademtrainers zijn ontworpen om te helpen bij het visualiseren van de ademhalingsprestaties van patiënten. Ze zijn voorzien van een balletje en markeringen als visuele hulpmiddelen, waardoor patiënten worden aangemoedigd dieper en langer adem te halen tijdens ademhalingsoefeningen.

Hudson RCI TriFlo® II Ademtrainer

De TriFlo ademtrainer meet de relatieve stroomsnelheid van de adem die de patiënt uitblaast en moedigt aan om de ademhaling te verbeteren.

- Heeft een brede stroomsnelheid van 600 tot 1200 cc/sec
- Drie kamers, met drie verschillende kleuren balletjes, een in elke kamer
- Minimum stroomsnelheid op elke kamer gedrukt

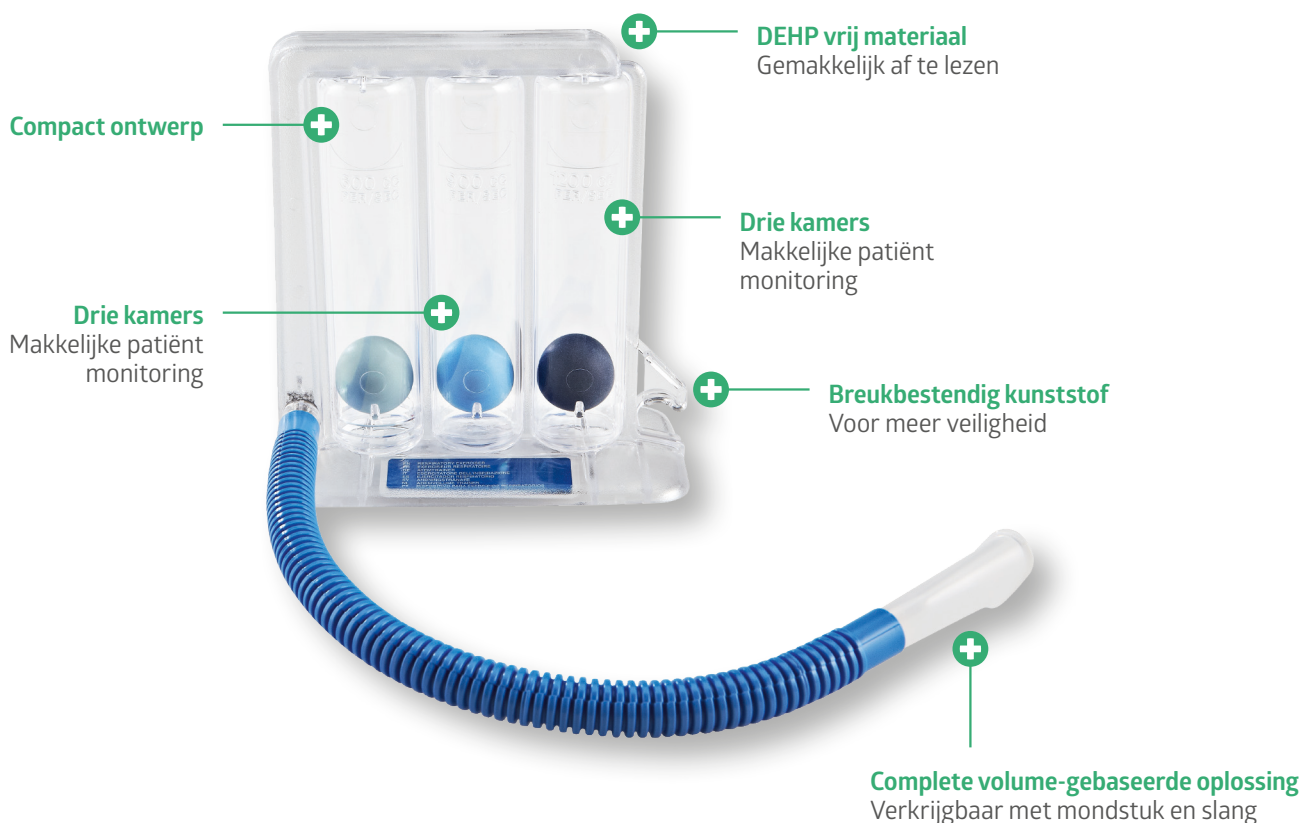

TriFlo II


Referentie	Omschrijving	Volumemeting	Verpakkingsinhoud
4717395CE	TriFlo, op stroomsnelheid gebaseerd	600 - 1200 cc/sec	12

*Eltorai, A. E., Szabo, A. L., Antoci, V., Ventetuolo, C. E., Elias, J. A., Daniels, A. H., & Hess, D. (2017). Clinical effectiveness of incentive spirometry for the prevention of postoperative pulmonary complications. *Respiratory Care*, 63(3), 347-352. <https://doi.org/10.4187/respcare.05679>

Hudson RCI Voldyne Ademtrainers

Voldyne meet het volume aan lucht dat ingeademd wordt en meet hoe effectief de longen gevuld worden bij elke inademing.

- Volumemeting van 2500 ml tot 4000 ml
- Compact, voordelig ontwerp met ingebouwde handgreep
- Markeringen aan beide zijden
- Gemaakt van DEHP vrij materiaal

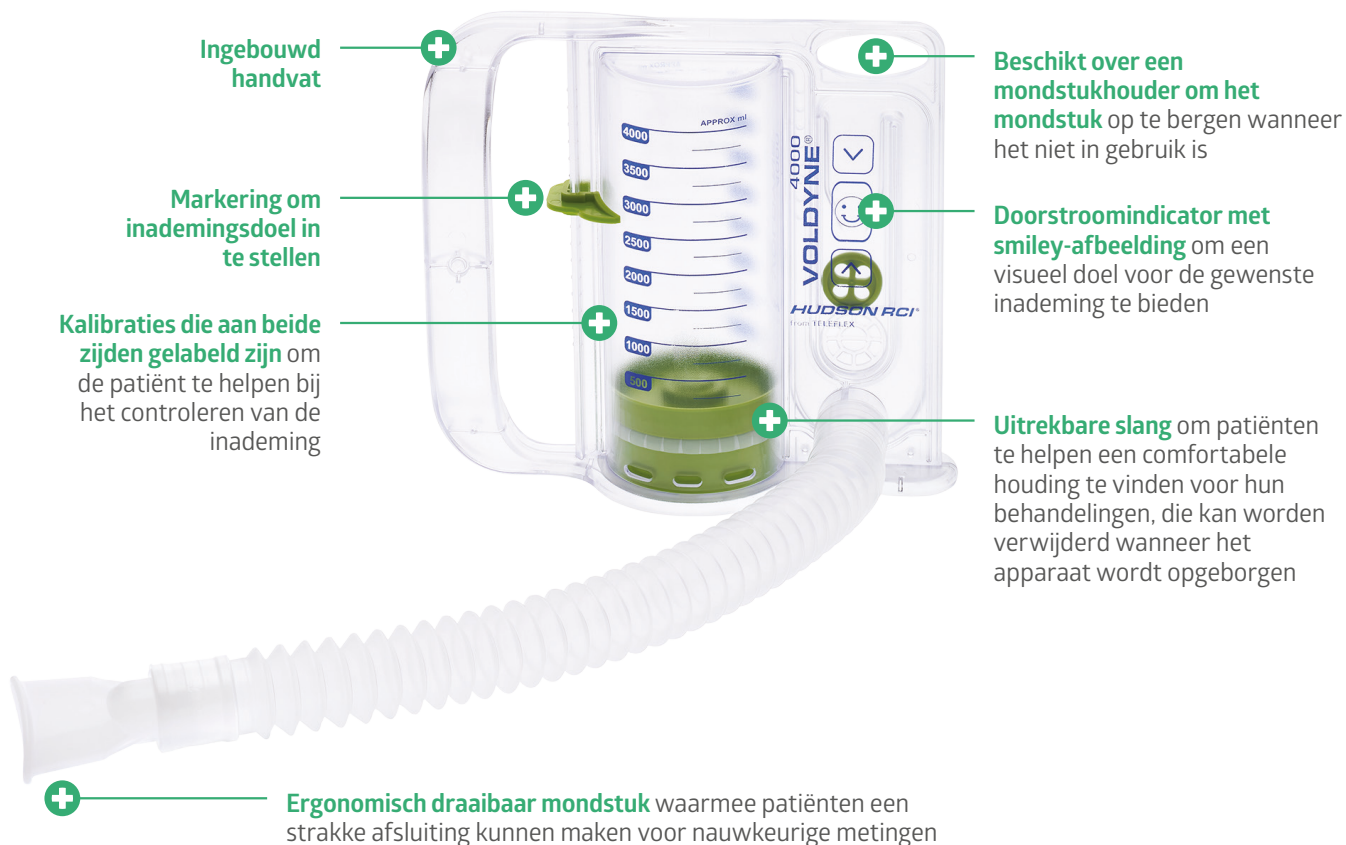

Referentie	Omschrijving	Volumemeting	Verpakkingsinhoud
4719016CE	Voldyne 4000 voor volwassen gebruik	250 ml tot 4000 ml	12
4719018CE	Voldyne 2500 voor volwassen en Kind gebruik	250 ml tot 2500 ml	12





Adapters en connectoren

Algemene adapters	33
Eenweg ventielen	34
Ellebogen, Y-stukken, T-stukken	34
Metered Dose inhalator (MDI) adapters	35
Watersloten	35
Overig	35

Adapters en connectoren

Referentieguids

Adapters en connectoren



Verbindingsstuk voor gegolfde slang

- 22 mm buitendiameter x 22 mm buitendiameter aansluitingen
- 50 per doos

41409



Verbindingsstuk voor Zuurstofslang

- Verbindt zuurstofslangen met 5-7 mm connectoren
- 50 per doos

41420



Adapter voor geribbelde slang

- 22 mm buitendiameter x 22 mm binnendiameter
- 50 per doos

41640



Klein bloeddrukverbindingsstuk

- 15-mm binnendiameter x 22 mm buitendiameter
- 50 per doos

41422



Bewakingsadapter

- 15 mm buitendiameter x 15 mm binnendiameter/ 22 mm buitendiameter aansluitingen
- Standaard luer aansluiting
- 50 per doos

41669



Groot bloeddrukverbindingsstuk

- 22 mm buitendiameter aansluitingen
- 50 per doos

41421



Adapter voor Zuurstofslang

- 22 mm binnendiameter x 5-7 mm taps toelopend verbindingsstuk
- 50 per doos

1423



Adapter voor drukslang

- 22 mm buitendiameter x 22 mm binnendiameter aansluitingen
- Elleboog draaibaar 360°
- Elleboog met weerhaken geschikt voor slangen met binnendiameter van 5 tot 7 mm
- 50 per doos

41642



22 mm ISO Cuff Adapter

- 22 mm binnendiameter x 22 mm buitendiameter aansluitingen
- 50 per doos

1678



Nipple en Nut Adapter

- Slangadapter voor standaard DISS zuurstofuitgangen
- 50 per doos

42555

Eénrichtingsventielen



41664

Eenweg drukverlagend ventiel

- Lage stroomweerstand
- 22 m buitendiameter tot 22 mm binnendiameter
- 50 per doos



41665

Eenweg drukverhogend ventiel

- Lage stroomweerstand
- 22 m buitendiameter tot 22 mm binnendiameter
- 50 per doos

Ellebogen



1623

Hoekige adapter

- 15 mm buitendiameter x 15 mm binnendiameter
- /22 mm buitendiameter
- 50 per doos



1624

Elleboog adapter voor gasmonsters

- 15 mm buitendiameter x 15 mm binnendiameter/22 mm buitendiameter
- Female luer lock aansluiting;
- 360° draaibaar
- 50 per doos

Wyes



1674

Y-vormig verbindingstuk

- 22 mm buitendiameter slangaansluitingen
- 15 mm binnendiameter/22 mm buitendiameter
- Geen poorten
- 50 per doos

Tees



41648

T-vormig aerosolverbindingsstuk

- 22 mm buitendiameter x 15 mm binnendiameter/22 mm buitendiameter x 22 mm binnendiameter
- 50 per doos



41651

Antilek Vernevelaar T-Connector

- 22 mm buitendiameter x 15 mm binnendiameter/
- 22 mm buitendiameter x 22 mm binnendiameter



41077

Anti-lek T-stuk vernevelconnector

- Antilek ontwerp minimaliseert afzuiging van vloeistoffen
- 22 mm buitendiameter x 15 mm binnendiameter/
- 22 mm buitendiameter x 22 mm buitendiameter
- 50 per doos

MDI adapters



41659

MDI Adapter

- 22 mm buitendiameter x 22 mm binnendiameter aansluitingen voor in-line plaatsing op 22 mm slangen
- 50 per doos



1751

MDI Adapter

- 15 mm buitendiameter x 15 mm binnendiameter aansluitingen voor in-line plaatsing op 15 mm slangen
- 50 per doos

Watersloten



41650

70cc Waterslot

- 22 mm buitendiameter x 22 mm buitendiameter
- Zelfdichtend deksel om de doorlaatbaarheid van het circuit te verzekeren
- 50 per doos



1679

Waterslot

- Vangt vocht op dat zich kan ophopen in O₂ leidingen
- Geschikt voor alle standaard en pletbestendige zuurstoftoevoerslangen
- 20,32 cm lang met 2,54 cm diameter

Overig



41668

Trach Tee Zuurstofpomp

- Maakt toediening van zuurstof aan endotracheale of tracheostomie tubes mogelijk
- Inclusief zuurstof nipple adapter, verneveltee en 15,24 cm



41565

Mondstuk

- Standaard mondstuk met 15 mm/22 mm buitendiameter aansluiting
- 50 per doos



5080

Cilinder Sleutel


- Gemaakt van gegoten zink
- Individueel verkocht



41740

Drainagezak

- Disposable drainagezak met tee adapter past met standaard 22 mm binnendiameter geribbelde slang
- 750 cc capaciteit
- Zelfvergrendelende kunststof ketting bevestigd zak aan een stabiel object
- Handige afvoerpoort

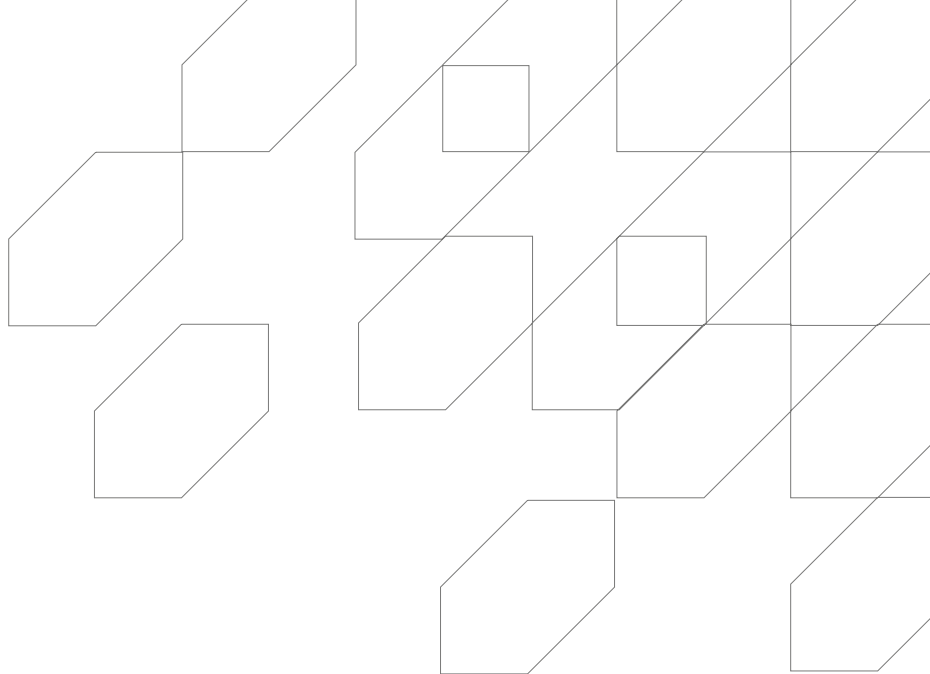

Om meer te weten te komen over deze producten, neem contact op met uw Medline accountmanager of bezoek www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Referenties 1041P, 1059P, 1083P, 41042P, 41098P, 41892P, 41893P zijn klasse IIa niet steriele medische hulpmiddelen.



Obelis S. A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussel, België



2460 (DNV/GL, EC)

Referenties 1041, 1049, 1059, 1075, 1083, 41007, 41035, 41040, 41042, 41050, 41058, 41060, 41061, 41069, 41076, 41085, 41088, 41089, 41095, 41098 zijn klasse IIa niet steriele medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



1639 (SGS Belgium NV)

Referenties, 41113P, 1118P, 1119P en 1120P zijn klasse IIa niet steriele medische hulpmiddelen.



Shanghai International Holding Corp.GmbH
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Duitsland



0197 (TUV Rheinland LGA Products GmbH)

Referenties 41639, 41648, 41664, 41666, 400340, 400601, 050-12E, 384-00, 384-26, 1680, 41518, 41650, 3230, 41740, 050-12D zijn klasse IIa niet steriele medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



1639 (SGS Belgium NV)

Referenties 400040, 400301, 400400, 400640, 403700, 403709, 000-40F, 003-40F, 006-40F, 200-39 zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



1639 (SGS Belgium NV)

Referenties 403728, 404128, 404428, 031-28F, 037-28F, 044-28F, 41770, 1734, 41705, 41707, 41710, 41720, 41730, 41732, 41745, 41755, 41880, 41883, 41890, 41891, 41892, 41893, 41894, 41895, 41898 zijn klasse IIb niet steriele medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



1639 (SGS Belgium NV)

Referenties 403128, 403133 zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



1639 (SGS Belgium NV)

Referenties 41750, 8884717395, 8884719016, 8884719018 zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



1639 (SGS Belgium NV)

Referenties 1423, 1623, 1624, 1632, 1674, 41077, 41409, 41420, 41421, 41422, 41565, 41640, 41642, 41659, 41665, 41668, 41669 zijn klasse IIa niet steriele medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



1639 (SGS Belgium NV)

Referentie 41897 is een klasse IIb niet steriel medisch hulpmiddel.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



1639 (SGS Belgium NV)

Reference 191423-000000 is een klasse IIa niet steriel medisch hulpmiddel.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



2797 (BSI The Netherlands)

Referenties 1103, 1104, 1115, 1679, 1870, 1871, 1872, 1873, 1877, 41113, 41820, 41826, 41828, 41925, 42555 zijn klasse IIa niet steriele medische hulpmiddelen.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



1639 (SGS Belgium NV)

Referentie 403700 is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel.



Teleflex Medical IDA
Business and Technology Park, Dublin road
Athlone Co. Westmeath, Ireland



1639 (SGS Belgium NV)

Referentie NBTOXY3100 is een klasse IIa niet steriel medisch hulpmiddel.



Avion Medical Spółka z o.o. (dochteronderneming van Medline International)
Ul. Karsiborska 12,
72-600 Swinoujscie, Polen



0482 (MED/CERT)

Referentie 4540610 is een klasse IIa niet steriel medisch hulpmiddel.



Hersill S/L
P.Las Nieves - C/Puerto de Navacerrada, 3
28935 Mostoles (Madrid), Spanje



0051 (IMQ S.p.A)

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2024 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1216_NL 05/2024