



## **Champs Invisishield™**

Des produits uniques pour améliorer la prise en charge du patient tout en sécurité

# Présentation générale

Les champs de spécialité Invisishield Medline sont conçus pour faciliter le travail des praticiens, tout en améliorant la sécurité des patients et de l'équipe médicale.

## LES CHAMPS INVISISHIELD

Les champs Invisishield Medline sont conçus à partir d'une matière transparente, permettant aux praticiens de garder une visibilité sur l'anatomie autour de la zone d'incision, ainsi que sur le matériel. Cette matière imperméable et ultra-résistante offre une protection optimale et présente une excellente drapabilité.

## TRANSPARENT, IMPERMÉABLE ET SOUPLE

Une large gamme de champs et accessoires qui pourront trouver leur place dans toutes les spécialités chirurgicales.

- Transparent: pour garder une bonne visibilité autour de la zone d'incision.
- Imperméable: Fabriqué à partir d'un film polyéthylène ou polyuréthane très résistant, le drapage Invisishield offre une excellente protection contre les fluides.
- Souple: le drapage Invisishield est fabriqué à partir de matières souples et conformables pour une excellente drapabilité.

## DES CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

Ce drapage présente des caractéristiques conçus pour faciliter le travail des praticiens au quotidien. Par exemple, nos poches de recueil de fluides sont équipées de languettes se trouvant sur la bande protectrice de l'adhésif, permettant ainsi un retrait facile. Les connecteurs d'aspiration prédécoupés refermables évitent de percer ou découper l'embout, permettant ainsi un gain de temps.

### INVISISHIELD

Accessoires divers	3-6
Champs d'orthopédie	7-9
Champs d'ophtalmologie	10-12
Autres drapage	13
Champ à inciser Dermadine®/ Dermadrape®	14
Housses de protection d'équipements	15-21

### CROSS REFERENCE

Tableau des équivalences	22-23
--------------------------	-------

# Accessoires divers

## CHAMPS DE BORDURE


### DESCRIPTION

- Adhésif de qualité sans résidus
- Bande protectrice de l'adhésif ultra-résistante et sans relargage particulière
- Film résistant souple, avec finition anti-reflet

### UTILISATION

Préparation, garrot et champ de protection, quadrillage du site d'incision, séparation des zones stériles et non stériles, protection contre les fluides, surface sans relargage particulière.

Référence	Dimensions	Conditionnement
IDE1000	45 x 30 cm Adhésif: 45 x 5.1 cm	10 unités/boite; 40 unités/carton
IDE1010	45 x 61 cm Adhésif: 45 x 5.1 cm	10 unités/boite; 40 unités/carton

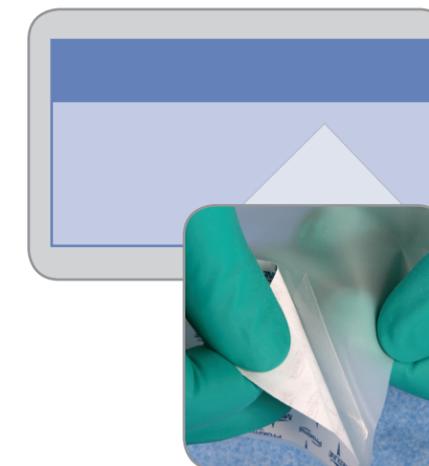

Protecteur facile à retirer Adhésif renforcé, réduit le risque de plis lors de la pose.

# Accessoires divers

## SAC CHIRURGICAL


### DESCRIPTION

- Matière transparente, souple et résistant, doté d'un fond sans couture
- Fermeture facile par un cordon en coton
- Fermeture coulissante pour une sécurité accrue

### UTILISATION

Contenant sans relargage particulière, pour isoler du matériel biologique ou opératoire.

Référence	Dimensions	Conditionnement
ICE1003	50 x 50 cm	10 unités/boite; 40 unités/carton

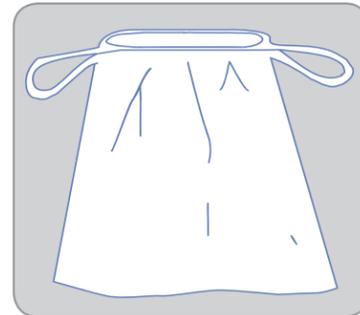

## POCHE DE RECUEIL DES FLUIDES AVEC EMBOUT D'ÉVACUATION


### DESCRIPTION

- Large bande adhésive pour une meilleure adhérence
- Adhésif puissant et sans résidus
- Bande protectrice de l'adhésif ultra-résistante en papier siliconé, sans relargage particulière
- Barre malléable pour une ouverture de la poche adaptée
- Microtamis améliorant le système de filtration
- Connecteur d'aspiration prédécoupé avec bouchon
- Film polyéthylène épais avec finition antireflet

### UTILISATION

Urologie, gynécologie, orthopédie, neurologie, chirurgie générale

Référence	Dimensions	Conditionnement
IDE1016	50 x 50 cm Adhésif: 50 x 15 cm	40 unités/carton

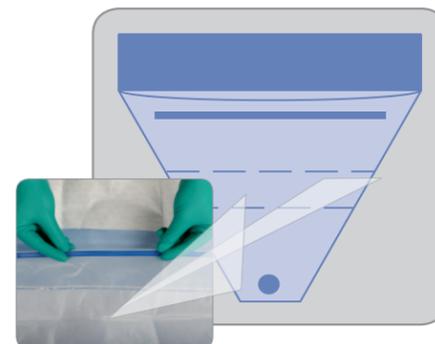

Barre malléable pour adapter l'ouverture de la poche

# Accessoires divers

## POCHES À INSTRUMENTS


### DESCRIPTION

- Deux compartiments pour les instruments
- Adhésif puissant pour une bonne adhésivité sur les textiles et matières non tissées
- Film épais mat avec finition antireflet

### UTILISATION

Orthopédie, neurologie

Référence	Dimensions	Conditionnement
IDE1018	17 x 29 cm Adhésif (2): 17 x 3.8 cm	10 unités/boite; 40 unités/carton

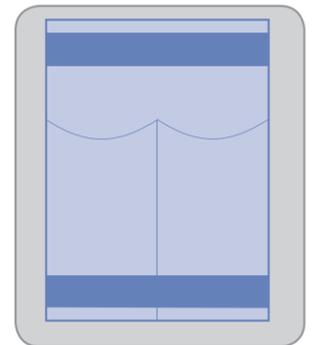

## POCHES A INSTRUMENTS DE COELIOSCOPIE


### DESCRIPTION

- 3 compartiments profonds
- Adhésif puissant pour une bonne accroche sur les textiles et matières non tissées
- Film épais mat avec finition antireflet

### UTILISATION

Orthopédie, neurologie

Référence	Dimensions	Conditionnement
IDE1018L	25 x 47 cm Adhésif (2): 25 x 5 cm	10 unités/boite; 40 unités/carton

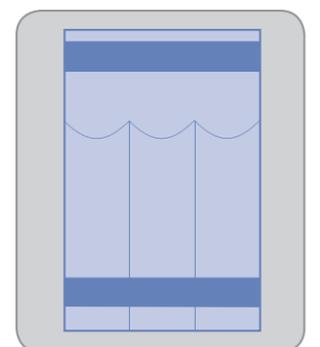

# Accessoires divers

## POCHES À INSTRUMENTS




### DESCRIPTION

- 1 compartiment large et 1 compartiment étroit
- Adhésif puissant pour une bonne tenue sur les textiles et matières non tissées
- Film en polyéthylène transparent et résistant

### UTILISATION

Orthopédie, neurologie, chirurgie générale

Référence	Dimensions	Conditionnement
DYJPEISTPOM1	33 x 41 cm Adhésif: 41 x 5 cm	100 unités/ carton
DYJPEISTPOM2	33 x 41 cm Adhésif: 41 x 5 cm	100 unités/ carton
DYJPEISTPOM3	43 x 48 cm 2 adhésifs: 43 x 5 cm	60 unités/carton

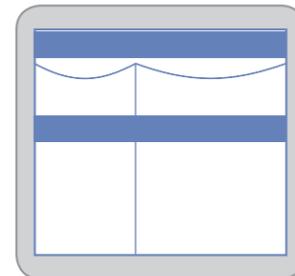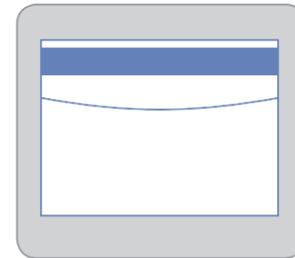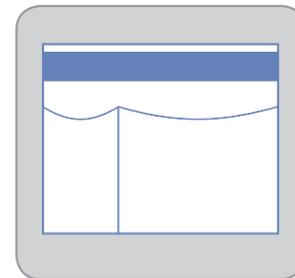

## POCHE DE RECUEIL DE FLUIDES


### DESCRIPTION

- Adhésif puissant et sans résidus
- Bande protectrice de l'adhésif ultra-résistant en papier siliconé sans relargage particulière
- Barre malléable pour une poche de recueil plus performante

### UTILISATION

ORL, chirurgie générale

Référence	Dimensions	Conditionnement
DYNJSD2114	30.5 x 27.9 cm Adhésif: 30.5 x 2.5 cm	10 unités/boîte; 40 unités/carton

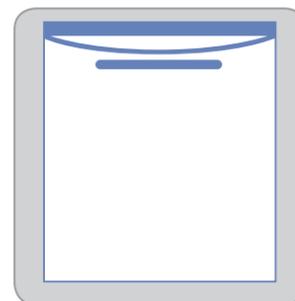

# Champs d'orthopédie

## CHAMP FENDU TRANSPARENT

### DESCRIPTION

- Large adhésif en U
- Adhésif de haute qualité, sans résidus, offrant une excellente accroche
- Film de polyéthylène mat, avec finition antireflet, souple et résistant
- Bande protectrice de l'adhésif en papier siliconé à retrait facile

### UTILISATION

Rachis, arthroscopie, hanche, genou, épaule, chirurgie crânienne

Référence	Dimensions	Conditionnement
IDE1015	121 x 132 cm Adhésif: 25 x 48 cm	10 unités/boîte; 40 unités/carton
IDE1019	121 x 180 cm Adhésif: 25 x 48 cm Adhésif en U: 15 x 48 cm	10 unités/boîte; 40 unités/carton



Bande protectrice en deux parties avec languettes non-adhésives pour faciliter le retrait

## POCHE DE RECUEIL POUR L'ÉPAULE


### DESCRIPTION

- Fenêtre ovale fendue et adhésive
- Adhésif puissant et sans résidus
- Film polyéthylène épais avec finition mat antireflet pour une résistance accrue
- Deux barres malléables et un contour avec une bande en mousse pour plus de performance
- Deux connecteurs d'aspiration munis de bouchons pour un meilleur contrôle des fluides

### UTILISATION

Arthroscopie et prothèse d'épaule

Référence	Dimensions	Conditionnement
DYNJSD1067	91 x 73 cm Adhésif: 25 x 48 cm Fenêtre: 19 x 25 cm	24 unités/carton

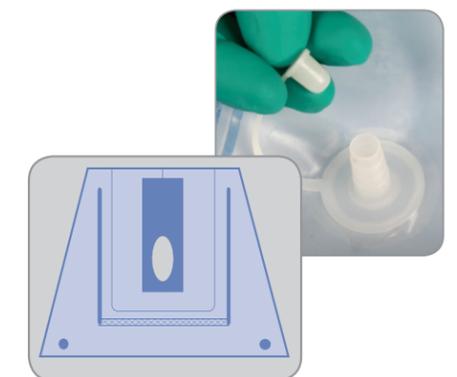

Connecteur d'aspiration avec bouchon obturateur. Evite de couper ou percer le connecteur pour permettre l'évacuation des fluides, et facilite l'arrêt de l'écoulement à la fin de l'intervention.

# Champs d'orthopédie


## POCHE DE RECUEIL EN U

### DESCRIPTION

- Puissant adhésif en U, sans résidus
- Trois barres malléables pour une bonne tenue
- Film en polyéthylène transparent et résistant, facile à mettre en place

### UTILISATION

Arthroscopie d'épaule, orthopédie, chirurgie du crâne

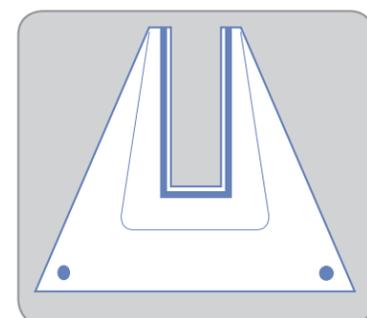

Référence	Dimensions	Conditionnement
DYJPEFP090	76 x 112 cm Adhésif: 25 x 51 cm U: 15 x 46 cm	25 unités/carton


## CHAMP D'ISOLATION VERTICAL

### DESCRIPTION

- Bande adhésive supérieure à retrait facile
- Film à inciser adhésif et sans résidus
- Film en polyéthylène transparent et résistant

### UTILISATION

Brochage, hanche par voie antérieure

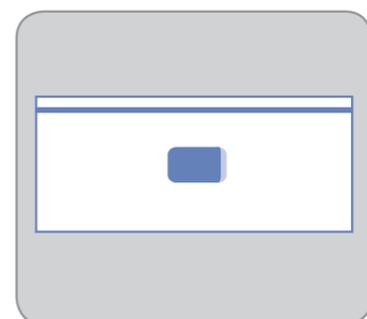

Référence	Dimensions	Conditionnement
DYNJSD1014	317 x 213 cm Adhésif: 49 x 25 cm Bande adhésive: 317 x 1.3 cm	5 unités/boîte; 15 unités/carton

# Champs d'orthopédie

## CHAMPS D'ISOLATION VERTICALE AVEC POCHE


### DESCRIPTION

- Adhésif puissant et sans résidus
- Film en polyéthylène transparent et résistant
- Deux passe-tubulures et poches à instruments pour un site opératoire organisé
- Large poche de recueil de fluides avec tamis et connecteur d'aspiration muni d'un bouchon pour un meilleur contrôle des fluides

### UTILISATION

Brochage, hanche par voie antérieure, néphroscopie

Référence	Dimensions	Conditionnement
DYNJSD1017	317 x 213 cm Zone à inciser: 49 x 25 cm Bande adhésive: 317 x 1.3 cm Poche de recueil: 51 x 51 cm	15 unités/carton
DYNJSD1017W	317 x 254 cm Zone à inciser: 85.1 x 27.9 cm Bande adhésive: 317 x 1.3 cm Poche de recueil: 69.9 x 94 cm	15 unités/carton

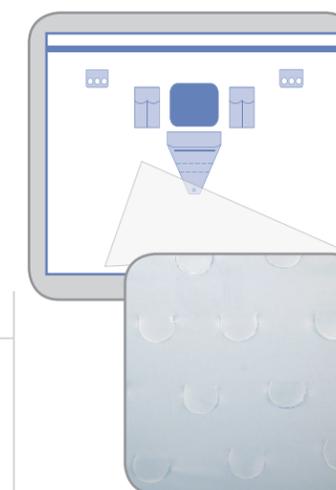

Filtre de qualité supérieure:  
· Perforations de très petit diamètre et grande densité  
· Emplacement profond du filtre pour une évacuation rapide

# Champs d'ophtalmologie

## CHAMPS FENÊTRÉS


### DESCRIPTION

- Fenêtre ronde adhésive
- Bande protectrice de l'adhésif ultra-résistante en papier siliconé, sans relargage particulière
- Film polyéthylène souple avec finition mate antireflet

### UTILISATION

Petites chirurgies, ophtalmologie, chirurgie plastique

Référence	Dimensions	Conditionnement
IDE1020	40 x 40 cm Zone adhésive: 12 x 12 cm Fenêtre: 6 cm de diamètre	10 unités/boîte; 40 unités/carton

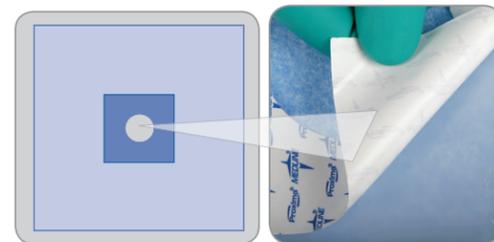

Bande protectrice facile à retirer.

## CHAMPS D'OPHTALMOLOGIE


### DESCRIPTION

- Film à inciser compatible avec la peau
- Sans relargage particulière, résistant à la traction
- 2 bandes adhésives additionnelles
- Barre maléable
- Film mat anti-buée souple

### UTILISATION

Cataracte, chirurgie vitréorétinienne, chirurgie cornéenne

Référence	Dimensions	Conditionnement
IDE1023	48 x 41 cm Zone adhésive: 12 x 10 cm 2 bandes adhésives: 5 x 5 cm	10 unités/boîte; 40 unités/carton

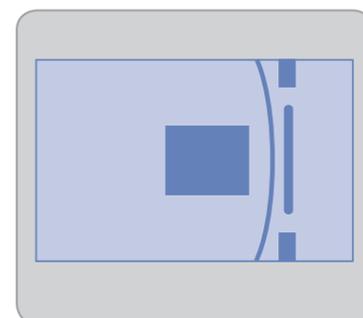

# Champs d'ophtalmologie

## CHAMPS D'OPHTALMOLOGIE AVEC POCHE


### DESCRIPTION

- Fenêtre ovale adhésive adaptée à la peau du visage
- Bande protectrice de l'adhésif ultra-résistante en papier siliconé, sans relargage particulière
- Deux languettes adhésives supplémentaires
- Barre malléable pour un meilleur contrôle des fluides
- Film polyéthylène mat et souple, avec finition antireflet

### UTILISATION

Cataracte, chirurgie vitréorétinienne, chirurgie cornéenne

Référence	Dimensions	Conditionnement
IDE1024	48 x 41 cm Zone adhésive: 6 x 3.5 cm 2 bandes adhésives: 5 x 5 cm Fenêtre: 6 x 3.5 cm	10 unités/boîte; 40 unités/carton

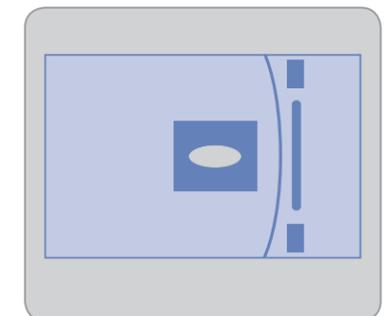

## CHAMPS FENÊTRÉS


### DESCRIPTION

- Fenêtre ovale adhésive
- Bande protectrice de l'adhésif ultra-résistante en papier siliconé, sans relargage particulière
- Film polyéthylène souple avec finition mate antireflet

### UTILISATION

Ophtalmologie, ORL, chirurgie plastique

Référence	Dimensions	Conditionnement
IDE1030	83 x 129 cm Zone adhésive: 12 x 11 cm Fenêtre: 7 x 5 cm	10 unités/boîte; 40 unités/carton

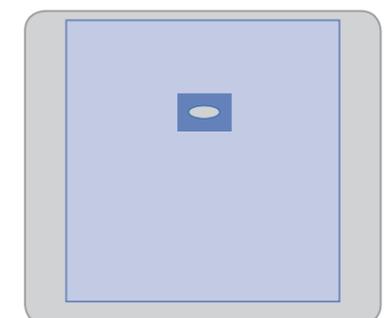

# Champs d'ophtalmologie

## CHAMP D'OPHTALMOLOGIE À INCISER AVEC POCHE


### DESCRIPTION

- Surface d'incision adhésive
- Bande protectrice de l'adhésif ultra-résistante en papier siliconé, sans relargage particulière
- Film fin et conformable avec finition mate antireflet

### UTILISATION

Cataracte, chirurgie vitréorétinienne

Référence	Dimensions	Conditionnement
IDE1061	121 x 129 cm Zone adhésive: 12 x 11 cm Poche de recueil: 30 x 27 cm	10 unités/boîte; 40 unités/carton

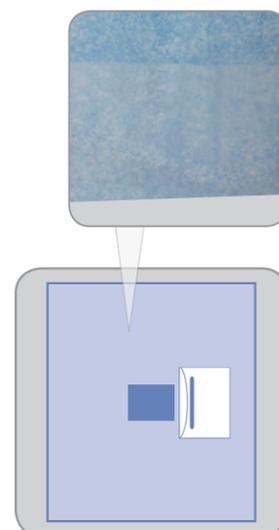

## CHAMP D'UROLOGIE


### DESCRIPTION

- Adhésif puissant et sans résidus
- Doigtier sans latex
- Film polyéthylène mat résistant, avec finition antireflet
- Bande protectrice de l'adhésif ultra-résistante en papier siliconé, sans relargage particulière

### UTILISATION

Urologie et gynécologie

Référence	Dimensions	Conditionnement
IDE1071	60 x 91 cm Bande adhésive: 60 x 5 cm Doigtier: O.D. 10 x I.D. 3 cm	10 unités/boîte; 40 unités/carton

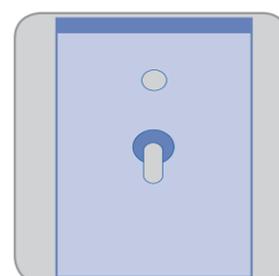

# Drapage divers

## POCHE DE RECUEIL AVEC FENÊTRE


### DESCRIPTION

- Fenêtre ovale avec large zone adhésive
- Adhésif puissant et sans résidus
- Barre malléable pour un meilleur contrôle des fluides
- Film polyéthylène mat épais avec finition antireflet

### UTILISATION

Gynécologie et ophtalmologie

Référence	Dimensions	Conditionnement
IDE1072	45 x 22 cm Surface adhésive: 30 x 22 cm Fenêtre: 11 x 9 cm	10 unités/boîte; 40 unités/carton

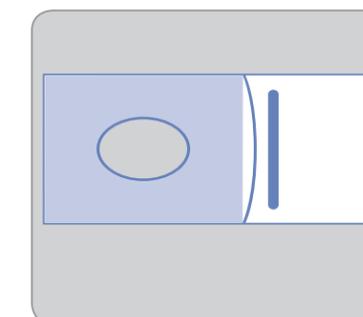

## POCHE DE CÉSARIENNE


### DESCRIPTION

- Film à inciser respirant pour une bonne accroche tout au long de l'intervention
- Adhésif puissant et sans résidus
- Large mousse alvéolaire permettant un bon contrôle des fluides
- Poche de recueil circulaire pour retenir parfaitement les fluides
- Deux passe-tubulures pour un site opératoire organisé
- Film polyéthylène épais pour une meilleure résistance, mat, avec finition antireflet

### UTILISATION

Césarienne, trauma, chirurgie générale

Référence	Dimensions	Conditionnement
DYNJSD2057	91 x 76 cm Adhésif: 38 x 36 cm	10 unités/carton

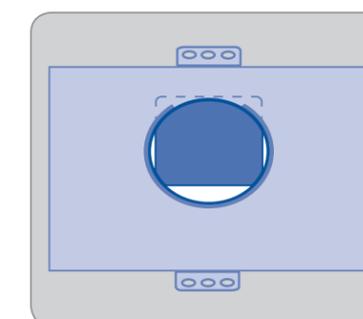

# Champs à inciser Dermadine® & Dermadrape®

## DESCRIPTION

- Film mat antibuée, souple et drapable
- Adhésif puissant et sans résidus
- Respirant et imperméable aux fluides
- Confortable et couvrant
- Champ à inciser résistant
- Champs Dermadine® imprégnés d'une solution anti-bactérienne
- Champs Dermadrape® transparent



Référence Dermadine®		Dimensions	Conditionnement	Référence Dermadrape®	
42020		20 x 20 cm Adhésif: 15 x 20 cm	20 unités/boite; 120 unités/carton	32020	
n/a		35 x 25 cm Adhésif: 30 x 25 cm	20 unités/boite; 120 unités/carton	33525	
44040		40 x 40 cm Adhésif: 34 x 40 cm	15 unités/boite; 90 unités/carton	34040	
n/a		50 x 48 cm Adhésif: 44 x 48 cm	15 unités/boite; 90 unités/carton	35050	
47045		70 x 45 cm Adhésif: 60 x 45 cm	15 unités/boite; 90 unités/carton	37045	
48060		80 x 60 cm Adhésif: 60 x 60 cm	10 unités/boite; 60 unités/carton	38060	
48080		80 x 80 cm Adhésif: 70 x 80 cm	10 unités/boite; 60 unités/carton	38080	


# Housses de protection d'équipement

## HOUSSE D'AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE CIRCULAIRE

### DESCRIPTION

- Film polyéthylène transparent souple
- Élastique sans latex
- Polyvalent: souvent utilisé pour isoler l'émetteur de rayons X ou autres équipements

Référence	Dimensions	Conditionnement
ICE60020S	25 x 55 cm	25 unités/carton
ICE60028S	35 x 70 cm	25 unités/carton
ICE60030S	40 x 80 cm	25 unités/carton
ICE60040S	50 x 100 cm	25 unités/carton
ICE60050S	60 x 120 cm	25 unités/carton
ICEBBG070	65 x 130 cm	50 unités/carton

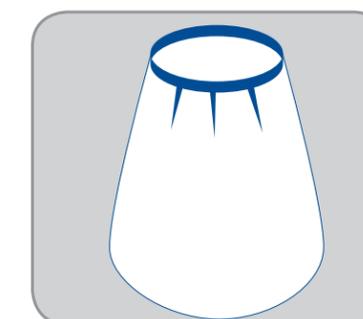


## HOUSSE D'AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE RECTANGULAIRE

### DESCRIPTION

- Film polyéthylène transparent souple
- Élastique sans latex
- Polyvalent: souvent utilisé pour isoler l'émetteur de rayons X ou autres équipements

Référence	Dimensions	Conditionnement
ICE63036R	76 x 91 cm	25 unités/carton
ICE63628R	91 x 71 cm	25 unités/carton
ICE63636R	91 x 91 cm	25 unités/carton
ICEBBG095	95 x 85 cm	25 unités/carton
ICE63654S	95 x 130 cm	25 unités/carton
ICE64848S	122 x 122 cm	25 unités/carton

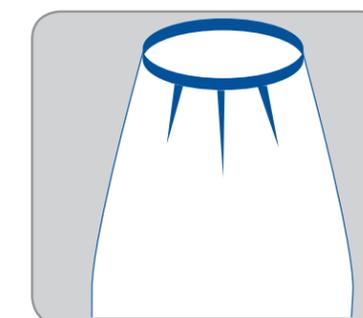


# Housses de protection d'équipement

## KITS POUR AMPLIFICATEURS DE BRILLANCE PHILIPS

### DESCRIPTION

- Housse transparente pour émetteur/récepteur de rayons X
- Housse transparente pour arceau

DYNJE4526 pour les BV29/300  
 DYNJE4527 pour les BV300  
 DYNJE4530 pour les BV25/26  
 DYNJE4569 pour les Pulsera/Endura

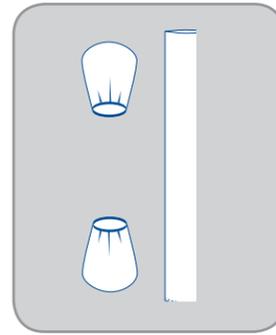


Référence	Dimensions	Conditionnement
DYNJE4526	Housse émetteur/récepteur: 60 x 115 cm   70 x 130 cm Housse d'arceau: 30 x 198 cm	10 unités/boîte; 20 unités/carton
DYNJE4527	Housse émetteur/récepteur: 60 x 115 cm   rect.: 95 x 85 cm Housse d'arceau: 30 x 198 cm	10 unités/boîte; 20 unités/carton
DYNJE4530	Housse émetteur/récepteur: 60 x 115 cm Housse d'arceau: 30 x 198 cm	10 unités/boîte; 20 unités/carton
DYNJE4569	Housse émetteur/récepteur: 60 x 115 cm   70 x 140 cm Housse d'arceau: 30 x 198 cm	10 unités/boîte; 20 unités/carton

## KITS POUR AMPLIFICATEURS DE BRILLANCE ZIEHM

### DESCRIPTION

- Housse transparente émetteur/récepteur de rayons X
- Housse transparente pour arceau

A utiliser avec les sets SPTE-SS634

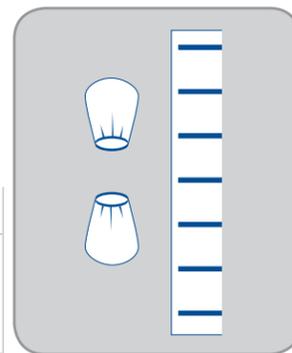

Référence	Dimensions	Conditionnement
DYNJE4531	Housse émetteur/récepteur: 60 x 115 cm   70 x 130 cm Housse d'arceau: 35 x 185 cm	10 unités/boîte; 20 unités/carton

# Housses de protection d'équipement


## KITS POUR AMPLIFICATEURS DE BRILLANCE SIEMENS

### DESCRIPTION


- Housse transparente pour émetteur/récepteur de rayon X
- Housse transparente pour arceau

DYNJE4532 pour les SIREMOBIL N4  
 DYNJE4547 pour les SIREMOBIL 2000

A utiliser avec les sets de démarrage SPTE-SS628  
 Housse transparente avec système à clips  
 DYNJE4556 pour ISO-C/Arcadis/Orbic, 2 parties  
 DYNJE4557 pour ISO-C/Arcadis/Orbic, 1 partie

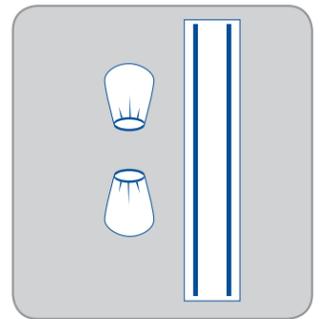

Référence	Dimensions	Conditionnement
DYNJE4532	Housse émetteur/récepteur: 60 x 115 cm   60 x 115 cm Housse d'arceau: 35 x 183 cm	10 unités/boîte; 20 unités/carton
DYNJE4556	Housse émetteur: 51-82 x 130 cm Housse récepteur: 53-46 x 134 cm	10 unités/boîte; 20 unités/carton
DYNJE4557	Housse émetteur: 51-82 x 130 cm	10 unités/boîte; 20 unités/carton

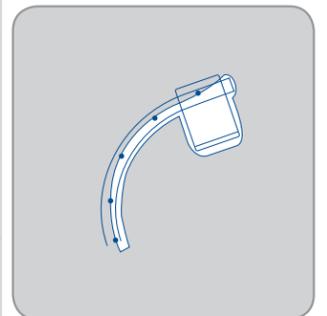


## HOUSSE DE FLUOROSCOPE

### DESCRIPTION

- Housse de fluoroscope avec deux bandes de fixation et deux carrés adhésifs pour l'ajustement
- Polyéthylène souple transparent

Référence	Dimensions	Conditionnement
ICE1012	91 x 111 cm Bandes adhésives (2): 91 x 1.2 cm Carrés adhésifs: 5 x 10 cm	10 unités/boîte; 40 unités/carton

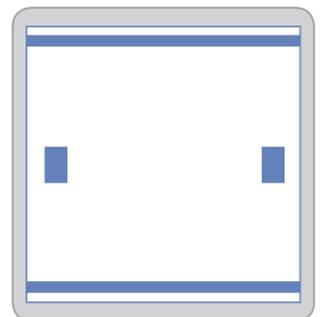

# Housses de protection d'équipement


## HOUSSE UNIVERSELLE POUR AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE

### DESCRIPTION

- Housse avec trois bandes adhésives pour la mise en place
- Polyéthylène souple transparent

ICE4400R:  
· Avec deux élastiques additionnels (sans latex) pour la mise en place

Référence	Dimensions	Conditionnement
ICE4400	104 x 188 cm	20 unités/carton
ICE4400R	104 x 188 cm	20 unités/carton

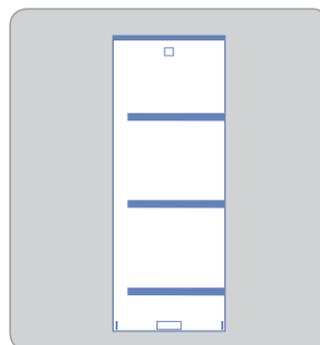


## HOUSSE INTEGRALE D'AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE

### DESCRIPTION

- Quatre bandes adhésives
- Polyéthylène souple transparent
- Coupe arrondie adaptée à la forme de l'arceau

Référence	Dimensions	Conditionnement
ICE4430	152 x 267 cm	20 unités/carton

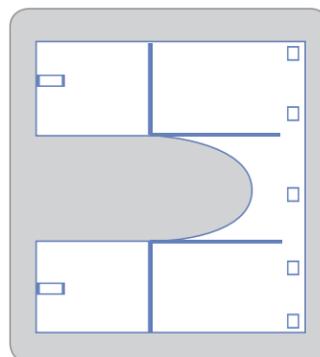

## HOUSSE POUR MINI AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE


### DESCRIPTION

- Housse avec élastique à l'arrière de l'amplificateur
- Trois bandes d'ajustement adhésives
- Polyéthylène souple transparent

ICE4410: Pour modèles Fluoroscanner®

ICE4420: Pour modèles OEC6600/6800

Référence	Dimensions	Conditionnement
ICE4410	137 x 160 cm	20 unités/carton
ICE4420	137 x 216 cm	20 unités/carton

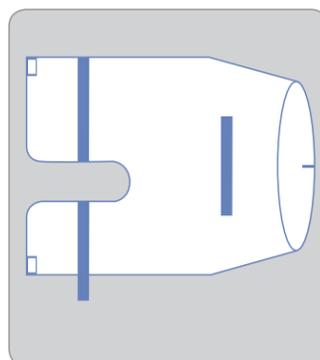


# Housses de protection d'équipement

## KIT POUR AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE

### DESCRIPTION

- Housse avec élastique (sans latex)
- Polyéthylène souple transparent

Référence	Dimensions	Conditionnement
ICE4500	(1) Housse d'émetteur 91 cm x 91 cm (1) Housse d'arceau à clipser 41 cm x 218 cm (1) Housse de pédalier 46 cm x 41 cm (1) Housse de récepteur 71 cm x 31 cm	20 unités/carton

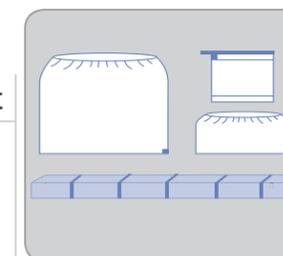


## HOUSSE DE TÉLÉCOMMANDE

### DESCRIPTION

- Fermeture type zip
- Polyéthylène souple transparent

Référence	Dimensions	Conditionnement
DYNJE4635	10 x 28 cm	50 unités/boite; 200 unités/carton
DYNJE4641	18 x 35 cm	50 unités/boite; 200 unités/carton

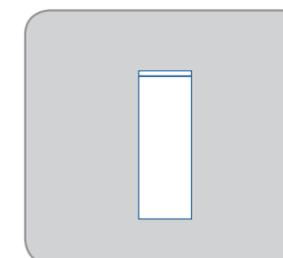


## HOUSSE DE CAMÉRA

### DESCRIPTION

- Housses avec bandes adhésive de fixation
- Bande adhésive pour l'étanchéité
- Polyéthylène souple transparent
- Housse de câble

Référence	Dimensions	Conditionnement
ICE4250	13 x 244 cm Télescopique	20 unités/carton
ICE4300	23 x 244 cm Télescopique	20 unités/carton
ICE4240	13 x 240 cm Télescopique avec cartonnette	20 unités/carton
ICE4260	15 x 240 cm avec anneau	20 unités/carton
ICE4270	14 x 244 cm accordéon	20 unités/carton
ICE4200	18 x 244 cm embout élastique	20 unités/carton
ICE4100	8 x 200 cm télescopique avec cartonnette	20 unités/carton

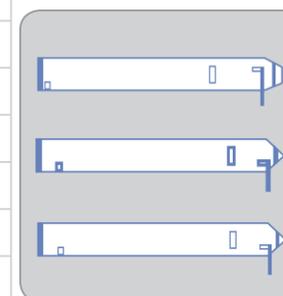

# Housses de protection d'équipement

## HOUSSES DE MICROSCOPE

### DESCRIPTION

- Housses en polyéthylène souple transparent

#### ICE5010, ICE5040

- Une paire d'oculaires
- Lentilles de 48 mm (Zeiss® OPMI)
- Trois bandes adhésives d'ajustement

#### ICE5200, ICE5210, ICE5030

- Trois paires d'oculaires
- Lentilles de 65 mm (Zeiss® MD)
- Trois bandes adhésives d'ajustement


#### ICE5220

- Trois paire d'oculaires
- Lentilles de 65 mm (Zeiss® MD)
- Cinq bandes adhésives d'étanchéité

#### ICE5300, ICE5330

- Trois paire d'oculaire
- Lentilles de 68 mm (Leica®)
- Trois bandes adhésives d'étanchéité

Référence	Dimensions	Conditionnement
<b>Lentilles 48 cm (Zeiss® OPMI)</b>		
ICE5010	51 x 163 cm	20 unités/carton
ICE5040	51 x 267 cm	40 unités/carton
<b>Lentilles 65 cm (Zeiss® MD)</b>		
ICE5200	117 x 203 cm	10 unités/carton
ICE5030	117 x 305 cm	10 unités/carton
ICE5210	117 x 267 cm	10 unités/carton
ICE5220	137 x 381 cm	10 unités/carton
<b>Lentilles 68 cm (Leica®)</b>		
ICE5300	104 x 163 cm	10 unités/carton
ICE5320	137 x 267 cm	10 unités/carton
ICE5330	137 x 381 cm	10 unités/carton

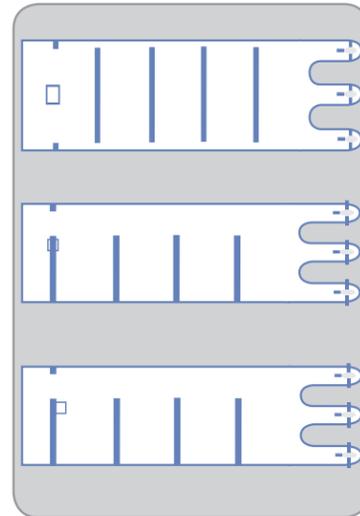

# Housses de protection d'équipement

## HOUSSES DE CASSETTES


### DESCRIPTION

- Housses en polyéthylène transparent

#### ICE4010:

- Avec bande protectrice pour faciliter la mise en place aseptique

Référence	Dimensions	Conditionnement
ICE4000	Large: 61 x 102 cm	20 unités/carton
ICE5200	standard avec bande protectrice: 61 x 64 cm	48 unités/carton
ICE4050	Standard: 61 x 64 cm	50 unités/carton

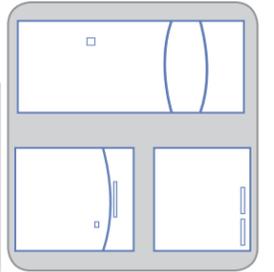

## KIT D'ÉCHOGRAPHIE

### DESCRIPTION

- Composition
  - (1) Housse pour échographe
  - (1) Sachet de gel d'échographie
  - (2) Élastiques
- Gel d'ultrason stérile de haute qualité pour sonde d'échographie
- Deux élastiques d'étanchéité
- Housse en polyuréthane transparente, souple et drapable

Référence	Dimensions	Conditionnement
ICE5900	10 x 122 cm	20 unités/carton
ICE5910	15 x 61 cm	20 unités/carton
ICE5920	15 x 122 cm	20 unités/carton
ICE5930	15 x 244 cm	20 unités/carton




- Polyuréthane de haute qualité
- Souple et drapable pour une meilleure mise en place sur l'appareil
- Finition lisse facilitant le drapage et le glissement de la sonde
- Film mat limitant les reflets

## HOUSSE THERMIQUE

### DESCRIPTION

- Film polyéthylène transparente
- Couche d'aluminium enduit
- Résistante jusqu'à une température de 60°C

Référence	Dimensions	Conditionnement
DYNJE7000	68 x 86 cm	40 unités/carton

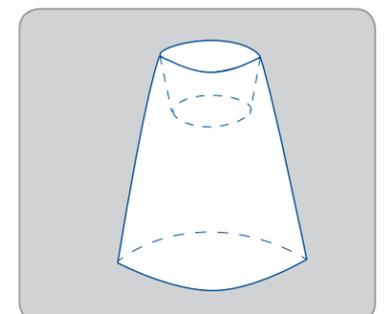

# Équivalence Invisishield

PAGE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE MEDLINE	RÉFÉRENCE 3M®	RÉFÉRENCE MICROTEK®
3	Champ de bordure	IDE1000	1000	ISO1000
4	Sac d'isolation	ICE1003	1003	ISO1003
3	Champ de bordure	IDE1010	1010	ISO1010
8	Champ d'isolation vertical	DYNJSD1014	1014	n/a
7	Champ en U PE	IDE1015	1015	ISO1015
4	Poche de recueil de fluides	IDE1016	1016	ISO1016
9	Champ d'isolation vertical	DYNJSD1017	1017	5960
9	Champ d'isolation vertical grandes dimensions	DYNJSD1017W	n/a	6960
5	Poche instrument	IDE1018	1018	ISO1018
5	Poche instrument grande profonde	IDE1018L	1018L	n/a
7	Champ en U PE	IDE1019	1019	ISO1019
10	Champ fenêtré	IDE1020	1020	ISO1020
10	Champ d'ophtalmologie	IDE1023	1023	n/a
11	Champ d'ophtalmologie	IDE1024	1024	ISO1024
11	Champ fenêtré	IDE1030	1030	ISO1030
14	Champ à inciser	32020	1035	ISO1035
14	Champ à inciser	34040	1040	ISO1040
14	Champ à inciser	37045	1050	ISO1050
14	Champ à inciser	38080	1051	ISO1051
12	Champ d'ophtalmologie	IDE1061	1061	ISO1061
7	Poche d'épaule	DYNJSD1067	1067	ISO1067
12	Champ d'urologie	IDE1071	1071	ISO1071
13	Champ d'urologie	IDE1072	1072	ISO1072
8	Poche de recueil en U	DYJPEFP090	n/a	n/a
6	Poche instrument	DYJPEISTP0M1	n/a	n/a
6	Poche instrument	DYJPEISTP0M2	n/a	n/a
6	Poche instrument	DYJPEISTP0M3	n/a	n/a

Tous les produits sont sans latex et stériles (sauf indication contraire dans la description).



Adhésif



Film mat



Film polyéthylène

# Équivalence Dermadine®

TYPE DE FILM	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE MEDLINE	RÉFÉRENCE 3M®
PU	Champ à inciser stérile 15 x 20 cm ~ zone à inciser 10 x 20 cm imprégné d'un iodophore	42020	6635
PU	Champ à inciser stérile 44 x 35 cm ~ zone à inciser 34 x 35 cm imprégné d'un iodophore	44040	6640
PU	Champ à inciser stérile 66 x 60 cm ~ zone à inciser 56 x 60 cm imprégné d'un iodophore	48060	6648
PU	Champ à inciser stérile 66 x 45 cm ~ zone à inciser 56 x 45 cm imprégné d'un iodophore	47045	6650
PU	Champ à inciser stérile 66 x 85 cm ~ zone à inciser 56 x 85 cm imprégné d'un iodophore	48080	6651
PU avec applicateur	Champ à inciser stérile 30 x 20 cm ~ zone à inciser 26 x 20 cm imprégné d'un iodophore	42020	6661EZ
PU avec applicateur	Champ à inciser stérile 60 x 35 cm ~ zone à inciser 35 x 35 cm imprégné d'un iodophore	44040	6640EZ
PU avec applicateur	Champ à inciser stérile 90 x 60 cm ~ zone à inciser 60 x 60 cm imprégné d'un iodophore	48060	6648EZ
PU avec applicateur	Champ à inciser stérile 90 x 45 cm ~ zone à inciser 60 x 45 cm imprégné d'un iodophore	47045	6650EZ
PU avec applicateur	Champ à inciser stérile 90 x 85 cm ~ zone à inciser 60 x 85 cm imprégné d'un iodophore	48080	6651EZ

# Équivalence Dermadrape®

TYPE DE FILM	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE MEDLINE	RÉFÉRENCE 3M®
PE	Champ à inciser stérile 15 x 20 cm ~ zone à inciser 10 x 20 cm	32020	1035
PE	Champ à inciser stérile 29 x 25 cm ~ zone à inciser 19 x 25 cm	32020	1037
PE	Champ à inciser stérile 60 x 35 cm ~ zone à inciser 35 x 35 cm	34040	1040
PE	Champ à inciser stérile 82 x 45 cm ~ zone à inciser 60 x 45 cm	37045	1050
PE	Champ à inciser stérile 82 x 85 cm ~ zone à inciser 60 x 85 cm	38080	1051
PU	Champ à inciser stérile 20 x 20 cm ~ zone à inciser 10 x 20 cm	32020	2035
PU	Champ à inciser stérile 38 x 25 cm ~ zone à inciser 28 x 25 cm	33525	2037
PU	Champ à inciser stérile 38 x 41 cm ~ zone à inciser 28 x 41 cm	34040	2040
PU	Champ à inciser stérile 60 x 45 cm ~ zone à inciser 50 x 45 cm	35050	2045
PU	Champ à inciser stérile 90 x 60 cm ~ zone à inciser 60 x 60 cm	38060	2050
PU	Champ à inciser stérile 90 x 85 cm ~ zone à inciser 60 x 85 cm	38080	2051



Dermadine® and Dermadrape® sont des Dispositifs Médicaux de classe IIa stériles

Tous les autres produits sont des Dispositifs Médicaux de classe I stériles.

Ces produits sont destinés à être utilisés sous la supervision d'un professionnel de santé. Veuillez consulter la notice d'utilisation ou l'emballage avant utilisation.

 Tisset Loc Botriolo  
S.P.A. Km 5,100  
52020 Castelfranco di Sopra  
(AR) Italia

 Medline International France SAS,  
5 rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

 0373 Istituto Superiore di Sanità

 0086 (BSI)

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre responsable commercial Medline ou visiter notre site [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



ALWAYS  
ON

Medline International France SAS  
Le Val St-Quentin  
2 Rue René Caudron  
Bâtiment 13F  
78960 Voisins-le-Bretonneux  
France  
Tel: +33 1 30 05 34 00  
Fax: +33 1 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

Medline International Belgium SPRL  
Pegasuslaan 5  
B-1831 Diegem  
Belgique  
Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

Medline International Switzerland Sàrl  
A-One Business Center  
Z.A. la pièce N°1 - A5  
1180 Rolle  
Suisse  
Tel. +41 848 244 433  
Fax. +41 848 244 100  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)