

A photograph of a laparoscopic surgical procedure. A surgeon's hand, wearing a white glove, is holding a laparoscopic grasper. The grasper is positioned over a patient's abdomen, which has several ports for laparoscopic instruments. The patient is covered with a blue sterile drape. In the background, a metal surgical tray is visible on a blue surface.


**Für eine sichere
und durchgängige
Laparoskopie**

Basisprodukte für die Laparoskopie

Als Anbieter von OP-Produkten zählt die Laparoskopie zu den Kernkompetenzen von Medline. Unsere Basisprodukte für die Laparoskopie ermöglichen Ihnen minimal-invasive Eingriffe mit Flexibilität und einheitlichen Ergebnissen. Sie erhalten damit eine umfassende Lösung für Kontinuität im OP und Sicherheit während der Operation.

Trompetenventil

Das Saug-/Spül-System ermöglicht eine einfache und effiziente Absaugung oder Spülung, um die Bauchhöhle bei laparoskopischen Eingriffen frei von Blut, Flüssigkeiten und Rauch zu halten. Auf diese Weise wird die Sicherheit des chirurgischen Eingriffs gewährleistet.

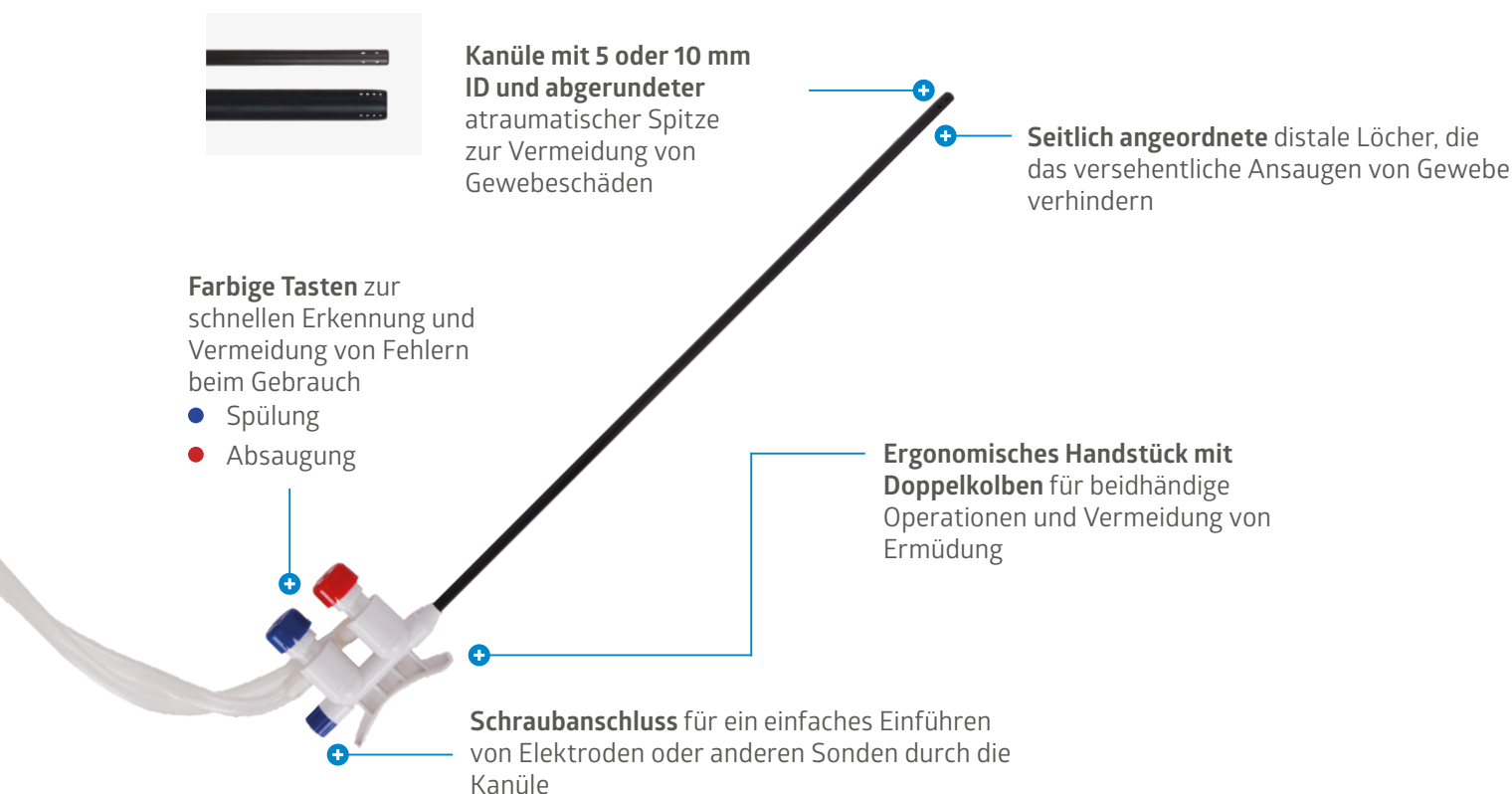

Eigenschaften:

- 33 cm Kanüle für Absaugung/Spülung oder 45-cm-Kanüle für bariatrische und robotergestützte Chirurgie
- 45 cm Einzelkanüle verfügbar
- Einzelter oder doppelter Nadelanschluss für 1 oder 2 Spüleinheiten
- Schläuche, die sich leicht aufstecken und abziehen lassen
- DEHP-frei




Kanüle aus **nicht leitendem Polycarbonat***; kompatibel mit elektrochirurgischen Verfahren

*Nur 5-mm-Kanüle

Veress Nadel

Die Insufflationsnadel hat ein zurückziehbares, federgespanntes, stumpfes Stilett, um bei laparoskopischen Eingriffen einfach und sicher ein Pneumoperitoneum erzeugen zu können.

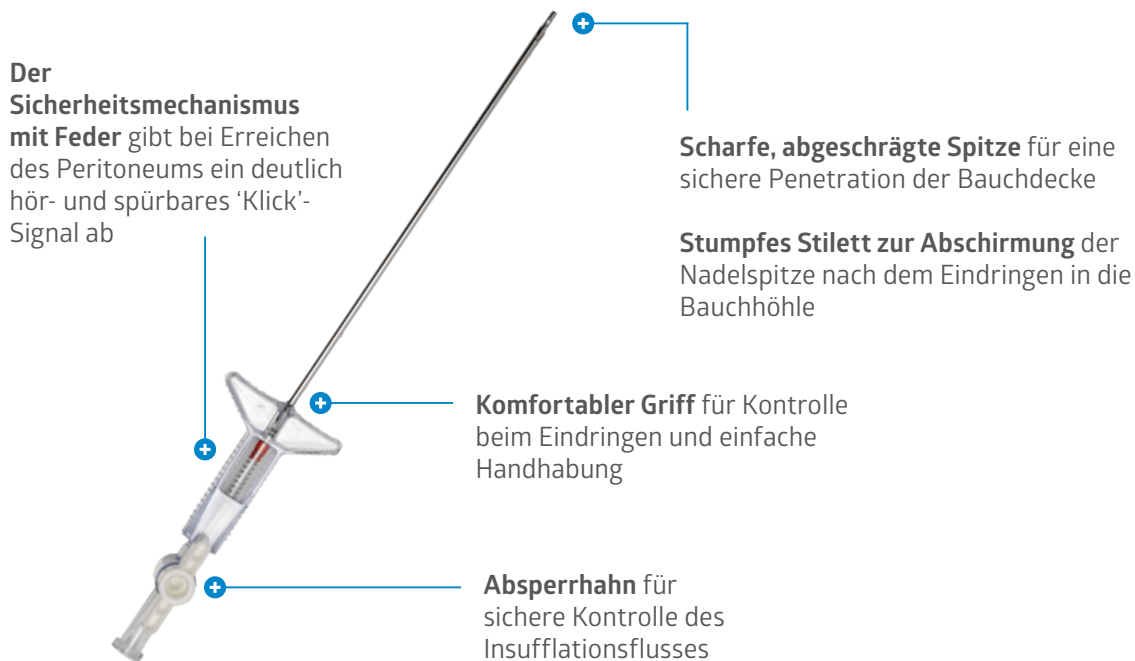


Eigenschaften:

- Zwei Längen: 120 mm und 150 mm
- Standard-Luer-Lock-Konnektor für den Anschluss von Insufflationsschläuchen
- Standarddurchmesser von 14 G

Anti-Beschlag-Lösung

Die Anti-Beschlag-Lösung verhindert das Beschlagen von laparoskopischen Linsen und sorgt so für eine ungehinderte Sicht bei Laparoskopien.

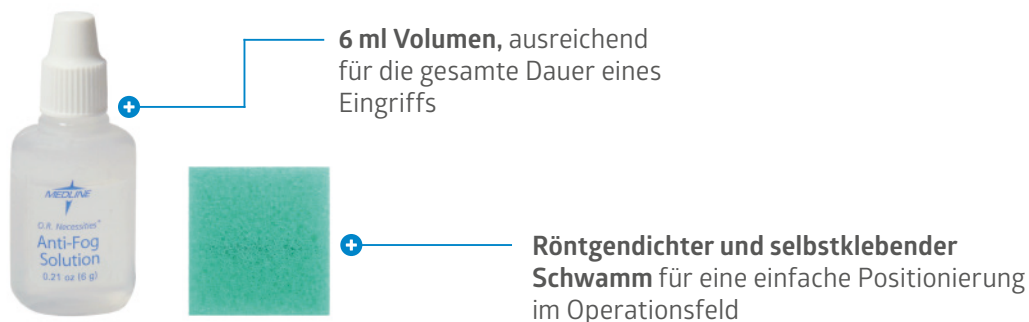

Eigenschaften:

- Schraubverschlussflasche mit milder Alkohollösung
- Nicht scheuernder, fusselfreier Applikatorschwamm
- Gebrauchsfertiges Set: Flasche und Schwamm

Bestellinformationen

Medline bietet Ihnen hochwertige Lösungen und die Basisprodukte für die Laparoskopie zum optimalen Preis.

Veress Nadel

Zur sicheren Erzeugung des Pneumoperitoneums

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Gauge	Insufflations- augen	Verpackung
ORVN12	Veress Nadel	120 mm	14	2	12 Stück/Karton
ORVN15	Veress Nadel	150 mm	14	2	12 Stück/Karton

Saug-/Spülsystem

Für ein sauberes Arbeitsfeld ohne Flüssigkeiten und Rauch

Artikelnummer	Beschreibung	Kanüle zum Saugen/Spülen			Verpackung
		Außen- durchmesser	Länge	Seitliche Löcher	
OR1200S	Saug-/Spülsystem mit Einzeldorn	5 mm	33 cm	8	12 Stück/Karton
OR1201D	Saug-/Spülsystem mit Doppeldorn	5 mm	33 cm	8	12 Stück/Karton
OR1245S	Saug-/Spülsystem mit Einzeldorn	5 mm	45 cm	8	12 Stück/Karton
ORC45	Kanüle zum Saugen/Spülen	5 mm	45 cm	8	10 Stück/Karton
ONG299601CST12	Saug-/Spülsystem mit Einzeldorn	10 mm	33 cm	8	5 Stück/Karton

Anti-Beschlag-Lösung

Zur Vermeidung von Beschlag an Laparoskopie-Linsen

Artikelnummer	Volumen	Verpackung
NONFB100	6 ml	20 Stück/Karton



Medline International Germany GmbH
Medline-Strasse 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz
Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

FOLGEN SIE UNS 

Das ONGxxx Set ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise auf der Verpackung. ORxxxx sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise auf der Verpackung. Veress Nadeln sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise auf der Verpackung. Die Anti-Beschlag-Lösung ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2021 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1048_DE
08/2021

CE 0459 (G-MED)

 Rocamed France
ZI de Signes, Allée de Stockholm
83870 Signes, Frankreich

CE 0197 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH)

 **EC REP** Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1
47877 Willich, Deutschland

CE 1639 (SGS Belgium NV)

 **EC REP** Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Deutschland

CE 2797 (BSI, The Netherlands)

 **EC REP** Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands