



**Para una  
laparoscopia  
segura y sin  
interrupciones**




# Conjunto esencial para Laparoscopia

Gracias a ser un gran proveedor de productos relacionados con el quirófano, la laparoscopia es una parte inherente de la experiencia de Medline. Este conjunto de productos esenciales para laparoscopia permite realizar cirugías mínimamente invasivas con flexibilidad y consistencia. Es una solución integral que facilita la continuidad en el quirófano, centrándose a la vez en la seguridad de la cirugía.

## Cánula de irrigación-aspiración

El sistema de aspiración-irrigación permite una aspiración o irrigación fácil y eficiente, para mantener la cavidad abdominal libre de sangre, líquidos y humo durante la cirugía laparoscópica. Por lo tanto, asegura una intervención quirúrgica segura.

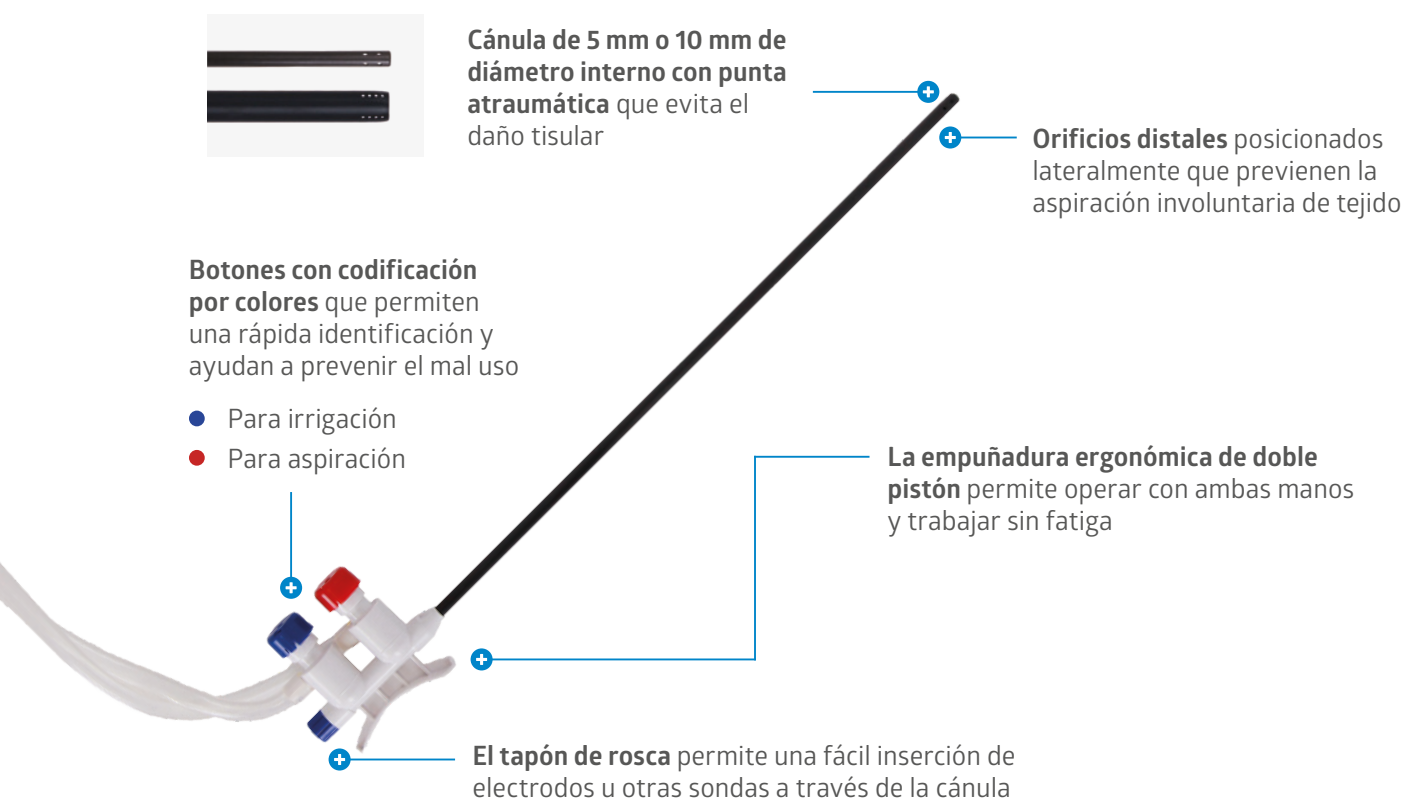

### Características:

- Set de aspiración-irrigación con cánula de 33 cm o 45 cm para cirugía bariátrica y robótica
- Cánula de 45 cm independiente disponible
- Una o dos puntas para conectar a 1 o 2 bolsas de irrigación
- Tubo de bajo torque con fácil apertura
- Libre de DEHP




Cánula de **policarbonato no conductor** compatible con procedimientos electroquirúrgicos

\*Solo cánula de 5 mm

## Aguja de Veress

La aguja de insuflación está equipada con una punta roma retráctil mediante un resorte y está diseñada para realizar de forma simple y segura el neumoperitoneo en la práctica de la cirugía laparoscópica.

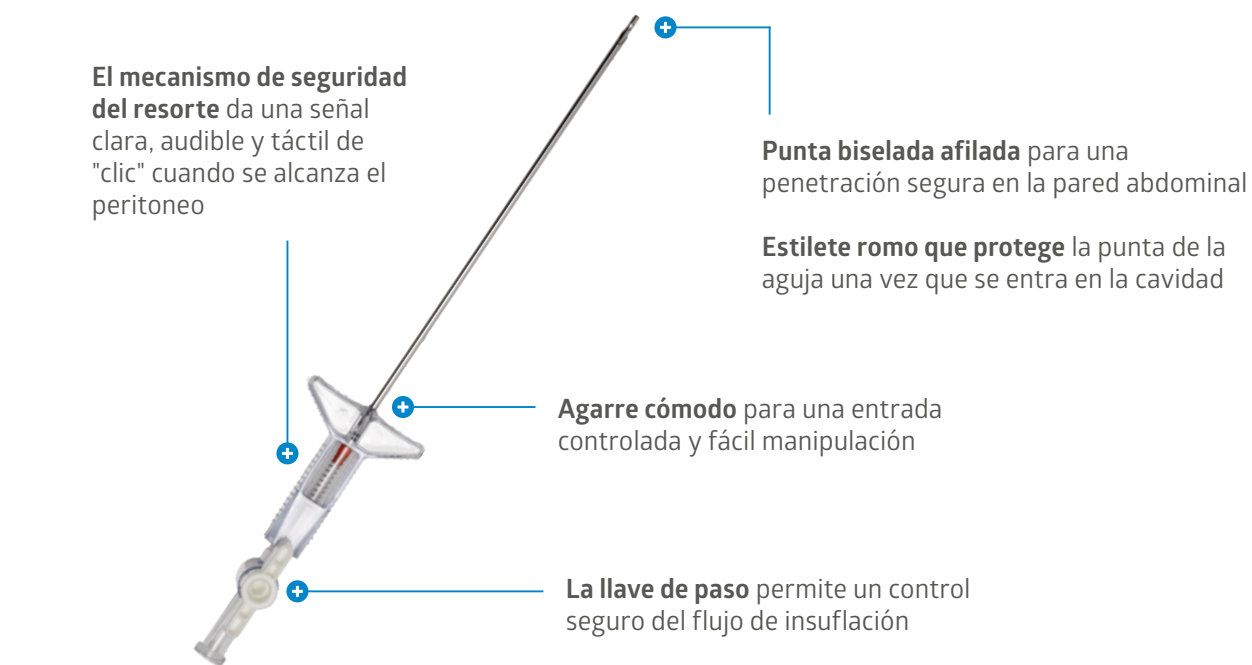


### Características:

- Dos longitudes: 120 mm y 150 mm
- Conector luer-lock estándar para conectar el tubo de insuflación
- Diámetro estándar de 14-G

## Solución antivaho

La solución antivaho evita que las lentes laparoscópicas se empañen, proporcionando así una visión sin obstrucciones durante la cirugía laparoscópica.

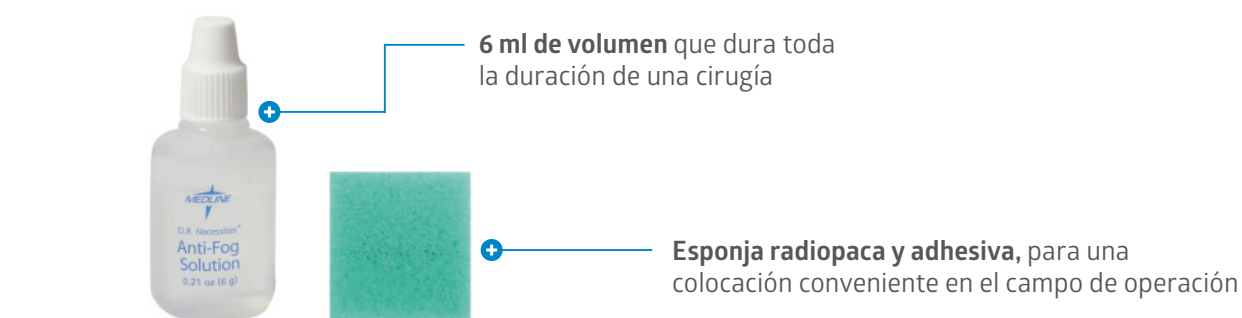

### Características:

- Botella con tapón de rosca y solución de alcohol suave
- Esponja aplicadora no abrasiva que no genera pelusas
- Set listo para usar: botella y esponja

# Información para pedidos

La oferta de Medline le proporciona soluciones de alta calidad y productos para laparoscopia esenciales con la mejor relación calidad-precio.

## Aguja de Veress

Para realizar de forma segura el neumoperitoneo

Referencia	Descripción	Longitud	Calibre	Huecos de insuflación	Envasado
ORVN12	Aguja de insuflación de Veress	120 mm	14	2	12/envase
ORVN15	Aguja de insuflación de Veress	150 mm	14	2	12/envase

## Cánula de irrigación-aspiración

Para mantener el campo de trabajo limpio y libre de líquidos y humo

Referencia	Descripción	Cánula de aspiración-irrigación			Envasado
		Diámetro externo	Longitud	Agujeros laterales	
OR1200S	Set de aspiración-irrigación con una sola conexión a irrigación	5 mm	33 cm	8	12/envase
OR1201D	Set de aspiración-irrigación con doble conexión a irrigación	5 mm	33 cm	8	12/envase
OR1245S	Set de aspiración-irrigación con una sola conexión a irrigación	5 mm	45 cm	8	12/envase
ORC45	Cánula de aspiración-irrigación	5 mm	45 cm	8	10/envase
ONG299601CST12	Set de aspiración-irrigación con una sola conexión a irrigación	10 mm	33 cm	8	5/envase

## Solución antivaho

Para prevenir las lentes laparoscópicas borrosas

Referencia	Volumen	Envasado
NONFB100	6 ml	20/envase



Medline International Iberia S.L.U

Parque Empresarial San Fernando  
Edificio Munich, Planta Baja, local B  
Avenida de Castilla 2

28830 San Fernando de Henares

Madrid

España

Tfno: +34 900 600 602

Fax: +34 900 600 603

es.medline.eu | es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US

El set ONGxxx es un producto sanitario de clase IIa estéril para el uso por profesionales sanitarios.

Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

ORxxxx son productos sanitarios de clase IIa estéril para el uso por profesionales sanitarios.

Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Las agujas de Veress son productos sanitarios de clase IIa estéril para el uso por profesionales sanitarios.

Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

La solución antivaho es un producto sanitario de clase IIa estéril para el uso por profesionales sanitarios.

Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2021 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1048\_ES 03/2021

0459 (G-MED) Rocamed France  
ZI de Signes, Allée de Stockolm  
83870 Signes, France

0197 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH) Luxus Lebenswelt GmbH  
Kochstr. 1  
47877 Willich, Alemania

1639 (SGS Belgium NV) Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffelstraße 80  
20537 Hamburgo, Alemania

2797 (BSI) Hill-Rom SAS  
Zone Industrielle de Talhouet  
56330 Pluvigner, Francia