

Productos esenciales para laparoscopia MED-LAP



**Para una
laparoscopia
segura y sin
interrupciones**



Productos esenciales para laparoscopia

Como proveedor a gran escala de productos relacionados con el quirófano, la laparoscopia es una parte inherente de la experiencia de Medline. Nuestro conjunto de productos esenciales para laparoscopia le permite realizar procedimientos mínimamente invasivos de manera flexible y uniforme. Es una solución integral que facilita la continuidad en el quirófano, centrándose a la vez en la seguridad de la cirugía.


Set de insuflación MED-LAP ORIS

Para una óptima insuflación de CO₂

El set de insuflación ORIS completa el catálogo de productos laparoscópicos de Medline. Al filtrar e insuflar CO₂ limpio, permite a los profesionales sanitarios realizar el neumoperitoneo antes y durante los procedimientos laparoscópicos de manera eficaz.

Medline ofrece una línea de artículos que son totalmente compatibles para su uso junto con diferentes insufladores.

Imagen	Set de tubo de insuflación ORIS	Rango de compatibilidad
	ORISISO con conector ISO 15 M/22 F	Karl Storz Richard Wolf Stryker ConMed
	ORIS15 con conector macho de 15 mm	Karl Storz Richard Wolf
	ORISLL con conector luer-lock	Olympus
	ORISPUSH con conector hembra flexible	Stryker

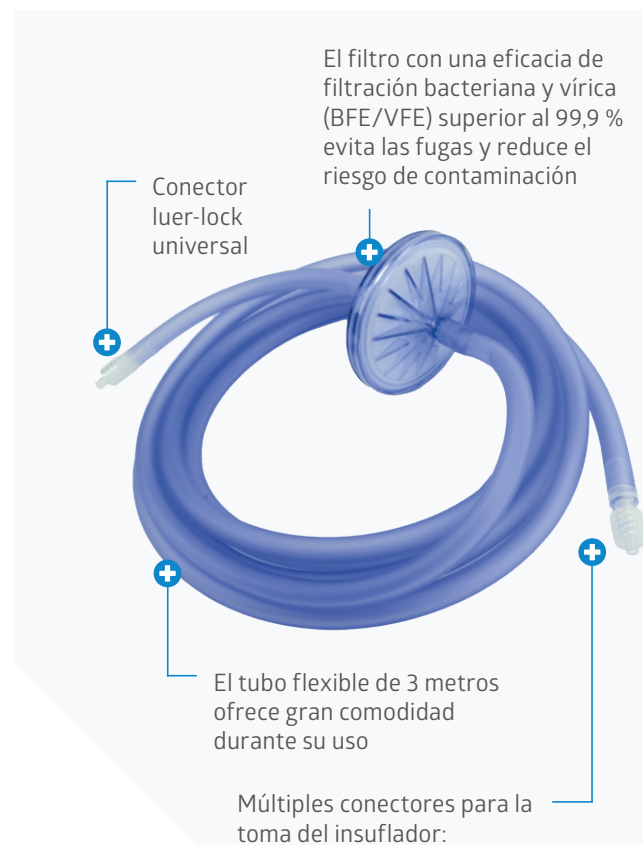

ORISLL
Conector luer-lock



ORISPUSH
Conector hembra



ORISISO
Conector ISO 15 macho/
22 hembra



Ventajas y características:


- Ofrece un tubo flexible y un filtro de alta seguridad
- Filtra con un 99,9 % de BFE y VFE
- Gama totalmente compatible

Referencia	Descripción	Longitud	Cantidad
ORISISO	Set quirúrgico de insuflación con conector ISO 15 M/22 F	3 m	25 ud./caja
ORIS15	Set quirúrgico de insuflación con conector de 15 mm	3 m	25 ud./caja
ORISLL	Set quirúrgico de insuflación con conector luer-lock	3 m	25 ud./caja
ORISPUSH	Set quirúrgico de insuflación con conector hembra	3 m	25 ud./caja

Aguja de Veress MED-LAP

Para realizar de forma segura el neumoperitoneo

La aguja de insuflación está equipada con un estilete romo y retráctil mediante un resorte, y está diseñada para realizar de forma simple y segura el neumoperitoneo durante la práctica de la cirugía laparoscópica.

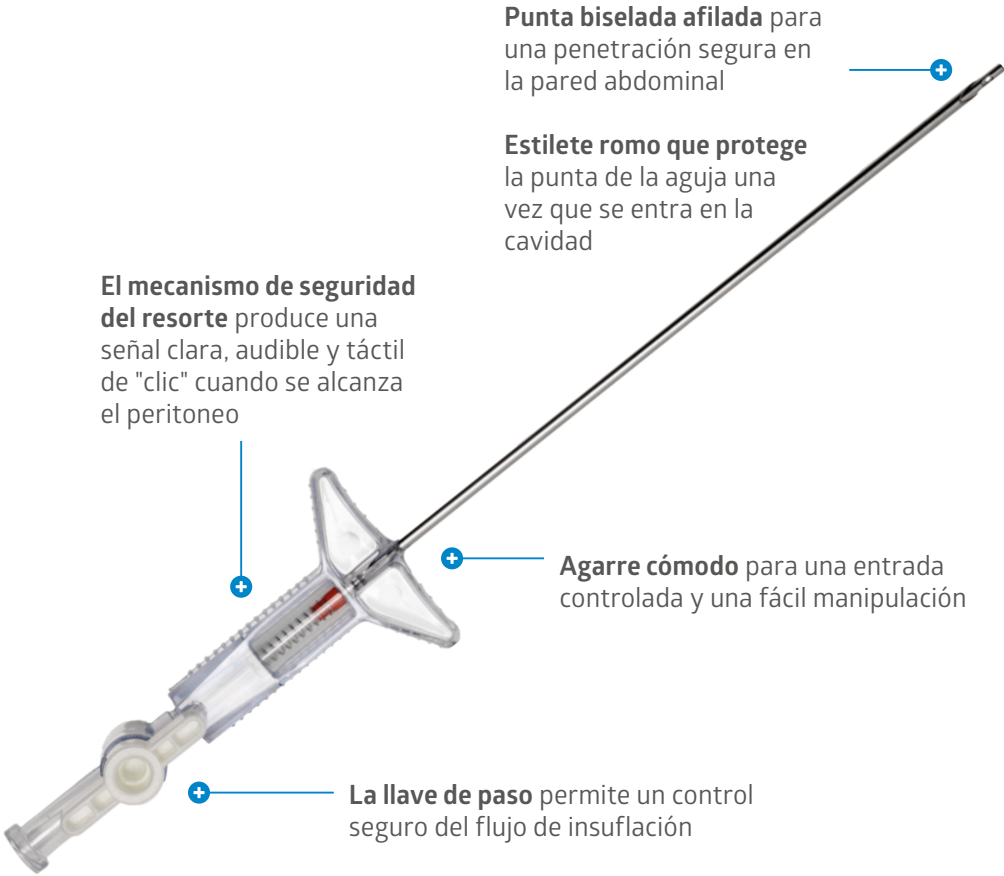

- Ventajas y características:**
- Dos longitudes: 120 mm y 150 mm
 - Conector luer-lock estándar para conectar el tubo de insuflación
 - Diámetro estándar de 14-G

Referencia	Descripción	Longitud	Calibre	Orificios de insuflación	Cantidad
ORVN12	Aguja de insuflación de Veress	120 mm	14	2	12 ud./caja
ORVN15	Aguja de insuflación de Veress	150 mm	14	2	12 ud./caja

Solución antivaho MED-LAP

Para prevenir las lentes laparoscópicas borrosas

La solución antivaho evita que las lentes laparoscópicas se empañen, proporcionando así una visión sin obstrucciones durante la cirugía laparoscópica.



+ 6 ml de volumen que dura toda la cirugía



+ Esponja radiopaca y adhesiva, para una colocación cómoda en el campo quirúrgico



Ventajas y características:


- Esponja aplicadora no abrasiva que no genera pelusas
- Set listo para usar: botella y esponja
- Botella con tapón de rosca y solución de alcohol suave

Referencia	Descripción	Cantidad
NONFB100	6 ml	20 ud./caja

Set de aspiración-irrigación MED-LAP

Para mantener el campo de trabajo limpio y libre de líquidos y humo

Este sistema de aspiración-irrigación permite una aspiración o una irrigación fáciles y eficientes para mantener la cavidad abdominal libre de sangre, líquidos y humo durante la cirugía laparoscópica. Por lo tanto, asegura una intervención quirúrgica segura.

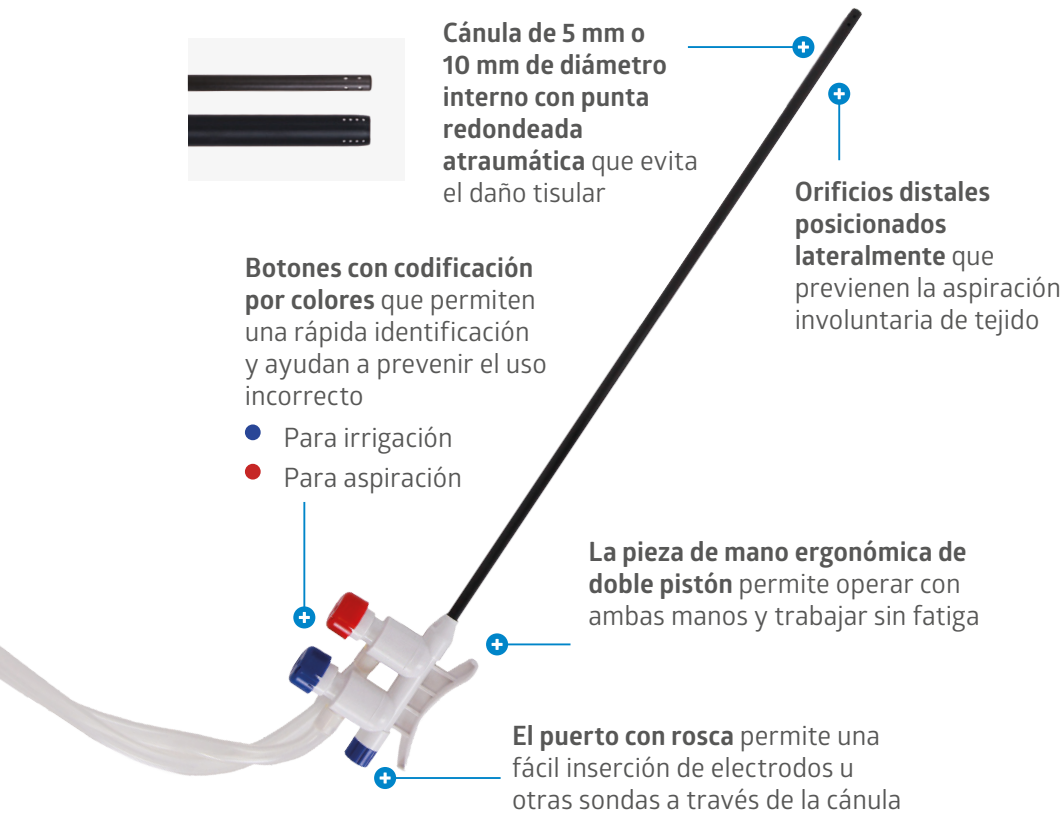

Ventajas y características:

- Libre de DEHP
- Tubo de bajo torque con fácil apertura
- Set de aspiración-irrigación con cánula de 33 cm o 45 cm para cirugía bariátrica y robótica
- Cánula individual de 45 cm disponible
- Una o dos puntas para conectar a 1 o 2 bolsas de irrigación



Cánula de **policarbonato no conductor**;^{*} compatible con procedimientos electroquirúrgicos

^{*}Solo cánula de 5 mm

Referencia	Descripción	Cánula de aspiración-irrigación			Cantidad
		Diámetro externo	Longitud	Orificios laterales	
OR1200S	Set de aspiración-irrigación con una sola punta	5 mm	33 cm	8	12/envase
OR1201D	Set de aspiración-irrigación con doble punta	5 mm	33 cm	8	12/envase
OR1245S	Set de aspiración-irrigación con una sola punta	5 mm	45 cm	8	12/envase
ORC45	Cánula de aspiración-irrigación	5 mm	45 cm	8	10/envase
ONG299601CST12	Set de aspiración-irrigación con una sola punta	10 mm	33 cm	8	5/envase

Bolsas de extracción MED-LAP

Para la extracción de muestras de tejidos u órganos

Medline ofrece dos tipos de bolsas de extracción con características únicas y un grado de sofisticación. La bolsa de extracción con pulsador es un producto intuitivo, fácil de manejar y muy utilizado durante los procedimientos laparoscópicos.



Funda de inserción con pulsador
Para ayudar a introducir la bolsa de extracción en el abdomen



Cable guía de autoapertura
Para facilitar la recogida de la muestra

Bolsa de poliuretano
Material resistente a los desgarros

+

Ventajas y características:


- Adecuado para su uso en combinación con un trocar estándar de 10 o 12 mm

Referencia	Descripción	Cantidad
100200	Bolsa de Extracción MED-LAP 200 ml	5/caja
100400	Bolsa de Extracción MED-LAP 400 ml	5/caja
100800	Bolsa de Extracción MED-LAP 800 ml	5/caja

Bolsa de Extracción MED-LAP con mango

Dirigible, desmontable y con sistema de autoapertura

La bolsa de extracción con asa es un producto sofisticado que los profesionales sanitarios pueden manejar fácilmente durante los procedimientos laparoscópicos.

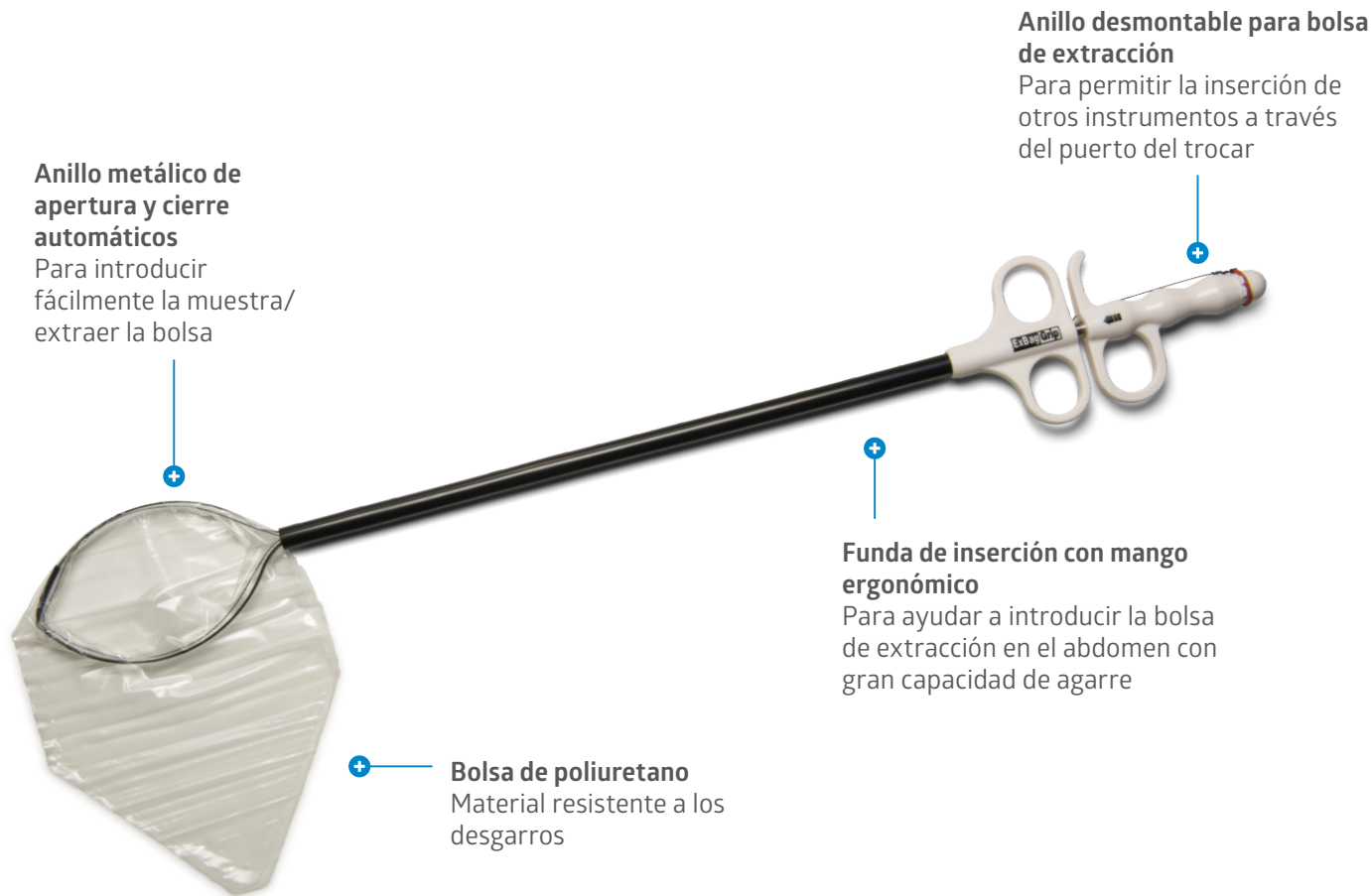

Ventajas y características:

- Adecuado para su uso en combinación con un trocar estándar de 10 o 12 mm



Referencia	Descripción	Cantidad
0110310	Bolsa de Extracción MED-LAP con asa 300 ml	5/caja
0110320	Bolsa de Extracción MED-LAP con asa 550 ml	5/caja
0110380	Bolsa de Extracción MED-LAP con asa 800 ml	5/caja



Para obtener más información sobre nuestros productos, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es





Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602

www.medline.eu/es
Pedidos: es-pedidos@medline.com
Atención al Cliente: es-atencioncliente@medline.com


FOLLOW US  

El set ONGxxx es un producto sanitario estéril de clase IIa.  0459 (G-MED) 



Rocamed France
ZI de Signes, Allée de Stockholm
83870 Signes, Francia

ORISxxx son productos sanitarios estériles de clase IIa.  2460 (DNV Product Assurance AS) 



OBELIS S.A.
Bd. Général Wabris, 53
1030 Bruselas, Bélgica

Las agujas de Veress son productos sanitarios estériles de clase IIa.  1639 (SGS Belgium NV) 

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburgo, Alemania

La solución antivaho es un producto sanitario estéril de clase IIa.  2797 (BSI, Países Bajos) 

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP La Haya, Países Bajos

OR12xxx y ORC45 son productos sanitarios estériles de clase IIa.  0197 (TUV Rheinland) 

Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstraße 1
47877 Willich, Alemania

Estos productos están destinados al uso por parte de profesionales sanitarios. Antes del uso, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2023 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1048_ES 09/2023