

A close-up photograph of a laparoscopic surgical procedure. A surgeon's hand, wearing a white glove, is holding a laparoscopic grasper. The grasper is positioned near a patient's abdomen, which has several small incisions with laparoscopic ports. The surgical field is covered with blue sterile drapes. In the background, a metal surgical tray is visible.


**Une coelioscopie
en toute
sécurité et sans
interruption**

Les essentiels de la coelioscopie

En tant que fournisseur majeur de produits pour le bloc opératoire, la coelioscopie fait partie intégrante de l'expertise de Medline. La gamme de produits de coelioscopie vous permet d'effectuer des interventions mini-invasives avec plus de flexibilité. Il s'agit d'une solution complète simplifiant la continuité au bloc opératoire et en assurant une intervention en toute sécurité.

Set d'aspiration-irrigation

Le système d'aspiration-irrigation permet d'aspirer ou d'irriguer efficacement et en toute sécurité le sang, les fluides et les fumées lors des interventions de celioscopie. Il garantit une sécurité lors de l'intervention chirurgicale.

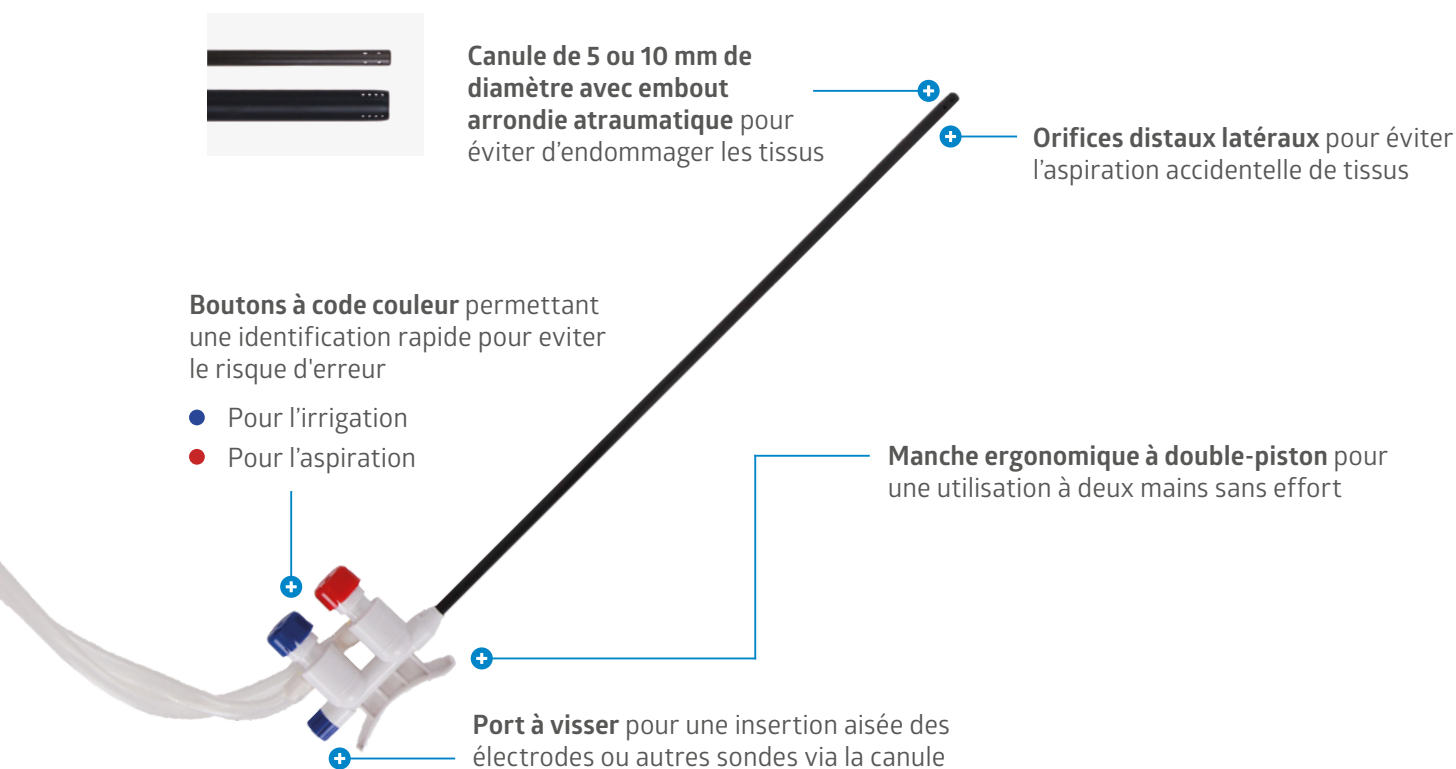

Caractéristiques :

- Set d'aspiration-irrigation avec canule de 33 cm ou 45 cm pour les interventions bariatriques et robotisées
- Canule simple de 45 cm disponible
- Simple ou double percuteur pour raccorder 1 ou 2 poches d'irrigation
- Tubulure à faible mémoire de forme facile à séparer
- Sans DEHP



*Canule de 5 mm uniquement

Canule en **polycarbonate non conductrice** ;* compatible avec les procédures d'électrochirurgie

Aiguille de Veress

L'aiguille d'insufflation est équipée d'un stylet émoussé à ressort rétractable. Il a été conçu pour permettre une création simple et en toute sécurité d'un pneumopéritoine lors des interventions de coelioscopie.

Le mécanisme de sécurité à ressort émet un « clic » sonore et s'enclenche lorsque le péritoine est atteint pour l'insufflation

Embout biseauté pour une pénétration de la paroi abdominale en toute sécurité

Stylet émoussé protégeant l'embout de l'aiguille une fois celle-ci dans la cavité

Prise en main assurant une insertion contrôlée et un confort d'utilisation

Valve permettant un contrôle du débit d'insufflation en toute sécurité



Caractéristiques :

- Deux options pour les longueurs 120 mm et 150 mm
- Raccord Luer-Lock standard pour raccorder des tubulures d'insufflation
- Diamètre standard 14 G

Solution anti-buée

La solution anti-buée empêche la formation de buée, fournissant ainsi une vue dégagée pendant les interventions de coelioscopie.



Volume de 6 ml



Éponge radio-opaque et adhésive, facile à positionner dans un champ stérile



Caractéristiques :

- Flacon avec capuchon à vis rempli de solution à l'alcool douce
- Éponge applicatrice non abrasive et non pelucheuse
- Kit prêt à l'emploi : flacon et éponge

Informations de commande

L'offre de Medline vous propose des solutions de qualité sur les essentiels de la coelioscopie.

Aiguille de Veress

Un pneumopéritoine en toute sécurité

Référence	Description	Longueur	Gauge	Œillets d'insufflation	Conditionnement
ORVN12	Aiguille d'insufflation de Veress	120 mm	14	2	12 unités/carton
ORVN15	Aiguille d'insufflation de Veress	150 mm	14	2	12 unités/carton

Set d'aspiration-irrigation

Maintenir un site opératoire hygiénique et exempt de liquides et de fumée

Référence	Description	Canule d'aspiration-irrigation			Conditionnement
		Diamètre extérieur	Longueur	Perforations latérales	
OR1200S	Set d'aspiration-irrigation avec percuteur simple	5 mm	33 cm	8	12 unités/carton
OR1201D	Set d'aspiration-irrigation avec double percuteur	5 mm	33 cm	8	12 unités/carton
OR1245S	Set d'aspiration-irrigation avec percuteur simple	5 mm	45 cm	8	12 unités/carton
ORC45	Canule d'aspiration-irrigation	5 mm	45 cm	8	10 unités/carton
ONG299601CST12	Set d'aspiration-irrigation avec percuteur simple	10 mm	33 cm	8	5 unités/carton

Solution anti-buée

Éviter la formation de buée sur les optiques de coelioscopie

Référence	Volume	Conditionnement
NONFB100	6 ml	20 unités/carton



Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com



Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com




FOLLOW US 




Le set ONGxxx est un dispositif médical stérile de classe IIa destiné à être utilisé par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions sur l'étiquetage correspondant. Les ORxxxx sont des dispositifs médicaux stériles de classe IIa destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions sur l'étiquetage correspondant. Les aiguilles de veress sont des équipements médicaux de classe IIa destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions sur l'étiquetage correspondant. La solution anti-buée est un dispositif médical stérile de classe IIa destinés à être utilisé par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions sur l'étiquetage correspondant.




Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2021 Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1048_FR 08/2021

 0459 (G-MED)  Rocamed France
ZI de Signes, Allée de Stockolm
83870 Signes, France

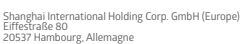 0197 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH)  **EC REP**  Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1
47877 Willich, Allemagne

 1639 (SGS Belgique SA)  **EC REP**  Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Allemagne

 2797 (BSI, The Netherlands)  **EC REP**  Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands