



**Per procedure
laparoscopiche
in sicurezza
e senza
interruzioni**




Suite di prodotti per Laparoscopia

In qualità di grande fornitore di prodotti correlati alla sala operatoria, la laparoscopia è una parte intrinseca dell'esperienza di Medline. La suite di prodotti laparoscopici di base consente di eseguire procedure minimamente invasive con flessibilità ed efficienza. È una soluzione completa che facilita il raggiungimento della continuità in sala operatoria concentrandosi sulla chirurgia sicura.

Irrigazione e aspirazione laparoscopica

Il sistema di aspirazione-irrigazione consente un'aspirazione o irrigazione facile ed efficiente, al fine di mantenere la cavità addominale libera da sangue, liquidi e fumo durante le procedure laparoscopiche. Pertanto, garantisce un intervento chirurgico sicuro.

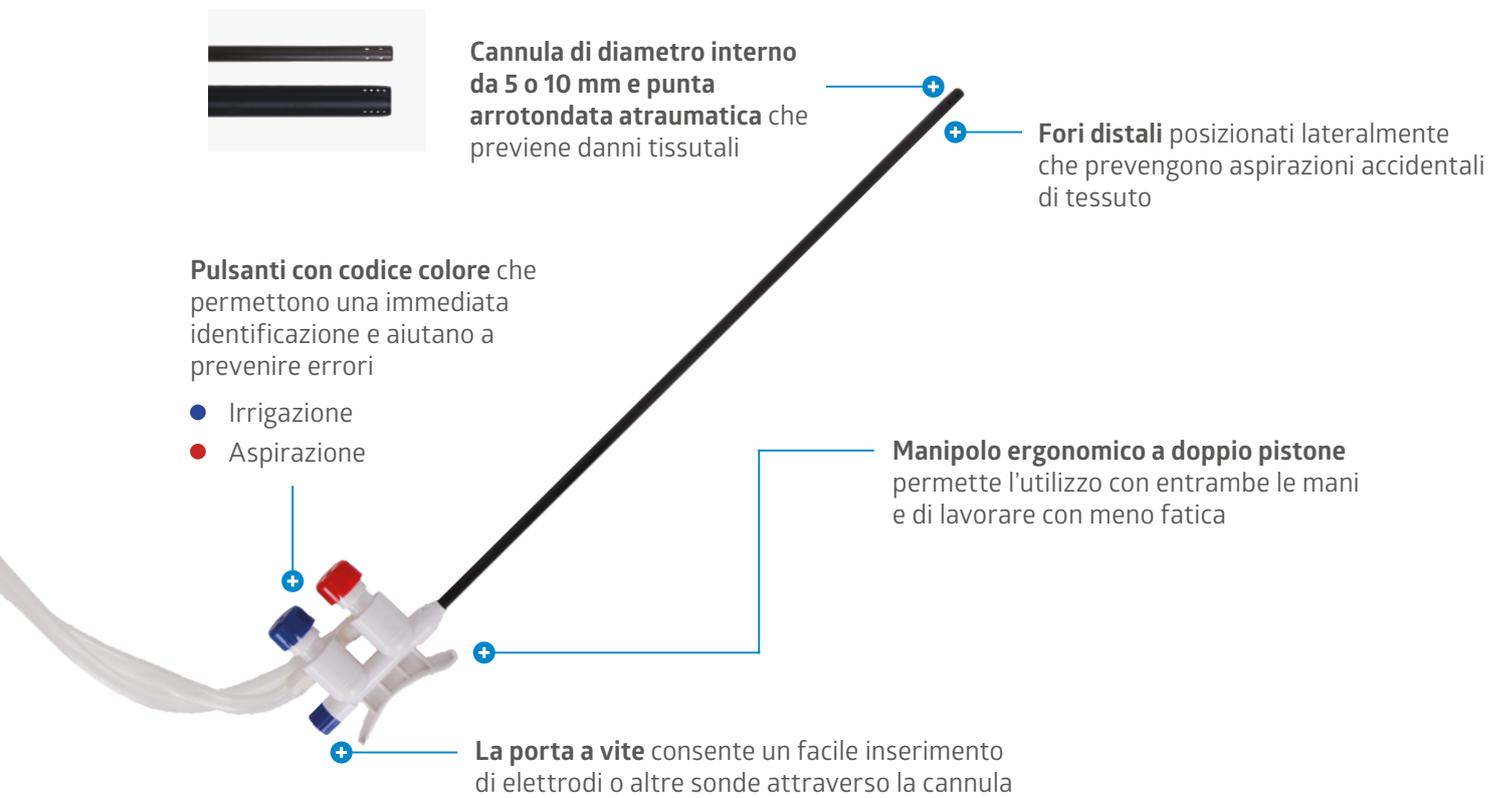

Caratteristiche:

- set cannula irrigazione-aspirazione da 33 cm, o 45 cm per chirurgia bariatrica e robotica
- Disponibile cannula singola da 45 cm
- Puntale singolo o doppio per collegamenti a 1 o 2 sacche di irrigazione
- Tubi a bassa memoria con separazione facilitata
- DEHP-free



*Solo cannula da 5-mm

Cannula in **policarbonato non conduttivo**;* compatibile con procedure elettrochirurgiche

Ago di Veress

L'ago per insufflazione è dotato di uno stiletto smussato retrattile caricato a molla ed è progettato per la costituzione semplice e sicura del pneumoperitoneo nelle procedure laparoscopiche.

Il meccanismo di sicurezza a molla fornisce un chiaro segnale, tattile e udibile con un 'click' quando il pneumoperitoneo è formato

Punta smussata affilata per una penetrazione sicura della parete addominale

Stiletto smussato che protegge la punta dell'ago una volta entrato nella cavità

Preso comoda per un ingresso controllato e una facile manipolazione

Il rubinetto consente il controllo sicuro del flusso di insufflazione



Caratteristiche

- Due possibili misure 120 mm e 150 mm.
- Connessione luer-lock standard per collegare il tubo di insufflazione
- Diametro standard 14-G

Soluzione anti appannamento

La soluzione anti appannamento impedisce alla lente della telecamera laparoscopica di appannarsi, fornendo quindi una visione chiara e limpida durante la chirurgia.



Volume di 6 ml sufficiente per l'intera durata della procedura

Spugna radiopaca e adesiva, per un comodo posizionamento sul campo operatorio



Caratteristiche:

- Bocchetta con tappo a vite con soluzione alcolica delicata
- Applicatore in spugna non abrasivo e senza linting
- Kit pronto all'uso: bocchetta e spugna

Informazioni d'ordine

L'offerta Medline di prodotti per laparoscopia fornisce soluzioni di elevata rapporto qualità prezzo.

Ago di Veress

Per la formazione in sicurezza del pneumoperitoneo

Codice prodotto	Descrizione	Lunghezza	Gauge	Occhielli di insufflazione	Confezione
ORVN12	Ago di Verres per insufflazione	120 mm	14	2	12/scatola
ORVN15	Ago di Verres per insufflazione	150 mm	14	2	12/scatola

Irrigazione e aspirazione laparoscopica

Per mantenere il campo di lavoro pulito e libero da liquidi e fumo

Codice prodotto	Descrizione	Cannula irrigazione aspirazione			Confezione
		Diametro esterno	Lunghezza	Laterale fori	
OR1200S	Set aspirazione-irrigazione con puntale singolo	5 mm	33 cm	8	12/scatola
OR1201D	Set aspirazione-irrigazione con puntale doppio	5 mm	33 cm	8	12/scatola
OR1245S	Set aspirazione-irrigazione con puntale singolo	5 mm	45 cm	8	12/scatola
ORC45	Cannula irrigazione aspirazione	5 mm	45 cm	8	10/scatola
ONG299601CST12	Set aspirazione-irrigazione con puntale singolo	10 mm	33 cm	8	5/scatola

Soluzione anti appannamento

Per prevenire l'appannamento delle lenti di strumenti laparoscopici

Codice prodotto	Volume	Confezione
NONFB100	6 ml	20/scatola



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

I set ONGxxx sono dispositivi medici sterili di Classe IIa destinati ad essere utilizzati da personale sanitario.

Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

ORxxx sono dispositivi medici sterili di classe IIa destinati ad essere utilizzati da personale sanitario.

Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Gli aghi di Verress sono dispositivi medici sterili di classe IIa destinati ad essere utilizzati dagli operatori sanitari.

Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

La soluzione anti appannamento è un dispositivo medico di classe IIa sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2021 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1048_IT 08/2021

CE 0459 (G-MED)

 Rocamed France
Zi de Signes, Allée de Stockolm
83870 Signes, France

CE 0197 (TUV Rheinland LGA Products GmbH)

 EC REP

 Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1
47877 Willich, Germany

CE 1639 SGS Belgium NV

 EC REP

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80
20537 Hamburg, Germany

CE 2797 (BSI, The Netherlands)

 EC REP

 Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands