

The background of the page is a photograph of a laparoscopic surgical procedure. A surgeon's hand, wearing a white glove, is visible on the left, holding a laparoscopic instrument. The instrument is inserted into a patient's abdomen through a port. Other ports and instruments are visible in the background. The patient is lying on a blue surgical drape.


**Voor veilige en
ononderbroken
laparoscopie**

Essential Laparoscopie Assortiment

Als een grote leverancier van OK-gerelateerde producten is laparoscopie een inherent onderdeel van de expertise van Medline. Het assortiment fundamentele laparoscopische producten stelt u in staat om minimaal invasieve ingrepen flexibel en consistent uit te voeren. Het is een allesomvattende oplossing waarmee continuïteit in de operatiekamer behaald wordt, terwijl de focus ligt op veilige chirurgie.

Trompetventiel

Het aspiratie- / irrigatiesysteem maakt eenvoudige en efficiënte aspiratie of irrigatie mogelijk om de buikholte vrij te houden van bloed, vloeistoffen en rook tijdens laparoscopische ingrepen. Het zorgt daardoor voor veilige chirurgische ingrepen.

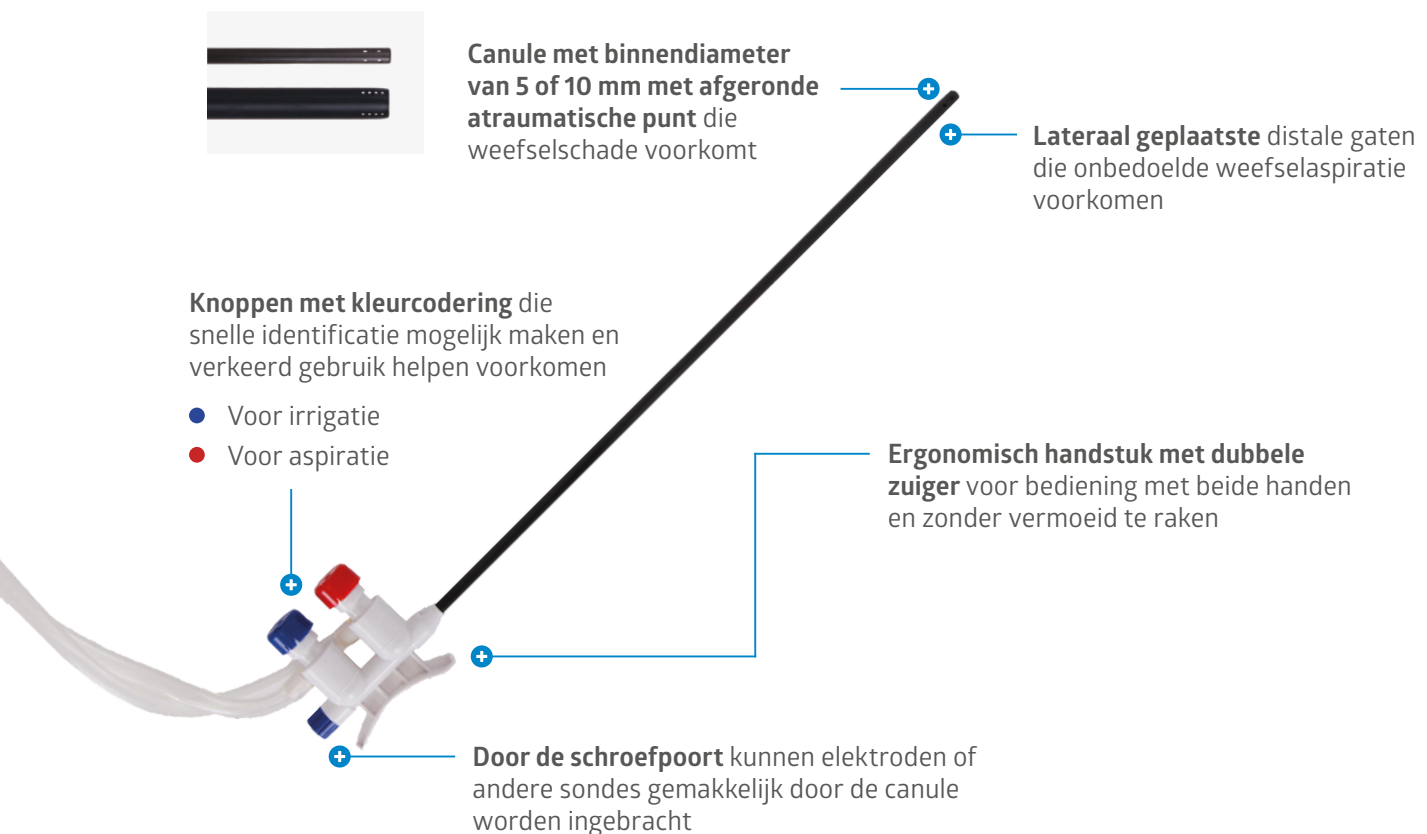

Eigenschappen:

- Canule aspiratie- / irrigatieset van 33 cm, of 45 cm voor bariatrische en robotchirurgie
- 45 cm enkele canule verkrijgbaar
- Met enkele of dubbele spike om 1 tot 2 irrigatiezakken aan te sluiten
- Slangen met laag koppel en gemakkelijk te scheiden
- DEHP-vrij



*alleen 5 mm canule

Canule gemaakt van **niet-geleidend polycarbonaat**;^{*} te gebruiken bij elektrochirurgische ingrepen

Veress Naald

De insufflatienaald heeft een terugtrekkende, veerbelaste stompe stilet en is ontworpen voor het eenvoudig en veilig creëren van pneumoperitoneum voor laparoscopische procedures.

Het veerbeveiligingsmechanisme geeft een duidelijk, hoorbaar en voelbaar 'klik'-signaal wanneer het buikvlies is bereikt

Scherpe, afgeschuinde punt voor veilige penetratie van de buikwand

Een stompe stilet beschermt de naaldpunt zodra de holte is binnengegaan

Comfortabele grip voor gecontroleerde toegang en gemakkelijke manipulatie

Afsluitkraan maakt veilige controle van de insufflatiestroom mogelijk



Eigenschappen:

- Twee verschillende lengtes: 120 mm en 150 mm
- Standaard luer lock aansluiting voor verbinding met de insufflatieslang
- Standaard 14G diameter

Anticondens oplossing

De anticondens vloeistof voorkomt dat laparoscopie lenzen beslaan, wat zorgt voor onbelemmerd zicht tijdens laparoscopische ingrepen.



6 ml volume dat de hele procedure meegaat



Zelfklevende spons, röntgendetecteerbaar, om handig op het operatieveld te plaatsen



Eigenschappen:

- Fles met schroefdop met milde alcoholoplossing
- Niet-schurende, pluisvrije applicatorspons
- Gebruiksklare set: fles en spons

Bestelgegevens

Het assortiment van Medline biedt u hoogwaardige oplossingen en de beste laparoscopische benodigdheden.

Veress Naald

Om veilig het pneumoperitoneum te creëren

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	Diameter (G)	Insufflatie-ogen	Verpakking
ORVN12	Veress insufflatienaald	120 mm	14	2	12/doos
ORVN15	Veress insufflatienaald	150 mm	14	2	12/doos

Trompetventiel

Om het operatieveld schoon en vrij van vloeistof en rook te houden

Artikelnummer	Omschrijving	Aspiratie- / irrigatie canule			Verpakking
		Buiten-diameter	Lengte	Laterale perforaties	
OR1200S	Aspiratie- / irrigatie set met enkele spike	5 mm	33 cm	8	12/doos
OR1201D	Aspiratie- / irrigatie set met dubbele spike	5 mm	33 cm	8	12/doos
OR1245S	Aspiratie- / irrigatie set met enkele spike	5 mm	45 cm	8	12/doos
ORC45	Aspiratie- / irrigatie canule	5 mm	45 cm	8	10/doos
ONG299601CST12	Aspiratie- / irrigatie set met enkele spike	10 mm	33 cm	8	5/doos

Anticondens oplossing

Voor het voorkomen van beslagen laparoscopie lenzen

Artikelnummer	Volume	Verpakking
NONFB100	6 ml	20/doos



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

ONGxxx set is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. ORxxxx zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. De Veress naalden zijn een klasse IIa steriele medisch hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. De anti-condens oplossing is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2021 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1048_NL 08/2021


CE 0459 (G-MED)  Rocamed France
ZI de Signes, Allée de Stockholm
83870 Signes, France

CE 0197 (TUV Rheinland LGA Products GmbH) 

CE 1639 (SGS Belgium NV) 

CE 2797 (BSI, The Netherlands) 

 Luxus Lebenswelt GmbH
Köschstr. 1
47877 Willich, Germany

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Erffestraße 80
20537 Hamburg, Duitsland

 Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands