



**Voor veilige en  
ononderbroken  
laparoscopie**



# Essential Laparoscopie Assortiment

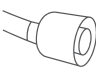
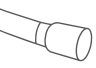
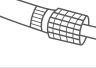
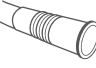
Als een grote leverancier van OK-gerelateerde producten is laparoscopie een belangrijk deel van Medline's expertise. Met ons assortiment fundamentele laparoscopische producten kunt u minimaal invasieve procedures uitvoeren, met flexibiliteit en consistentie. Het is een allesomvattende oplossing waarmee continuïteit in de operatiekamer behaald wordt, terwijl de focus ligt op veilige chirurgie.


## MED-LAP ORIS Insufflatieslangset

### Voor de juiste CO<sub>2</sub> insufflatie

De ORIS insufflatie slangenset compleeteert Medline's laparoscopische portfolio. Door zuivere CO<sub>2</sub> te filteren en te insuffleren, kunnen klinici effectief een pneumoperitoneum tot stand brengen vóór en tijdens laparoscopische procedures.

Medline biedt een reeks artikelen die volledig compatibel zijn voor gebruik in combinatie met verschillende insufflators.

Afbeelding	ORIS insufflatieslangset	Compatible series
	<b>ORISISO</b> met ISO 15M/22F connector	Karl Storz Richard Wolf Stryker ConMed
	<b>ORIS15</b> met 15mm male connector	Karl Storz Richard Wolf
	<b>ORISLL</b> met Luer-lock connector	Olympus
	<b>ORISPUSH</b> met flexibele female connector	Stryker

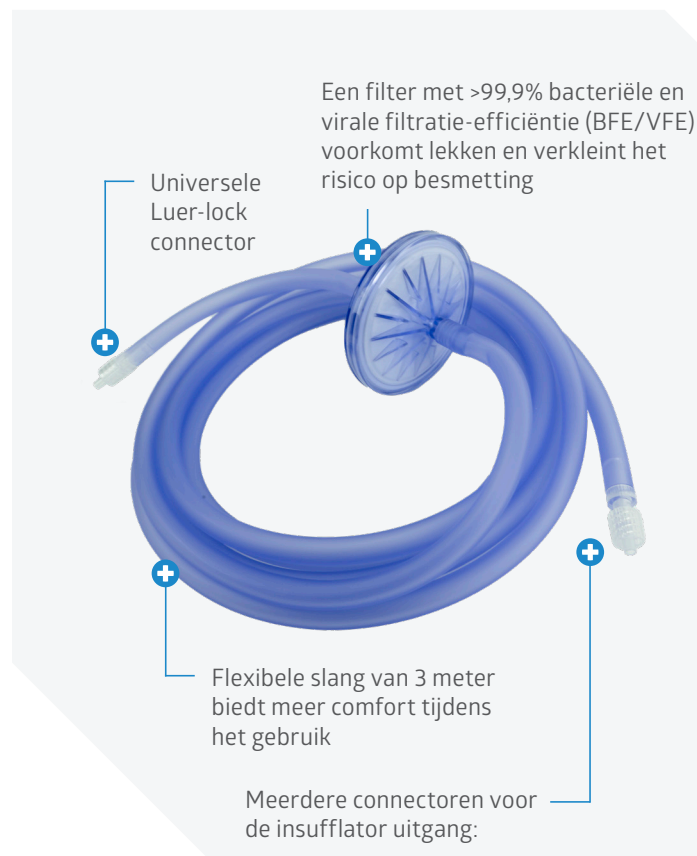

**ORISLL**  
Luer-lock connector



**ORISPUSH**  
Female connector



**ORISO**  
ISO 15 male/22 female connector



#### Voordelen en eigenschappen:

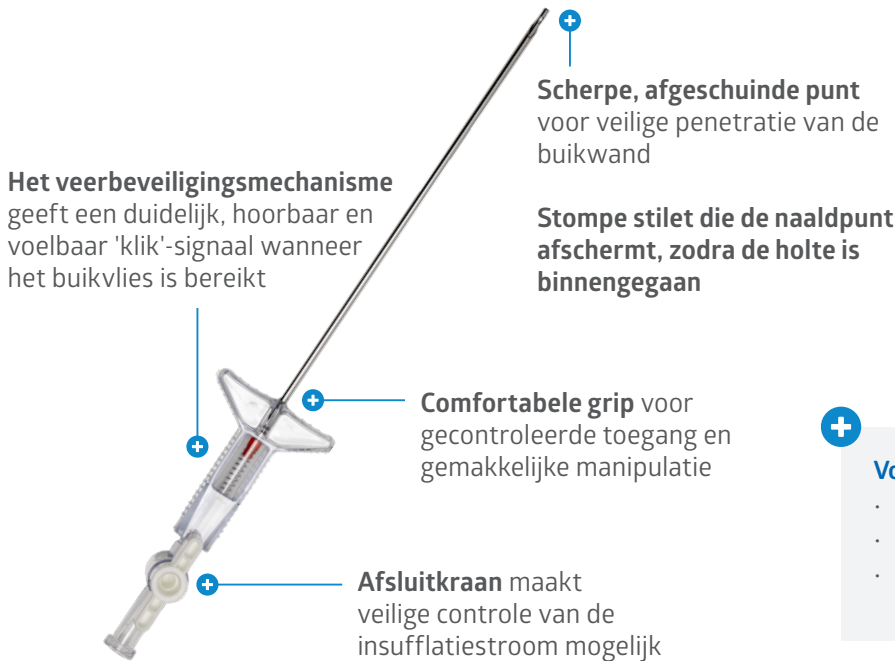
- Bieden flexibele slangen en een zeer veilig filter
- Filters met 99,9% BFE en VFE
- Volledig compatible assortiment

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	Verpakking
ORISO	OK insufflatie set met ISO 15 M/22 F connector	3 m	25 st/doos
ORISS15	OK Insufflatieset met 15mm connector	3 m	25 st/doos
ORISLL	OK insufflatie set met Luer-lock connector	3 m	25 st/doos
ORISPUSH	OK insufflatie set met female connector	3 m	25 st/doos

# MED-LAP Veress Naald

## Om veilig het pneumoperitoneum te creëren

De insufflatie naald is uitgerust met een intrekkelijke, veerbelaste stompe stilet en is ontworpen voor het eenvoudig en veilig tot stand brengen van pneumoperitoneum tijdens laparoscopische procedures.



### Voordelen en eigenschappen:

- Niet-schurende, pluisvrije applicatorspons
- Gebruiksklare set: fles en spons
- Fles met schroefdop met milde alcoholoplossing

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	Diameter (G)	Insufflatie-ogen	Verpakking
ORVN12	Veress insufflatienaald	120 mm	14	2	12 st/doos
ORVN15	Veress insufflatienaald	150 mm	14	2	12 st/doos

# MED-LAP Anticondens oplossing

## Voor het voorkomen van beslagen laparoscopische lenzen

De Anti-Fog Solution voorkomt dat laparoscopische lenzen beslaan, waardoor het zicht tijdens laparoscopische procedures onbelemmerd blijft.



### Voordelen en eigenschappen:

- Niet-schurende, pluisvrije applicatorspons
- Gebruiksklare set: fles en spons
- Fles met schroefdop met milde alcoholoplossing

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
NONFB100	6 ml	20 st/doos



# MED-LAP Aspiratie-irrigatie set

Om het operatieveld schoon en vrij van vloeistof en rook te houden

Dit zuig- en irrigatiesysteem maakt eenvoudige en efficiënte aspiratie of irrigatie mogelijk, om de buikholte vrij te houden van bloed, vloeistoffen en rook tijdens laparoscopische procedures. Het zorgt daardoor voor veilige chirurgische ingrepen.



**5- of 10-mm ID canule met afgeronde, atraumatische tip** die weefselschade voorkomt

**Lateraal geplaatste distale gaten** die onbedoelde weefselaspiratie voorkomen

Canule gemaakt van **niet-geleidend polycarbonaat**; \* te gebruiken bij elektrochirurgische ingrepen

**Knoppen met kleurcodering** die snelle identificatie mogelijk maken en verkeerd gebruik helpen voorkomen

- Voor irrigatie
- Voor afzuiging

**Ergonomisch handstuk met dubbele zuiger** voor bediening met beide handen en zonder vermoeid te raken

**Door de schroefpoort** kunnen elektroden of andere sondes gemakkelijk door de canule worden ingebracht

\*alleen 5 mm canule

**Voordelen en eigenschappen:**

- DEHP-vrij
- Slangen met laag koppel en gemakkelijk te scheiden
- Canule aspiratie- / irrigatieset van 33 cm, of 45 cm voor bariatrische en robotchirurgie
- 45 cm enkele canule verkrijgbaar
- Met enkele of dubbele spike om 1 tot 2 irrigatiezakken aan te sluiten

Artikelnummer	Omschrijving	Aspiratie- / irrigatie canule			Verpakking
		Buitendiameter	Lengte	Laterale perforaties	
OR1200S	Afzuigings- / irrigatie set met enkele spike	5 mm	33 cm	8	12/ds
OR1201D	Afzuigings- / irrigatie set met dubbele spike	5 mm	33 cm	8	12/ds
OR1245S	Afzuigings- / irrigatie set met enkele spike	5 mm	45 cm	8	12/ds
ORC45	Aspiratie- / irrigatie canule	5 mm	45 cm	8	10/ds
ONG299601CST12	Afzuigings- / irrigatie set met enkele spike	10 mm	33 cm	8	5/ds



**Medline International B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900

[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[netherlands@medline.com](mailto:netherlands@medline.com)

**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900

[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)



**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
België  
Tel: +32 2 808 74 93  
[www.medline.eu/be](http://www.medline.eu/be)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

ONGXXX is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel.  0459 (G-MED)  Rocamed France  
ZI de Signes, Allée de Stockholm  
83870 Signes, France

ORISxxx zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.  2460 (DNV Product Assurance AS)  OBELIS S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussel, België

Veress naalden zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.  1639 (SGS Belgium NV)  Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffelstraße 90  
20537 Hamburg, Duitsland

De anticondens oplossing is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel.  2797 (BSI, Nederland)  Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP Den Haag, Nederland

OR12xxx en ORC45 zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.  0197 (TÜV Rheinland)  Luxus Lebenswelt GmbH  
Kochstraße 1  
47877 Willich, Duitsland

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2023 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1048\_NL 03/2023