

A close-up photograph of a laparoscopic surgical procedure. A surgeon's hand, wearing a white latex glove, is shown manipulating a laparoscopic instrument. The patient's abdomen is visible, with several ports (trocars) inserted. The surgical field is illuminated, and the background is a sterile blue drape.


**Para
laparoscopias
seguras e sem
interrupções**

Conjunto Essencial para Laparoscopia

Como grande fornecedora de produtos relacionados com a sala de operações, a laparoscopia é uma parte inerente da experiência da Medline. O conjunto de produtos laparoscópicos fundamentais permite realizar procedimentos minimamente invasivos com flexibilidade e consistência. É uma solução abrangente que facilita a realização de continuidade na sala de operações enquanto se concentra na segurança da cirurgia.

Sistema de Sucção e Irrigação / Válvula Trompete

O sistema de sucção-irrigação permite a sucção ou a irrigação fácil e eficiente, a fim de manter a cavidade abdominal sem sangue, líquidos e fumo durante os procedimentos laparoscópicos. Garante, portanto uma intervenção cirúrgica segura.

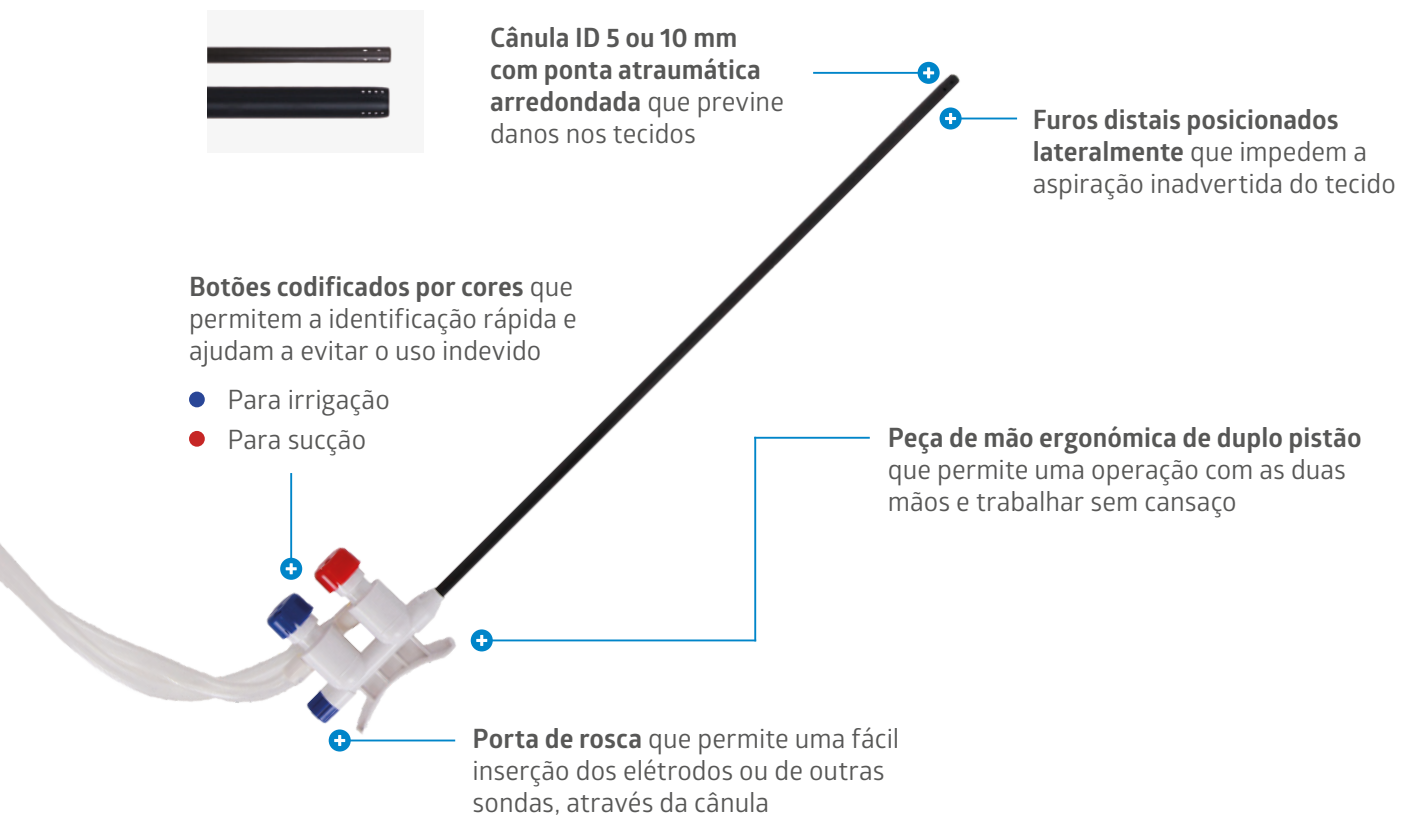

Funcionalidades:

- Conjunto de sucção-irrigação com cânula de 33 cm ou de 45 cm para cirurgia bariátrica e cirurgia robótica
- Cânula simples de 45 cm disponível
- Um ou dois espigões para ligar 1 ou 2 sacos de irrigação
- Tubagem de baixo torque com separação fácil
- Livre de DEHP



Cânula feita de **policarbonato não-condutor**;* compatível com procedimentos eletrocirúrgicos

*Apenas cânula de 5 mm

Agulha de Veress

A agulha de insuflação está equipada com um estilete rombo retráctil acionado com mola que foi concebido para o estabelecimento simples e seguro de pneumoperitoneu em procedimentos laparoscópicos.


O mecanismo de segurança com mola dá um sinal em forma de «clique» claro, audível e tátil quando o peritoneu é atingido

Ponta chanfrada afiada para uma penetração segura na parede abdominal

Estilete rombo que protege a ponta da agulha, assim que entra na cavidade

Agarre confortável para uma entrada controlada e fácil manipulação

Torneira que permite o controlo seguro do fluxo de insuflação

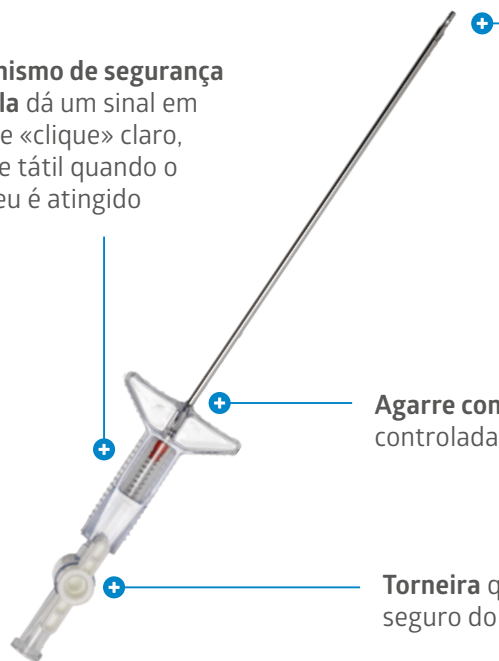

Funcionalidades:

- Duas opções de comprimento de trabalho: 120 mm e 150 mm
- Conector luer lock standard para ligação ao tubo de insuflação
- Diâmetro 14-G standard

Solução anti-embaciamento

As soluções anti-embaciamento impedem que as lentes laparoscópicas se embaciem, proporcionando assim uma visão desobstruída durante os procedimentos laparoscópicos.



6 ml de volume de que dura um procedimento completo



Espanja radiopaca e adesiva, para colocação conveniente no campo cirúrgico



Funcionalidades:

- Frasco com tampa de rosca com uma solução alcoólica ligeira
- Esponja de aplicação não abrasiva e sem desprendimento de fios
- Kit pronto a usar: frasco e esponja

Informações para encomenda

A oferta da Medline contempla soluções de alta qualidade e artigos essenciais com o melhor valor para laparoscopia.

Agulha de Veress

Para o estabelecimento seguro do pneumoperitoneu

Referência	Descrição	Comprimento	Calibre	Olhais de insuflação	Embalagem
ORVN12	Agulha de Veress para insuflação	120 mm	14	2	12/caixa
ORVN15	Agulha de Veress para insuflação	150 mm	14	2	12/caixa

Válvula Trompette

Para manter o campo de trabalho limpo e sem líquidos e fumos

Referência	Descrição	Cânula de sucção-irrigação			Embalagem
		Diâmetro exterior	Comprimento	Orifícios laterais	
OR1200S	Conjunto de sucção-irrigação com cânula única	5 mm	33 cm	8	12/caixa
OR1201D	Conjunto de sucção-irrigação com cânula dupla	5 mm	33 cm	8	12/caixa
OR1245S	Conjunto de sucção-irrigação com cânula única	5 mm	45 cm	8	12/caixa
ORC45	Cânula de sucção-irrigação	5 mm	45 cm	8	10/caixa
ONG299601CST12	Conjunto de sucção-irrigação com cânula única	10 mm	33 cm	8	5/caixa

Solução anti-embaciamento

Para prevenir o embaciamento das lentes dos laparoscópios

Referência	Volume	Embalagem
NONFB100	6 ml	20/caixa



Medline International Portugal Unipessoal LDA

Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922

www.medline.eu/pt
pt-atenciacliente@medline.com

FOLLOW US

O conjunto ONGxxx é um dispositivo médico classe IIa estéril, destinado a ser utilizado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Os ORxxxx são dispositivos médicos classe IIa estéreis destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

As Agulhas de Veress são dispositivos médicos classe IIa estéreis destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo. A solução anti-embaciamento é um dispositivo médico classe IIa estéril, destinado a ser utilizado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer neste folheto.

© 2021 Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1048_PT 09/2021

0459 (G-MED) Rocamed France
ZI de Signes, Allée de Stockalm
83870 Signes, França

0197 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH) EC REP Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1
47877 Willich, Alemanha

1639 (SGS Belgium NV) EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Alemanha

2797 (BSI, The Netherlands) EC REP Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands