

MED-FLEX

Bolsas flexibles y recipientes reutilizables




**Una solución
intuitiva,
estándar
y segura**

Sistema de aspiración MED-FLEX

Medline ofrece una solución funcional, segura y fiable para la recogida de fluidos durante procedimientos quirúrgicos. MED-FLEX presenta bolsas de aspiración de 2 litros desechables y recipientes reutilizables. Hay dos tipos de bolsas de aspiración:

- Con filtro: permite un uso individual
- Sin filtro: permite la configuración en serie.

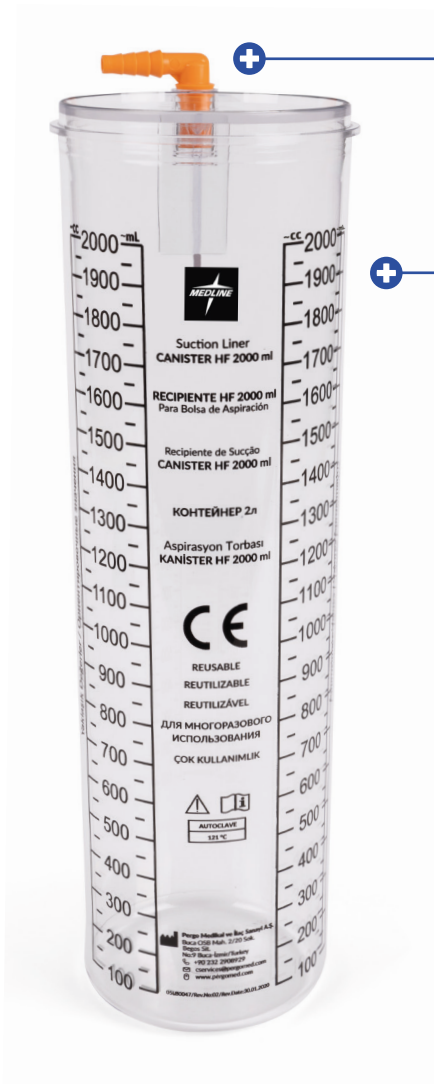

+

Fuente de vacío conectada al conector en L del recipiente reutilizable

+



Recipiente reutilizable de 2 litros, transparente y graduado, para una lectura sencilla de los fluidos recogidos



- La tapa encaja en el recipiente reutilizable
- Evita la pérdida de vacío

- Bolsa fabricada en polietileno de baja densidad
- Bolsa muy flexible para optimizar el espacio de almacenaje

Tapa de bolsa flexible con filtro (FSL200S)

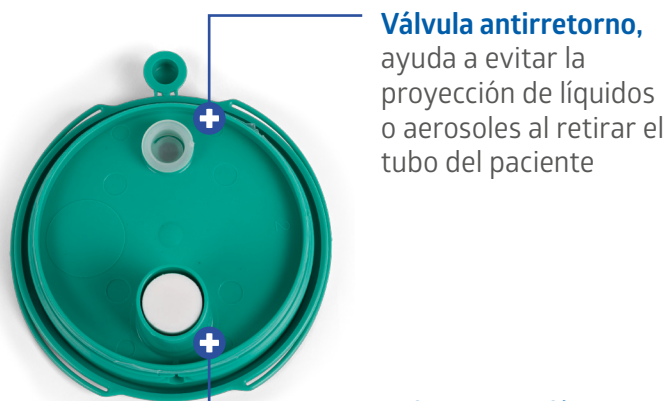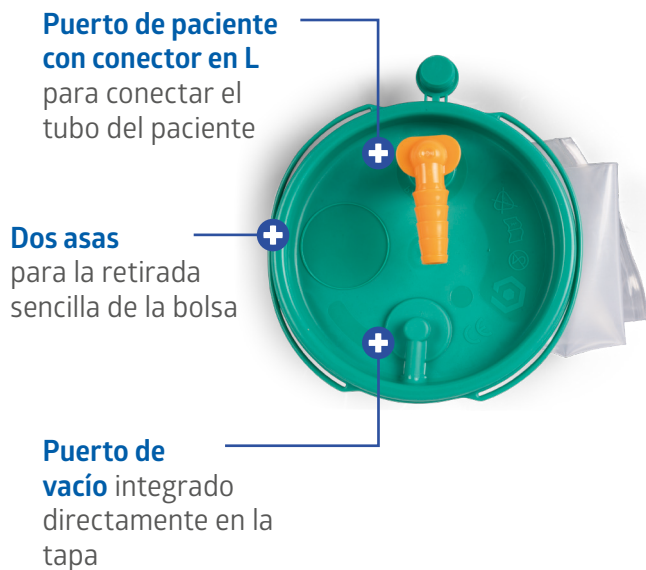

Tapa de bolsa flexible sin filtro (FSL200T)



Este sistema de aspiración intuitivo, estándar y seguro con una bolsa flexible es fácil de desplegar, colocar y retirar del recipiente reutilizable.



Bolsas de aspiración y recipientes MED-FLEX

Recipiente exterior MED-FLEX

Este recipiente reutilizable de 2 litros, transparente y graduado, está fabricado en policarbonato resistente. Los recipientes pueden montarse en la pared, en un riel o en un carrito.

Referencia	Descripción	Envasado
FSC2000	Recipiente exterior reutilizable de 2 L MED-FLEX	12/caja



FSC2000
Recipiente exterior reutilizable

Bolsas de aspiración MED-FLEX

Nuestras bolsas de aspiración flexibles de 2 litros para un solo uso se despliegan y se colocan fácilmente dentro del recipiente reutilizable correspondiente.

Referencia	Descripción	Envasado
FSL200S	Bolsa de aspiración de 2 L MED-FLEX con filtro	100/caja
FSL200T	Bolsa de aspiración de 2 L MED-FLEX sin filtro	100/caja



FSL200T
Bolsa de aspiración sin filtro



La bolsa de aspiración sin filtro permite la conexión de varias bolsas que transfieren automáticamente los fluidos de una bolsa a la siguiente.



FSL200S
Bolsa de aspiración con filtro

Equipos y accesorios

Accesorios de aspiración

El sistema de aspiración flexible está disponible con una amplia selección de accesorios de aspiración que permiten distintas configuraciones y facilitan los procedimientos de aspiración.

Referencia	Descripción	Envasado
Gestión del vacío		
FSCVLCOF	Conector de vacío en L MED-FLEX con válvula ON/OFF	50/caja
FSCVLC	Conector de vacío en L MED-FLEX	50/caja
FSCVTC	Conector de vacío en T MED-FLEX	50/caja
FSCVTCOF	Conector de vacío en T MED-FLEX con válvula ON/OFF	50/caja
Accesorio de aspiración		
FSLPC	Conector en L para el paciente MED-FLEX	50/caja



FSCVLCOF



FSCVLC



FSCVTC



FSLPC



FSCVTCOF



Accesorios para instalación MED-FLEX

El sistema de aspiración Med-Flex presenta una amplia variedad de accesorios que permiten distintos métodos de instalación (p. ej. montaje en pared, en un riel o en un carrito).

Referencia	Descripción	Invasado
FSCCLAMP	Abrazadera para riel MED-FLEX	50/caja
FSCWM	Montaje en pared MED-FLEX	20/caja
FSCADAPT	Adaptador MED-FLEX	50/caja



FSCWM



FSCCLAMP



FSCADAPT

Instalaciones móviles

El uso de carritos permite configuraciones avanzadas y personalizadas.

Referencia	Descripción	Invasado
DYNDSCC	Carrito metálico; altura ajustable entre 61 y 106 cm, puede contener hasta 4 recipientes	1/caja
ORBASE	Carrito; altura fija de 50 cm, puede contener hasta 2 recipientes	1/caja
ORTROL4C	Carrito con 5 patas y 2 frenos; altura fija de 80 cm, puede contener hasta 4 recipientes	2/caja
TUBVAC	Tubo de vacío reforzado anticolasos (rollo de 30 m)	1/caja



DYNDSCC



ORBASE



ORTROL4C



TUBVAC





Para obtener más información sobre nuestros productos, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es



Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,
Madrid
España
Tel.: +34 900 600 602

www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  

ORTROL4C es un producto sanitario no estéril de clase I destinados al uso por profesionales sanitarios.

TUBVAC es un producto sanitario no estéril de clase I destinados al uso por profesionales sanitarios.


Los productos MED-FLEX son productos sanitarios no estériles de clase I destinados al uso por profesionales sanitarios.

DYNDSCC y ORBASE son productos sanitarios no estériles de clase I destinados al uso por profesionales sanitarios.

Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones mostradas en el etiquetado correspondiente.


Todos los derechos reservados. Queda reservado el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2024 Medline es una marca registrada de Medline Industries, LP, Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1349_ES 02/2024.

 **Prosimed S.r.l.**
Via della Magliana, 295
00146 Roma, Italia

 **Medline International France SAS**
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia



 **Pergo Medikal ve Ilac San. A.Ş.**
Buca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. N° 9
Buca-İzmir, Turquía



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia

