

MED-FLEX

Bolsas flexibles y recipientes reutilizables



**Una solución
intuitiva,
estándar
y segura**

Sistema de aspiración MED-FLEX

Medline ofrece una solución funcional, segura y fiable para la recogida de fluidos durante procedimientos quirúrgicos. MED-FLEX presenta bolsas de aspiración de 2 litros desechables y recipientes reutilizables. Hay dos tipos de bolsas de aspiración:

- Con filtro: permite un uso individual
- Sin filtro: permite la configuración en serie.



+

Fuente de vacío conectada al conector en L del recipiente reutilizable

+


Recipiente reutilizable de 2 litros, transparente y graduado, para una lectura sencilla de los fluidos recogidos



- La tapa encaja en el recipiente reutilizable
- Evita la pérdida de vacío

- Bolsa fabricada en polietileno de baja densidad
- Bolsa muy flexible para optimizar el espacio de almacenaje

Tapa de bolsa flexible con filtro (FSL200S)

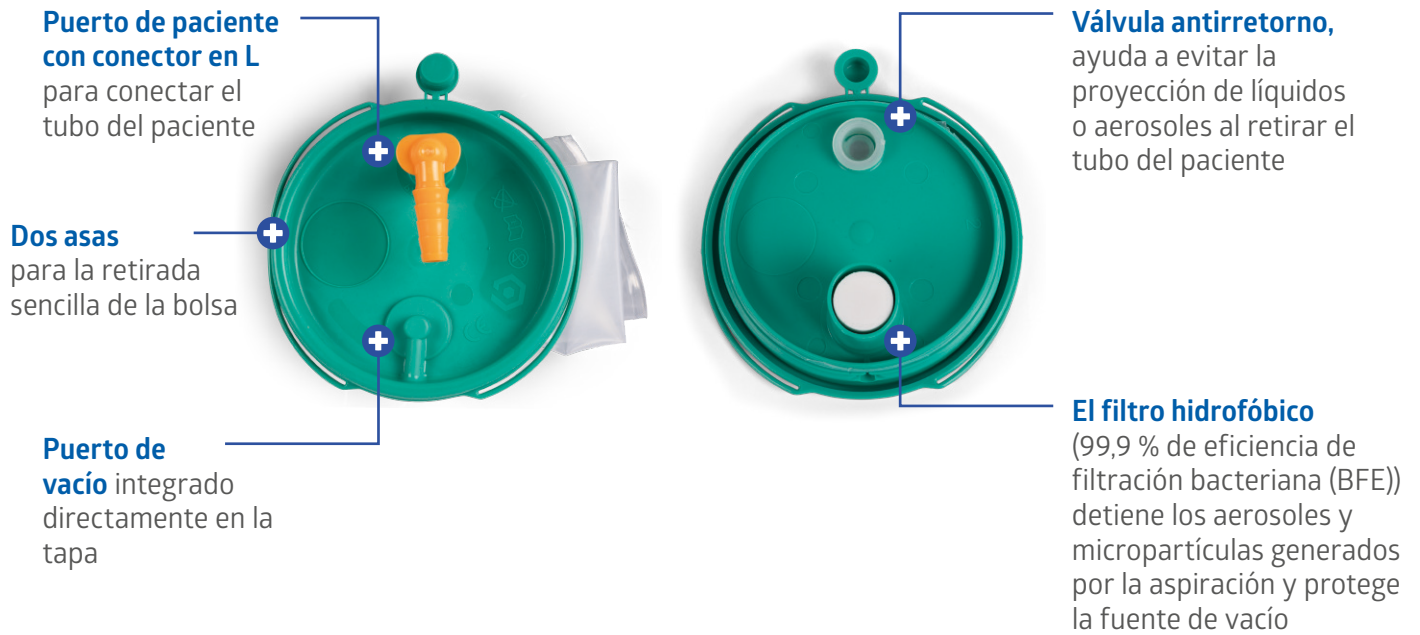

Tapa de bolsa flexible sin filtro (FSL200T)



Bolsas de aspiración y recipientes MED-FLEX

Recipiente exterior MED-FLEX

Este recipiente reutilizable de 2 litros, transparente y graduado, está fabricado en policarbonato resistente. Los recipientes pueden montarse en la pared, en un riel o en un carrito.

Referencia	Descripción	Envasado
FSC2000	Recipiente exterior reutilizable de 2 L MED-FLEX	12/caja



FSC2000
Recipiente exterior reutilizable

Bolsas de aspiración MED-FLEX

Nuestras bolsas de aspiración flexibles de 2 litros para un solo uso se despliegan y se colocan fácilmente dentro del recipiente reutilizable correspondiente.

Referencia	Descripción	Envasado
FSL200S	Bolsa de aspiración de 2 L MED-FLEX con filtro	100/caja
FSL200T	Bolsa de aspiración de 2 L MED-FLEX sin filtro	100/caja



FSL200T
Bolsa de aspiración sin filtro



La bolsa de aspiración sin filtro permite la conexión de varias bolsas que transfieren automáticamente los fluidos de una bolsa a la siguiente.



FSL200S
Bolsa de aspiración con filtro

Equipos y accesorios

Accesorios de aspiración

El sistema de aspiración flexible está disponible con una amplia selección de accesorios de aspiración que permiten distintas configuraciones y facilitan los procedimientos de aspiración.

Referencia	Descripción	Envasado
Gestión del vacío		
FSCVLCOF	Conector de vacío en L MED-FLEX con válvula ON/OFF	50/caja
FSCVLC	Conector de vacío en L MED-FLEX	50/caja
FSCVTC	Conector de vacío en T MED-FLEX	50/caja
Accesorio de aspiración		
FSLPC	Conector en L para el paciente MED-FLEX	50/caja



FSCVLCOF




FSCVLC



FSCVTC



FSLPC

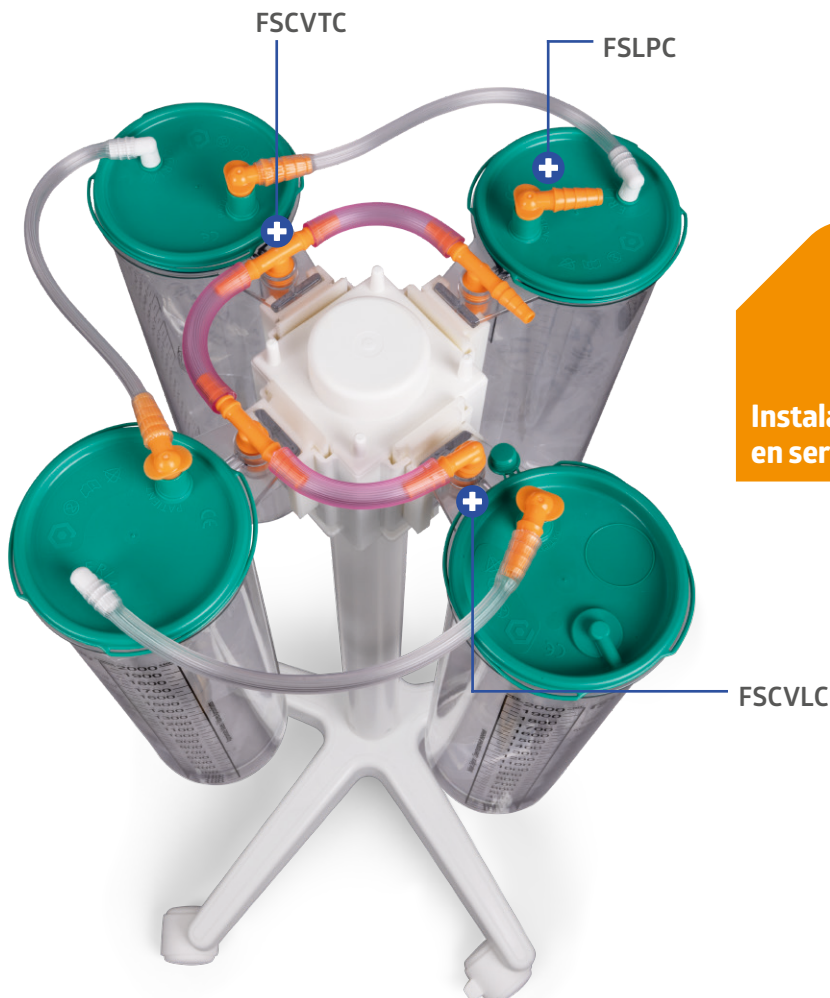

Instalación en serie

Accesorios para instalación MED-FLEX

El sistema de aspiración Med-Flex presenta una amplia variedad de accesorios que permiten distintos métodos de instalación (p. ej. montaje en pared, en un riel o en un carrito).

Referencia	Descripción	Invasado
FSCCLAMP	Abrazadera para riel MED-FLEX	50/caja
FSCWM	Montaje en pared MED-FLEX	20/caja
FSCADAPT	Adaptador MED-FLEX	50/caja



FSCWM



FSCCLAMP



FSCADAPT

Instalaciones móviles

El uso de carritos permite configuraciones avanzadas y personalizadas.

Referencia	Descripción	Invasado
DYNDSCC	Carrito metálico; altura ajustable entre 61 y 106 cm, puede contener hasta 4 recipientes	1/caja
ORBASE	Carrito; altura fija de 50 cm, puede contener hasta 2 recipientes	1/caja
ORTROL4C	Carrito con 5 patas y 2 frenos; altura fija de 80 cm, puede contener hasta 4 recipientes	2/caja
TUBVAC	Tubo de vacío reforzado anticolasos (rollo de 30 m)	1/caja



DYNDSCC



ORBASE



ORTROL4C



TUBVAC





Para obtener más información sobre nuestros productos, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es



Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,
Madrid
España
Tel.: +34 900 600 602

www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  

ORTROL4C es un producto sanitario no estéril de clase I.



Prosimed S.r.l.
Via della Magliana, 295
00146 Roma, Italia

TUBVAC es un producto sanitario no estéril de clase I.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia

Los productos MED-FLEX son productos sanitarios no estériles de clase I destinados al uso por profesionales sanitarios.



Pergo Medikal ve Ilac San. A.Ş.
Büca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGÖS Sit. N° 9
Büca-İzmir, Turquía



DYNDSCC y ORBASE son productos sanitarios no estériles de clase I destinados al uso por profesionales sanitarios.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia



Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones mostradas en el etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Queda reservado el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2023 Medline es una marca registrada de Medline Industries, LP, Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1349_ES 06/2023.