

MED-FLEX

Poches flexibles et bouchons réutilisables




**Une solution
standard
intuitive
et sécurisée**

Système d'aspiration MED-FLEX

Medline offre une solution fonctionnelle, sûre et fiable de recueil des fluides pendant les interventions chirurgicales. Le système MED-FLEX se compose de poches d'aspiration de 2 litres à usage unique et de bocal réutilisables.

Il existe deux types de poches :

- Avec filtre - Pour une installation unique
- Sans filtre - Pour une installation en série.

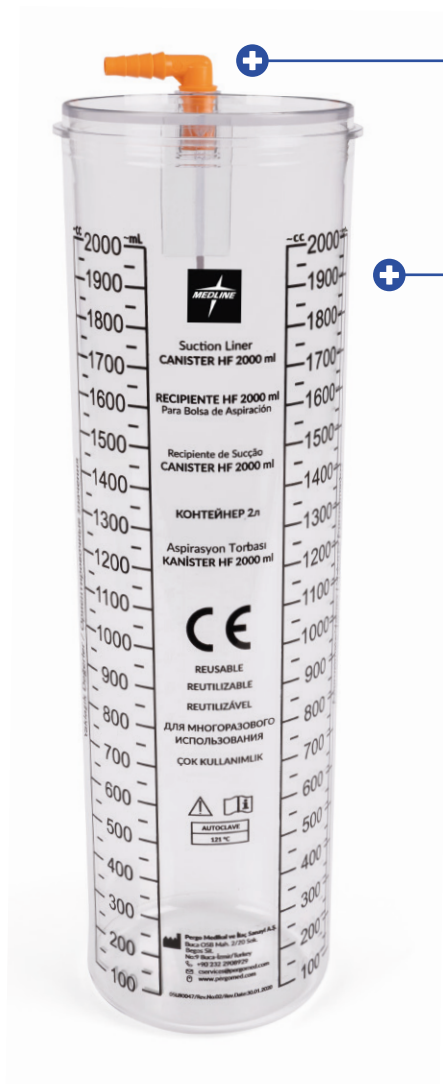

Source de vide raccordée au connecteur en L du bocal réutilisable


Bocal transparent, gradué et réutilisable de 2 litres pour une mesure facile des fluides recueillis




- Le couvercle se clipse dans le bocal réutilisable
- Empêche la perte de vide

- Poche en polyéthylène basse densité
- Poche très flexible pour optimiser la gestion des stocks

Couvercle de poche flexible avec filtre (FSL200S)

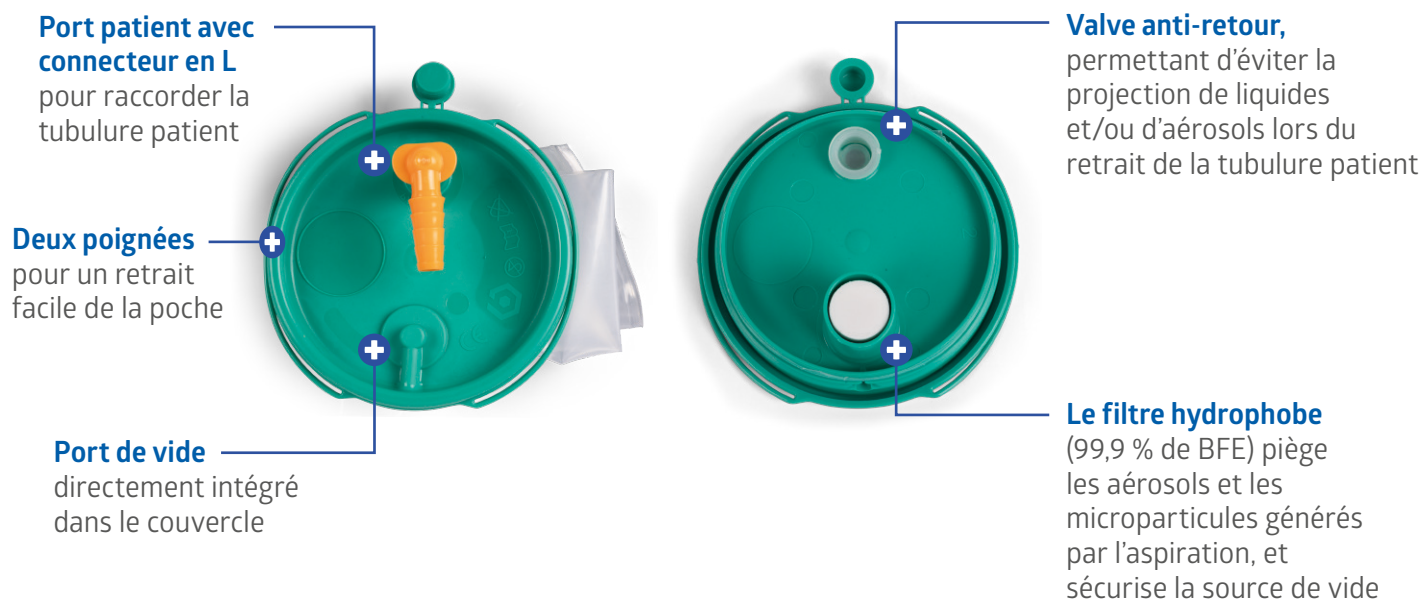

Couvercle pour poche flexible sans filtre (FSL200T)

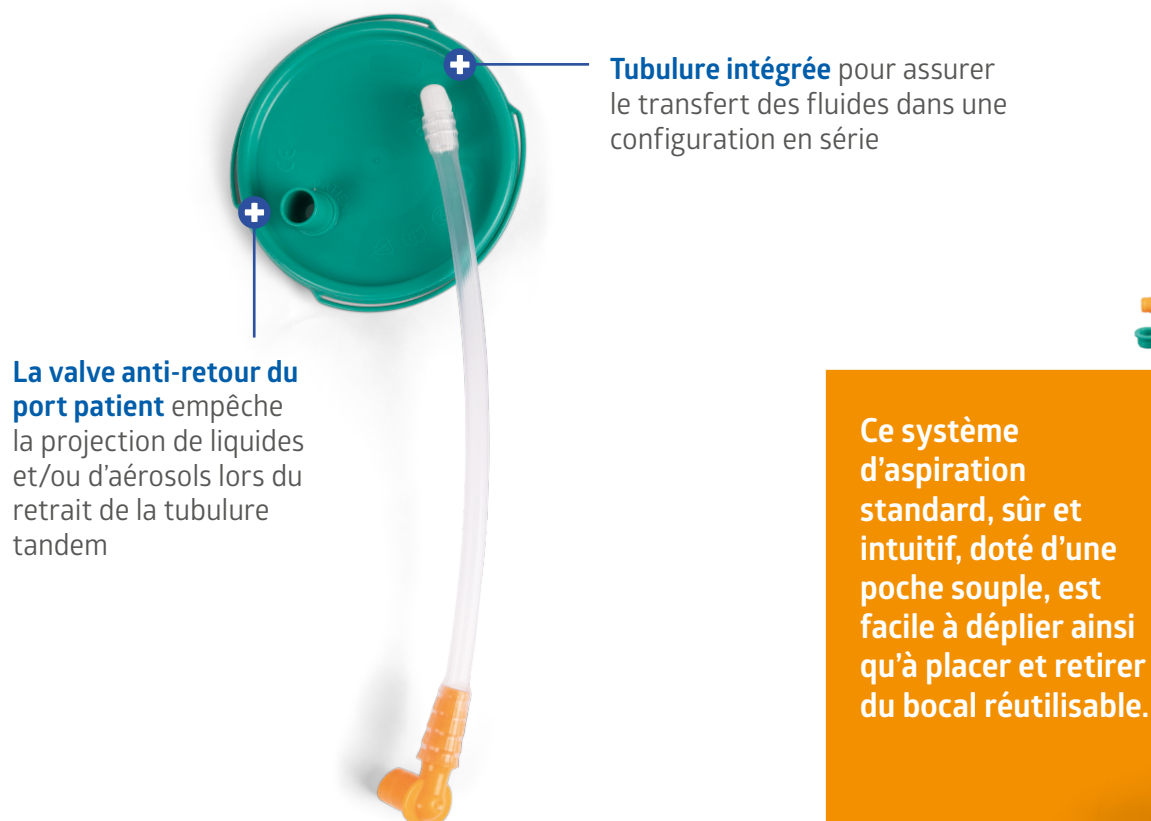

Bocaux et poches MED-FLEX

Bocal extérieur MED-FLEX

Ce bocal réutilisable de 2 litres fabriqué en polycarbonate résistant est transparent et gradué. Chaque bocal peut être monté sur un mur, un rail ou un chariot.

Référence	Description	Conditionnement
FSC2000	Bocal extérieur réutilisable MED-FLEX 2 L	12/carton



FSC2000
Bocal extérieur réutilisable

Poches MED-FLEX

Nos poches flexibles à usage unique de 2 litres sont très faciles à déplier et à placer dans le bocal réutilisable correspondant.

Référence	Description	Conditionnement
FSL200S	Poche d'aspiration MED-FLEX 2 L avec filtre	100/carton
FSL200T	Poche d'aspiration MED-FLEX 2 L sans filtre	100/carton



FSL200T
Poche d'aspiration sans filtre



La poche d'aspiration sans filtre permet de raccorder plusieurs poches qui transfèrent automatiquement les fluides d'une poche à l'autre.



FSL200S
Poche d'aspiration avec filtre

Matériel et accessoires

Accessoires d'aspiration

Le système d'aspiration flexible est disponible avec une large sélection d'accessoires d'aspiration qui s'adaptent à différentes configurations et permettent des procédures d'aspiration faciles.

Référence	Description	Conditionnement
Gestion du vide		
FSCVLCOF	Connecteur en L à vide MED-FLEX avec robinet ON/OFF	50/carton
FSCVLC	Connecteur en L à vide MED-FLEX	50/carton
FSCVTC	Connecteur en T à vide MED-FLEX	50/carton
FSCVTCOF	Connecteur en T à vide MED-FLEX avec robinet ON/OFF	50/carton
Accessoire d'aspiration		
FSLPC	Connecteur en L pour patient MED-FLEX	50/carton



FSCVLCOF



FSCVLC




FSCVTC



FSLPC



FSCVTCOF

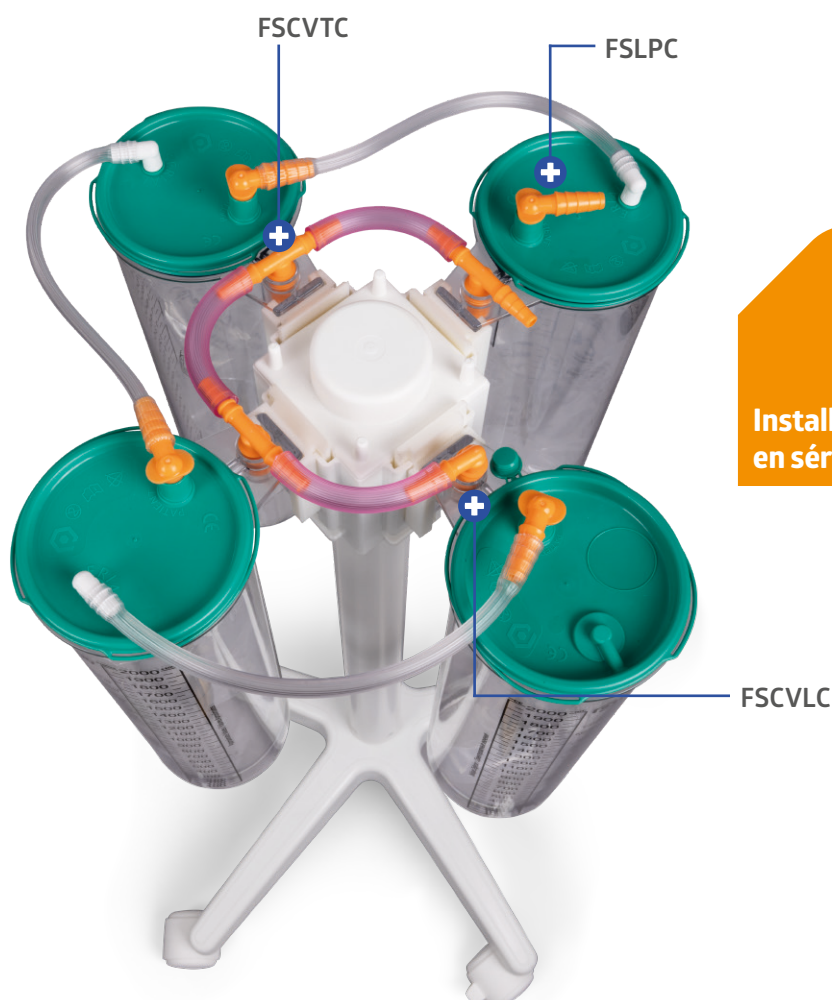

Installation
en série

Matériel d'installation MED-FLEX

Le système d'aspiration flexible est doté d'une large gamme de matériel permettant de s'adapter à diverses méthodes d'installation (par exemple, montage mural, sur rail ou sur chariot).

Référence	Description	Conditionnement
FSCCLAMP	Pince de rail MED-FLEX	50/carton
FSCWM	Support mural MED-FLEX	20/carton
FSCADAPT	Adaptateur MED-FLEX	50/carton



FSCWM



FSCCLAMP



FSCADAPT

Matériel général

L'utilisation d'installations sur chariot permet des configurations avancées et personnalisées.

Référence	Description	Conditionnement
DYNDSCC	Chariot en métal ; hauteur réglable de 61 à 106 cm, adapté pour 4 bords	1/carton
ORBASE	Chariot ; hauteur fixe 50 cm, adapté pour 2 bords	1/carton
ORTROL4C	Chariot à 5 pieds avec 2 freins ; hauteur fixe de 80 cm, adapté pour 4 bords	2/carton
TUBVAC	Tubulure à vide renforcée (rouleau de 30 m)	1/carton



DYNDSCC



ORBASE



ORTROL4C



TUBVAC





Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez contacter votre responsable commercial Medline ou consultez notre site Web : www.medline.eu/fr



Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

ORTROL4C est un dispositif médical non stérile de classe I destinés à être utilisés par les professionnels de santé.

TUBVAC est un dispositif médical non stérile de classe I destinés à être utilisés par les professionnels de santé.

Les dispositifs MED-FLEX sont des dispositifs médicaux non stériles de classe I destinés à être utilisés par les professionnels de santé.

DYNDSCC et ORBASE sont des dispositifs médicaux non stériles de classe I destinés à être utilisés par des professionnels de santé.

Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquetages correspondants.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2023 Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1349_FR 08/2023.



Prosimed S.r.l.
Via della Magliana, 295
00146 Rome, Italie



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Pergo Medikal ve Ilac San. A.Ş.
Büyükdere OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. No:9
Büyükdere, İstanbul, Turquie



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

