

# MED-FLEX Essential

Liner flessibili e canister riutilizzabili



**Soluzione di  
gestione dei  
fluidi intuitiva  
e affidabile**

# Sistema di aspirazione MED-FLEX Essential

I liner e i canister MED-FLEX Essential sono progettati per fornire una soluzione intuitiva e ottimizzata per la raccolta di fluidi corporei, liquidi e rifiuti da aspirazione.

La soluzione MED-FLEX Essential è adatta per configurazioni sia singole sia in tandem.



## Cosa contraddistingue MED-FLEX Essential?



### Design avanzato

Realizzato con la quantità minima necessaria di polietilene a bassa densità.



### Compattzza ed efficienza

Una soluzione meno ingombrante semplifica la gestione dell'inventario, consente di risparmiare spazio di stoccaggio e facilita il trasporto, contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra.



### Configurazione intuitiva

Il design è progettato per una configurazione semplice e rapida.

# Caratteristiche e Benefici

## Canister e Liner



Fonte di vuoto collegata al connettore a L del canister riutilizzabile.

Canister trasparente e graduato da 2 litri riutilizzabile per una facile lettura dei liquidi raccolti.



Il coperchio si incastra perfettamente all'interno del canister riutilizzabile  
Impedisce la perdita del vuoto

Liner in polietilene a bassa densità  
Liner molto flessibile per ottimizzare la gestione dell'inventario

# Coperchio per liner flessibile


**Doppia impugnatura**  
per una rimozione semplice  
del liner

**Porta paziente con connettore a L**  
per collegare i tubi del paziente

**Porta accessoria**  
Permette l'utilizzo  
delle dosi di gel e della  
configurazione in  
tandem

**Porta per il vuoto**  
direttamente  
integrata nel  
coperchio

**Filtro idrofobico**  
(BFE al 99,9%) blocca gli  
aerosol e le microparticelle  
generati dall'aspirazione e  
protegge la fonte di vuoto.

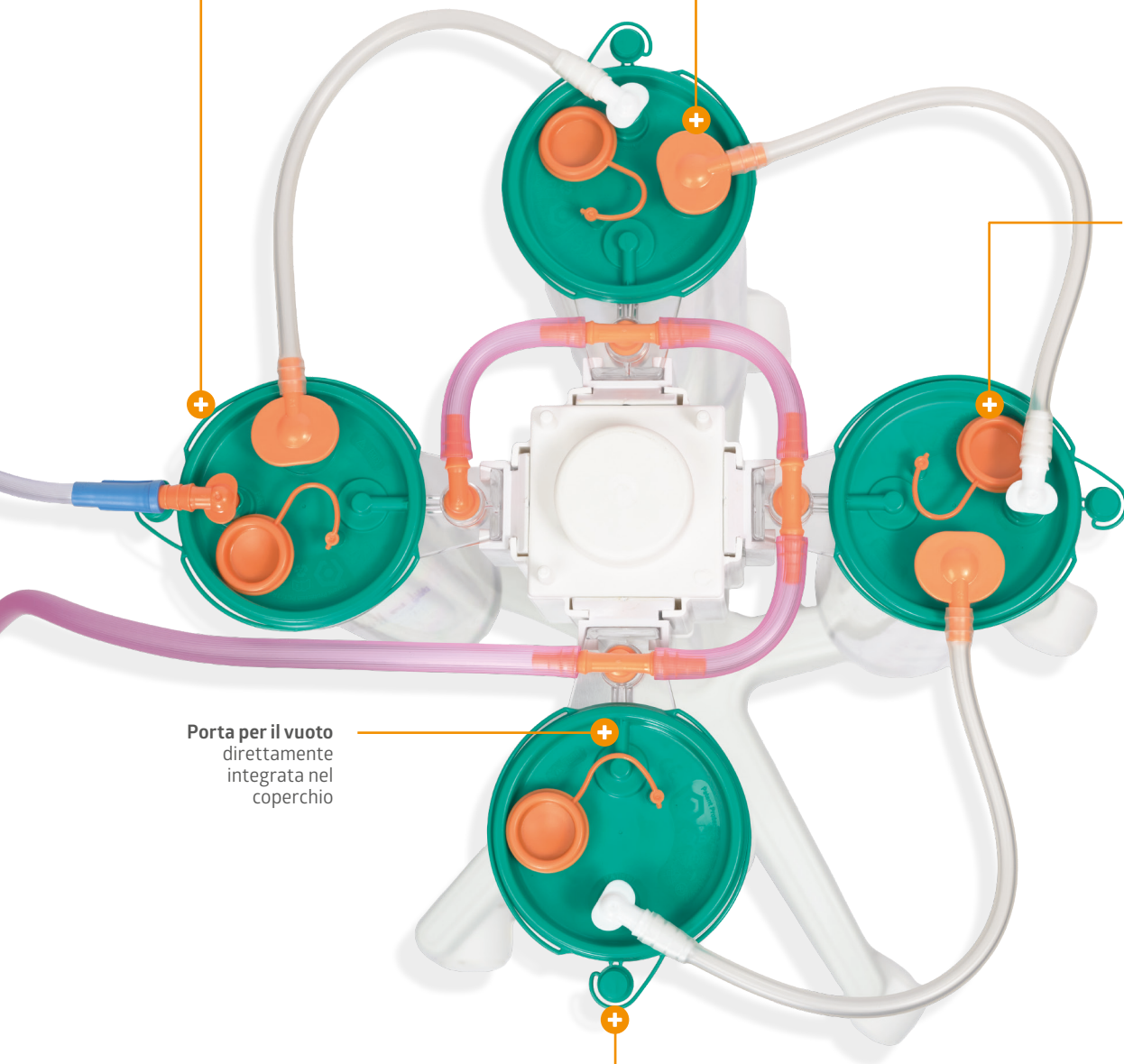

# Informazioni per gli ordini

## Canister esterno MED-FLEX Essential

Questo canister riutilizzabile è realizzato in policarbonato resistente, ed è trasparente e graduato. Ogni canister può essere montato a parete, su binario o su carrello.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FSC1000	Canister esterno riutilizzabile da 1L MED-FLEX Essential	15/confezione
FSC2000	Canister esterno riutilizzabile da 2L MED-FLEX Essential	12/confezione
FSC3000	Canister esterno riutilizzabile da 3L MED-FLEX Essential	9/confezione



## Liner MED-FLEX Essential

I nostri liner flessibili monouso sono molto facili da aprire e da collocare all'interno del relativo canister riutilizzabile.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FSL100E	Liner di aspirazione da 1L MED-FLEX Essential	100/confezione
FSL200E	Liner di aspirazione da 2L MED-FLEX Essential	100/confezione
FSL300E	Liner di aspirazione da 3L MED-FLEX Essential	70/confezione



# Informazioni per gli ordini

## Liner MED-FLEX Essential con agente solidificante MED-GEL

I liner MED-FLEX Essential pre-gelificati includono al loro interno bustine di gel MED-GEL, i fluidi aspirati vengono così solidificati per una maggiore sicurezza durante lo smaltimento.

Il gel MED-GEL è anche disponibile separatamente, confezionato in dosi singole o in un unico contenitore.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FSL100EPG	Liner di aspirazione PG da 1L MED-FLEX Essential	15/confezione
FSL200EPG	Liner di aspirazione PG da 2L MED-FLEX Essential	12/confezione
FSL300EPG	Liner di aspirazione PG da 3L MED-FLEX Essential	9/confezione
RE2015	Scatola dispenser MED-GEL	200/confezione
RE2050	MED-GEL in contenitore a secchiello, contenitore da 2kg	2 cont/conf



RE2015

## Tubi tandem MED-FLEX Essential

Questo tubo può essere utilizzato per connettere vari liner e per il trasferimento automatico dei fluidi da un liner al successivo.

- Offre un'installazione intuitiva, a prova di errore
- Mantiene un'efficace potenza di aspirazione anche in un sistema tandem

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FSLTT	Tubi tandem MED-FLEX Essential	100/confezione



FSLTT



# Strumenti e accessori

## Accessori per l'aspirazione

Il sistema di aspirazione flessibile è disponibile con un'ampia scelta di accessori di aspirazione che si adattano a diverse configurazioni e consentono procedure di aspirazione semplici.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FSCVLCOF	Connettore a L per il vuoto MED-FLEX con valvola ON/OFF	50/confezione
FSCVLC	Connettore a L per il vuoto MED-FLEX	50/confezione
FSCVTC	Connettore a T per il vuoto MED-FLEX	50/confezione
FSCVTCOF	Connettore a T per il vuoto MED-FLEX con valvola ON/OFF	50/confezione
FSLPC	Connettore a L per pazienti MED-FLEX	50/confezione



FSCVLCOF



FSCVLC



FSCVTC



FSLPC

## Strumenti per installazione MED-FLEX

Il sistema di aspirazione flessibile è dotato di un'ampia gamma di accessori che consentono diversi metodi di installazione (ad esempio su parete, binario o carrello).

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
FSCCLAMP	Supporto per binario MED-FLEX	50/confezione
FSCWM	Supporto a parete MED-FLEX	20/confezione
FSCADAPT	Adattatore MED-FLEX	50/confezione



FSCCLAMP



FSCWM



FSCADAPT

## Strumenti generali

L'utilizzo di carrelli consente configurazioni avanzate e personalizzate.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
DYNDSCC	Carrello in metallo con altezza regolabile da 61 a 106 cm, supporti per 4 canister	1/confezione
ORBASE	Carrello, altezza fissa 50 cm supporti per 2 canister	1/confezione
ORTROL4C	Carrello a 5 gambe con 2 freni; altezza fissa di 80 cm, supporti per 4 canister	2/confezione
TUBCVAC	Tubo rinforzato per il vuoto (rotolo di 30 metri)	1/confezione
TUBVACPC	Tubo rinforzato pretagliato	20/confezione



DYNDSCC



ORBASE



ORTROL4C



TUBCVAC



TUBVACPC

**Per maggiori informazioni,** contattare l'account manager di Medline o visitare il nostro sito web: [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)



**Medline International Italy s.r.l. Unipersonale**

Piazzale della Resistenza 3  
50018 Scandicci  
Firenze  
Italia  
Tel.: +39 55 776 65 11

[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)  
[it-customerservice@medline.com](mailto:it-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**

1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Ginevra  
Svizzera  
Tel. +41 848 244 433

[www.medline.eu/ch-it](http://www.medline.eu/ch-it)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  