



ASPIRATION MEDICALE ET CHIRURGICALE



MED-RIGID

Bocal d'Aspiration Rigide à Usage Unique

MED-RIGID

Le bocal d'aspiration rigide à usage unique

Une structure solide et durable alliant simplicité lors de son utilisation

MED-RIGID est un système d'aspiration totalement à usage unique composé d'un bocal et d'un couvercle pour la collecte des fluides corporels, liquides et déchets d'aspiration. Positionné sur son support réutilisable, le bocal est quant à lui éliminé après utilisation.

Le système MED-RIGID se compose d'un bocal gradué et transparent ainsi qu'un couvercle rigide jetable sécurisé. L'ensemble est à patient et usage unique. Ce Dispositif Médical favorise l'élimination des déchets à risques infectieux en participant à assurer la sécurité des patients ainsi que du personnel médical et chirurgical.

Des supports spéciaux ainsi que des pieds mobiles sont disponibles pour répondre aux différentes configurations que rencontrent les services utilisateurs.

Le site patient est équipé d'un connecteur coudé à 90° amovible. Son usage facilite la connexion afin d'éviter la plicature de la tubulure patient

Couvercle hermétique avec système de fermeture sécurisé. Le couvercle verrouillé au bocal empêche la désolidarisation pendant son utilisation et évacuation

Concept PPV (Porous Plastic Valve)
Filtre Bactérien Efficace (BFE)
> 99,99% pour éviter la contamination de la source de vide

Transparent.
Résiste aux chocs et entièrement jetable

Graduations précises
Zone de marquage


Fond du bocal plat pour une bonne stabilité. Traçabilité (N° lot, Date...)



Anneaux de support réutilisables MED-RIGID

Les anneaux de support réutilisables MED-RIGID en polycarbonate sont équipés d'un robinet ON/OFF pour la gestion du vide. Ils sont utilisés pour supporter l'ensemble bocal-couvercle MED-RIGID sur différents types de supports, tel que les rails muraux ou les pieds mobiles. L'anneau est équipé d'un tube de vide rouge renforcé permettant d'acheminer le vide au bocal MED RIGID via le site de connexion VACUUM du couvercle.

Référence	Description	Cdt.
OR159	Anneau de support pour bocal 1.2L	20/carton
OR139	Anneau de support pour bocal 2 ou 3L	20/carton

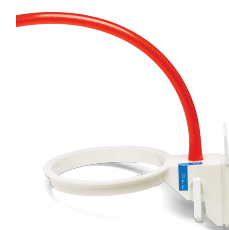

Les bocal d'aspiration MED-RIGID

Les bocal MED-RIGID sont à usage unique. Disponible sous différentes contenances ainsi qu'une version 12L, chacun se compose d'un contenant avec un couvercle rigide. Le tout à usage unique.

Référence	Description	Cdt.
OR212	Bocal d'aspiration MED-RIGID 1.2L	40/carton
OR220	Bocal d'aspiration MED-RIGID 2L	40/carton
OR230	Bocal d'aspiration MED-RIGID 3L	40/carton
OR12L	Bocal d'aspiration MED-RIGID 12L Pour le bocal de 12L, merci d'utiliser le pied mobile associé OR12LTR	4/carton



Les bocal d'aspiration MED-RIGID avec tubulure d'aspiration

Les bocal MED-RIGID avec tubulures sont disponibles en kits incluant une tubulure ORNEX non stérile. ORNEX est une tubulure souple, avec une surface externe striée qui lui permet d'augmenter sa solidité.

Référence	Description	Cdt.
OR312	Bocal d'aspiration MED-RIGID 1.2L + Tubulure 1.80m, diamètre 5mm	30/carton
OR320	Bocal d'aspiration MED-RIGID 2L + Tubulure 1.80m, diamètre 5mm	30/carton
OR319	Bocal d'aspiration MED-RIGID 3L + Tubulure 3m, diamètre 6mm	30/carton



Tubulure tandem MED-RIGID

Utilisée pour les montages de plusieurs bocal (Tandem ou série). La tubulure tandem permet le passage automatique des fluides d'un bocal à un autre.

Référence	Description	Cdt.
OR542	Tubulure tandem pour bocal d'aspiration MED-RIGID	50/carton



ACCESSOIRES ET EQUIPEMENTS REUTILISABLES

Accessoires de prélèvement à usage unique


Les chaussettes et paniers de prélèvement à usage unique sont utilisés pour collecter et conserver des échantillons de matières pour analyse. Ils se fixent sur le couvercle de tous les bords MEDLINE et sont reliés à une tubulure d'aspiration de 7 mm ou 10 mm.

Référence	Description	Cdt.
OR123	Format court 9cm, connecteur mâle diam. 7mm	100/carton
OR125	Format standard 23cm, connecteur mâle diam. 7mm	100/carton
OR124	Format large 23cm, connecteur mâle diam. 10mm	100/carton
CA6000	Panier de prélèvement, diam. 10cm	10/carton



Pince de rail et fixation murale

Référence	Description	Cdt.
DYNDSCW	Plaque murale	20/carton
LCLC1426CE	Pince de rail métallique	1/carton

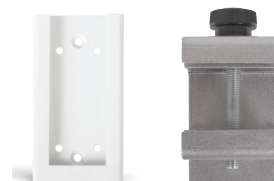

Pieds mobiles

Les pieds mobiles permettent de s'adapter aux différentes configurations en fonction des besoins.


Référence	Description	Cdt.
DYNDSCC	Pied mobile métallique Hauteur réglable de 61-106cm, adapté pour 4 bords	1/carton
ORBASE	Pied mobile Hauteur fixe 50cm, adapté pour 2 bords	1/carton



Manifold pour connexion au vide

Nos tubulures d'acheminement du vide réutilisables, permettent de répondre à des configurations personnalisées. Plusieurs bords sont ainsi reliés à la source de vide (montage à l'aide d'une tubulure).

Référence	Description	Cdt.
DYND2MNF	Manifold, montage 2 bords	10/carton
DYND3MNF	Manifold, montage 3 bords	10/carton
DYND4MNF	Manifold, montage 4 bords	10/carton

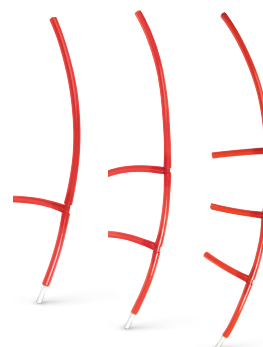


Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I non stériles (exceptés les kits de fixation et les chariots mobiles), avant utilisation veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquetages correspondant.

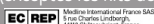

Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur pouvant se produire dans cette brochure.

© 2017 Medline et le logo Medline sont des marques déposées de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML546-FR01/EP/BG 09/2017.